

OBERON SYSTEM QUANTUM II

NÁVOD K POUŽITÍ

ZDRAVOTNÍ PROHLÁŠENÍ

Oberon System Quantum není zdravotnický přístroj.

Nenahrazuje lékařskou léčbu.

Provádí analýzu z energetického spektra naměřeného orgánu.

Tento nový obor se jmenuje **energetická analýza** a terapeuti, kteří pracují s tímto přístrojem jsou **energetičtí analytici**. Na základě zpětné vazby testují vhodnost doplňků stravy, potravin, bylin, homeopatik, vitamínů, prvků atd., spinové energetické pole orgánů, chemické, alergenní nebo patogenní zatížení organismu daného člověka. Správným testováním a harmonizací můžeme různé odchylky od normálu eliminovat. Na základě této analýzy mohou klienta informovat o tom jaké potraviny, doplňky stravy, byliny, nápoje, homeopatika jsou pro něho vhodné, nebo které mohou vyvolávat alergickou reakci např. lepek. Přístroj je vhodný pro všechny výživové poradce, terapeuty, lékaře, psychoanalytiky, maséry, léčitelé, naturo-terapeuty, pro všechny, kteří se zabývají celostní a alternativní medicínou.

NEŽ ZAČNETE...

Diagnostikovat přesně přístrojem **Oberon System Quantum** vyžaduje čas a trpělivost. Nestáčí jen školící kurzy. Je potřeba velká míra neustálého sebe-vzdělávání a sběru zkušeností. Čím lepší je Vaše porozumění softwaru, tím lepší je výběr vhodných terapeutických procesů.

Začátečníkům doporučujeme prvních pár měsíců používat jen funkce skenování a meta-terapie. Seznámíte se tím nejen se základními funkcemi, ale také jednotlivými nabídkami a tlačítky ovládacího rozhraní.

PRVKY, KTERÉ MOHOU ZKRESLOVAT VÝSLEDKY SKENOVÁNÍ:

- Skenujeme nejlépe nalačno, před jídlem a kávou. Jídlo a jeho frekvenční vzorky mohou zkreslovat výsledky
- Odkládáme elektronická zařízení (např. mobilní telefon, tablet, chytré hodinky a náramky), omezení ostatní elektroniky (televize, PC a notebooky mimo Oberon)
- Během skenování není dobré křížit nohy a ruce

OBSAH

OBSAH.....	2
NÁVOD K INSTALACI	4
INSTALACE ZÁKLADNÍHO BALÍČKU - BASE 4D.....	4
INSTALACE JAZYKOVÉHO BALÍČKU	7
INSTALACE OVLADAČE OBERON BOXU	10
INSTALACE OPRAVNÉHO AKTUALIZAČNÍHO BALÍČKU	12
SPOUŠTĚNÍ A UKONČENÍ SOFTWARE	16
SPUŠTĚNÍ SOFTWARE	16
PROBLÉMY PŘI SPOUŠTĚNÍ.....	16
UKONČENÍ SOFTWARE	19
OBSLUHA SOFTWARE	20
PRÁCE S KLIENTSKOU DATABÁZÍ	20
ZALOŽENÍ KARTY KLIENTA	20
VÝBĚR KARTY KLIENTA	21
ODSTRANĚNÍ KARTY KLIENTA	22
ZÁKLADNÍ FUNKCE.....	23
VYVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH FRÁZÍ.....	23
SKENOVÁNÍ KLIENTA	25
HARMONIZAČNÍ (OCHRANNÁ/POSILUJÍCÍ) META-TERAPIE.....	28
DESTRUKČNÍ (NIČIVÁ) META-TERAPIE.....	31
ÚPRAVA ŠABLON PRO SKEN A META-TERAPIE.....	34
PRÁCE S DATY, FILTROVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁZNAMŮ	46
ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ A POKROČILÁ SROVNÁVACÍ ANALÝZA	57
SPRÁVNÉ NASTAVENÍ META-TERAPIÍ PRO VYHODNOCENÁ DATA	68
OSTATNÍ TLAČÍTKA A FUNKCE NA OBRAZOVCE SKENOVÁNÍ	68
MANUÁLNÍ ANALÝZA – POKROČILÁ DIAGNOSTIKA	73
DALŠÍ DŮLEŽITÉ FUNKCE NA OBRAZOVCE DIAGNOSTIKY	87
ETALONY	88
VEGETO-TEST EXTERNÍ	93
ENTROPICKÁ ANALÝZA	97
NELINEÁRNÍ NLS ANALÝZA	101
AUTO MODEL	104
SESTAVENÍ AUTOMATICKÉ ZPRÁVY	106
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA – FINALIZACE, TISK, ULOŽENÍ	112
POKROČILÁ ZPRÁVA.....	121
INDEXOVÁ ZPRÁVA.....	127

VÝROBA PREPARÁTU/MEDIKAMENTU	129
AURA	141
OBRAZOVKA ANALÝZY A METODA LOKALIZACE	144
DODATEČNÉ TERAPIE	149
ZÁVĚR	157


NÁVOD K INSTALACI

Instalace se skládá ze 4 kroků:


- Instalujeme základní balíček Base 4D
- Instalujeme jazykový balíček
- Instalujeme ovladač Oberon boxu
- Instalujeme opravný aktualizací balíček

INSTALACE ZÁKLADNÍHO BALÍČKU-BASE 4 D


1. Vyhledáme složku „Base 4D“ a spustíme instalační soubor „Install 4D.exe“

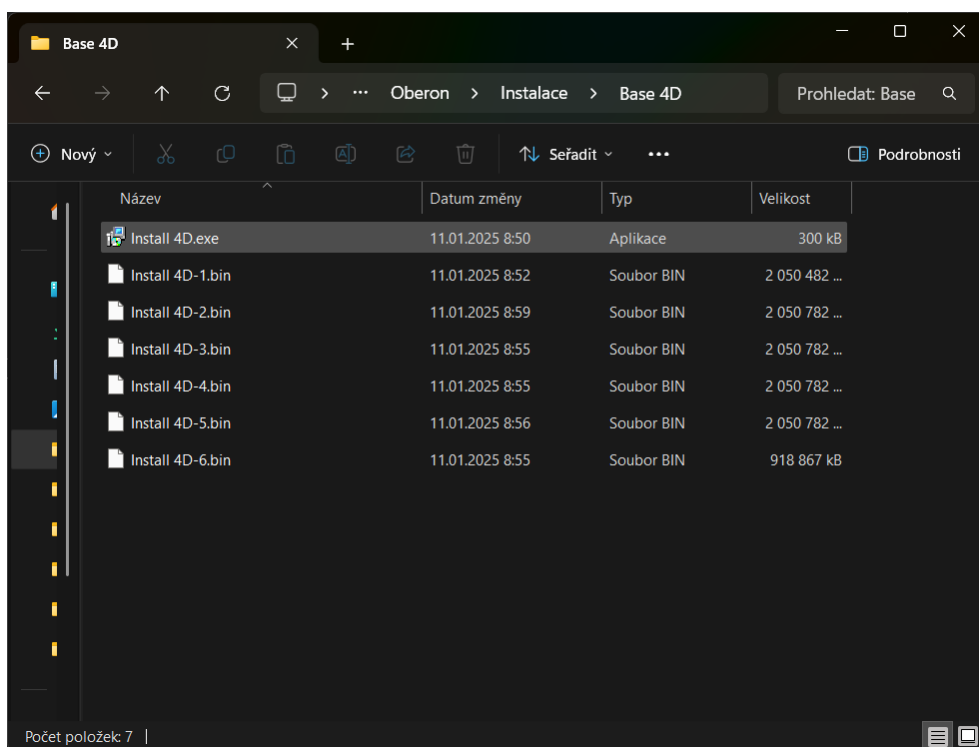


2. Zvolíme Uživatelské jméno (případně necháme přednastavené instalátorem) a pokračujeme kliknutím na tlačítko „Next“

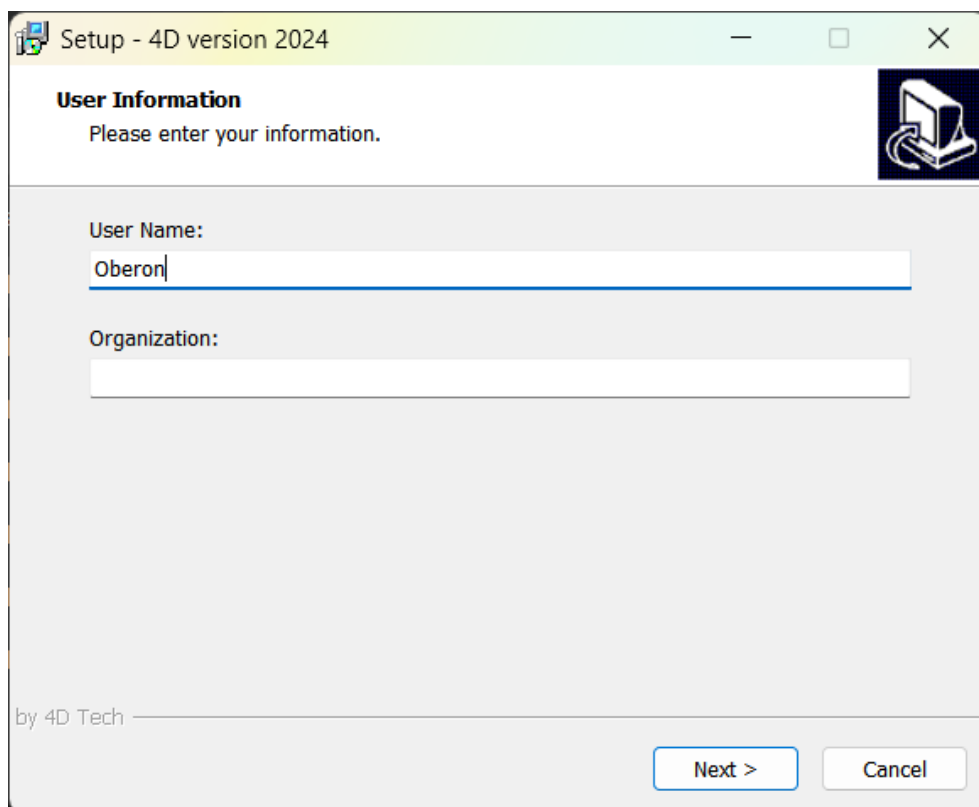


3. Proces instalace zahájíme kliknutím na tlačítko „Install“

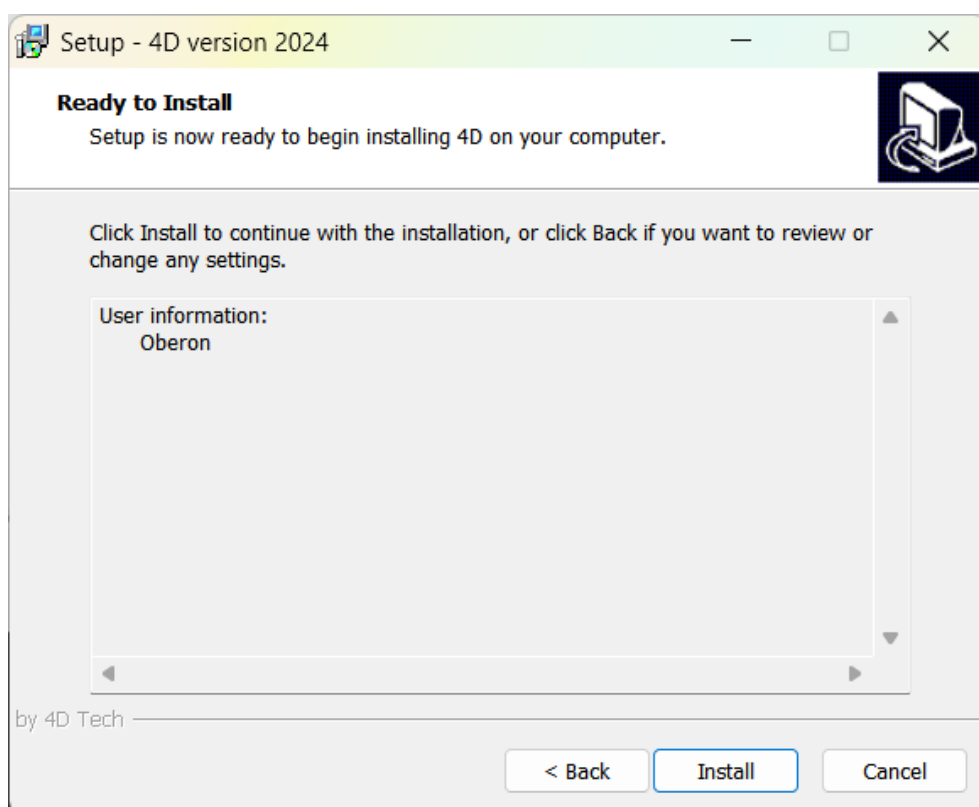

4. Vyčkáme, než zelený indikátor naplní bar (přibližně 7 – 15 minut)

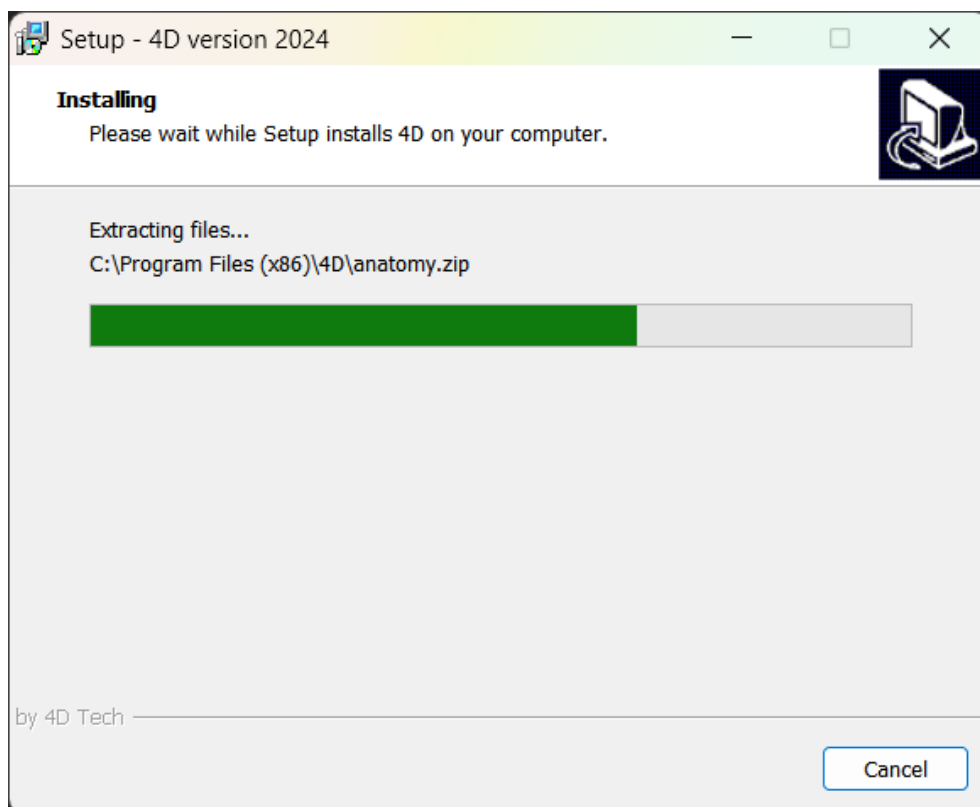


5. Instalaci dokončíme kliknutím na tlačítko „Finish“

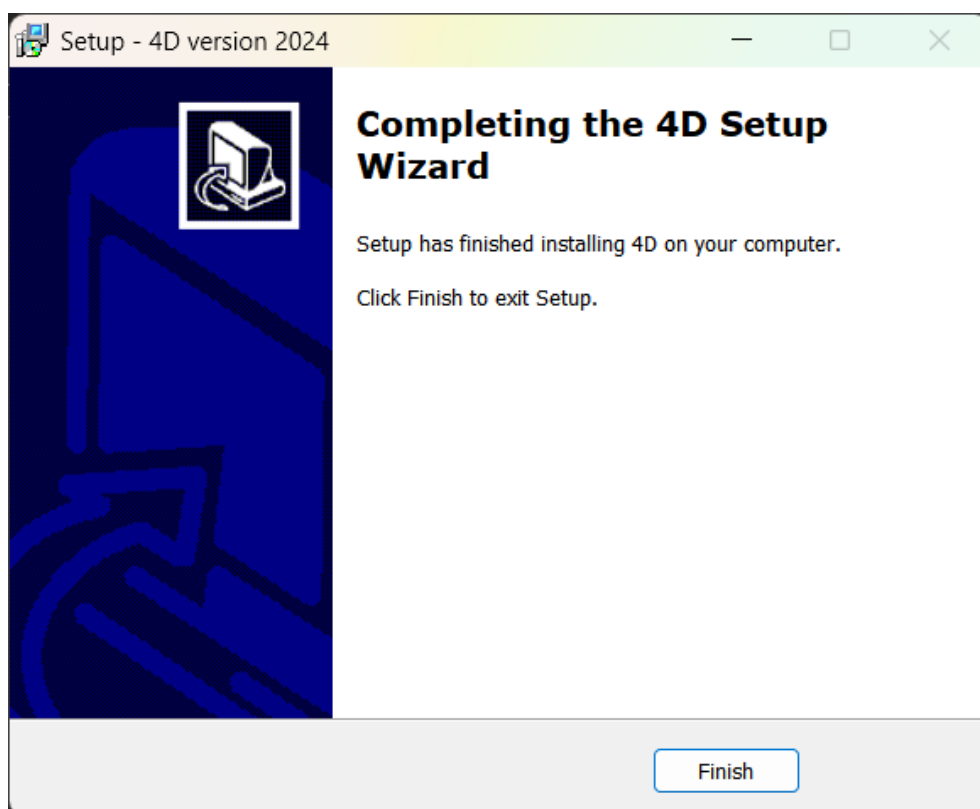

INSTALACE JAZYKOVÉHO BALÍČKU

1. Vyhledáme a spustíme soubor „Install_Oberon System Quantum_(verze).exe“

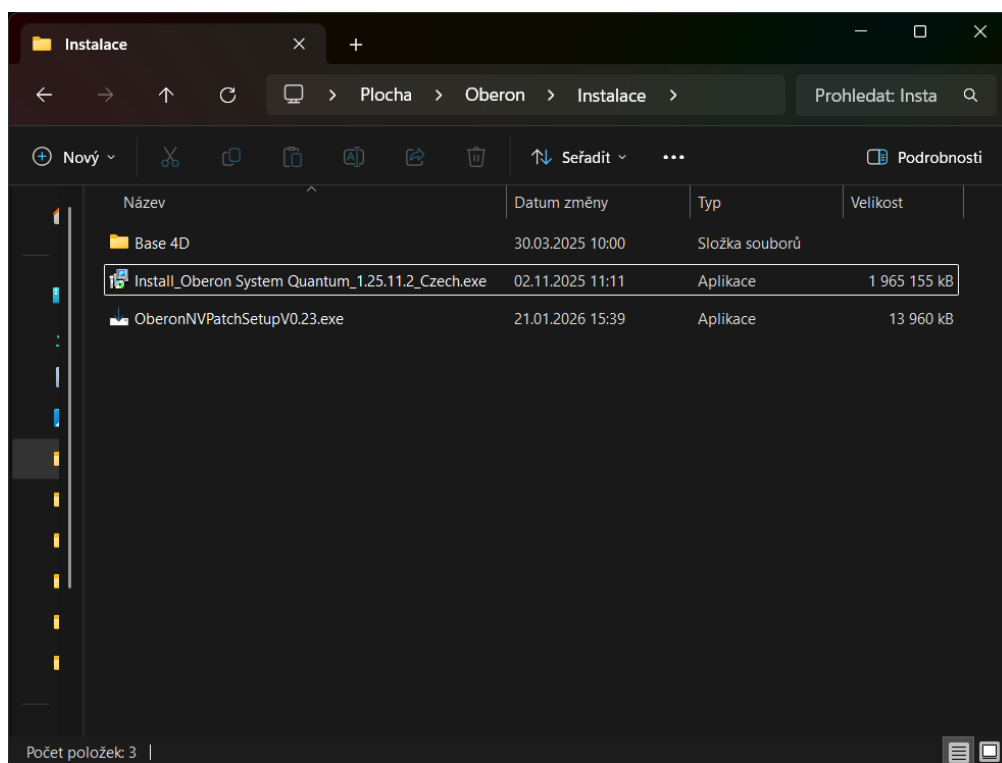

2. Zvolíme Uživatelské jméno nebo necháme přednastavené instalátorem. Poté vložíme licenční klíč a potvrdíme tlačítkem „Další“

The screenshot shows the 'Průvodce instalací - Oberon System Quantum verze 1...' window. The title bar includes the text 'Průvodce instalací - Oberon System Quantum verze 1...'. The main content area is titled 'Informace o uživateli' and contains the instruction 'Zadejte prosím požadované údaje.'.


The form includes the following fields:

- Uživatelské jméno:** A text box containing the value 'Oberon'.
- Společnost:** An empty text box.
- Activation Code:** A text box containing the value 'V94-A-1-8Y9-58X-907-A38'.
- Licence Code:** An empty text box.


Below the fields, there is a notice: 'Notice: Please contact your supplier get the Licence Code!'.

At the bottom left, it says 'By Oberon System Quantum'. At the bottom right, there are two buttons: 'Další >' and 'Storno'.


3. Necháme zatrženou volbu „Vytvořit zástupce na ploše“ a potvrdíme tlačítkem „Další“

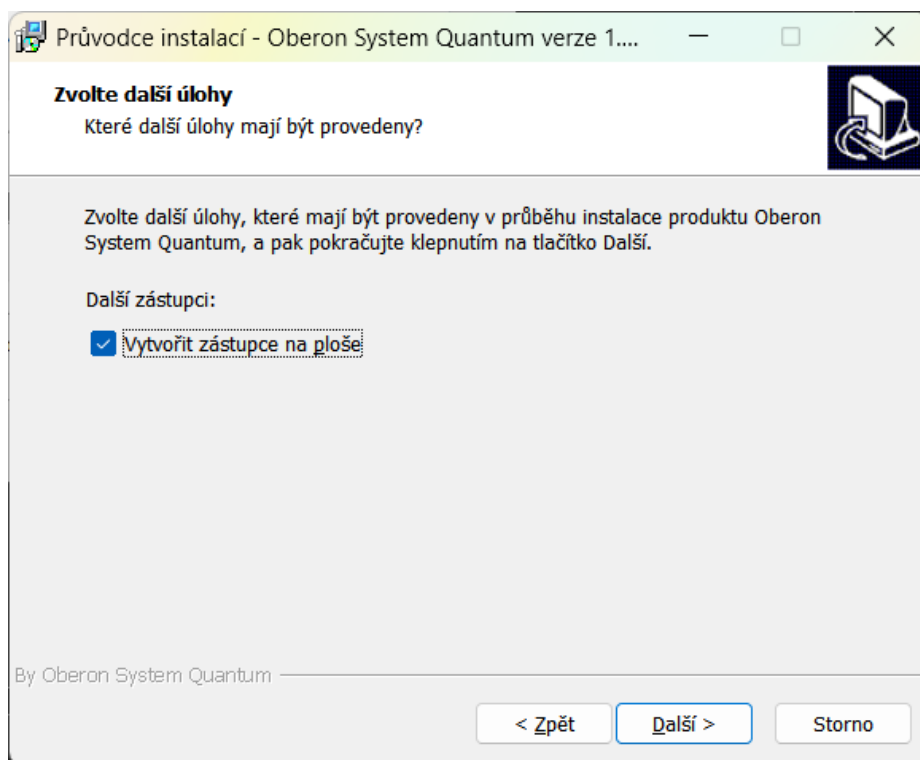


4. Instalační proces zahájíme kliknutím na tlačítko „Instalovat“

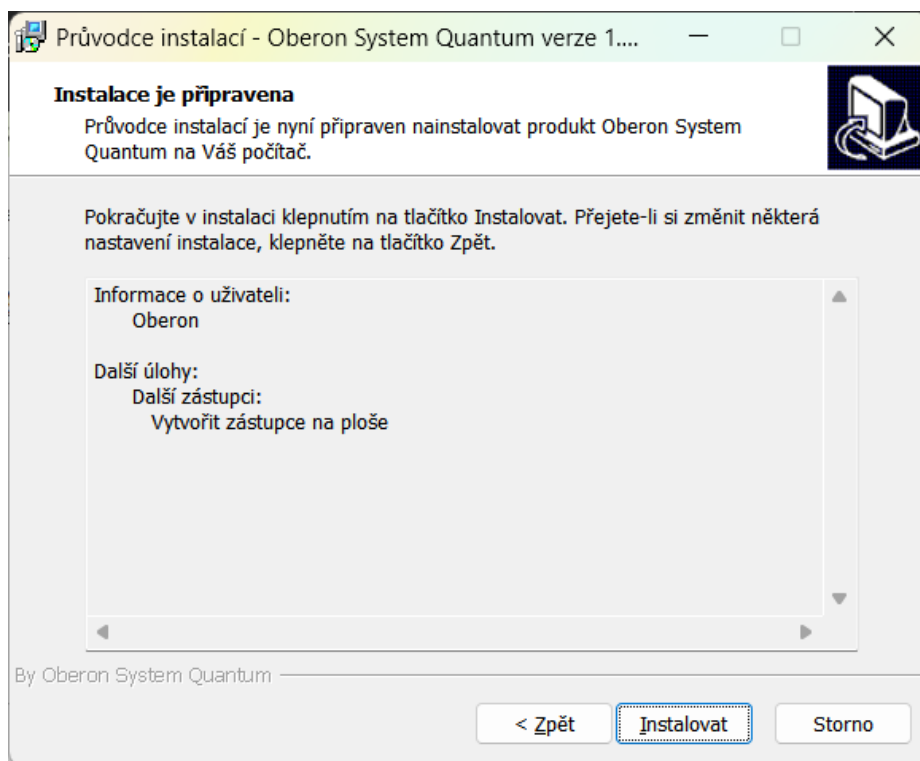

5. Vyčkáme, než zelený indikátor naplní bar (přibližně 5 – 8 minut)

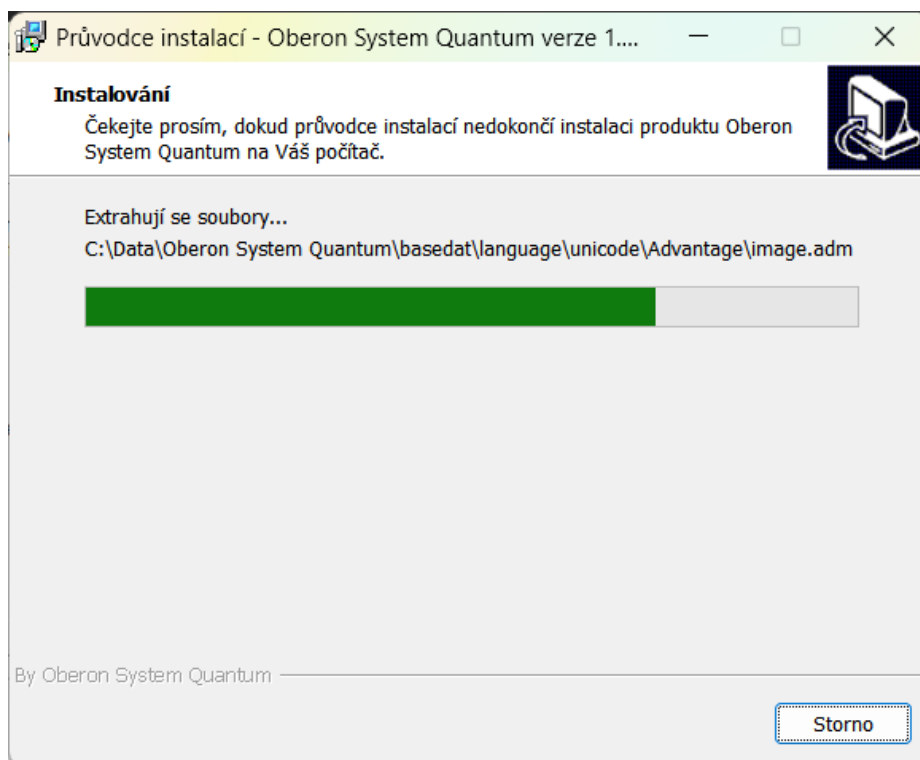


6. Instalaci dokončíme stisknutím tlačítka „Dokončit“. Volbu „Install Driver“ necháváme zatrženu.

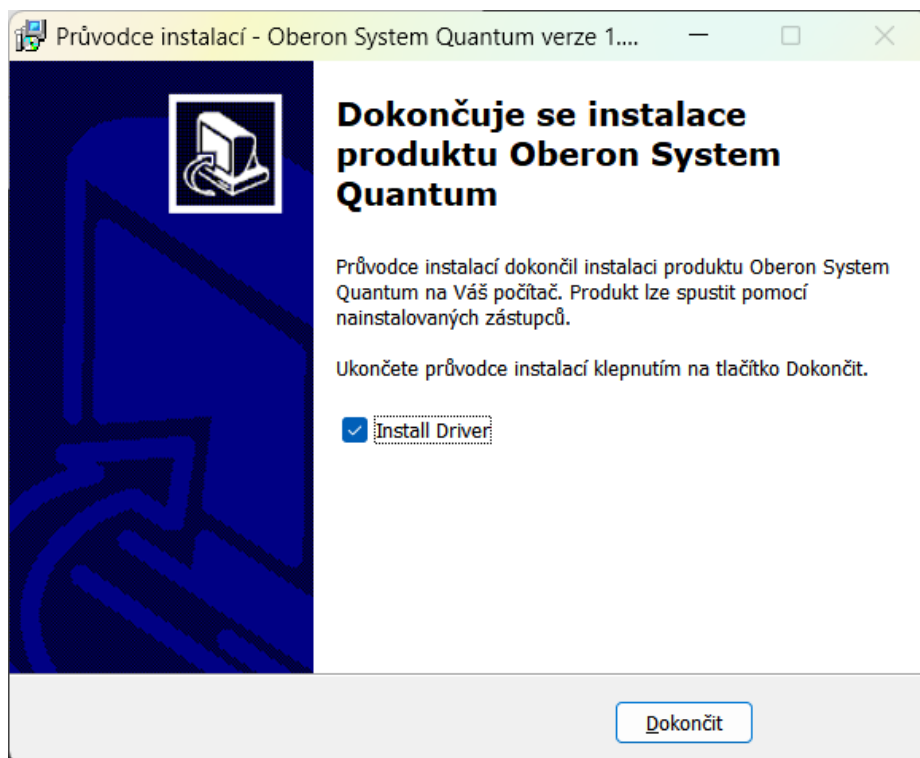


INSTALACE OVLADAČE OBERON BOXU


1. Po dokončení instalace jazykového balíčku se automaticky otevře nové okno s instalací ovladače Oberon boxu FTDI CDM. Klikneme na tlačítko „Extract“

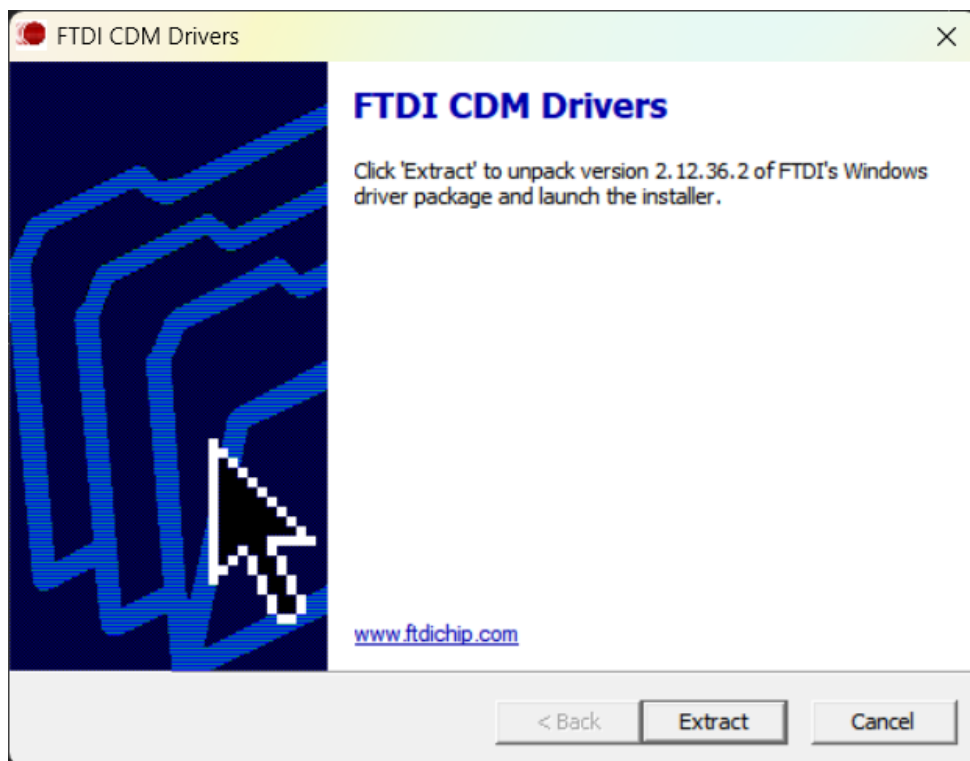


2. Objeví se nové okénko „Průvodce instalací ovladače zařízení“. Pokračujeme stisknutím tlačítka „Další“

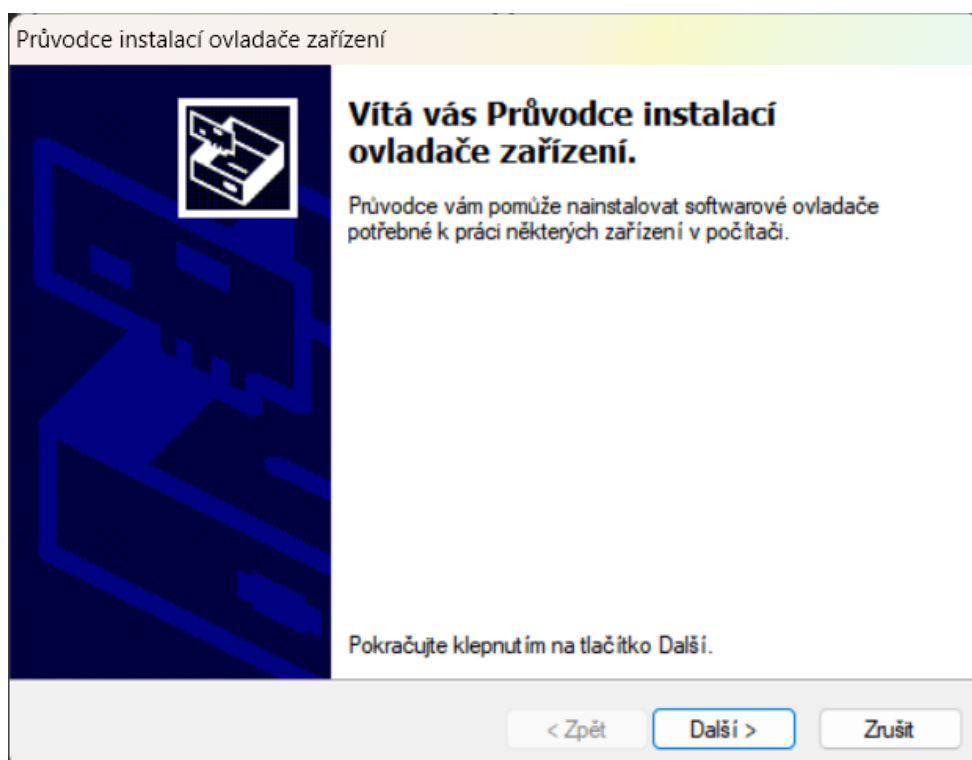

3. Pročteme a odsouhlasíme si licenční ujednání zatržením volby se souhlasem a pokračujeme stisknutím tlačítka „Další“

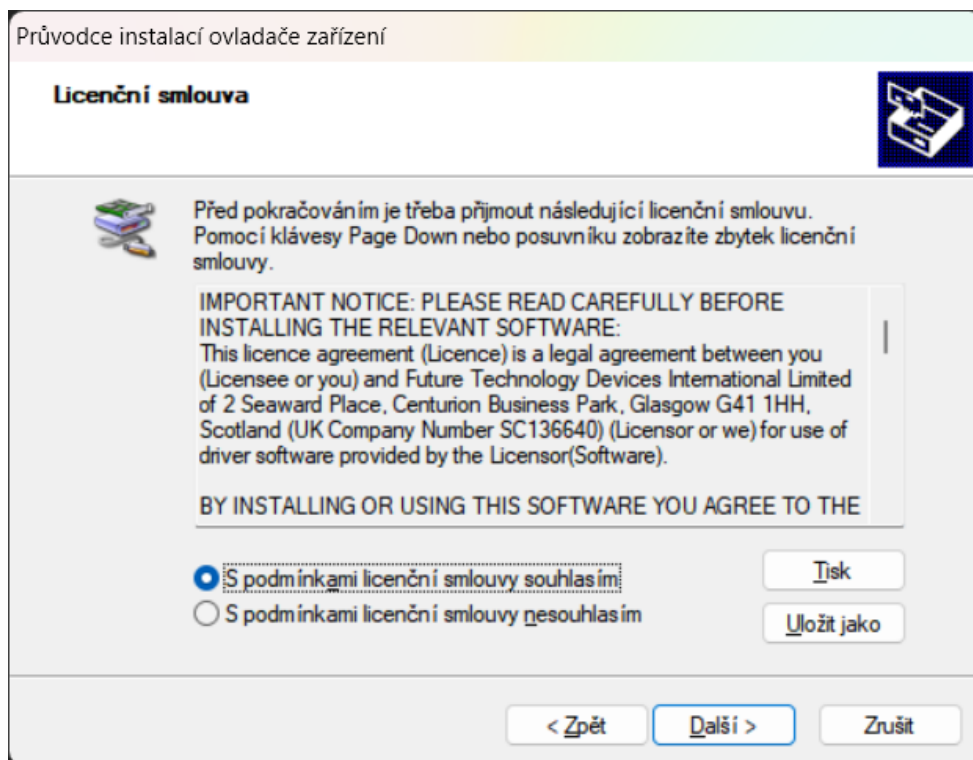


4. Dokončíme instalaci ovladače stisknutím tlačítka „Dokončit“

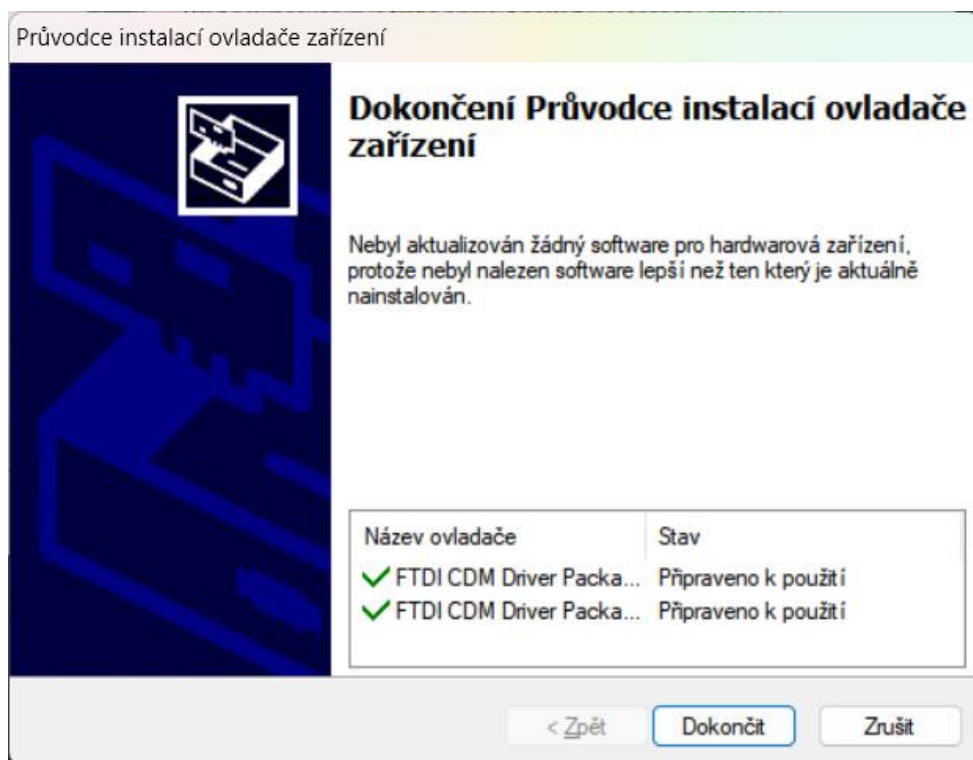


INSTALACE OPRAVNÉHO AKTUALIZAČNÍHO BALÍČKU


1. Vyhledáme a spustíme soubor „OberonNVPatchSetup(verze).exe“

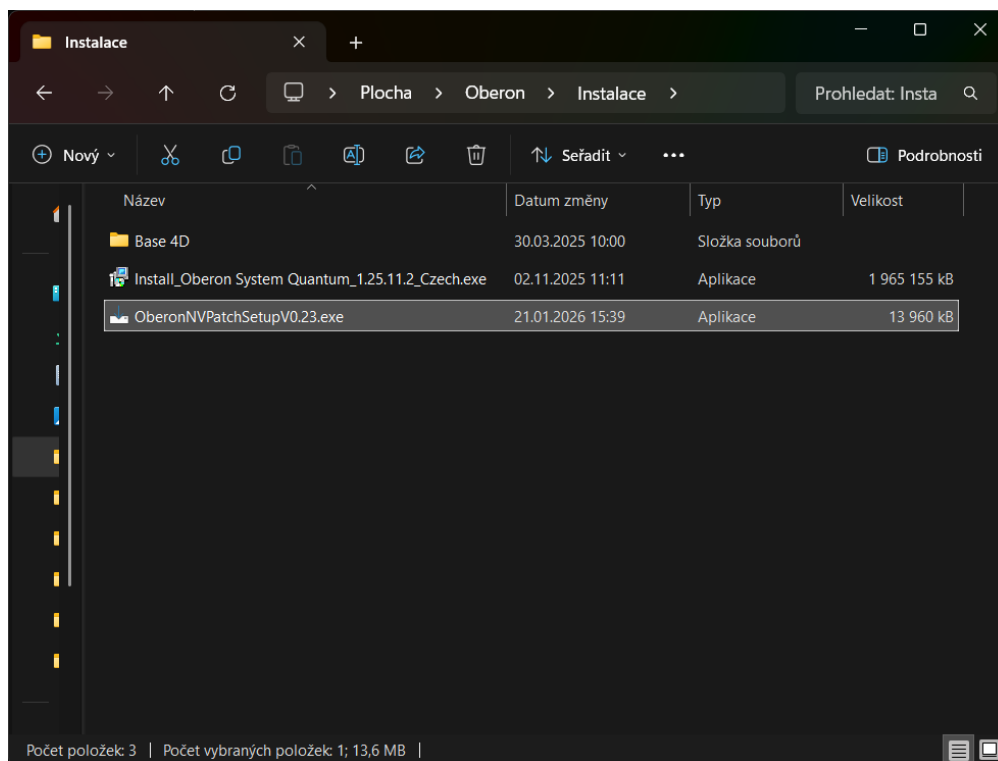


2. Zvolíme jazyk instalace – stejný k jazyku Oberonu.

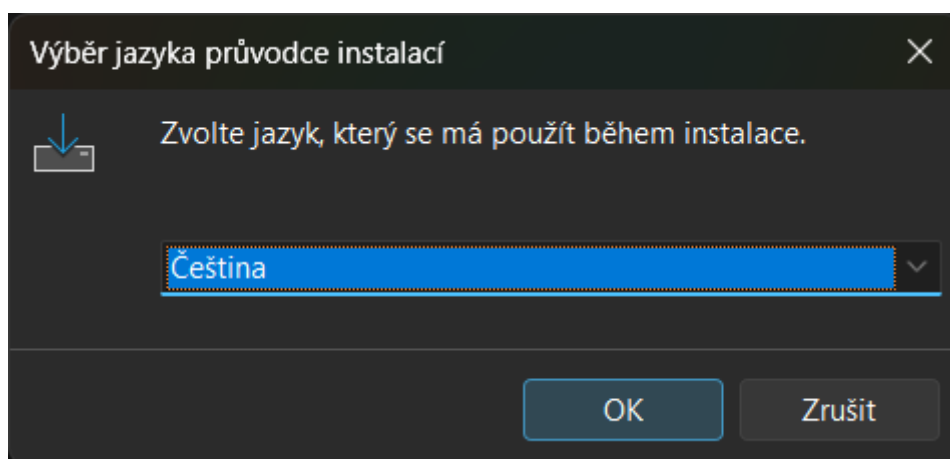


3. Do instalátoru zadáme ověřovací heslo „Oberon11“ a pokračujeme stisknutím tlačítka „Další“

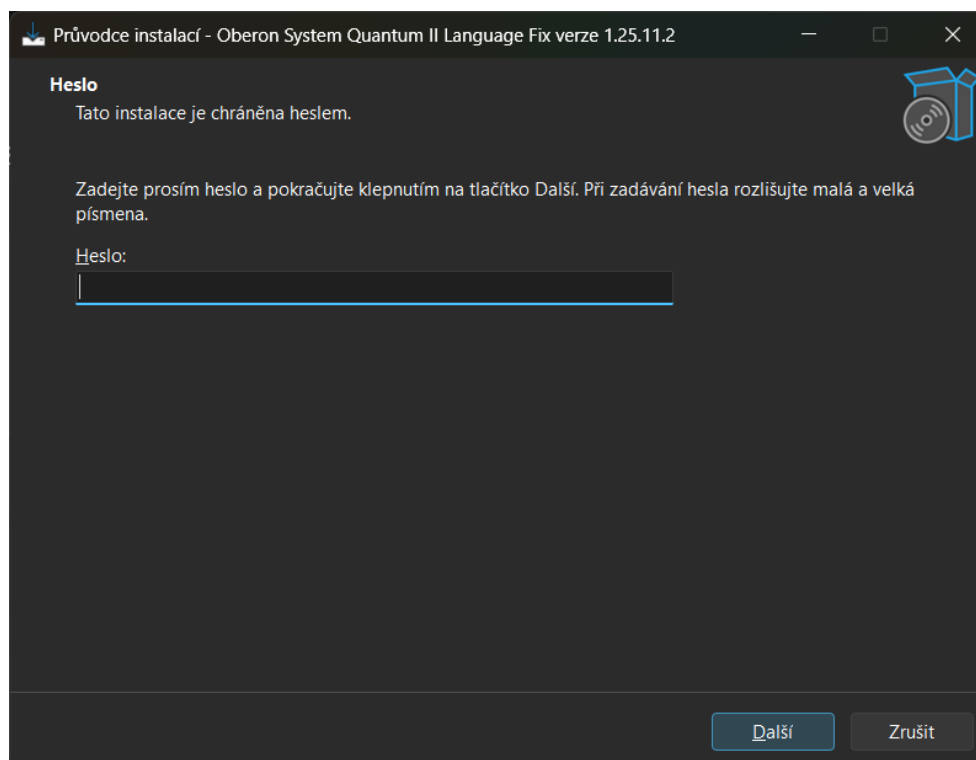


4. Opět potvrdíme další krok tlačítkem „Další“

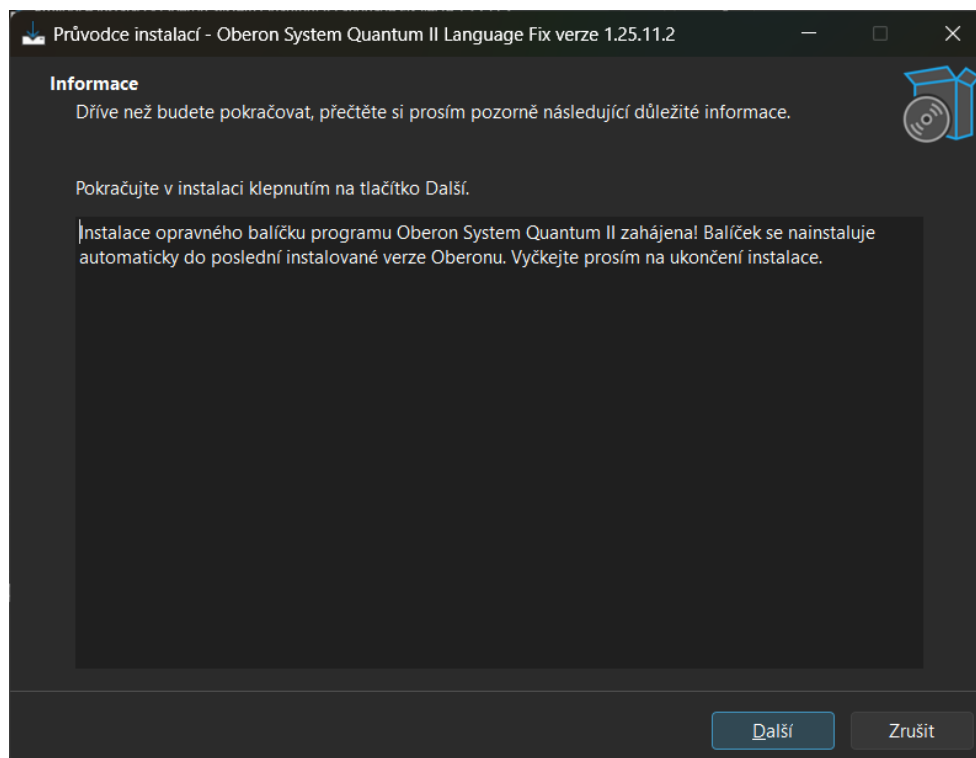


5. Instalační proces zahájíme stisknutím tlačítka „Instalovat“

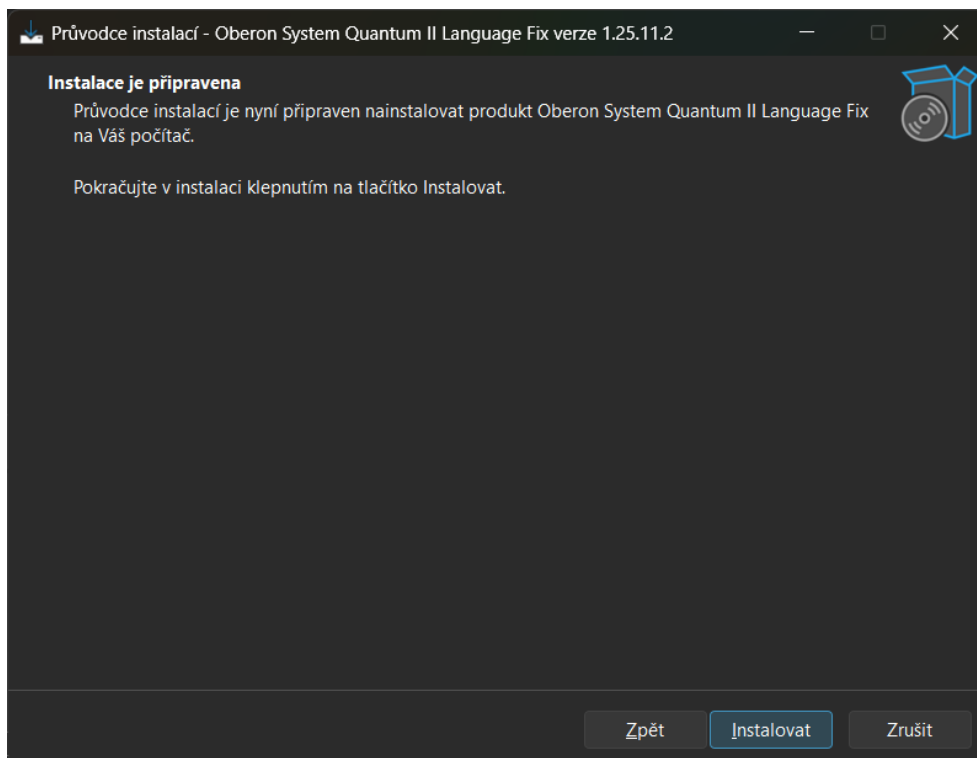


6. Vyčkejte na dokončení instalace (přibližně 5 – 15 minut dle výkonu PC)

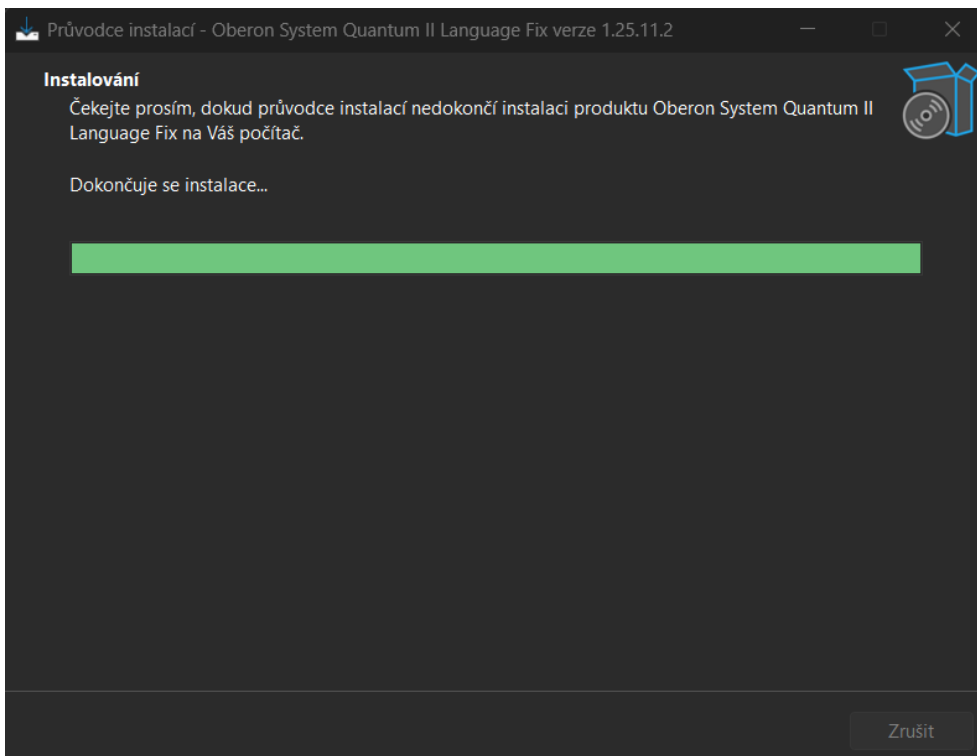

7. Po dokončení instalačního procesu pokračujeme stisknutím tlačítka „Další“

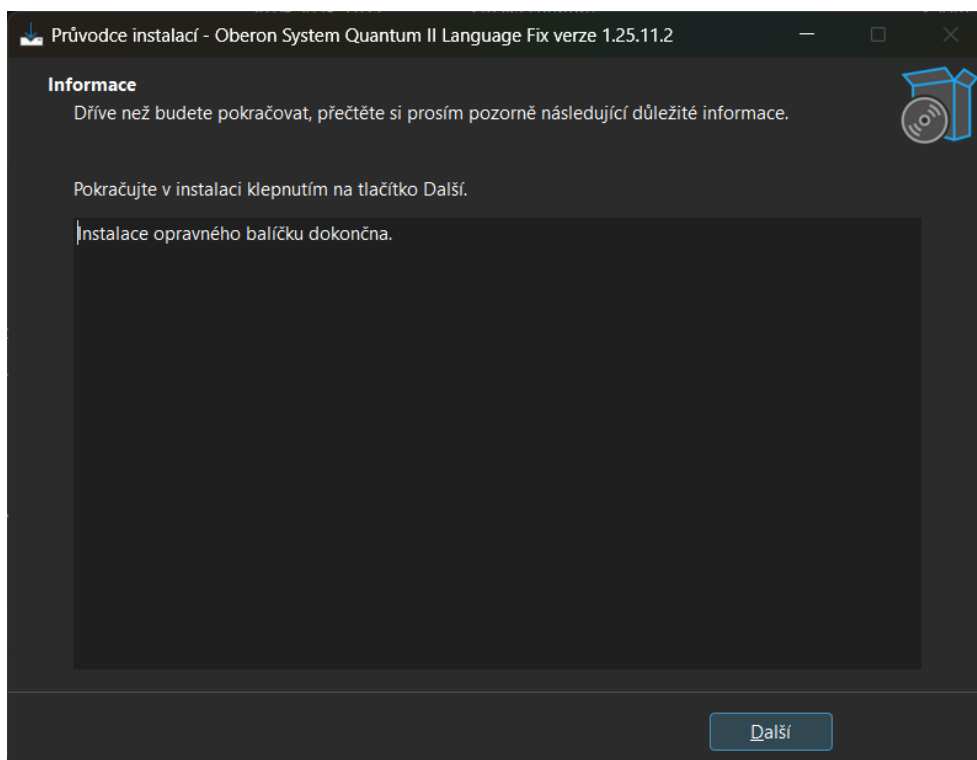


8. Instalátor ukončíme stisknutím tlačítka „Dokončit“

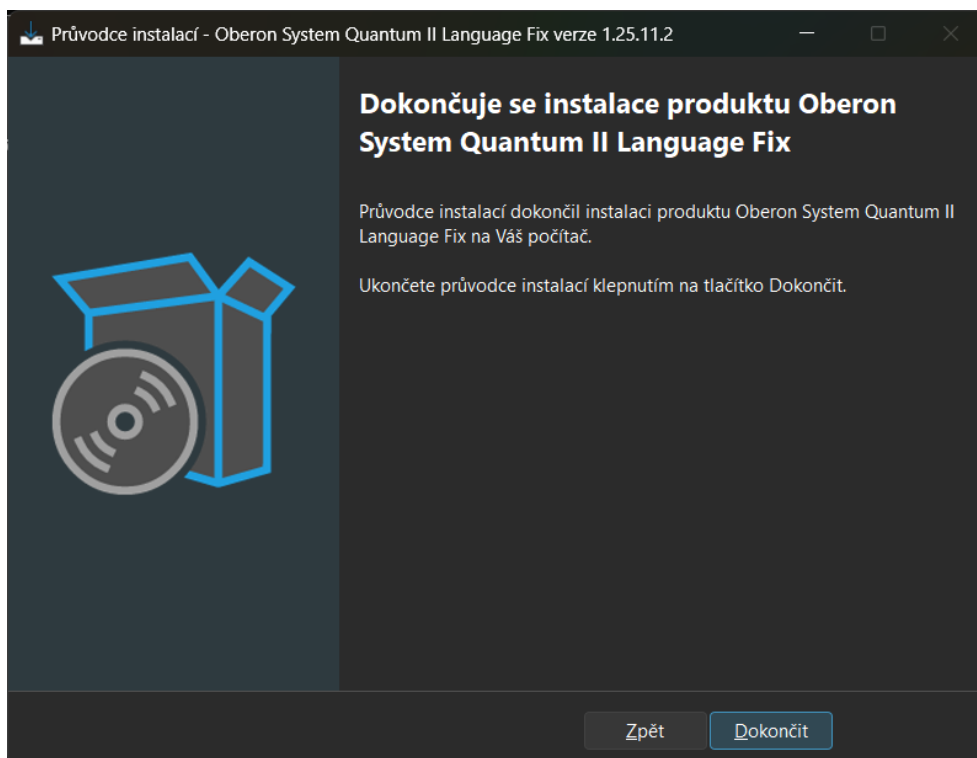

SPOUŠTĚNÍ A UKONČENÍ SOFTWARE

SPOUŠTĚNÍ SOFTWARE

Oberon vždy spouštíte z připraveného zástupce na ploše. Před spuštěním programu připojte prosím k počítači Oberon box a fialový PKEY klíč, připomínající FLASH disk. Poté Oberon box zapnete velkým kulatým spínačem na přední straně. Pokud je Oberon box v pořádku zapnutý, začnou svítit a problikávat LED diody.

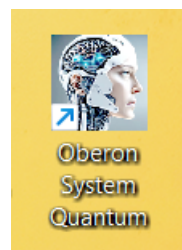

PROBLÉMY PŘI SPOUŠTĚNÍ

Při spouštění programu se mohou objevit tyto problémy:

1. Please, reconnect USB device...




Tato hláška se objevuje, když PC nerozpozná připojený Oberon box.

Řešení:

Zkontrolujte prosím, zdali je Oberon box v pořádku připojený a zapnutý – zapnutý stav indikují problikávající LED diody na předním panelu boxu. Pokud problém přetrvává, přepojte Oberon box do jiného USB portu (případně prohoďte USB slot mezi PKEY klíčenkou a Oberon boxem).

2. „Please insert the dongle to computer! (H0007)“

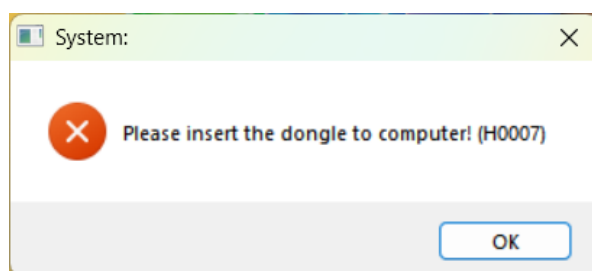


Tato hláška se objevuje, když PC nerozpozná připojený PKEY klíč

Řešení:

Zkontrolujte prosím, zdali je fialový PKEY klíč v pořádku připojený. Pokud problém přetrvá, přepojte prosím PKEY klíč do jiného USB portu (případně prohodte USB slot mezi PKEY klíčenkou a Oberon boxem).

3. „Repair User database“

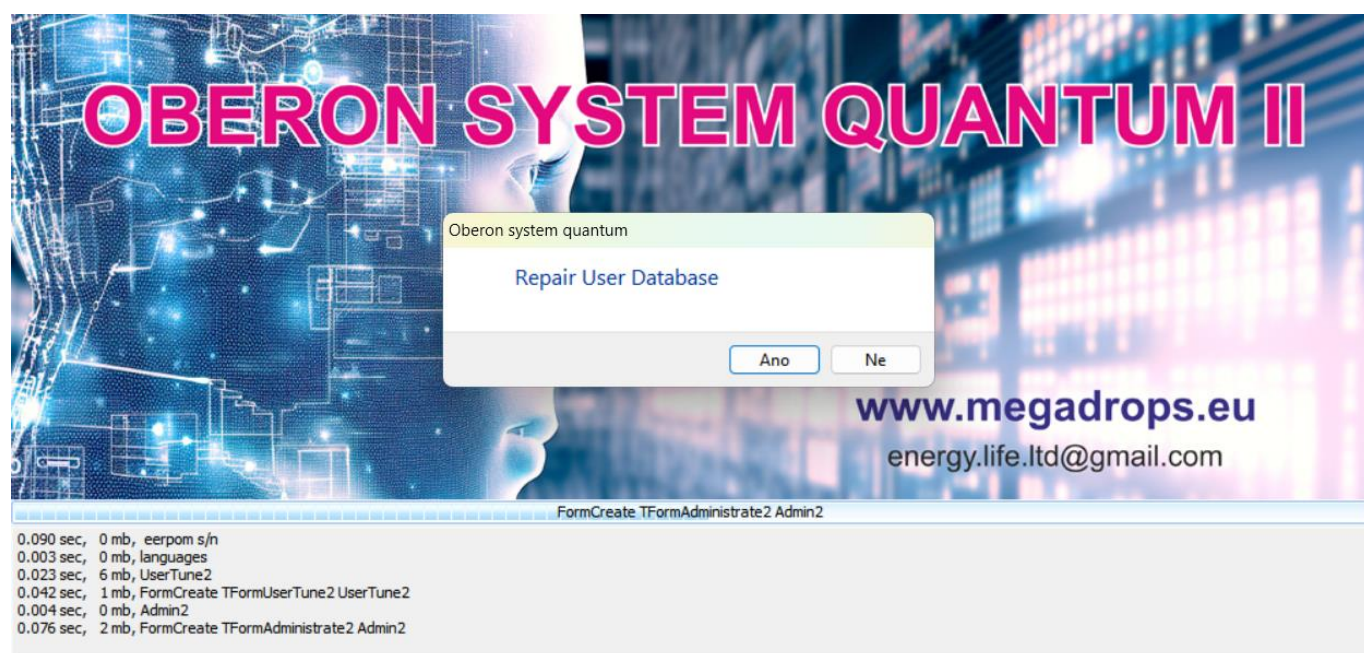


Tuto hlášku vyvolává poškozená klientská databáze.

Řešení:

Problém vzniká chybovostí dat v databázi, který se může objevit kvůli nesprávnému nebo předčasnému ukončení Oberonu (např. vypnutí PC nedostatkem elektrické energie). Pro opravu dat klikneme na tlačítko „Ano“ – program by měl chybu najít a automaticky opravit. Neklikejte na tlačítko „Ne“ – to je určené pouze pro IT techniky.

4. „An error occurred in the application.“

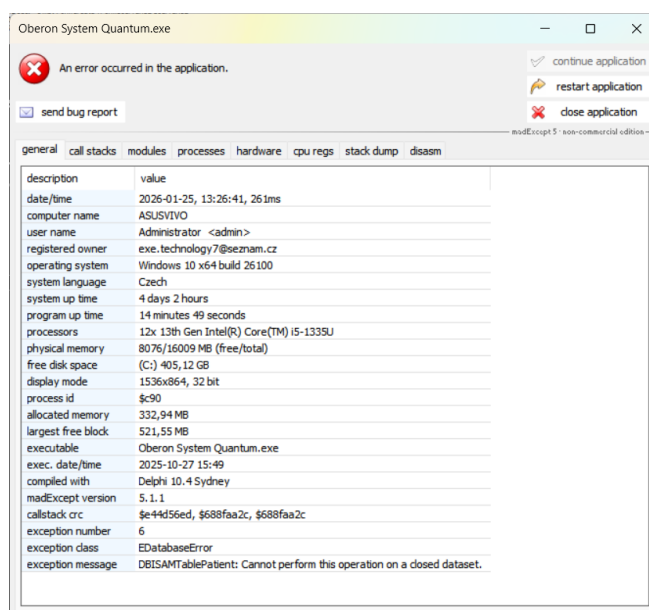


Tato hláška se objeví ve chvíli, když je kritická chyba v běhu programu.

Řešení:

Zkuste opětovně spustit program Oberon. Pokud chyba přetrvá a hláška se znovu objeví, je potřeba opravit klientskou databázi a promazat/přenést záznamy klientů. Sdělte problém vyškolenému pracovníkovi a obratem Vás kontaktuje technik IT podpory, který chybu odstraní.

Okénko zavřeme kliknutím na tlačítko „close application“.

5. „already running...“

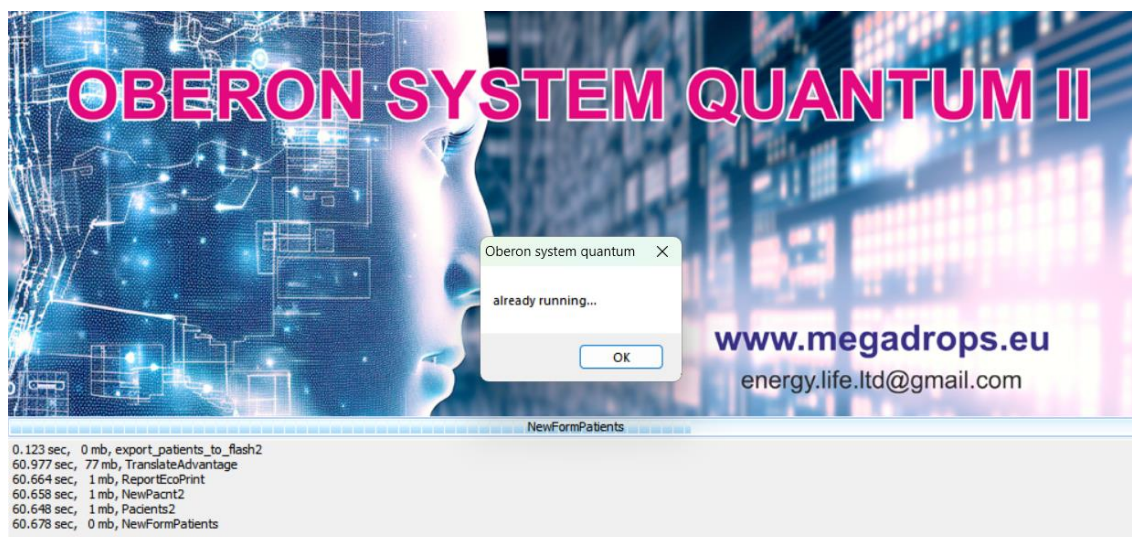

Tato hláška se objeví ve chvíli, kdy se program Oberon spustí vícekrát současně

Řešení:

Může se jednat o chybu, kdy se program Oberon neukončí správně a stále běží v procesech na pozadí, i když nejde vidět. Pokud po potvrzení hlášky tlačítkem OK a opětovným spuštěním programu problém přetrvá, restartujte PC a spusťte Oberon znovu.

UKONČENÍ SOFTWARE

Software vždy ukončujeme tlačítkem „Ukončit“ v hlavním MENU. Při nesprávném ukončení hrozí vznik chyby v databázi!



OBSLUHA SOFTWARE

PRÁCE S KLIENSKOU DATABÁZÍ

Zahrnuje:

- Založení karty klienta
- Odstranění karty klienta
- Výběr karty klienta

Pro práci s klientskou databází klikneme v začátečním MENU na tlačítko „ZAČÍT“ a přejdeme tak na obrazovku tzv. „KARTOTÉKY“.



ZALOŽENÍ KARTY KLIENTA

V KARTOTÉCE klikneme na tlačítko „NOVÝ KLIENT“

Objeví se nové okénko, ve kterém vyplníme údaje o klientovi:

PŘÍJMENÍ
KŘESTNÍ JMÉNO
DRUHÉ JMÉNO
DATUM NAROZENÍ VĚK
KREVNI SKUPINĚ
ROD RH faktor
ADRESA
TELEFON
E-MAIL
OK ZRUŠIT

- Povinné údaje k vyplnění jsou: PŘÍJMENÍ, KŘESTNÍ JMÉNO, DATUM NAROZENÍ, ROD a ADRESA
- Čím více údajů o klientovi vložíme, tím přesnější je naměřený výsledek
- Pro adresu bydliště potřebujeme silnou kvantovou informaci – ideálně z Občanského průkazu. Případně adresu, kde se cítí klient „doma“. Výsledky naměřené z různých adres se mohou mírně lišit vlivem silnější nebo slabší energetické stopy

Vyplněné údaje potvrdíme tlačítkem „OK“ v levé dolní části okénka.

VÝBĚR KARTY KLIENTA

Potřebného klienta najdeme v kartotéce tlačítkem „VYBRAT KLIENTA“.

KARTOTÉKA
PŘÍJMENÍ KŘESTNÍ JMÉNO KATEGORIE KRVĚ
ADRESA E-MAIL RH faktor
TELEFON VĚK ROD
Enter text to search... Find Clear
DATUM NÁHL. ŘEZ TYP SOUST. STAV ENERGIE OPTIMÁLNÍ DISPER. 0
NOVÝ KLIENT VYBRAT KLIENTA ODSTRANIT KLIENTA ANALÝZA
ZPĚT SKENOVAT TISK SROVNÁVACÍ ANALÝZA
1.8 2.6 3.4 4.2 4.9 5.6 6.6 7.4 8.2

Objeví se okénko s databází. Kliknutím do řádku klienta jej vybereme (tím se modře podsvítí celý řádek) a vrátíme se do kartotéky tlačítkem „ZPĚT“ (alternativně klienta zvolíme také dvojím kliknutím do jeho řádku).

DATUM	KŘESTNÍ JMÉNO	DRUHÉ JMÉNO	PŘÍMENÍ	Ř	ROD	VĚK	DATUM NAI	TELEFON	ADRESA	EMAIL	ZÁZNAMY
31 kvě 25	A		A		MUŽ	114	11.11.1911				0
25 kvě 25	B		B		MUŽ	114	11.11.1911				0
25 kvě 25	C		C		MUŽ	114	11.11.1911				0
25 kvě 25	D		D		MUŽ	114	11.11.1911				0
25 led 26	Josef		Malina		MUŽ	44	01.11.1981		Trida Míru 5, Hradec Králové		0
25 led 26	Alena		Malinová		ŽENA	44	11.11.1981		Trida Míru 5, Hradec Králové		0

5 of 6

Find Clear

ZPĚT

NOVÝ KLIENT

ZÁLOHOVAT DATA

ODSTRANĚNÍ KARTY KLIENTA

Pro odstranění karty klienta jej nejprve musíme zvolit výše uvedeným postupem „VÝBĚR KARTY KLIENTA“. Jakmile se klient zobrazuje v KARTOTÉCE, odstranění provedeme tlačítkem „ODSTRANIT KLIENTA“.

KARTOTÉKA

PŘÍMENÍ: Malina KŘESTNÍ JMÉNO: Josef KATEGORIE KRVĚ: 1(0)

ADRESA: Trida Míru 5, Hradec Králové E-MAIL: RH faktor: +

TELEFON: VĚK: 44 ROD: MUŽ

Enter text to search... Find Clear

DATUM	NÁHL...	ŘEZ	TYP	SOUST...	STAV	ENERGIE	OPTIMÁLNÍ DISPER...
<>							

11 0 of 0 11

NOVÝ KLIENT

VYBRÁT KLIENTA

ODSTRANIT KLIENTA

ANALÝZA

ZPĚT

SKENOVAT

TISK

SROVNÁVACÍ ANALÝZA

6
5
4
3
2
1
0

1.8 2.6 3.4 4.2 4.9 5.8 6.6 7.4 8.2

A potvrdíme tlačítkem „Yes“.

Confirm

Smazat klienta?

Yes No

ZÁKLADNÍ FUNKCE

VYVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH FRÁZÍ

Definujeme si základní fráze, které jsou pro orientaci v softwaru nezbytné:

- **OPTIMÁLNÍ DISPERZE – zkratka OD** – je pro nás primární, nejdůležitější parametr. Určuje, jaký je funkční stav daného ŘEZU (orgánu) na metabolické úrovni – jinými slovy, jak správně orgán funguje. OD se vyjadřuje konstantou s hodnotou „1,2“. Čím blíže je naskenovaný výsledek této konstantě, tím lepší je jeho stav na metabolické úrovni.

Fungující orgán ale nevylučuje výskyt patogenů a jiných problémů. Spíše tím říká, že „z pohledu funkčnosti pracuje správně“. Pokud při anamnéze klienta zaznamenáme v určitém orgánu problém, zaměříme se na něho i přesto, že může být jeho disperze blízko požadované konstantě 1,2.

- **Energetické úrovně** – hodnoty, které se nám objevují při měření, v bodech naskenovaných řezů. **Určují se čísla 1-6 a dají se rozdělit na 4 kategorie:**



Úrovně 1-3 – jsou indikátory normální, vitální energie

Úroveň 4 – indikuje začínající fázi potenciální nemoci/nerovnováhy

Úroveň 5 - indikuje možný akutní problém nebo také nedostatek energie

Úroveň 6 – indikuje možný chronický stav, nerovnováhu nebo také velice vážný nedostatek energie

Energetické úrovně často bývají chápány nedostatečně. Je tedy velice důležité, abychom porozuměli, čím je energetika ovlivňována: jídlo, stres, kofein, různé druhy záření (elektromagnetické), nedostatek živin, čerstvý vzduch apod... Proto je pro nás primární parametr „OPTIMÁLNÍ DISPERZE“ (dále jen OD), jež určuje hloubkový stav orgánu, na rozdíl od povrchového Energetického stavu (úrovně).

Energetika se nám tedy může měnit nejen dne na den, ale doslova i z hodiny na hodinu. Naproti tomu OD nám zobrazuje dlouhodobější stav a tím je mnohem stabilnějším, přesnějším parametrem při diagnostice klienta.

- **ENERGIE** – parametr ukazuje průměr součtu energetických úrovní v daném ŘEZU – jinými slovy průměrnou hodnotu energie. Je pro nás sekundárním parametrem, který zvažujeme při stanovení diagnózy. Lze si jej představit naprosto jednoduše – jak moc jsou „nabitě baterie“ v daném orgánu – bez energie klesá časem funkčnost a tím se postupně horší hodnota OD.

- **STAV** - rozlišujeme 3 druhy energetického stavu – **NORMÁLNÍ, CHRONICKÝ a AKUTNÍ**. Určuje se podle energetických bodů v daném ŘEZU.



Normální – v daném ŘEZU se objevují pouze energetické úrovně 1-3

Chronický - v daném ŘEZU se objeví alespoň 1 energetická úroveň 5

Akutní – v daném ŘEZU se objeví alespoň 1 energetická úroveň 6

-
- **TYP** – označuje typ vytvořeného záznamu. Rozlišujeme 4 druhy záznamů – **Sken, Meta-Terapie, Vegeto-test a Lokalizace**.



Sken – záznam vzniká po naskenování ŘEZU

Meta-Terapie – záznam vzniká po spuštění Meta-Terapie

Vegeto-Test – záznam vzniká při testování VEGETO-TEST

Lokalizace – záznam vznikne použitím metody LOKALIZACE

Pro správné posouzení výsledků pracujeme s hodnotou OD, STAVEM a ENERGETIKOU dohromady. ŘEZY s hodnotou OD pod 0,5 jsou pro nás prioritní. Potenciálně jsou také i hlavní příčinu zdravotních obtíží.

Pokud je hodnota OD vyšší než 1,2 a STAV je Normální (v ŘEZU se nevyskytují žádné ENERGETICKÉ ÚROVNĚ 5 nebo 6), znamená to, že daný ŘEZ/orgán je v pořádku a nevyžaduje žádnou další analýzu.

Ale když je hodnota OD pod 0,7 nebo je STAV daného řezu Akutní či Chronický, doporučujeme už podrobnou analýzu (například i ENTROPICKOU nebo NLS, které si popíšeme v pozdějších kapitolách).

SKENOVÁNÍ KLIENTA

Dle postupu v kapitole PRÁCE S KLIENTSKOU DATABÁZÍ, si vytvoříme/vybereme potřebného klienta a můžeme pokračovat k naskenování jeho celkového stavu. Ke skenování přejdeme stisknutím tlačítka „SKENOVAT“ v KARTOTÉCE.

KARTOTÉKA

PŘÍJMENÍ: Malina KŘESTNÍ JMÉNO: Josef KATEGORIE KRYE: 1(0)

ADRESA: Třída Milu S, Hradec Králové E-MAIL: RH faktor: +

TELEFON: VĚK: 44 ROD: MUŽ

Enter text to search... Find Clear

DATUM NÁHL... RÉZ TYP SOUST... STAV ENERGIE OPTIMÁLNÍ DISPER... 0

NOVÝ KLIENT ZPĚT

VYBRAT KLIENTA **SKENOVAT** TISK

ODSTRANIT KLIENTA ANALÝZA SROVNÁVACÍ ANALÝZA

Objeví se obrazovka „Anamnézy“ – vždy pokračujeme stisknutím na tlačítko „POKRAČOVAT“. Obrazovka se objevuje pokaždé po zvolení klienta nebo vytvoření nového. Funkce této obrazovky budou rozvedeny v jiné části návodu.

ANAMNÉZA

ANAMNÉZA POKRAČOVAT

DUHOVKA TVÁŘ KREV BÍLE

STÍŽNOSTI


- ☐ ALERGIE V DUTINÁCH (RINITIDA)
- ☐ ASTENIE (UNÁVA)
- ☐ BOLEST TĚLA
- ☐ BOLEST ZUBŮ
- ☐ CHRÁPOTI (HLAS)
- ☐ OBŤÍŽE A BOLESTI PŘI POHYBÁNÍ
- ☐ POTÍŽE S HRDLEM
- ☐ VYSOKÁ TEPLOTA

CHOROBA


- ☐ ADENOIDY # 1010
- ☐ ALERGIE # 1050
- ☐ DEVIACE NOSNÍ PŘEPRAŽKY # 1420
- ☐ GENIANTRITIDA # 1220
- ☐ HERPES
- ☐ CHŘIPKA
- ☐ RÝMA # 2020
- ☐ SINUSITIDA # 2060
- ☐ VASOMOTORICKÁ RÝMA

Nyní se dostaneme na obrazovku skenování. Pro správné navolení položek postupujeme následovně:


1. Tlačítkem „TYP VÝZKUMU“ zvolíme rozsah skenování – začátečníkům doporučujeme nastavovat vždy na typ „VĚDECKÝ“

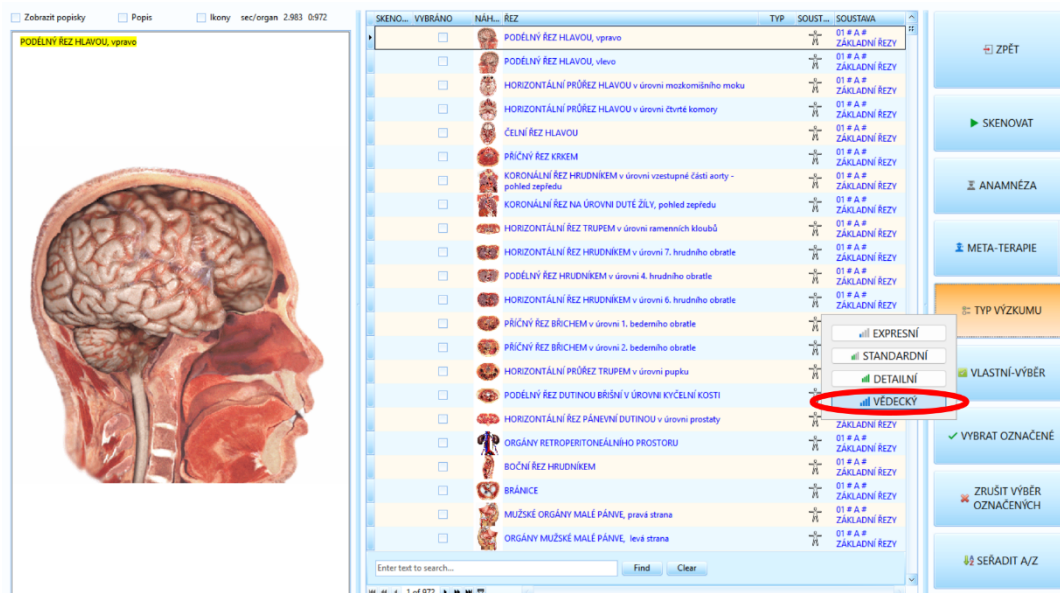


2. Tlačítkem „VLASTNÍ-VÝBĚR“ zobrazíme dostupné šablony pro skenování. Zde zvolíme požadovanou soustavu nebo předpřipravené kombinace. Při diagnostice klienta nám například stačí naskenovat „Vše bez DNA a Patogenů“ (pokud už známe konkrétní problém, lze samozřejmě zvolit konkrétnější šablonu).

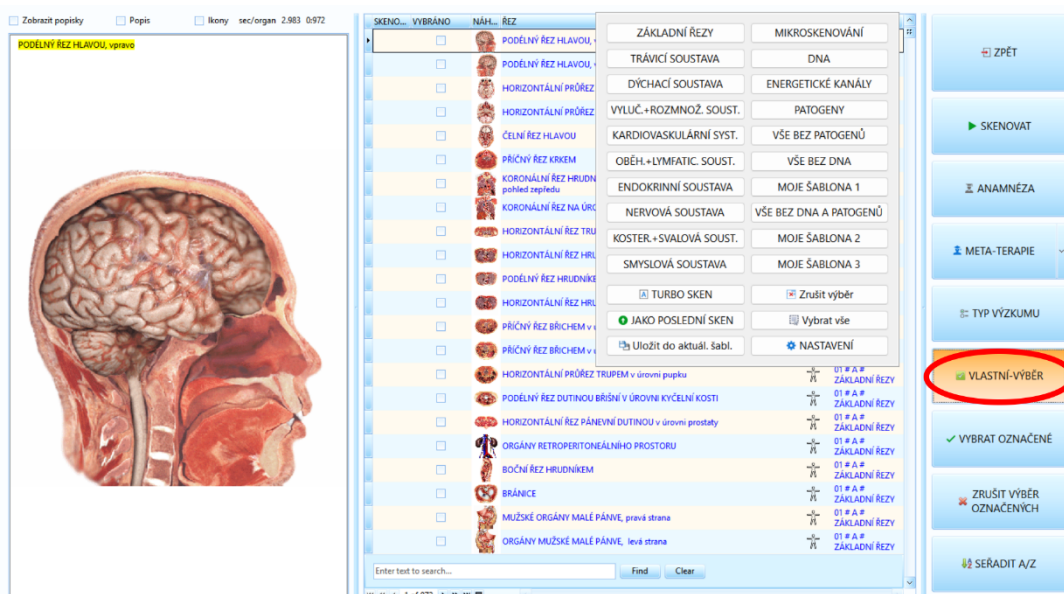

3. Skenování spustíme tlačítkem „SKENOVAT“ a vyčkáme na dokončení.

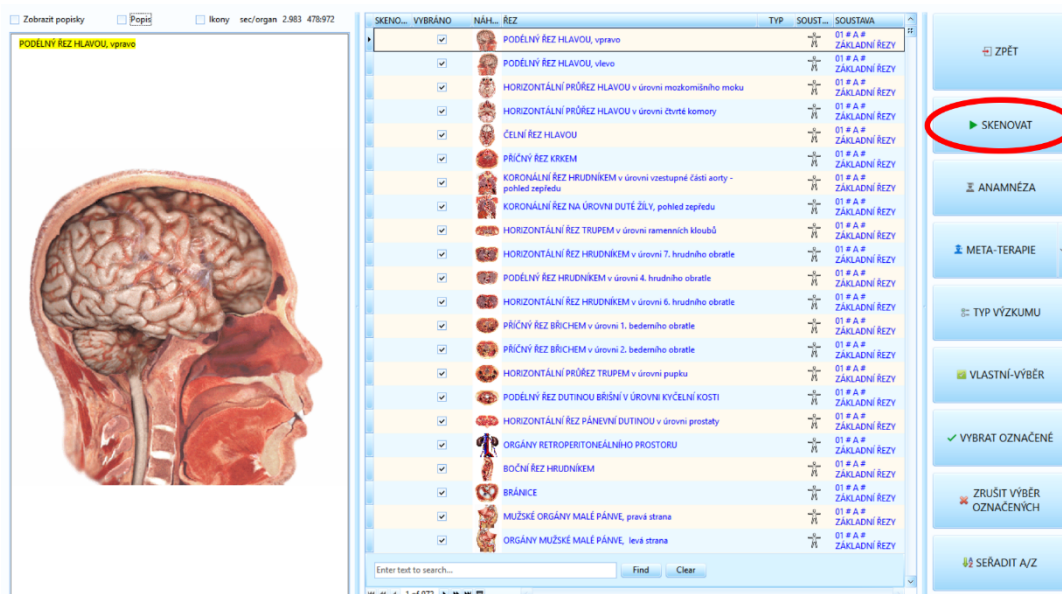

V průběhu skenování lze pozorovat počet zbývajících ŘEZŮ, časový odhad k dokončení skenování (odhadovaný čas může mít až 15% časovou odchylku) a průměrná doba zpracování jednoho ŘEZU.

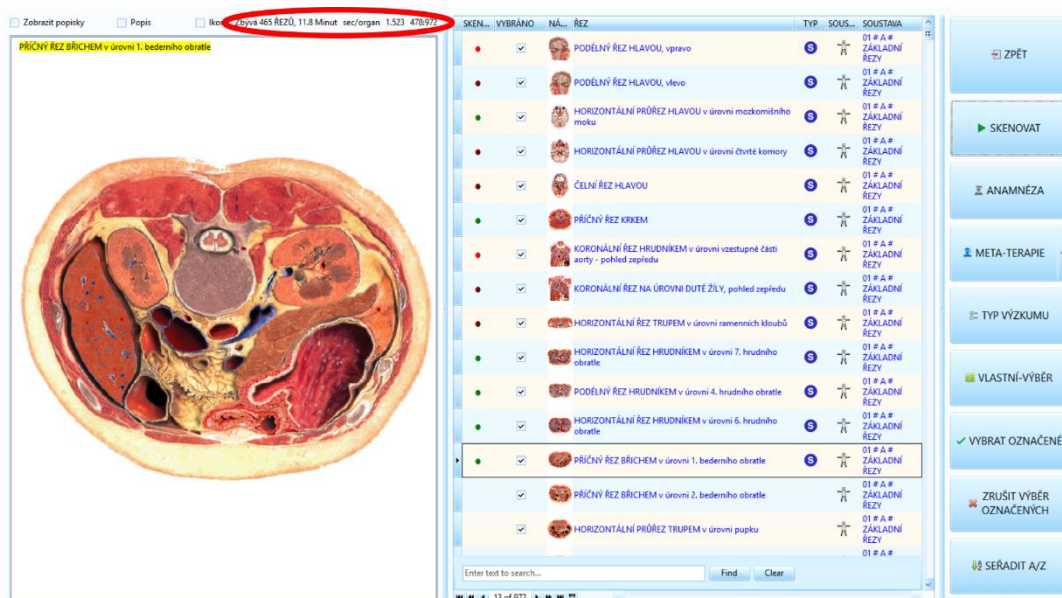

HARMONIZAČNÍ (OCHRANNÁ/POSILUJÍCÍ) META-TERAPIE

META-TERAPIE je základní terapeutickou metodou softwaru. Skládá se z harmonizačního a destrukčního procesu. Harmonizační funkce posiluje a energeticky vyživuje, jako při dobíjení baterií, kdežto destrukční funkce ničí známe patogeny, funguje na naměřených frekvencích od Dr. Rife.

Pokud si přejeme harmonizovat např. trávicí systém, stačí zvolit šablonu TRÁVICÍHO SYSTÉMU a zvolit vhodný počet META-TERAPIÍ. Počet možných cyklů terapií na jeden ŘEZ je **1x, 5x a 10x**.


U dospělého jedince nastavujeme **5x – 10x** cyklů, u kojenců doporučujeme začínat pouze **1x** cyklem.

Před spuštěním META-TERAPIE nemusí být nutně proveden SKEN. Software si umí sám ŘEZY naskenovat a poté rovnou aplikovat META-TERAPII. Nicméně pokud provedeme skenování zvlášť a teprve pak spustíme META-TERAPIE, o trochu tím zkrátíme celkovou dobu procesu (cca **5–10%** v závislosti na rychlosti počítače).


Zpuštění procesu META-TERAPIE probíhá podobným způsobem, jako SKEN. Po zvolení klienta klikneme v KARTOTÉCE na tlačítko „SKENOVAT“.

The screenshot displays the 'KARTOTÉKA' (Client Card) interface. On the left, there are input fields for client details: PŘÍJMENÍ (Malina), KŘESTNÍ JMÉNO (Josef), KATEGORIE KRYE (00), ADRESA (Třída Míru 5, Hradec Králové), E-MAIL, RH faktor, TELEFON, VĚK (44), and ROD (MUŽ). Below these is a search bar with 'Find' and 'Clear' buttons. A table with columns DATUM, NÁHL., ŘEZ, TYP, SOUST., STAV, ENERGIE, and OPTIMÁLNÍ DISPER. is visible. On the right, a vertical menu contains buttons: NOVÝ KLIENT, ZPĚT, VYBRÁT KLIENTA, SKENOVAT (highlighted with a red circle), ODSTRANIT KLIENTA, TISK, ANALÝZA, and SROVNÁVACÍ ANALÝZA. At the bottom right, there is a graph with a y-axis from 0 to 6 and an x-axis with values 1.8, 2.6, 3.4, 4.2, 4.9, 5.6, 6.6, 7.4, and 8.2. A red horizontal line is drawn at y=1 across the graph.


1. Pro správné nastavení opakujeme 3 kroky z předchozí kapitoly o SKENOVÁNÍ. Tlačítkem „TYP VÝZKUMU“ zvolíme rozsah skenování – začátečníkům doporučujeme nastavovat vždy na typ „VĚDECKÝ“.

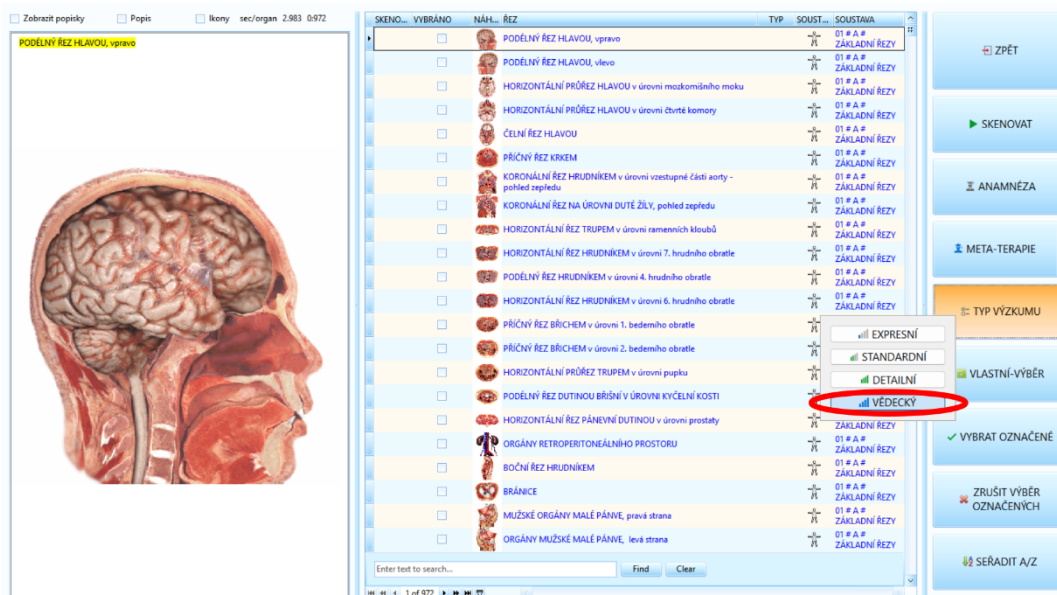

2. Tlačítkem „VLASTNÍ-VÝBĚR“ zobrazíme dostupné šablony pro skenování. Zde zvolíme požadovanou soustavu nebo také předpřipravené kombinace. Doporučujeme ale provádět kompletní META-TERAPII všech ŘEZŮ včetně DNA – kliknutím na tlačítko „Vybrat vše“ (a tím se aplikuje také destrukční terapie na patogeny –destrukční terapii si ale vysvětlíme podrobněji až v další kapitole).

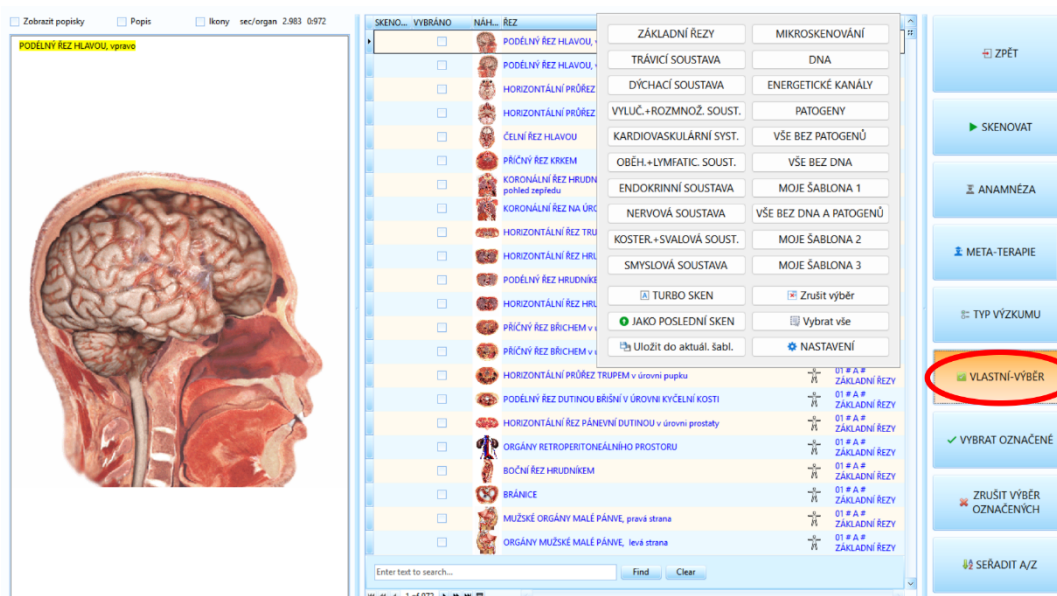

- Proces zahájíme kliknutím na malou šipečku v pravé části tlačítka „META-TERAPIE“ a výběrem vhodného počtu cyklů. Harmonizační terapie začne ihned po výběru počtu cyklů.

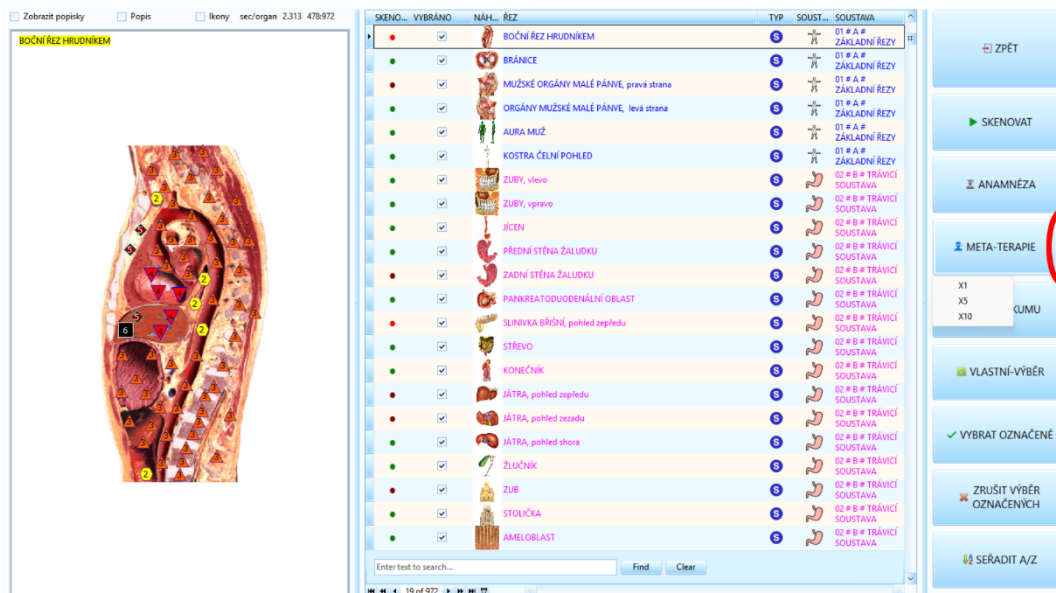


META-TERAPIE PRO BOLEST/NEPOHODLÍ/PŘÍZNAKY:

Oberon dokáže skvěle řešit bolesti a další příznaky. Příznaky jsou vše, co nezahrnuje skutečnou příčinu problému. Deprese, bolest v zádech, bolest kloubů, kožní problémy, bolesti hlavy, nemožnost usnout, stálá potřeba chodit na toaletu, apod. Pokud chcete bolest a příznaky řešit, stačí naskenovat správné **ŘEZY** a aplikovat tyto terapie.

Např. při depresi skenujeme **ŘEZY** spojené s mozkem.

Do vyhledávacího boxu na obrazovce **SKENOVÁNÍ** vepíšeme první 3 písmena slova „Mozek“ „moz“ - následně zmizí všechny **ŘEZY**, které nejsou spojené s mozkem. Označte tyto **ŘEZY** k naskenování – zatržením ticketového čtverečku na levé straně řádku daného **ŘEZU**.

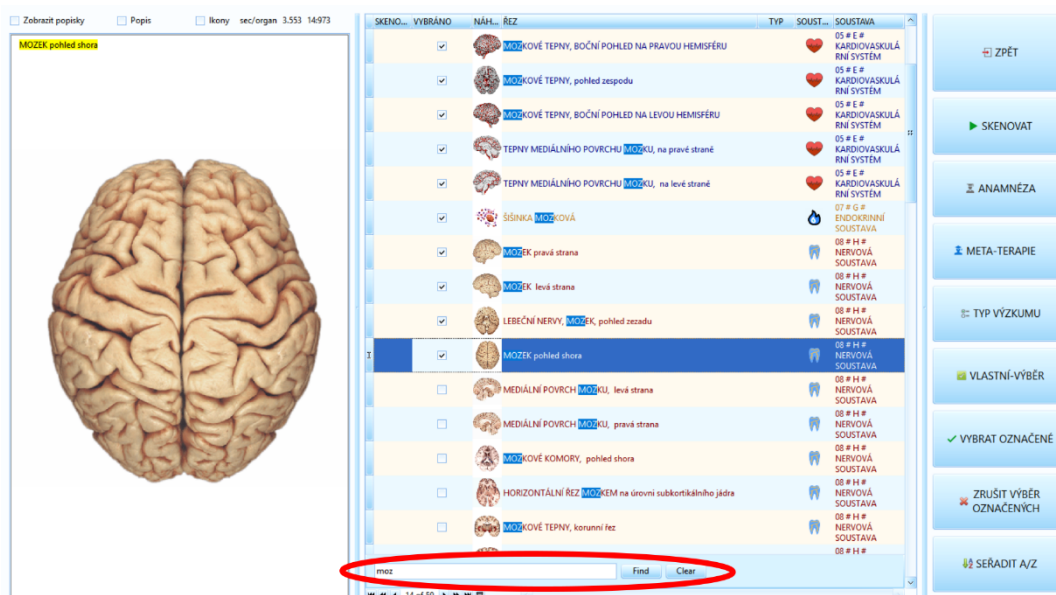

U ŘEZŮ spojených s příznaky a bolestí můžete spustit **5x5** nebo až **5x10** TERAPIÍ (tedy **25-50** cyklů celkem)! Při kompletní META-TERAPII celého těla aplikujeme 1x5 – 1x10 cyklů terapií, ale pro příznaky, bolest apod. můžeme aplikovat tyto terapie mnohem INTENZIVNĚJI – META-TERAPIE je totiž velice účinná při mírnění těchto příznaků.

5x10 terapií znamená, že postupně spustíte na vybraných orgánech 10 cyklů „AUTOMATICKÉ META-TERAPIE“ a to až 5x za sebou (**celkem tedy až 50 terapií na jednom ŘEZU**).

Pro každý příznak musíme mít naskenované správné ŘEZY; zde je několik příkladů:

- Kožní problémy: vyhledejte postupně slovní variace slova kůže („kož“, „kůž“) a ŘEZY označte
- Deprese: vyhledejte variace slova mozek („moz“) a ŘEZY označte
- Bolesti kloubů – vyhledejte slovo kloub (to nám pokryje veškeré variace slova) a označte

Tuto INTENZIVNÍ META-TERAPII lze použít všude, kde se bolest a příznaky nachází.

DESTRUKČNÍ (NIČIVÁ) META-TERAPIE

DESTRUKČNÍ terapie je založená na frekvencích Dr. Rife. Tato terapie se používá na patogeny a mikroorganismy v těle. Zatímco HARMONIZAČNÍ (ochranná/posilující) terapie harmonizuje (ve smyslu vyrovnává) orgány a tím potlačuje jejich choroby, DESTRUKČNÍ terapie se zaměřuje na parazity, bakterie, virusy, houby apod.

Nespouštějte ale DESTRUKČNÍ terapie každý den – pro dobrý výsledek doporučujeme maximálně 3x týdně, zatímco mezi volnými dny aplikujeme také HARMONIZAČNÍ terapie. Ty naopak spouštíme mnohem častěji (ideálně denně), pro dobrý výsledek alespoň 3x týdně. Podrobněji si nastavení počtu terapií rozvedeme v kapitole SROVNÁVACÍ ANALÝZY.


Pro aplikování destrukční META-TERAPIE používáme 2 způsoby – jednoduchý pro začátečníky a pokročilý/diagnostický.

- **Jednoduchý způsob** – nevyžaduje tolik pozornosti a času k aplikaci, nicméně zahrnuje všechny známé patogeny v těle – a to i ty, které klientovi aktuálně nemusí zhoršovat zdravotní stav – tím se samozřejmě prodlužuje celková doba trvání META-TERAPIÍ.
-
- **Pokročilý způsob** – vyžaduje více času pro dohledání konkrétních škodlivých mikroorganismů a patogenů, následné doskenování jejich ŘEZŮ a poté až aplikování META-TERAPIÍ.


Pro snadnější pochopení Oberonu si nyní popíšeme pouze jednoduchý způsob. Pokročilý – diagnostický způsob si podrobně rozvedeme v samostatné kapitole později.

Prakticky jsme tento způsob zahrnuli už v předchozí kapitole o HARMONIZAČNÍ META-TERAPII. Na obrazovce SKENOVÁNÍ vybereme všechny ŘEZY (více než 970) tlačítkem „VYBRAT VŠE“ - tím aplikujeme jak HARMONIZAČNÍ, tak i DESTRUKČNÍ META-TERAPII. Oberon umí sám

rozpoznat jednotlivé ŘEZY a vybrat vhodný typ terapie. Z celkového počtu ŘEZŮ je 113 patogenů a mikroorganismů.

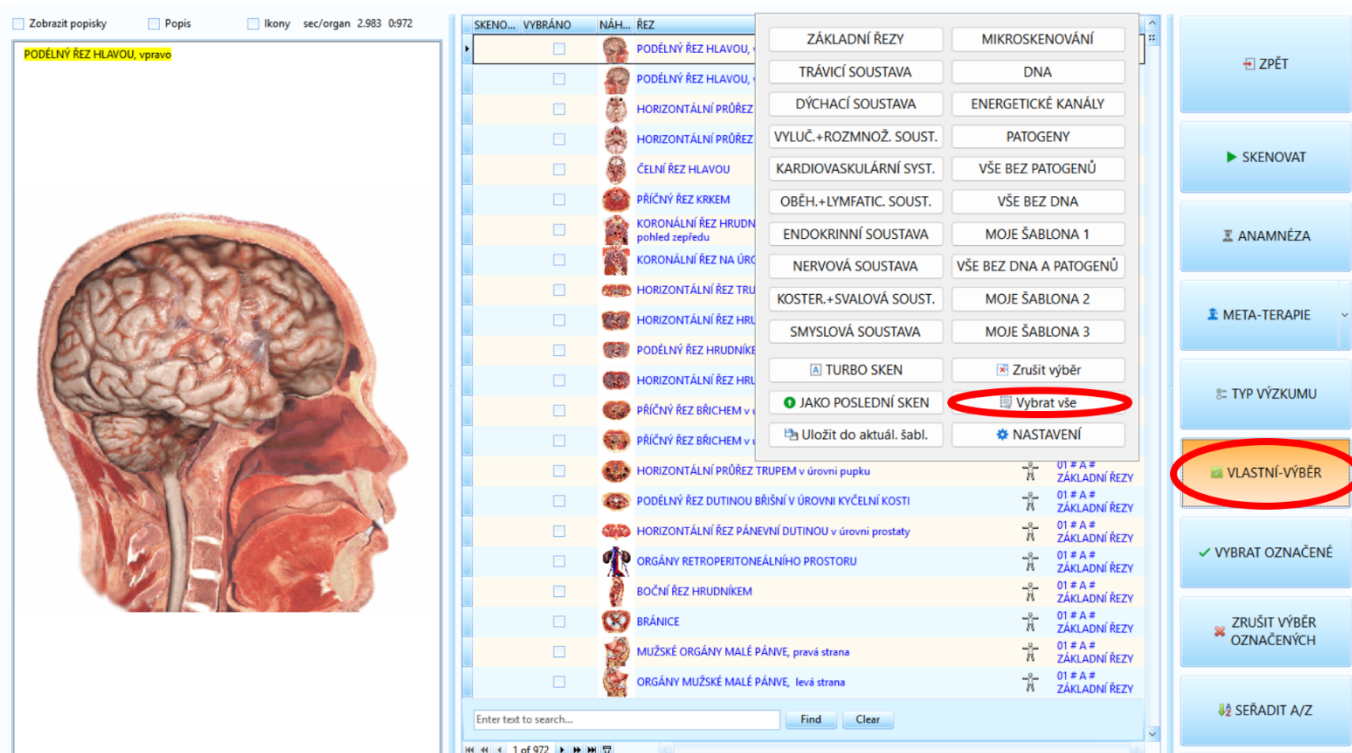


Jestliže potřebujeme aplikovat pouze DESTRUKČNÍ META-TERAPIE (např. při detoxikaci organismu), použijeme šablonu „PATOGENY“:

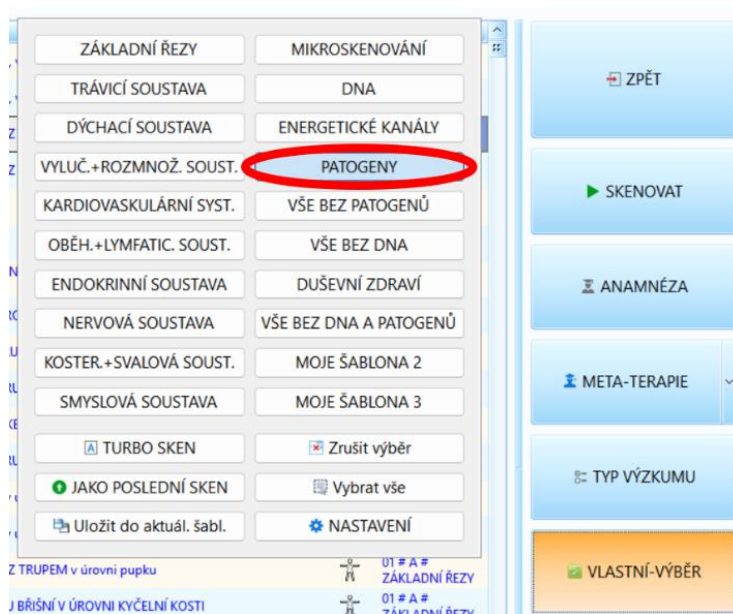

Příklad HARMONIZAČNÍ META-TERAPIE:

META-TERAPIE
PODÉLNÝ ŘEZ HLAVOU, vpravo META-TERAPIE

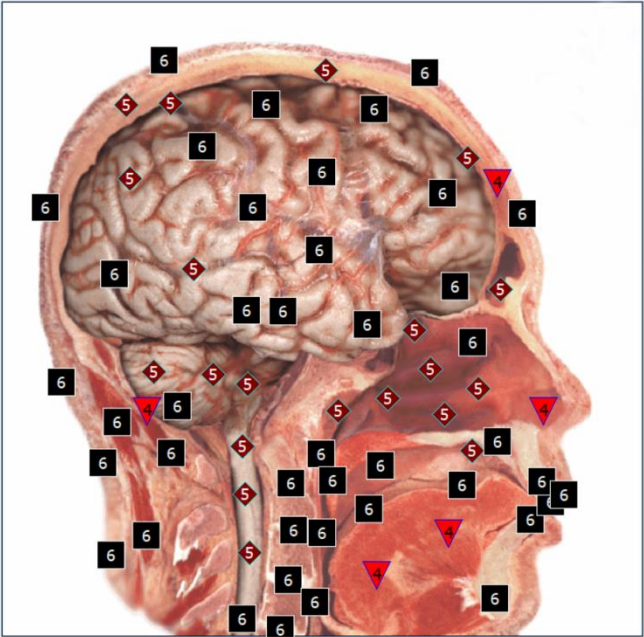

Nastavte počet cyklů (případně lokalizujte ložisko) a klikněte na tlačítko „START“

ZPĚT
POZASTAVIT
START
X1 X5 X10

N Spins
F = 5,40
Q = 21,34
Dominantní SPIN
Remaining

S Spins
F = 4,32
Q = 44,08
N

Harmonizace

Destrukce

1 2 3
4 5 6

Příklad DESTRUKČNÍ META-TERAPIE:

META-TERAPIE
TRICHINELLA SPIRALIS META-TERAPIE



Nastavte počet cyklů (případně lokalizujte ložisko) a klikněte na tlačítko „START“

ZPĚT
POZASTAVIT
START
X1 X5 X10

N Spins
F = 5,40
Q = 21,34
Dominantní SPIN
Remaining

S Spins
F = 4,32
Q = 44,08
N

Harmonizace

Destrukce

1 2 3
4 5 6

ÚPRAVA ŠABLON PRO SKEN A META-TERAPIE

Pokud přednastavené šablony nevyhovují Vaším potřebám, můžete si je nejen dopravit, ale vytvořit také zcela vlastní.

Existují dva způsoby, jak lze šablony upravovat. METODA 1 je vhodná při drobných úpravách. Pro kompletní předělání šablony doporučujeme použít METODU 2.

Obě metody si podrobněji rozepíšeme. Nejprve přejdeme z KARTOTÉKY na SKENOVACÍ obrazovku tlačítkem „SKENOVAT“.

The screenshot displays the 'KARTOTÉKA' (Client Card) form with the following fields:

- PŘÍJMENÍ: Malina
- KŘESTNÍ JMÉNO: Josef
- KATEGORIE KRVĚ: (0)
- ADRESA: Třída Míru 5, Hradec Králové
- E-MAIL:
- RH faktor: +
- TELEFON:
- VĚK: 44
- ROD: MUŽ

Below the form is a search bar with the text 'Enter text to search...' and buttons 'Find' and 'Clear'. Below the search bar is a table with columns: DATUM, NÁHL., ŘEZ, TYP, SOUST., STAV, ENERGIE, OPTIMÁLNÍ DISPER., and a filter icon. The table is currently empty.


On the right side of the interface, there are several buttons:

- NOVÝ KLIENT
- VYBRAT KLIENTA
- ODSTRANIT KLIENTA
- ANALÝZA
- ZPĚT
- SKENOVAT** (highlighted with a red circle)
- TISK
- SROVNÁVACÍ ANALÝZA


At the bottom right, there is a graph with a grid. The y-axis is labeled from 0 to 6. The x-axis has labels: 1.8, 2.6, 3.4, 4.2, 4.9, 5.8, 6.6, 7.4, 8.2. A red horizontal line is drawn across the graph at the y-axis value of 1.

POSTUP – METODA 1:

1. Nejprve zvolíme šablonu k úpravě – v našem příkladu zvolíme šablonu „ZÁKLADNÍ ŘEZY“. K této šabloně si cvičně přidáme ŘEZY „JÍCEN“ a „PŘEDNÍ STĚNA ŽALUDKU“.
2. Vyhledáme potřebné ŘEZY pomocí dříve popsané metody (do vyhledávacího pole ve spodní části obrazovky vepíšeme alespoň 3 písmena z názvu ŘEZU) a zatrhneme ticketový čtvereček na levé straně řádku.

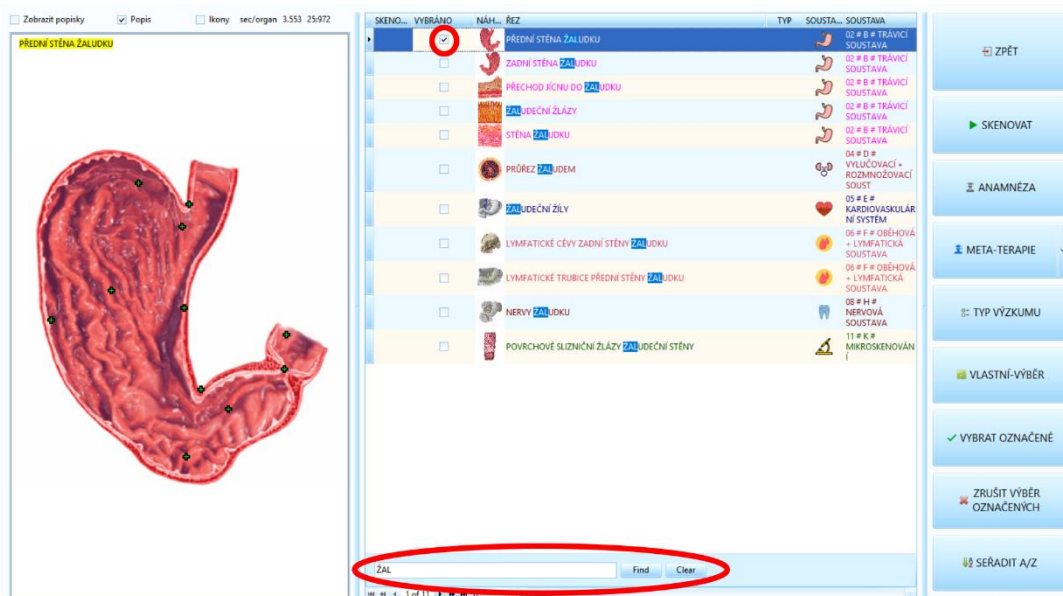

3. Jakmile máme zatržené všechny potřebné ŘEZY, klikneme na tlačítko „VLASTNÍ VÝBĚR“ v pravé části obrazovky a poté na tlačítko „Uložit do aktuál. šabl.“

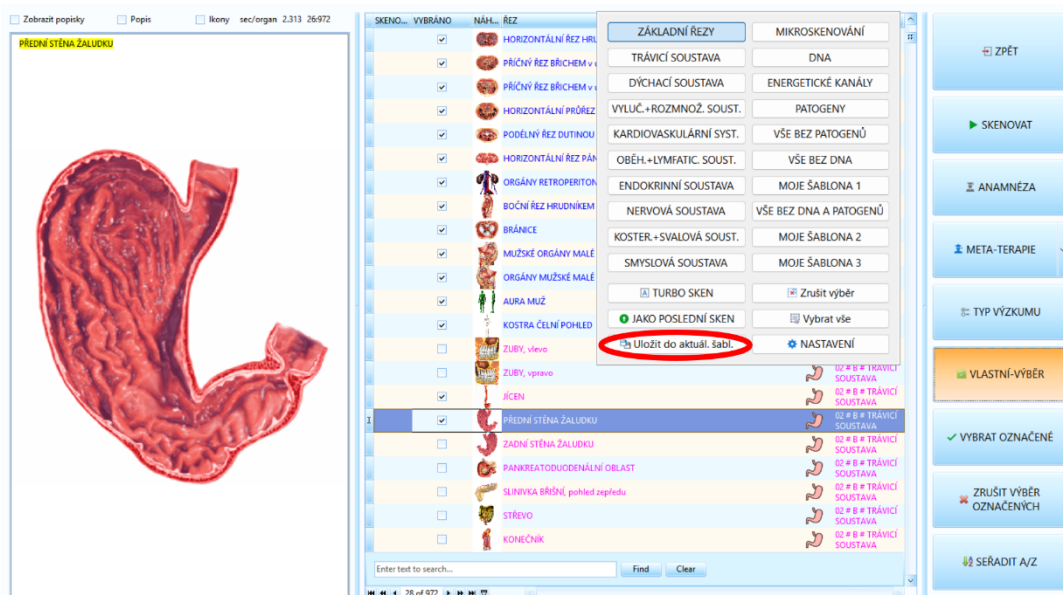


Tímto je šablona v pořádku upravena a v budoucnu již bude zahrnovat přidané řezy navíc.


POSTUP – METODA 2 – ÚPRAVA ŠABLONY:

Pro porovnání s „METODOU 1“ použijeme stejný příklad a upravíme šablonu „ZÁKLADNÍ ŘEZY“, do které přidáme „JÍCEN“ a „PŘEDNÍ STĚNU ŽALUDKU“.


1. Na obrazovce SKENOVÁNÍ klikneme na tlačítko „VLATNÍ VÝBĚR“ a poté „NASTAVENÍ“.

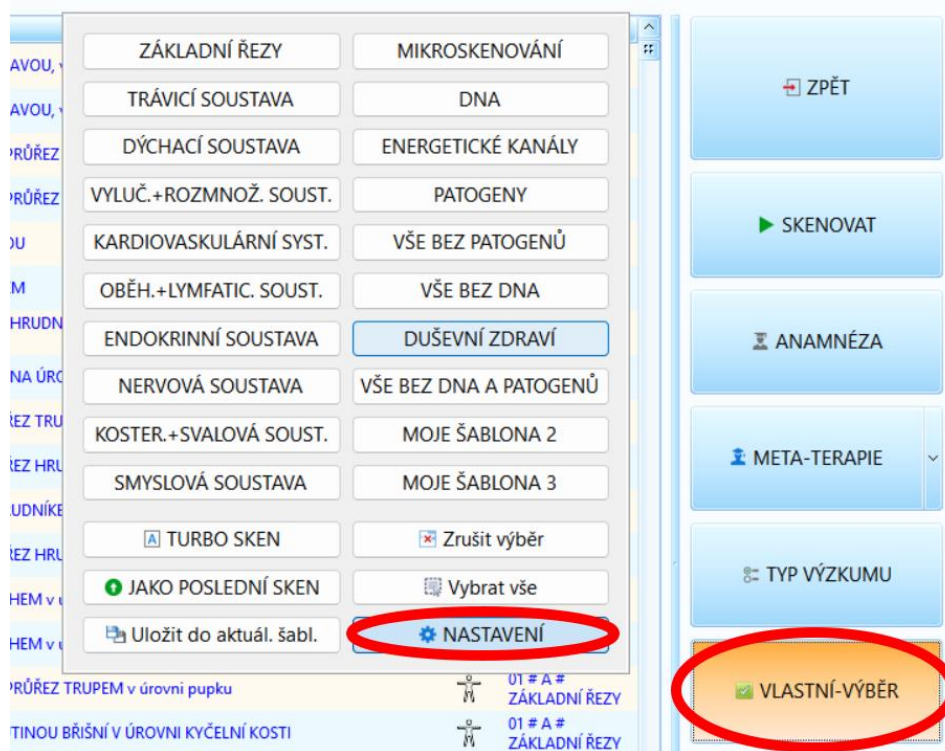

2. Objevíme se v pokročilém systému úprav – tzv. obrazovka ŠABLON. V pravé části obrazovky máme vypsané jednotlivé šablony. Zvolíme si tu, kterou potřebujeme upravit (v našem příkladu „ZÁKLADNÍ ŘEZY“).

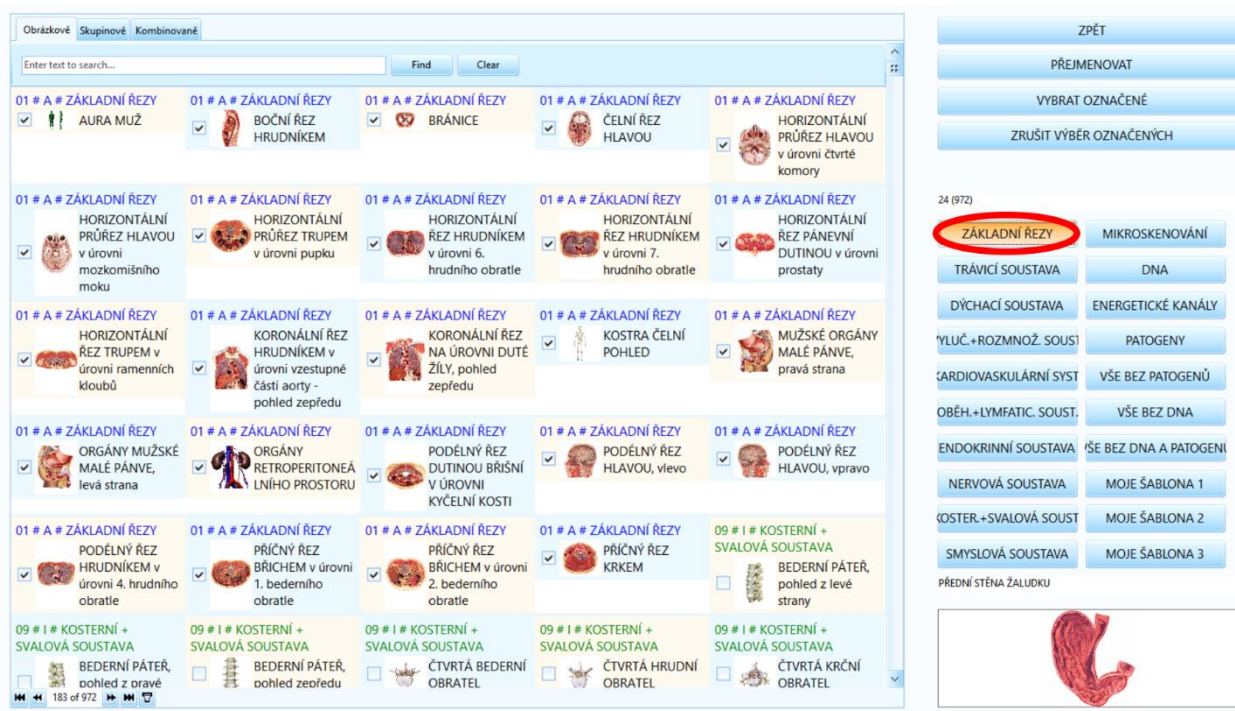


3. Teď už stačí jen zatrhávat ticketovým čtverečkem všechny potřebné ŘEZY. Pokud známe názvy ŘEZŮ a víme, který/é konkrétně přidat, použijeme vyhledávací pole v levé horní části obrazovky. Opět platí, že pro správné vyhledání vepíšeme alespoň 3 písmena z názvu orgánu/ŘEZU (v našem příkladu jsme přidali ŘEZY „JÍCEN“ a „PŘEDNÍ STĚNU ŽALUDKU“).

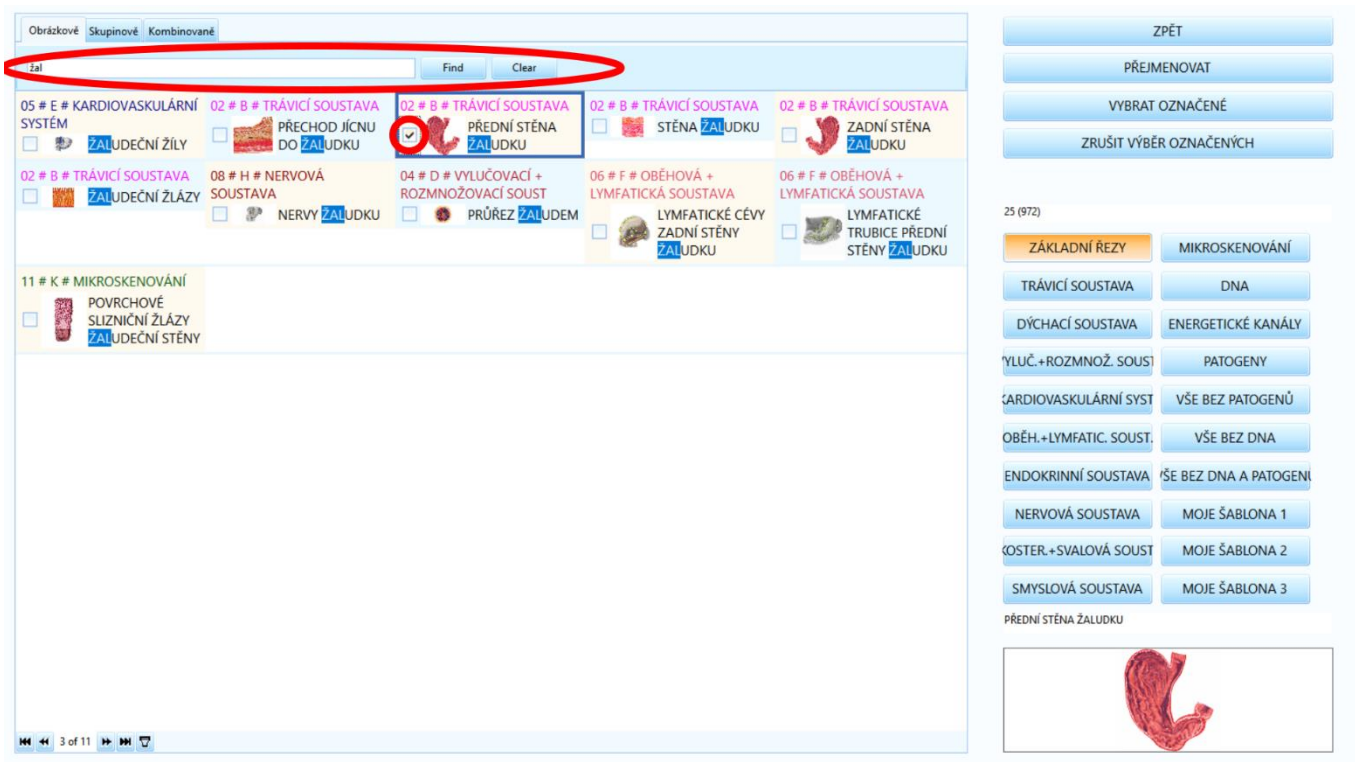

Hotovo. Šablona se už nějak neukládá. Změny jsou okamžité ihned po zatržení daného ŘEZU.

POSTUP – METODA 2 – TVORBA VLASTNÍ ŠABLONY:


1. Stejným způsobem lze také vytvořit svou vlastní šablonu. Z obrazovky SKENOVÁNÍ přejdeme na obrazovku ŠABLON tlačítky „VLASTNÍ-VÝBĚR“ a poté „NASTAVENÍ“.

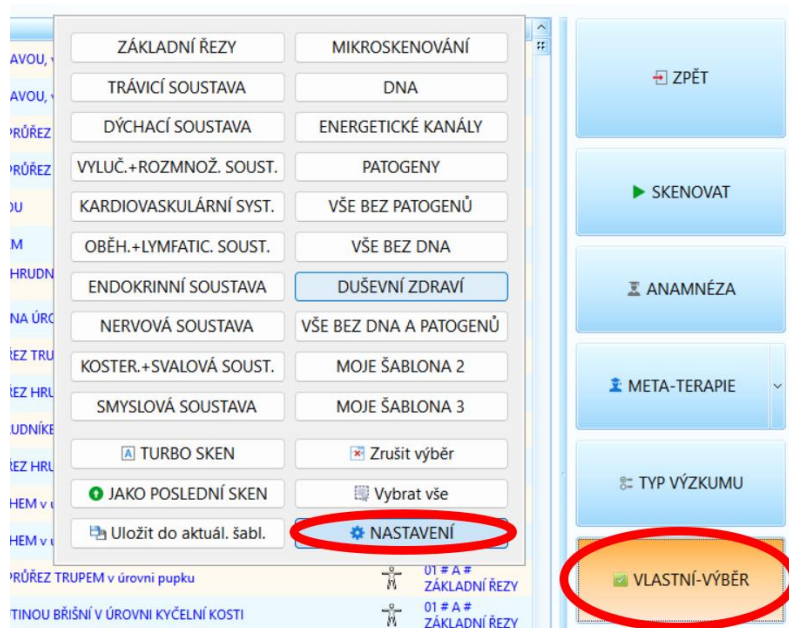

2. Máme možnost vytvořit si až 3 libovolné šablony. V našem příkladu budeme vytvářet šablonu „DUŠEVNÍ ZDRAVÍ“.

3. V pravé části obrazovky klikneme na tlačítko „MOJE ŠABLONA 1“ a přejmenujeme si ji tlačítkem „PŘEJMENOVAT“ v pravé horní části obrazovky. Do nově objeveného okénka vepíšeme požadovaný název šablony (v našem příkladu „DUŠEVNÍ ZDRAVÍ“) a potvrdíme tlačítkem „OK“.

4. Opět už stačí jen zatrhávat všechny vhodné ŘEZY pro naši novou šablonu. Rovněž můžeme použít vyhledávací pole v levé horní části obrazovky (v našem příkladu vyhledáváme všechny ŘEZY související s mozkem).

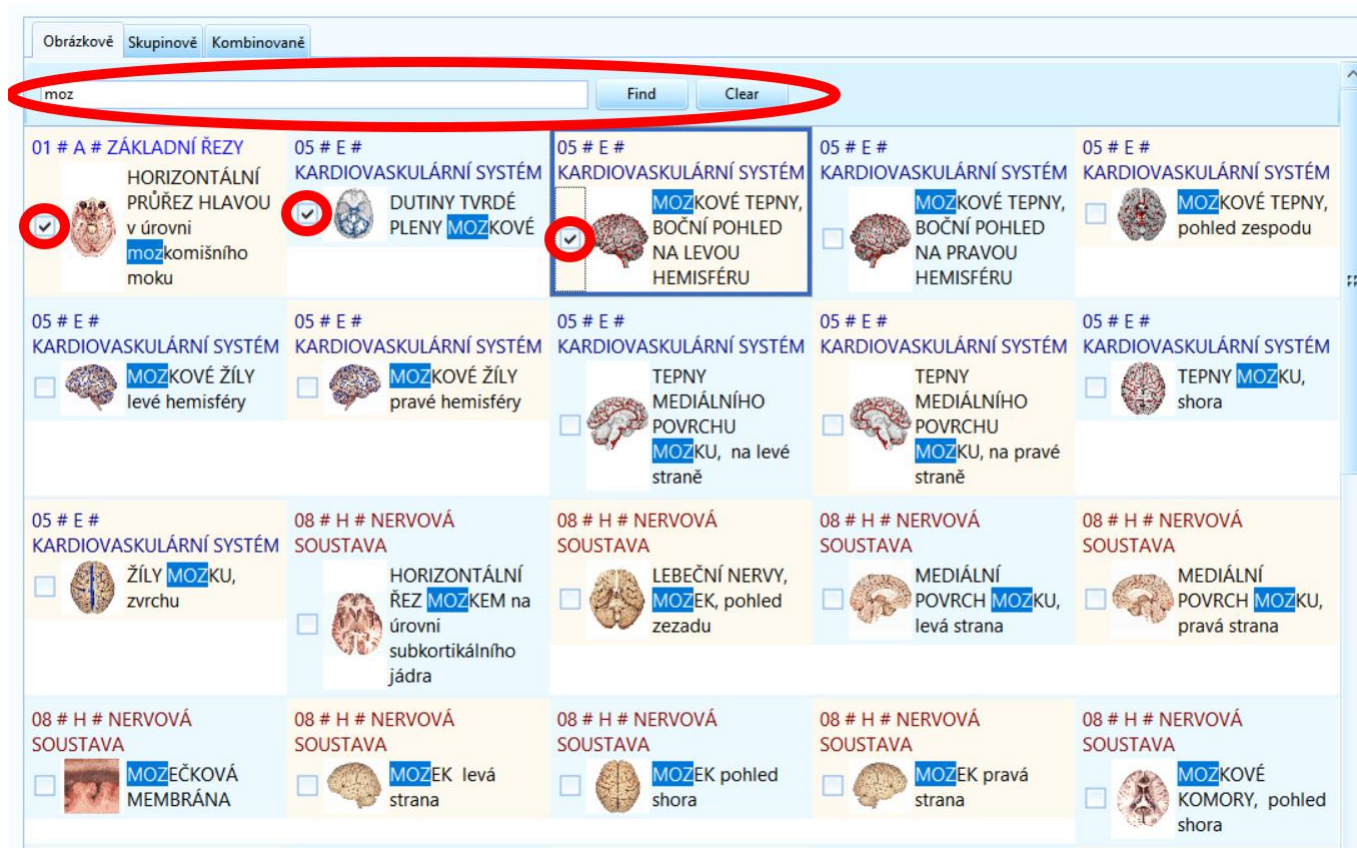

Hotovo. Jakmile zatrhneme všechny potřebné ŘEZY, dále šablonu nějak neukládáme. Od teď již bude tato nová šablona dostupná pro skenování i terapie. Takto si můžeme vytvořit až 3 vlastní, kompletně libovolné šablony. Ve výše uvedeném postupu jsou pro uživatele vyhrazena tlačítka „MOJE ŠABLONA 1“, „MOJE ŠABLONA 2“ a „MOJE ŠABLONA 3“.

A POZOR! NĚKTERÉ ŘEZY JSOU SPECIFICKÉ PRO POHLAVÍ!!! VŽDY vytvářejte/upravujte (nebo alespoň překontrolujte) šablony pro muže i ženu zvlášť (pohlaví odpovídá zvolené kartě klienta – pokud vytváříte/upravujete šablonu u muže Josefa Malinu, pak musíte vytvořit i ženu Alenu Malinovou a nově vytvořenou/upravenou šablonu zkontrolovat).

POKROČILÉ FUNKCE OBRAZOVKY ŠABLON:

V příkladech jsme si ukázali, jak přidávat ŘEZY jednotlivě. Nicméně existuje i způsob, jak přidávat ŘEZY hromadně – tato technika Vám může pomoci i na jiných obrazovkách Oberonu. Použijeme opět příklad pro vytvoření šablony „DUŠEVNÍ ZDRAVÍ“.

1. Přešli jsme na obrazovku ŠABLON, vybrali si „MOJE ŠABLONA 1“, pojmenovali ji „DUŠEVNÍ ZDRAVÍ“ a vyhledali si všechny ŘEZY spojené s mozkem.

01 # A # ZÁKLADNÍ ŘEZY
HORIZONTÁLNÍ PRŮŘEZ HLAVOU v úrovni mozkomíšního moku

05 # E # KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM
DUTINY TVRDÉ PLENY MOZKOVÉ

05 # E # KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM
MOZKOVÉ TEPNY, BOČNÍ POHLED NA LEVOU HEMISFÉRU

05 # E # KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM
MOZKOVÉ TEPNY, BOČNÍ POHLED NA PRAVOU HEMISFÉRU

05 # E # KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM
MOZKOVÉ TEPNY, pohled zespodu

05 # E # KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM
MOZKOVÉ ŽILY levé hemisféry

05 # E # KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM
MOZKOVÉ ŽILY pravé hemisféry

05 # E # KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM
TEPNY MEDIÁLNÍHO POVRCHU MOZKU, na levé straně

05 # E # KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM
TEPNY MEDIÁLNÍHO POVRCHU MOZKU, na pravé straně

05 # E # KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM
TEPNY MOZKU, shora

08 # H # NERVOVÁ SOUSTAVA
ŽILY MOZKU, zvrchu

08 # H # NERVOVÁ SOUSTAVA
HORIZONTÁLNÍ ŘEZ MOZKEM na úrovni subkortikálního jádra

08 # H # NERVOVÁ SOUSTAVA
LEBEČNÍ NERVY, POVRCH MOZKU, pohled zezadu

08 # H # NERVOVÁ SOUSTAVA
MEDIÁLNÍ POVRCH MOZKU, levá strana

08 # H # NERVOVÁ SOUSTAVA
MEDIÁLNÍ POVRCH MOZKU, pravá strana

08 # H # NERVOVÁ SOUSTAVA
MOZEČKOVÁ MEMBRÁNA

08 # H # NERVOVÁ SOUSTAVA
MOZEK levá strana

08 # H # NERVOVÁ SOUSTAVA
MOZEK shora

08 # H # NERVOVÁ SOUSTAVA
MOZEK pravá strana

08 # H # NERVOVÁ SOUSTAVA
MOZKOVÉ KOMORY, pohled shora

08 # H # NERVOVÁ SOUSTAVA
MOZKOVÉ TEPNY, korunní řez

08 # H # NERVOVÁ SOUSTAVA
PRŮŘEZ MOZKEM, na úrovni mozkového kmene

08 # H # NERVOVÁ SOUSTAVA
ŠEDÁ HMOTA MOZKOVÁ

07 # G # ENDOKRINNÍ SOUSTAVA
ŠÍŠINKA MOZKOVÁ

11 # K # MIKROSKENOVÁNÍ
TKÁŇ MOZČKU

ZPĚT
PŘEJMENOVAT
VYBRAT OZNAČENÉ
ZRUŠIT VÝBĚR OZNAČENÝCH

0 (972)

ZÁKLADNÍ ŘEZY
MIKROSKENOVÁNÍ

TRÁVICÍ SOUSTAVA
DNA

DÝCHACÍ SOUSTAVA
ENERGETICKÉ KANÁLY

YLUC.+ROZMNOŽ. SOUST.
PATOGENY

KARDIOVASKULÁRNÍ SYST.
VŠE BEZ PATOGENŮ

OBĚH.+LYMFATIC. SOUST.
VŠE BEZ DNA

ENDOKRINNÍ SOUSTAVA
VŠE BEZ DNA A PATOGENŮ


NERVOVÁ SOUSTAVA
DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

KOSTER.+SVALOVÁ SOUST.
MOJE ŠABLONA 2


SMYSLOVÁ SOUSTAVA
MOJE ŠABLONA 3

HORIZONTÁLNÍ PRŮŘEZ HLAVOU v úrovni mozkomíšního moku



2. Nyní si klikneme na první ŘEZ, aby se nám modře označil.

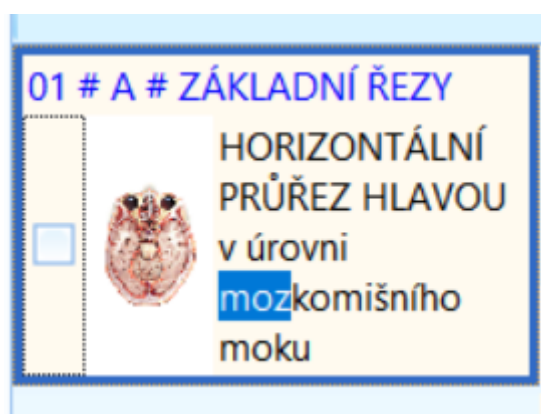


4. Výběr potvrdíme tlačítkem „VYBRAT OZNAČENÉ“ v pravé horní části obrazovky.

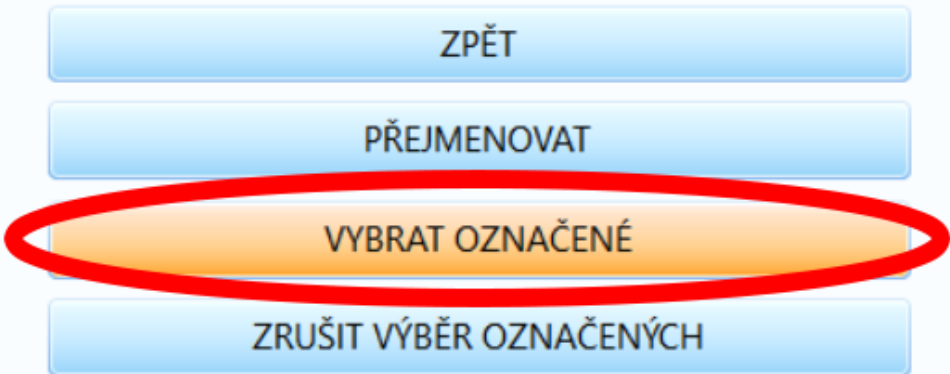

Tlačítko nám zatrhne ticketové čtverečky všech modře označených ŘEZŮ:

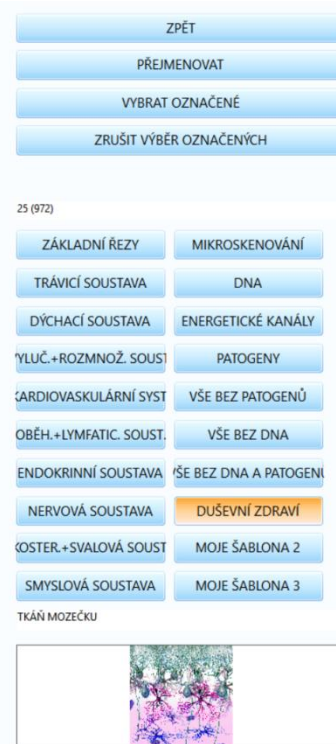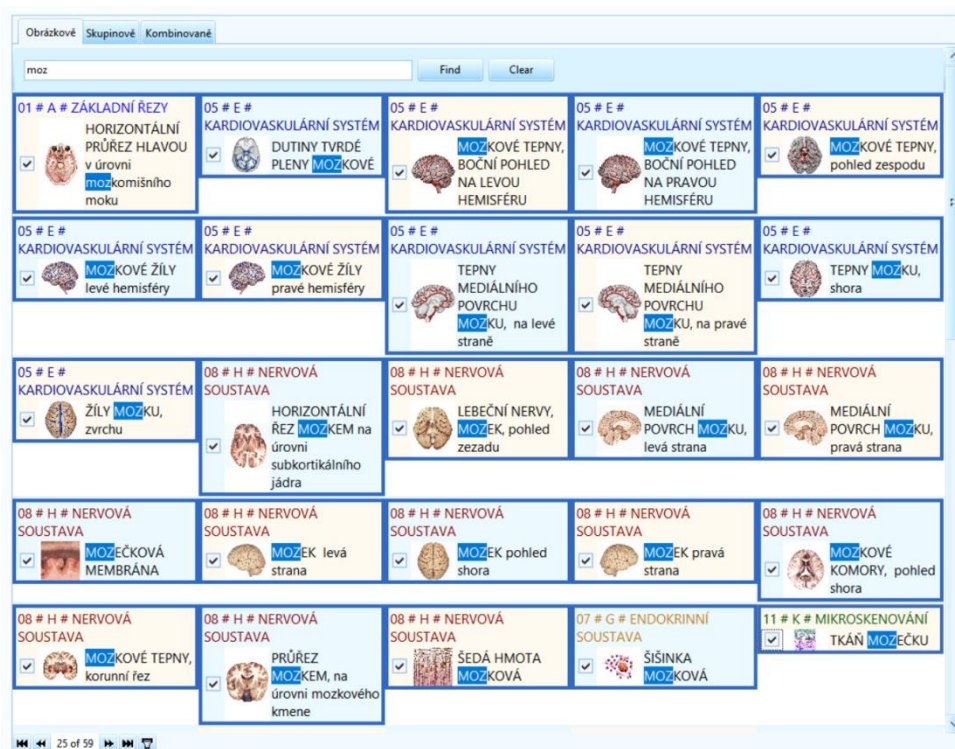

Pokud naopak potřebujeme ze šablony hromadně ŘEZY odstranit, je k tomu určeno opačné tlačítko „ZRUŠIT VÝBĚR OZNAČENÝCH“.

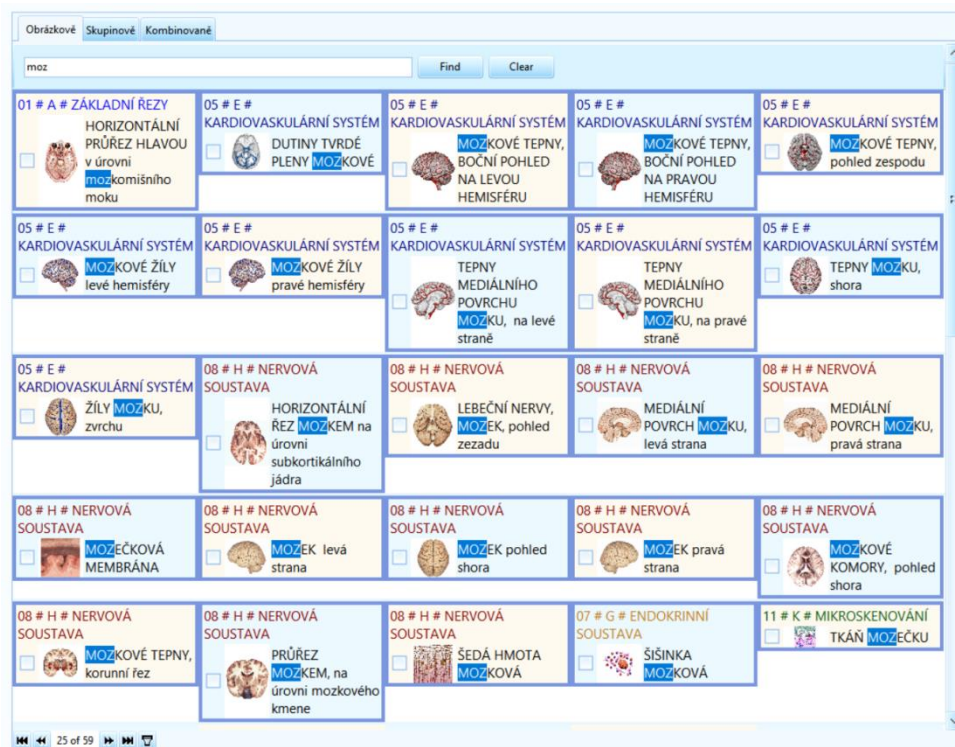


Pokud potřebujeme označit více položek, můžeme také použít i samostatnou klávesu CTRL + kliknutí myškou. Jestliže potřebujeme označit všechny vyhledané/vyfiltrované ŘEZY, můžeme také použít klasickou známou klávesovou zkratku pro označení všech položek → CTRL + A.

Celkový počet uložených ŘEZŮ v šabloně udává dvojice čísel v pravé horní části obrazovky:




(Na obrazovce SKENOVÁNÍ se tato dvojice čísel zobrazuje v levé horní části a tlačítka pro hromadné označení ŘEZŮ zase v pravé dolní části. Platí zde stejná pravidla pro kombinaci kláves SHIFT + kliknutí nebo CTRL + kliknutí:)

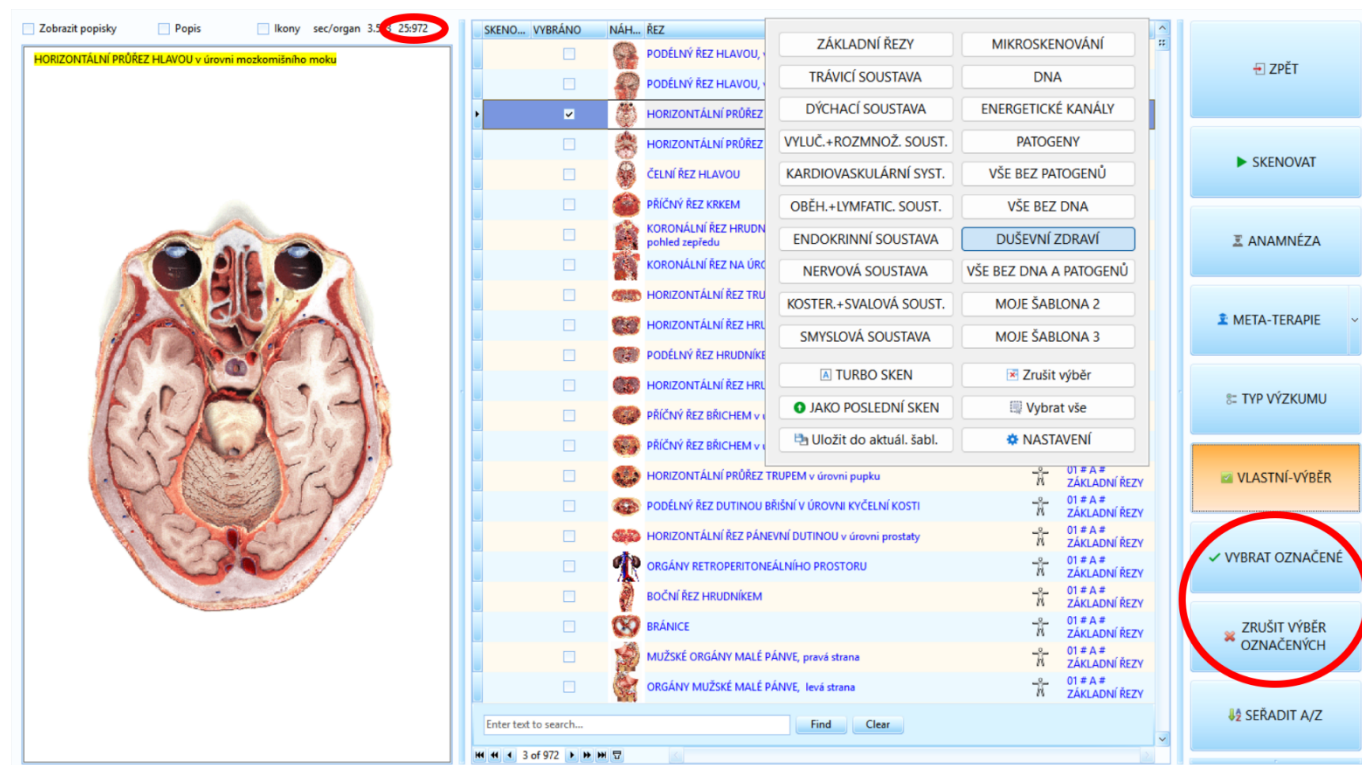


V našem příkladu byla vytvořena šablona pro DUŠEVNÍ ZDRAVÍ z 25 ŘEZŮ. Můžeme se vrátit zpět na obrazovku SKENOVÁNÍ a novou šablonu zkontrolovat. Po zvolení naší nové šablony program ukazuje (v levé horní části obrazovky), že obsahuje 25 ŘEZŮ k naskenování.

A ještě jednou pro připomenutí - úpravu šablony provádíme vždy pro muže a ženu zvlášť (vyberte klienta muže/ženu v kartotéce, provedete změny v šabloně, přepnete na klienta opačného pohlaví a změny v šabloně ověříte – případné chybějící ŘEZY doplníte).


Dále si můžeme v systému ŠABLON zobrazit ŘEZY skrze 3 různé typy náhledů. Tyto typy lze přepínat v levé horní části obrazovky ŠABLON:

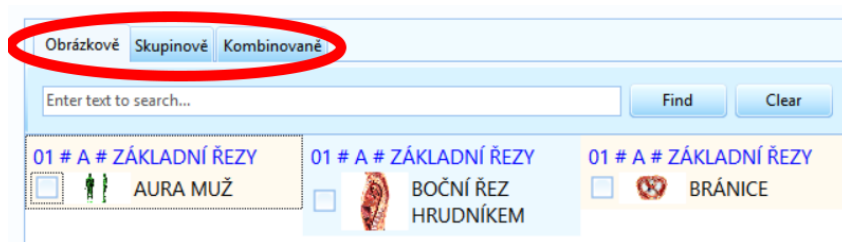

- Obrázkově – s tímto typem jsme dosud pracovali ve výše popsáných příkladech. Pro zřetelnou orientaci zobrazuje náhled ŘEZU a celý jeho název. Nejvhodnější pro začátečníky
- Skupinově – ŘEZY se zobrazují řádkově, s malými náhledy. Výhodou je přehledné zobrazení soustav a celých názvů jednotlivých ŘEZŮ. Nejlepší volba pro zkušenější uživatele.

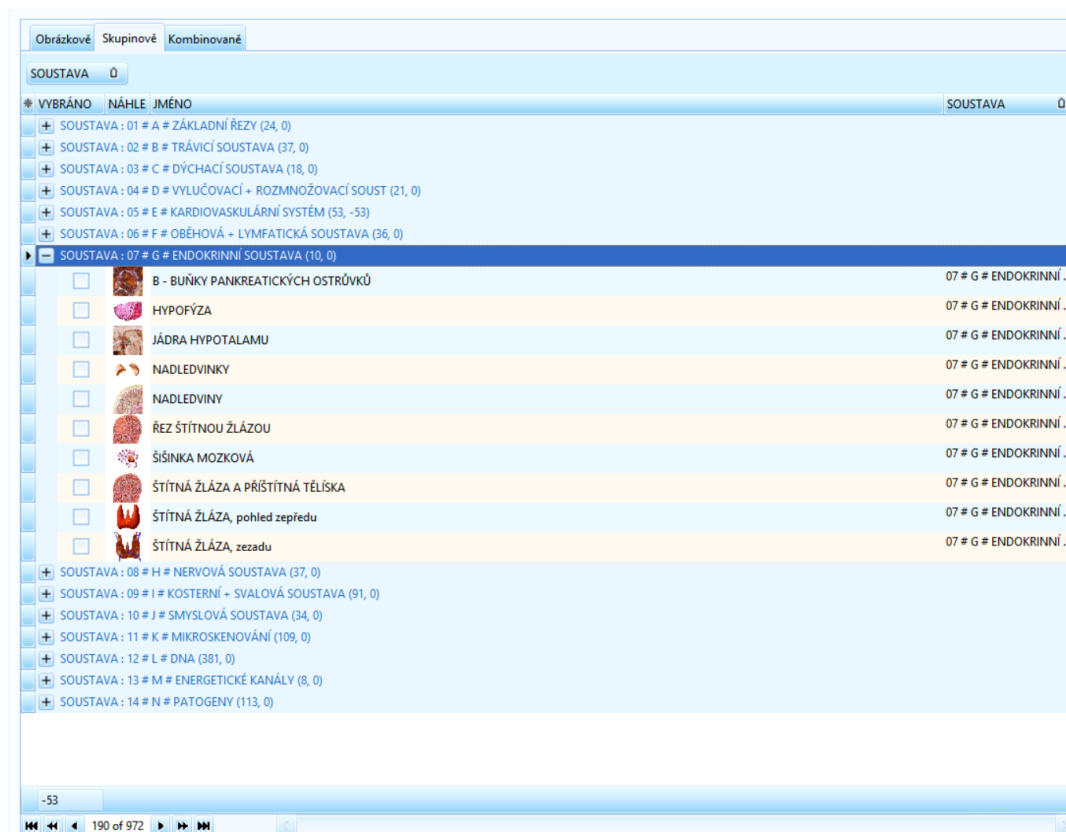

- Kombinovaně – kombinuje oba předchozí typy zobrazení. Náhledy jsou o něco menší než v Obrázkovém zobrazení, a proto se nezobrazuje celý název ŘEZU. Nicméně je zde navíc možnost zobrazovat a pracovat s celými soustavami ŘEZŮ.

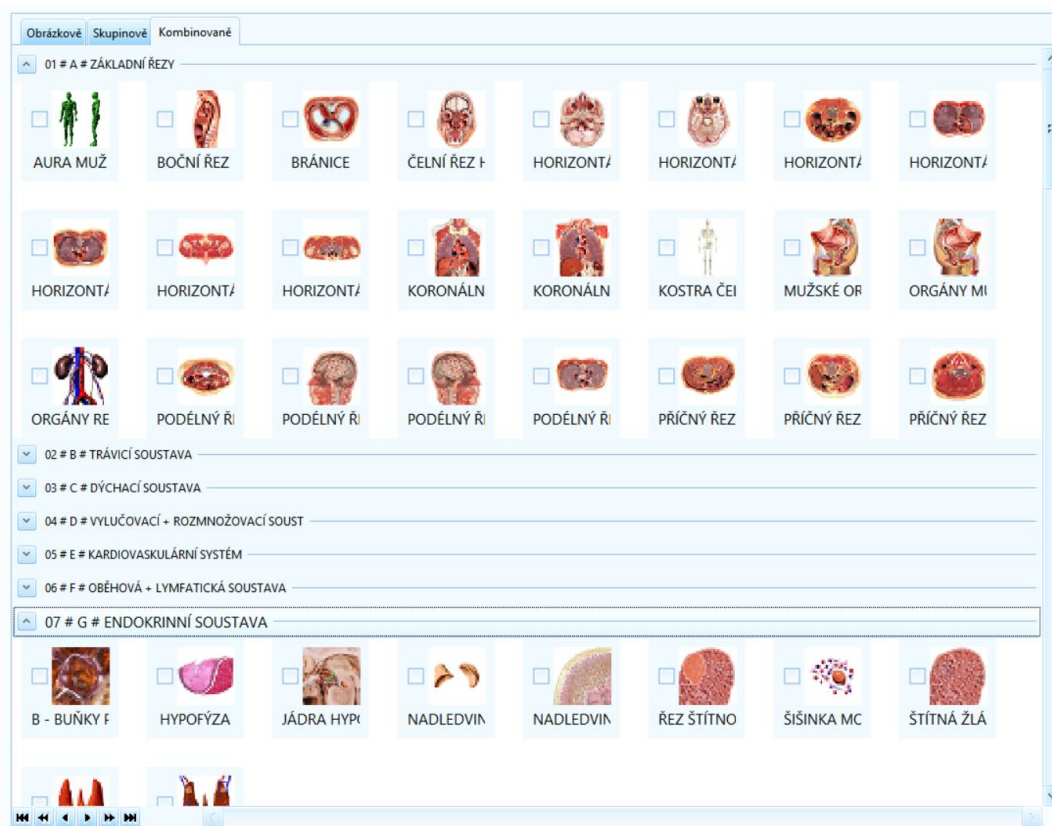

Postup a pravidla pro úpravu šablon je pro všechny typy náhledu stejný.

PRÁCE S DATY, FILTROVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁZNAMŮ

Software pracuje s velkým množstvím dat a záznamů. Tyto záznamy potřebujeme zobrazovat určitými způsoby, abychom diagnostický proces co nejvíce urychlili, zpřesnili a zjednodušili. V případě, že pracujeme s výsledky šablony „VŠE BEZ DNA A PATOGENŮ“, máme přibližně 480 ŘEZŮ. Mezi nimi musíme umět vyhledávat a porovnávat. Čím lépe umíme tyto záznamy třídit (filtrovat), tím přesněji a rychleji pracujeme.

Nejprve se neučíme třídit data v KARTOTÉCE, která je pro nás základem pro veškerou další práci. Definujeme si pojem tzv. vyfiltrování – myslíme tím proces, kterým zobrazíme pouze konkrétní potřebné záznamy, dle zadaných parametrů. Nejčastěji pracujeme se sloupčky DATUM, TYP, STAV, ENERGIE a OPTIMÁLNÍ DISPERZE.

Pokud pracujeme s klienty každý den, záznamů přibývá a není potřeba mít zobrazené všechny. Téměř vždy potřebujeme jen poslední čerstvé skeny, případně úplně první skeny pro porovnání změny stavu.

Doporučujeme tedy vyfiltrovat/schovat nepotřebné záznamy následujícími kroky:

1. DATUM – pokud provádíme diagnostiku, zpravidla nás zajímají poslední výsledky skenu. V kartotéce přejedeme šipkou myši na položku „DATUM“ v záhlaví tabulky, ale zatím NEKLIKÁME! Kolonka „DATUM“ se oranžově podsvítí a v pravém horním rožku se objeví malý symbol rozevíracího trojúhelníčku – klikneme na symbol levým tlačítkem – tím se zobrazí seznam dnů, kdy byli vytvořené jakékoliv záznamy.



The screenshot displays the 'KARTOTÉKA' (Card Index) interface. At the top, there are input fields for patient information: PŘÍJMENÍ (Malina), KŘESTNÍ JMÉNO (Josef), KATEGORIE KŘIVÉ (100), ADRESA (Třída Milu 5, Hradec Králové), E-MAIL, RH faktor (+), TELEFON, VĚK (44), and ROD (MUŽ). Below this is a search bar with 'Find' and 'Clear' buttons. The main part of the interface is a table with columns: DATUM, ŘEZ, TYP, SOUST., STAV, ENERGIE, and OPTIMÁLNÍ DISPER. The table lists various scans with their dates, types, and energy levels. To the right of the table, there are buttons for 'NOVÝ KLIENT', 'VYBRAT KLIENTA', 'ODSTRANIT KLIENTA', 'ANALÝZA', 'ZPĚT', 'SKENOVAT', 'TISK', and 'SROVNÁVACÍ ANALÝZA'. Below these buttons, there is a circular diagram showing a cross-section of a body with numbered points (1-12) and a line graph showing energy levels over time.

Poté si ticketovým čtverečkem vlevo zaškrtneme naši volbu (nejlépe poslední datum)

KARTOTÉKA
 PŘÍJMENÍ: Malina KŘESTNÍ JMÉNO: Josef KATEGORIE KRVĚ: (0)
 ADRESA: Třída Míru 5, Hradec Králové E-MAIL: RH faktor: +
 TELEFON: VĚK: 44 ROD: MUŽ

NOVÝ KLIENT ZPĚT
 VYBRAT KLIENTA SKENOVAT
 ODSTRANIT KLIENTA TISK
 ANALÝZA SROVNÁVACÍ ANALÝZA

DATUM	NÁHL. REZ	TYP	SOUST. STAV	ENERGIE	OPTIMÁLNÍ DISPER...
25.01.2026	AKUPUNKTURNÍ BODY PODLE VOLLA NA DUHOVCE, vlevo	S		72 %	1.011
26.01.2026	MALÁ TEPNKA, TEPÉNKA	S		68 %	1.01
26.01.2026	KYČELNÍ KLOUB, pravý	S		78 %	1.01
26.01.2026	TYČELNÝ A ČÍRY SÍTNICE	S		85 %	1.007
26.01.2026	ALVEOLOCYT	S		89 %	1.005
26.01.2026	AKUPUNKTURNÍ BODY PODLE VOLLA NA DUHOVCE, vpravo	S		74 %	1.005
26.01.2026	VENTILOVÁ SEKCE (CHLOPEŘI)	S		73 %	1.004
26.01.2026	KŮŽE OCHLUPENÉ ČÁSTI TĚLA	S		72 %	1.004
26.01.2026	POIVOVÁ TKÁŇ	S		83 %	1.002
26.01.2026	BUŇKA PŘEVODNÉ SOUSTAVY	S		75 %	1.002
26.01.2026	CENTRÁLNÍ EXOKRINNÍ BUŇKA	S		89 %	1.001
26.01.2026	PŘÍČNÝ ŘEZ PRŮDUŠNICÍ	S		81 %	0.998
26.01.2026	VATEROVA AMPULA (VÝVOD)	S		85 %	0.997

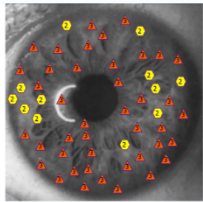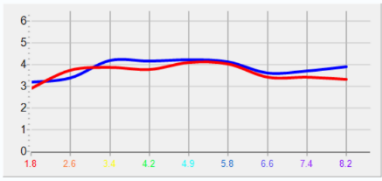



2. TYP – stejným způsobem upravíme položku „TYP“ – pokud máme nejen naskenované záznamy, ale také aplikované META-TERAPIE (případně jiné druhy záznamů), zúžíme výběr zatržením položky „Test“ (jednotlivé typy záznamů máme podrobněji popsane v kapitole VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH FRÁZÍ). Pokud jsme v minulosti používali metodu LOKALIZACE, zatrhneme také „Nudis“ – metodou LOKALIZACE se totiž záznam změní z typu „Test“ „S“ na „Nudis“ „L“.

KARTOTÉKA
 PŘÍJMENÍ: Malina KŘESTNÍ JMÉNO: Josef KATEGORIE KRVĚ: (0)
 ADRESA: Třída Míru 5, Hradec Králové E-MAIL: RH faktor: +
 TELEFON: VĚK: 44 ROD: MUŽ

NOVÝ KLIENT ZPĚT
 VYBRAT KLIENTA SKENOVAT
 ODSTRANIT KLIENTA TISK
 ANALÝZA SROVNÁVACÍ ANALÝZA

DATUM	NÁHL. REZ	TYP	SOUST. STAV	ENERGIE	OPTIMÁLNÍ DISPERSE
26.01.2026	ADRENOKORTIKOTROPNÍ HORMON	(AI)		85 %	0.937
26.01.2026	AKUPUNKTURNÍ BODY PODLE VOLLA NA DUHOVCE, vpravo	Test		74 %	1.005
26.01.2026	AKUPUNKTURNÍ BODY PODLE VOLLA NA DUHOVCE, vpravo MT	M		74 %	1.005
26.01.2026	AKUPUNKTURNÍ BODY PODLE VOLLA NA DUHOVCE, vlevo	S		72 %	1.011
26.01.2026	AKUPUNKTURNÍ BODY PODLE VOLLA NA DUHOVCE, vlevo MT	M		72 %	1.011
26.01.2026	AKUPUNKTURNÍ BODY PODLE VOLLA NA LEVÉM CHODIDLE	S		52 %	0.94
26.01.2026	AKUPUNKTURNÍ BODY PODLE VOLLA NA LEVÉM ZÁPĚSTÍ	S		72 %	0.948
26.01.2026	AKUPUNKTURNÍ BODY PODLE VOLLA NA PRAVÉM CHODIDLE	S		50 %	0.94
26.01.2026	AKUPUNKTURNÍ BODY PODLE VOLLA NA PRAVÉM ZÁPĚSTÍ	S		72 %	0.953
26.01.2026	AKUPUNKTURNÍ BODY PODLE VOLLA NA UŠNÍM BOLTČÍ, vlevo	S		73 %	0.995
26.01.2026	AKUPUNKTURNÍ BODY PODLE VOLLA NA UŠNÍM BOLTČÍ, vlevo MT	M		73 %	0.995
26.01.2026	AKUPUNKTURNÍ BODY PODLE VOLLA NA UŠNÍM BOLTČÍ, vpravo	S		74 %	0.977
26.01.2026	AKUPUNKTURNÍ BODY PODLE VOLLA NA UŠNÍM BOLTČÍ, vpravo MT	M		74 %	0.977

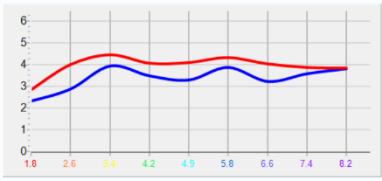3. STAV – Pokud u klienta začínáme s diagnostikou zdravotních problémů, je dobré se nejprve zaměřit na STAVY chronické („Chronic“) a akutní („Acute“). Ale POZOR – problém se může skrývat i v ŘEZU s normálním („Normal“) stavem, nicméně pravděpodobnost je nízká.

KARTOTÉKA
PRŮMENÍ: Malina
KŘESTNÍ JMÉNO: Josef
KATEGORIE KRVĚ: (0)
ADRESA: Třída Miru 5, Hradec Králové
E-MAIL:
RH faktor: +
TELEFON:
VĚK: 44
ROD: MUŽ

NOVÝ KLIENT
VYBRAT KLIENTA
ODSTRANIT KLIENTA
ANALÝZA
ZPĚT
SKENOVAT
TISK
SROVNÁVACÍ ANALÝZA

DATUM	NÁHL. REZ	TYP	SOUST.	STAV	ENERGIE	OPTIMÁLNÍ DISPERZE
26.01.2026 15:00:33	ACINÁRNÍ BUŇKY SLINIVKY BRŠNÍ	S		Acute	100%	0.895
26.01.2026 14:59:27	ADRENOKORTIKOTROPNÍ HORMON	S		Chronic	100%	0.937
26.01.2026 15:01:46	AKUPUNKURNÍ BODY PODLE VOLLA NA PRAVÉM CHODIDLE	S		Normal	100%	0.94
26.01.2026 14:53:48	ARTERIÁLNÍ CÉVNÍ TKÁŇ	S			89%	1.053
26.01.2026 14:56:06	ASTROCYTY	S			49%	0.968
26.01.2026 15:01:05	BLASTICKÁ BUŇKA (BLAST CELL)	S			100%	0.806
26.01.2026 14:51:19	BOČNÍ ŘEZ HRUDNÍKEM	S			67%	3
26.01.2026 14:59:41	BUŇKY FASIKULÁRNÍ OBLASTI	S			100%	0.899
26.01.2026 14:59:40	BUŇKY GLOMERULÁRNÍ OBLASTI	S			100%	0.865
26.01.2026 14:59:43	BUŇKY RETIKULÁRNÍ OBLASTI	S			100%	0.91
26.01.2026 14:56:05	BÍLÁ HMOTA	S			100%	1.101
26.01.2026 15:00:35	CHROMAFINNÍ BUŇKY DRÉNĚ NADLEDVIN	S			100%	0.959
26.01.2026 14:53:05	CHÁMOVODY	S			100%	0.826

4. OPTIMÁLNÍ DISPERZE – Konečným krokem si seřadíme výsledky podle hodnoty OPTIMÁLNÍ DISPERZE. Docílíme toho kliknutím na položku „OPTIMÁLNÍ DISPERZE“ – nikoli do trojúhelníčku v pravém horním rohu, ale třeba doprostřed kolonky. Prvním kliknutím řadíme výsledky od nejmenší hodnoty po největší, druhým kliknutím pořadí invertujeme opačně (to platí i pro ostatní sloupčky, a to nejen v KARTOTÉCE).

KARTOTÉKA
PRŮMENÍ: Malina
KŘESTNÍ JMÉNO: Josef
KATEGORIE KRVĚ: (0)
ADRESA: Třída Miru 5, Hradec Králové
E-MAIL:
RH faktor: +
TELEFON:
VĚK: 44
ROD: MUŽ

NOVÝ KLIENT
VYBRAT KLIENTA
ODSTRANIT KLIENTA
ANALÝZA
ZPĚT
SKENOVAT
TISK
SROVNÁVACÍ ANALÝZA

DATUM	NÁHL. REZ	TYP	SOUST.	STAV	ENERGIE	OPTIMÁLNÍ DISPER...
26.01.2026 15:00:31	SEKREČNÍ GRANULA	S			40%	0.405
26.01.2026 15:00:58	LYZOZOMY	S			100%	0.572
26.01.2026 14:52:30	MUCINÓZNÍ ŽLÁZY	S			100%	0.629
26.01.2026 14:58:51	VLASOVÁ KUTIKULA	S			100%	0.712
26.01.2026 14:59:33	SVALOVÉ BUŇKY	S			100%	0.762
26.01.2026 15:01:20	KMENOVÁ BUŇKA	S			100%	0.763
26.01.2026 14:55:00	ERYTROBLAST	S			100%	0.767
26.01.2026 15:01:05	BLASTICKÁ BUŇKA (BLAST CELL)	S			100%	0.806
26.01.2026 14:53:07	EJAKULAČNÍ KANÁL	S			100%	0.812
26.01.2026 14:52:58	MOČOVÁ TRUBICE	S			100%	0.825
26.01.2026 14:53:05	CHÁMOVODY	S			100%	0.826
26.01.2026 14:51:59	STĚNA TLUSTÉHO STŘEVA	S			100%	0.829
26.01.2026 14:52:55	STĚNA MOČOVÉHO MĚCHÝŘE	S			100%	0.837

Nyní máme základní filtrování hotové a můžeme přejít k diagnostice a aplikaci harmonizačních procesů. Výběr řezů máme zúžený z původních 478 na 109. Pokud ještě více potřebujeme výběr zúžit, např. za účelem větší přehlednosti a rychlejší práce, pokračujeme k dalšímu kroku:

5. (SOUSTAVA) – tento krok není povinný. V případě, kdy se nám to hodí, můžeme ze všech výsledků vyfiltrovat také jen konkrétní soustavu. (Např. máme hotový sken 478 položek šablonou „VŠE BEZ DNA A PATOGENŮ“ a vyfiltrujeme si jen „ZÁKLADNÍ ŘEZY“ – poté pracujeme pouze se 24 výsledky namísto původních 478)

Sloupečky také můžeme zmenšovat nebo zvětšovat. Např. indikátory ENERGIE a OPTIMÁLNÍ DISPERZE jsou poměrně široké – na úkor toho se nám názvy ŘEZŮ shlukují do více řádků. Sloupečky můžeme zúžit/rozšířit tažením jejich okrajů v hlavičce tabulky (když přejedete myškou na okraj sloupečku, objeví se symbol posuvníku):

KARTOTÉKA
PRŮMENÍ: Malina
ADRESA: Třída Minu 5, Hradec Králové
TELEFON:
KŘESTNÍ JMÉNO: Josef
E-MAIL:
VĚK: 44
KATEGORIE KRVĚ: (0)
RH faktor: +
ROD: MUŽ

NOVÝ KLIENT
VYBRAT KLIENTA
ODSTRANIT KLIENTA
ANALÝZA
ZPĚT
SKENOVAT
TISK
SROVNÁVACÍ ANALÝZA

DATUM	NÁHL.	ŘEZ	TYP	S...	S...	ENERGIE	OPT...
26.01.2026 15:00:51		SEKREČNÍ GRANULA	S			40 %	0,405
26.01.2026 15:00:58		LYZOSOMY	S			46 %	0,572
26.01.2026 14:52:38		MUCINÓZNÍ ŽLÁZY	S			38 %	0,629
26.01.2026 14:58:51		VLASOVÁ KUTIKULA	S			100 %	0,712
26.01.2026 14:59:33		SVALOVÉ BUŇKY	S			53 %	0,762
26.01.2026 15:01:20		KMENOVÁ BUŇKA	S			45 %	0,763
26.01.2026 14:55:08		ERYTROBLAST	S			33 %	0,767
26.01.2026 15:01:05		BLASTICKÁ BUŇKA (BLAST CELL)	S			36 %	0,806
26.01.2026 14:53:07		EJAKULAČNÍ KANÁL	S			47 %	0,812
26.01.2026 14:52:58		MOČOVÁ TRUBICE	S			38 %	0,825
26.01.2026 14:53:05		CHÁMOVODY	S			38 %	0,826
26.01.2026 14:51:59		STĚNA TLUSTÉHO STŘEVA	S			64 %	0,829
26.01.2026 14:52:55		STĚNA MOČOVÉHO MĚCHÝŘE	S			50 %	0,837

Takto jsme si zúžili všechny sloupečky vpravo od ŘEZU.

Všeobecně tedy můžeme filtrování, seřazování, rozšíření a zúžení sloupečků používat téměř na všech obrazovkách Oberonu (na obrazovce SKENOVÁNÍ, DIAGNOSTIKY, ZPRÁV aj.). Proto je dobré si tyto dodatečné možnosti osvojit a používat dle potřeby.

ÚPRAVA FILTROVÁNÍ:

Nyní si vysvětlíme zrušení a úpravu použitých filtrů.

Pokud potřebujeme zrušit veškeré filtrování najednou (KARTOTÉKA opět zobrazí všechny záznamy, vhodné např. při změně klienta), docílíme toho kliknutím na malý červený křížek v levém dolním rohu tabulky záznamů.

KARTOTÉKA

PŘÍJMENÍ: Malina

KŘESTNÍ JMÉNO: Josef

KATEGORIE KRVĚ: (0)

ADRESA: Třída Míru 5, Hradec Králové

E-MAIL:

RH faktor: +

TELEFON:

VĚK: 44

ROD: MUŽ

Enter text to search...

Find

Clear

DATUM	NÁHL.	ŘEZ	TYP	SOUST.	STAV	ENERGIE	OPTIMÁLNÍ DISPER...
26.01.2026 15:00:58		LYZOMY	S			9%	0,572
26.01.2026 14:52:38		MUCINÓZNÍ ŽLÁZY	S			10%	0,629
26.01.2026 14:58:51		VLASOVÁ KUTIKULA	S			10%	0,712
26.01.2026 14:59:33		SVALOVÉ BUŇKY	S			10%	0,762
26.01.2026 15:01:20		KMENOVÁ BUŇKA	S			15%	0,763
26.01.2026 14:55:08		ERYTHROBLAST	S			10%	0,767
26.01.2026 15:01:05		BLASTICKÁ BUŇKA (BLAST CELL)	S			10%	0,806
26.01.2026 14:53:07		EJAKULAČNÍ KANÁL	S			17%	0,812
26.01.2026 14:52:58		MOČOVÁ TRUBICE	S			10%	0,825
26.01.2026 14:53:05		CHÁMOVODY	S			10%	0,826
26.01.2026 14:51:59		STĚNA TLUSTÉHO STŘEVA	S			10%	0,829
26.01.2026 14:52:55		STĚNA MOČOVÉHO MĚCHÝŘE	S			10%	0,837
26.01.2026 14:55:00		RETIKULOCYT	S			10%	0,84

1 of 109

Customize...

NOVÝ KLIENT

ZPĚT

VYBRAT KLIENTA



SKENOVAT

ODSTRANIT KLIENTA

TISK

ANALÝZA

SROVNÁVACÍ ANALÝZA

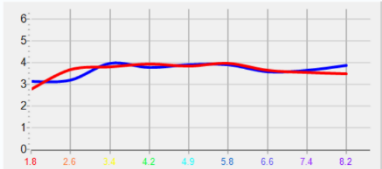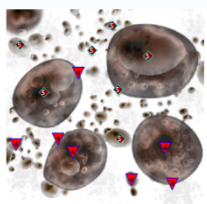

Aktuálně nastavené filtrování lze i dopravit. Například dle popsaného kroku 5 při filtrování SOUSTAVY změníme vyfiltrované „ZÁKLADNÍ ŘEZY“ na „TRÁVICÍ SOUSTAVU“ – opět nejprve klikneme levým tlačítkem na rozevírací trojúhelníček daného sloupce:

KARTOTÉKA

PŘÍJMENÍ: Malina

KŘESTNÍ JMÉNO: Josef

KATEGORIE KRVĚ: (0)

ADRESA: Třída Míru 5, Hradec Králové

E-MAIL:

RH faktor: +

TELEFON:

VĚK: 44

ROD: MUŽ

Enter text to search...

Find

Clear

DATUM	NÁHL.	ŘEZ	TYP	SOUST.	STAV	ENERGIE	OPTIMÁLNÍ DISPER...
25.01.2026 19:00:45		ČELNÍ ŘEZ HLAVOU	S			10%	1,53
25.01.2026 19:01:02		PODÉLNÝ ŘEZ DUTINOU BRÁŠNĚVÝCH KOSTÍ	S			10%	2,348
25.01.2026 19:01:03		HORIZONTÁLNÍ ŘEZ PÁNEVNÍ DUTINOU v úrovni prostaty	S			10%	2,519
25.01.2026 19:01:13		MUŽSKÉ ORGÁNY MALE PÁNVE, pravá strana	S			10%	2,595
25.01.2026 19:00:51		HORIZONTÁLNÍ ŘEZ TRUPEM v úrovni ramenních kloubů	S			10%	2,59
25.01.2026 19:00:49		KORONÁLNÍ ŘEZ NA ÚROVNI DUTÉ ŽILY, pohled zepředu	S			10%	3
25.01.2026 19:00:48		KORONÁLNÍ ŘEZ HRUDNÍKEM v úrovni vzestupné části aorty - pohled zepředu	S			10%	3
25.01.2026 19:00:39		PODÉLNÝ ŘEZ HLAVOU, vpravo	S			14%	3
25.01.2026 19:00:40		PODÉLNÝ ŘEZ HLAVOU, vlevo	S			10%	3
25.01.2026 19:00:44		HORIZONTÁLNÍ PRŮŘEZ HLAVOU v úrovni čtvrté komory	S			10%	3
25.01.2026 19:01:08		BOČNÍ ŘEZ HRUDNÍKEM	S			10%	3

1 of 11

Customize...

NOVÝ KLIENT

ZPĚT

VYBRAT KLIENTA



SKENOVAT

ODSTRANIT KLIENTA

TISK

ANALÝZA

SROVNÁVACÍ ANALÝZA

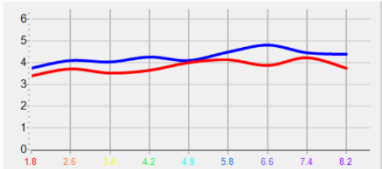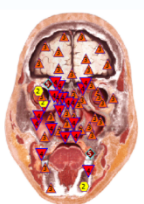

A poté zrušíme filtrování pouze tohoto daného sloupce „SOUSTAVA“ kliknutím na řádek „All“.

KARTOTÉKA

PŘÍJMENÍ

Malina

KŘESTNÍ JMÉNO

Josef

KATEGORIE KRVĚ

I(0)

ADRESA

Třída Míru 5, Hradec Králové

E-MAIL

RH faktor

+

TELEFON

VĚK

44

ROD

MUŽ

Enter text to search...

Find

Clear

DATUM	NÁHL...	REZ	STAV	ENERGIE	OPTIMÁLNÍ DISPER...
25.01.2026 19:00:45		ČELNÍ REZ HLAVOU	(All)	86 %	1,53
25.01.2026 19:01:02		PODÉLNÝ REZ DUTINOU BRÁNI	01 # A # ZAKLADNÍ REZ	86 %	2,348
25.01.2026 19:01:03		HORIZONTÁLNÍ REZ PÁNEVNÍ	S	84 %	2,519
25.01.2026 19:01:13		MUŽSKÉ ORGÁNY MALÉ PÁNEV, pravá strana	S	84 %	2,595
25.01.2026 19:00:51		HORIZONTÁLNÍ REZ TRUPEM v úrovni ramenních kloubů	S	86 %	2,96
25.01.2026 19:00:49		KORONÁLNÍ REZ NA ÚROVNI DUTÉ ŽILY, pohled zepředu	S	86 %	3
25.01.2026 19:00:40		KORONÁLNÍ REZ HRUDNÍKEM v úrovni vzestupné části aorty - pohled zepředu	S	86 %	3
25.01.2026 19:00:39		PODÉLNÝ REZ HLAVOU, vpravo	S	84 %	3
25.01.2026 19:00:40		PODÉLNÝ REZ HLAVOU, vlevo	S	86 %	3
25.01.2026 19:00:44		HORIZONTÁLNÍ PRŮŘEZ HLAVOU v úrovni čtvrté komory	S	86 %	3
25.01.2026 19:01:08		BOČNÍ REZ HRUDNÍKEM	S	87 %	3

☒ (STAV = Acute) Or (STAV = Chronic) And (DOUSTAVA = 01 # A # ZAKLADNÍ REZ) And (DATUM = 25.01.2026)

Customize...

1 of 11

NOVÝ KLIENT

ZPĚT

VYBRAT KLIENTA

SKENOVAT

ODSTRANIT KLIENTA

TISK

ANALÝZA

SROVNÁVACÍ ANALÝZA

Nyní můžeme zvolit jiný parametr k filtrování nebo nechat zobrazené vše.

KARTOTÉKA

PŘÍJMENÍ

Malina

KŘESTNÍ JMÉNO

Josef

KATEGORIE KRVĚ

I(0)

ADRESA

Třída Míru 5, Hradec Králové

E-MAIL

RH faktor

+

TELEFON

VĚK

44

ROD

MUŽ

Enter text to search...

Find

Clear

DATUM	NÁHL...	REZ	STAV	ENERGIE	OPTIMÁLNÍ DISPER...
25.01.2026 19:10:34		(Custom...)		86 %	1,091
25.01.2026 19:09:17		01 # A # ZAKLADNÍ REZ		86 %	1,1
25.01.2026 19:14:36		02 # B # TRÁVICÍ SOUSTAVA		86 %	1,141
25.01.2026 19:07:37		03 # C # DÝCHAČÍ SOUSTAVA		84 %	1,151
25.01.2026 19:13:36		04 # D # VYLUCOVACÍ - ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA		84 %	1,213
25.01.2026 19:07:32		05 # E # KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM		86 %	1,241
25.01.2026 19:05:16		06 # F # OBĚHOVÁ - LYMFATICKÁ SOUSTAVA		86 %	1,284
25.01.2026 19:08:16		07 # G # NERVOVÁ SOUSTAVA		86 %	1,313
25.01.2026 19:06:41		08 # H # KOSTERNÍ - SVALOVÁ SOUSTAVA		86 %	1,336
25.01.2026 19:14:42		09 # I # SMYSLOVÁ SOUSTAVA		86 %	1,341
25.01.2026 19:06:15		10 # J # MIKROSKROVENÍ		86 %	1,355
25.01.2026 19:00:45		11 # K # ENERGETICKÉ KANÁLY		86 %	1,327
25.01.2026 19:00:45		12 # L # ENERGETICKÉ KANÁLY		86 %	1,53

☒ (STAV = Acute) Or (STAV = Chronic) And (DATUM = 25.01.2026)

Customize...

75 of 109

NOVÝ KLIENT

ZPĚT

VYBRAT KLIENTA

SKENOVAT

ODSTRANIT KLIENTA

TISK

ANALÝZA

SROVNÁVACÍ ANALÝZA

Tímto způsobem měníme vždy pouze filtrování daného sloupce. Ostatních filtrování (v tomto případě DATUM, TYP a STAV) se změna netýká a jejich nastavení zůstává.

Poslední nezbytnou funkcí při nahlížení na záznamy je vyhledávání. Tuto funkci jsme si již stručně uvedli v kapitole o META-TERAPIÍCH.

Na chvíli se zaměříme na řádek v záhlaví tabulky, kde je napsáno „Enter the text to search...“ – definujeme si ho jako „Vyhledávací pole“. K tomuto vyhledávacímu poli patří tlačítka „Find“ a „Clear“.

KARTOTÉKA

PŘÍJMENÍ: Malina KŘESTNÍ JMÉNO: Josef KATEGORIE KRVE: (0)

ADRESA: Třída Milu 5, Hradec Králové E-MAIL: RH faktor: +

TELEFON: VĚK: 44 ROK: MUŽ

Enter text to search... Find Clear

DATUM	NAHL...	REZ...	TYP	SOUST...	STAV	ENERGIE	OPTIMÁLNÍ DISPER...
25.01.2026 19:18:02		KOLAGEN	S			79 %	0,253
26.01.2026 15:01:17		KOLAGEN	S			78 %	0,255
25.01.2026 19:18:31		HISTAMIN	S			77 %	0,261
26.01.2026 15:01:35		HISTAMIN	S			77 %	0,263
26.01.2026 15:01:28		KORTIZOL	S			79 %	0,269
25.01.2026 19:18:33		GEM	S			79 %	0,276
26.01.2026 15:01:33		HEPARIN	S			80 %	0,276
26.01.2026 15:01:36		GEM	S			79 %	0,276
25.01.2026 19:18:19		KORTIZOL	S			79 %	0,277
25.01.2026 19:18:28		HEPARIN	S			80 %	0,278
25.01.2026 19:18:15		ALDOSTERON	S			78 %	0,279
26.01.2026 15:01:26		ALDOSTERON	S			78 %	0,28
25.01.2026 19:18:17		TESTOSTERON	S			78 %	0,287
26.01.2026 15:01:27		TESTOSTERON	S			78 %	0,295

NOVÝ KLIENT ZPĚT

VYBRAT KLIENTA SKENOVAT

ODSTRANIT KLIENTA TISK

ANALÝZA SROVNÁVACÍ ANALÝZA

3D molecular model and line graph showing energy levels over time.

Do pole můžeme vepisovat název, který hledáme. Postupnou prací se softwarem Oberon si zapamatujete i názvy jednotlivých ŘEZŮ. Tím se Vám budou i snadněji vyhledávat.

Některé ŘEZY se těžko kategorizují, a proto se mohou nacházet v různých SOUSTAVÁCH. Např. „LEDVINOVÉ CÉVY“ se nachází v kardiovaskulárním systému a „PŘÍVODNÉ TEPNY LEDVIN“ ve vylučovací soustavě. Použitím vyhledávacího pole můžeme během chvílky najít veškeré potřebné záznamy i bez dodatečného filtrování a hledání v systému SOUSTAV.

Zde je příklad: Na následujícím obrázku máme zapnutý pouze filtr DATUM, abychom omezili výsledky na poslední sken klienta. Dále si do vyhledávacího pole vepíšeme základ slova ledvina – tedy „ledvin“ – tím pokryjeme všechny variace slova ledvina a zobrazíme všechny dostupné záznamy:

Když potřebujeme vyhledat jinou frázi nebo vyhledávací filtr vypnout, klikneme na tlačítko „Clear“, na pravé straně vyhledávacího pole.

Tlačítko „Find“ pochází ze starší verze softwaru a není k ničemu potřeba. Ihned po vepsání textu se nám záznamy automaticky třídí.

Tento postup lze aplikovat na všech obrazovkách, kde se vyhledávací pole nachází. A NEZAPOMEŇTE – vždy po dokončení procesu (diagnostiky, aplikace terapií) vepsanou frází odmazat tlačítkem „Clear“ nebo ručně klávesou „Delete“ (nebo „Backspace“) na Vašem počítači!

ODSTRANĚNÍ NEPOTŘEBNÝCH ZÁZNAMŮ Z KARTOTÉKY:

Pokud každodenně používáme META-TERAPIE, hromadí se v KARTOTÉCE velké množství nevyužitelných záznamů. Jelikož je pro srovnávání zdravotního stavu potřebný záznam SKENU „S“, je dobré záznamy META-TERAPIÍ „M“ čas od času odstranit. Prozatím software automaticky mazat záznamy META-TERAPIÍ neumí (funkci vyvíjíme a bude brzy do softwaru doplněna).

Samozřejmě se dají odmazat i nadbytečné záznamy SKENŮ „S“, pokud je nezachovááme z konkrétních důvodů. Pro dlouhodobé srovnání stačí ponechat jeden SKEN z každého týdne nebo 14 dnů.

Promazávání nepotřebných záznamů zpřehlední vyhledávání v KARTOTÉCE, zrychluje vnitřní chod softwaru, a navíc zamezuje případným chybám v databázi. Oberon zpracovává velké množství dat najednou – to je náročné pro většinu typů databází, a proto se může vyskytnout chyba.

POSTUP pro odstranění záznamů META-TERAPIÍ (i jiných typů záznamů):

1. V KARTOTÉCE seřadíme záznamy dle TYPU – kliknutím do hlavičky sloupce TYP

KARTOTÉKA

PRŮJMENÍ: Malina KŘESTNÍ JMÉNO: Josef KATEGORIE KRVĚ: (0)

ADRESA: Třída Míru 5, Hradec Králové E-MAIL: RH faktor: +

TELEFON: VĚK: 44 ROD: MUŽ

NOVÝ KLIENT ZPĚT



VYBRAT KLIENTA SKENOVAT

ODSTRANIT KLIENTA TISK

ANALÝZA SROVNÁVACÍ ANALÝZA

DATUM	NÁHL.	ŘEZ	TYP	DOUST...	STAV	ENERGIE	OPTIMÁLNÍ DISPER...
27.04.2026 19:40:56		PAPILA JAZYKA	S			62 %	0,817
26.01.2026 14:59:22		KOSTNÍ TKÁŇ	S			75 %	0,818
27.04.2026 19:45:13		RETIKULOCYT	S			100 %	0,819
26.01.2026 14:52:47		PODÉLNÝ ŘEZ PRAVOU LEDVINOU, pohled zepředu	S			51 %	0,823
25.01.2026 19:04:07		MOČOVÁ TRUBICE	S			100 %	0,825
26.01.2026 14:52:58		MOČOVÁ TRUBICE	S			100 %	0,825
27.04.2026 19:41:29		INTERLOBULÁRNÍ ŽLUČOVOD	S			64 %	0,825
25.01.2026 19:04:21		CHÁMOVODY	S			100 %	0,826
26.01.2026 14:53:05		CHÁMOVODY	S			100 %	0,826
27.04.2026 19:41:22		JATERNÍ TKÁŇ	S			79 %	0,826
27.04.2026 19:45:14		ERYTROCYTY (ČERVENÉ KRVINKY)	S			39 %	0,826
27.04.2026 19:42:44		EJAKULAČNÍ KANÁL	S			100 %	0,828
25.01.2026 19:02:19		STĚNA TLUSTÉHO STŘEVA	S			64 %	0,829
26.01.2026 14:51:59		STĚNA TLUSTÉHO STŘEVA	S			65 %	0,829

216 of 1243

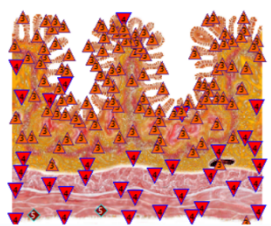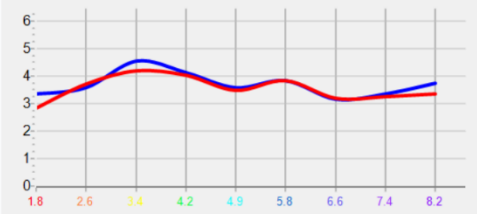2. Po seřazení/vyfiltrování je označíme – můžeme k tomu použít dříve zmíněné metody:
 - „SHIFT + kliknutí myškou“ – označí všechny položky od první modře označené až k té, na kterou klikneme myší
 - „CTRL + kliknutí myškou“ – držíme klávesu a každé kliknutí myší nám označí novou položku
 - „CTRL + A“ - označení všech položek, nejlepší a nejrychlejší volba, pokud máte vyfiltrované pouze META-TERAPIE bez jiných záznamů

3. V našem příkladu použijeme metodu s klávesou SHIFT pro hromadné označení. Klikneme na úplně první záznam META-TERAPIE, aby se nám modře označil.

KARTOTÉKA
PRŮMENÍ: Malina KŘESTNÍ JMÉNO: Josef KATEGORIE KRVÉ: (0)
ADRESA: Trida Míru 5, Hradec Králové E-MAIL: RH faktor: +
TELEFON: VĚK: 44 ROD: MUŽ

NOVÝ KLIENT ZPĚT
VYBRAT KLIENTA SKENOVAT
ODSTRANIT KLIENTA TISK
ANALÝZA SROVNÁVACÍ ANALÝZA

DATUM	NÁHL.	ŘEZ	T...	SOUST...	STAV	ENERGIE	OPTIMÁLNÍ DISPERZE
27.04.2026 19:45:54		MEDIÁLNÍ POVRCH MOZKU, pravá strana	S			79 %	2,464
27.04.2026 19:45:56		MOZKOVÉ KOMORY, pohled shora	S			80 %	2,125
27.04.2026 19:45:58		LÍČNÍ NERV, levá strana	S			76 %	2,047
27.04.2026 19:46:00		MIŠNÍ NERV, pohled zprava	S			63 %	2,187
27.04.2026 19:46:02		MIŠNÍ NERV, pohled zleva	S			79 %	2,038
16.06.2026 12:10:43		STOLIČKA	S			68 %	0,873
17.06.2026 14:55:14		TRICHINELLA SPIRALIS	S			65 %	0,679
26.01.2026 15:28:52		AKUPUNKURNÍ BODY PODLE VOLLA NA UŠNÍM BOLTČI, vpravo MT	M			74 %	0,977
26.01.2026 15:28:53		AKUPUNKURNÍ BODY PODLE VOLLA NA UŠNÍM BOLTČI, vlevo MT	M			73 %	0,995
26.01.2026 15:28:54		AKUPUNKURNÍ BODY PODLE VOLLA NA DUCHOVCE, vpravo MT	M			74 %	1,005
26.01.2026 15:28:54		AKUPUNKURNÍ BODY PODLE VOLLA NA DUHOVCE, vlevo MT	M			72 %	1,011
27.01.2026 16:06:56		JATERNÍ TKÁŇ MT	M			47 %	0,919
27.04.2026 16:40:32		BUŇKY KRVÉ META-TERAPIE: SKALNÍ VODA	M			65 %	1,402


4. Posuneme se dolů až na konec seznamu těchto záznamů (kolečkem myši nebo posuvníkem v pravé části tabulky – ale nesmíme omylem kliknout nikam jinak, aby nám zůstala označená první položka v seznamu), držíme klávesu SHIFT a klikneme na poslední záznam k odstranění, poté klávesu SHIFT pustíme. Tím modře označíme všechny záznamy META-TERAPIÍ k odstranění.

KARTOTÉKA
PRŮMENÍ: Malina KŘESTNÍ JMÉNO: Josef KATEGORIE KRVÉ: (0)
ADRESA: Trida Míru 5, Hradec Králové E-MAIL: RH faktor: +
TELEFON: VĚK: 44 ROD: MUŽ

NOVÝ KLIENT ZPĚT
VYBRAT KLIENTA SKENOVAT
ODSTRANIT KLIENTA TISK
ANALÝZA SROVNÁVACÍ ANALÝZA

DATUM	NÁHL.	ŘEZ	T...	SOUST...	STAV	ENERGIE	OPTIMÁLNÍ DISPERZE
27.04.2026 19:45:54		MEDIÁLNÍ POVRCH MOZKU, pravá strana	S			79 %	2,464
27.04.2026 19:45:56		MOZKOVÉ KOMORY, pohled shora	S			80 %	2,125
27.04.2026 19:45:58		LÍČNÍ NERV, levá strana	S			76 %	2,047
27.04.2026 19:46:00		MIŠNÍ NERV, pohled zprava	S			63 %	2,187
27.04.2026 19:46:02		MIŠNÍ NERV, pohled zleva	S			79 %	2,038
16.06.2026 12:10:43		STOLIČKA	S			68 %	0,873
17.06.2026 14:55:14		TRICHINELLA SPIRALIS	S			65 %	0,679
26.01.2026 15:28:52		AKUPUNKURNÍ BODY PODLE VOLLA NA UŠNÍM BOLTČI, vpravo MT	M			74 %	0,977
26.01.2026 15:28:53		AKUPUNKURNÍ BODY PODLE VOLLA NA UŠNÍM BOLTČI, vlevo MT	M			73 %	0,995
26.01.2026 15:28:54		AKUPUNKURNÍ BODY PODLE VOLLA NA DUCHOVCE, vpravo MT	M			74 %	1,005
26.01.2026 15:28:54		AKUPUNKURNÍ BODY PODLE VOLLA NA DUHOVCE, vlevo MT	M			72 %	1,011
27.01.2026 16:06:56		JATERNÍ TKÁŇ MT	M			47 %	0,919
27.04.2026 16:40:32		BUŇKY KRVÉ META-TERAPIE: SKALNÍ VODA	M			65 %	1,402

5. Jestliže jsou záznamy v pořádku modře označeny (doporučujeme rychlým přelístováním zkontrolovat, pokud je to možné), odstraníme je klávesou „DELETE“ na klávesnici Vašeho počítače. Závěrem potvrdíme tlačítkem „OK“.

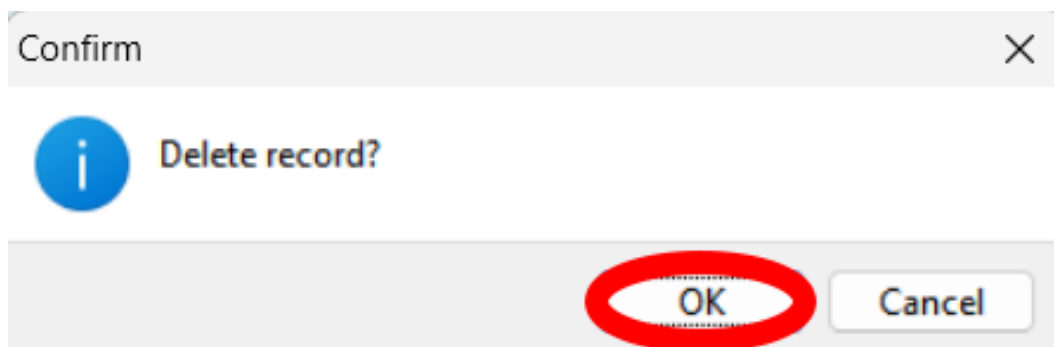

Alternativní, rychlejší metodou pro odstranění je vyfiltrování záznamů „M“ a kombinace kláves „CTRL + A“ - označení všech položek. Tzv. vyfiltrování záznamů jsme si podrobně popsali v předchozích kapitolách.

Nyní si krátce popíšeme POSTUP pro odstranění všech záznamů TYPU „M“ a „V“ (META-TERAPIÍ A VEGETO-TESTŮ):

1. Ukazatelem myši přejedeme nad hlavičku sloupce, ze kterého potřebujeme filtrovat konkrétní data (v našem příkladu je to sloupec TYP a vyfiltrujeme si všechny záznamy VEGETO-TESTŮ a META-TERAPIÍ). Kolonka s názvem TYP se podbarví do žluto-oranžové barvy, a v jejím pravém horním rohu se objeví maličký symbol, připomínající malý obrácený trojúhelník.



2. Klikneme na tento symbol trojúhelníčku – objeví se zatrhávací seznam s možnostmi. Zatržením jednotlivých ticketových čtverečku říkáme programu, že pouze zvolené záznamy se budou zobrazovat – nyní označíme „Meta Terapie“ „M“ a „Vegeto Testy“ „V“.
3. Tím zobrazíme u vybraného klienta vše, kromě SKENŮ „S“. K porovnání zdravotního stavu pracujeme se SKENY „S“, všechny tyto ostatní záznamy můžeme bez starostí smazat (pokud nemáme konkrétní důvody k ponechání). Klikneme na kterýkoli záznam v kartotéce, aby se modře označil. Poté zmáčkne na klávesnici kombinaci kláves „CTRL“ + „A“. Tím se modře označí všechny záznamy v tabulce.
4. Pokud jsou označeny všechny záznamy, stiskneme na klávesnici počítače tlačítko „DELETE“ a potvrdíme hlášku tlačítkem „OK“.
5. HOTOVO. Záznamy jsou pryč! Aby se opět v pořádku zobrazil zbytek záznamů, zrušíme filtrování kliknutím na symbol křížku ve spodní levé části formuláře.

ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ A POKROČILÁ SROVNÁVACÍ ANALÝZA

V této kapitole se naučíme naměřené SKENY vyhodnocovat. Jakmile klient podstoupí doporučené 6ti týdenní, důsledné celkové terapie (tedy pravidelné aplikování META a jiných terapií nabízených Oberonem, změny životního stylu, jídelníčku apod.), již půjdou vidět výsledky (ideálně k lepšímu).

Ukážeme si nejdříve jednoduchou metodu porovnání indexu OPTIMÁLNÍ DISPERZE přímo v KARTOTÉCE. NEMUSÍME takto porovnávat všechny jednotlivé ŘEZY, nicméně je důležité vědět, jak poznat změny k lepšímu – tzv. změny zlepšení stavu. Nejdůležitějším, dlouhodobým ukazatelem pro srovnání těchto výsledků je index OD.

Např. se u klienta zaměřujeme na KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM a problémy spojené se srdcem. Při jednoduchém porovnávání SKENŮ (nyní zvolíme a vyhledáme „TKÁŇ AORTY“), seřadíme tyto záznamy chronologicky (od nejstaršího po nejnovější) a poté klikneme na DATUM v hlavičce tabulky. Následně se zaměříme na jejich indexy OD:

tkáň aorty		Find		Clear				
DATUM	0	NÁHL...	ŘEZ	TYP	SOUS...	STAV	ENERGIE	OPTIMÁLNÍ DISPERZE
25.01.2026 19:05:20		TKÁŇ AORTY	S			63 %	1.089	
26.01.2026 14:53:37		TKÁŇ AORTY	S			63 %	1.09	
27.04.2026 19:43:23		TKÁŇ AORTY	S			69 %	1.074	
17.06.2026 15:49:25		TKÁŇ AORTY	S			37 %	1.141	

Cílem správné terapie (včetně změny životního stylu a jídelníčku) je časem vyrovnávat u klienta indexy OD ke konstantě 1,2. Nemusíte se bát náhlé změny indexu OD ze dne na den, nebo také z týdne na týden. Zaměřujeme se na změnu indexu OD v průběhu alespoň **6ti týdnů** až několika **měsíců**.

Následné příkladné srovnání je v průběhu několika měsíců, a změnilo se následně:

Dne 25. ledna – index OD = 1.089

Dne 17. června – index OD = 1.141

Změna indexu OD nemusí být vždy kladná (přibližující se konstantě 1,2). Např. pokud tělo detoxikujeme, může se index OD nejdříve snížit (oddálit konstantě 1,2 – jak je vidět i v našem příkladu na obrázku výše, u záznamu z 27. dubna), než se následně začne zlepšovat.

Proto stačí ponechat jeden SKEN za týden - 14 dnů, ostatní nejsou potřeba a můžeme je spolu s META-TERAPIEMI průběžně odmazávat.

POKROČILÁ SROVNÁVACÍ ANALÝZA:

SROVNÁVACÍ ANALÝZOU není myšlena jen metoda, ale celá samostatná funkce Oberonu. Na obrazovku SROVNÁVACÍ ANALÝZY se dostaneme hned několika způsoby – podle toho, kde v softwaru se aktuálně nacházíme:

- z KARTOTÉKY – tlačítkem „SROVNÁVACÍ ANALÝZA“

KARTOTÉKA

PRŮMENÍ: Malina KŘESTNÍ JMÉNO: Josef KATEGORIE KRVE: (0)

ADRESA: Třída Miru S, Hradec Králové E-MAIL: RH faktor: *

TELEFON: VĚK: 44 ROD: MUŽ

Enter text to search... Find Clear

DATUM	NÁHL.	ŘEZ	TYP	S...	STAV	ENERGIE	OPTL...	0
17.06.2026 15:49:23		TKÁŇ AORTY	S			97 %		1,141
17.06.2026 15:47:37		PARANAZÁLNÍ DUTINY (VEDLEJŠÍ DUTINY NOSNÍ), pohled zprava	S			70 %		1,143
17.06.2026 15:53:04		STŘEDNÍ SAGITÁLNÍ ŘEZ KRČNÍ PÁTEŘI, pohled zprava	S			77 %		1,147
17.06.2026 15:55:28		KLOUBNÍ VAZY, CHODIDLO LEVÉ	S			51 %		1,147
17.06.2026 15:54:29		PŘÍČNÝ ŘEZ PRAVOU HOLENNÍ KOSTI	S			75 %		1,148
17.06.2026 15:52:57		PÁTEŘ, pohled z pravé strany	S			60 %		1,149
17.06.2026 15:56:20		OČNÍ POZADÍ, zprava	S			29 %		1,156
17.06.2026 15:55:27		KLOUB CHODIDLA, levý mediální pohled	S			52 %		1,158
17.06.2026 15:55:22		KLOUB CHODIDLA, vpravo zespodu	S			74 %		1,162
17.06.2026 15:54:33		KLOUB CHODIDLA, vlevo shora	S			80 %		1,165
17.06.2026 15:58:41		VATEROVO-PACINHO TĚLÍSKO	S			82 %		1,169
17.06.2026 15:53:01		PÁTEŘ, pohled zepředu	S			80 %		1,171
17.06.2026 15:51:41		ŠTÍTNÁ ŽLÁZA A PŘÍŠTÍTNÁ TĚLÍSKA	S			70 %		1,177

17.06.2026 (DATUM = 17.06.2026) Customize...



233 of 479

NOVÝ KLIENT ZPĚT

VYBRAT KLIENTA SKENOVAŤ

ODSTRANIT KLIENTA TISK


ANALÝZA **SROVNÁVACÍ ANALÝZA**

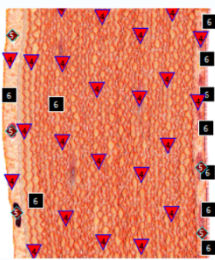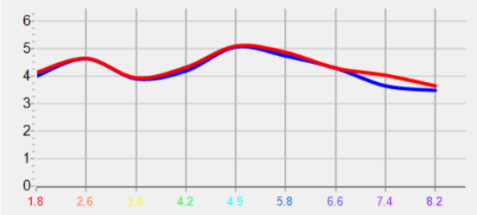- z obrazovky ANALÝZY

☐ Zobrazit popisky ☐ Podrobně ☐ Zobrazit obrys ložiska

TKÁŇ AORTY

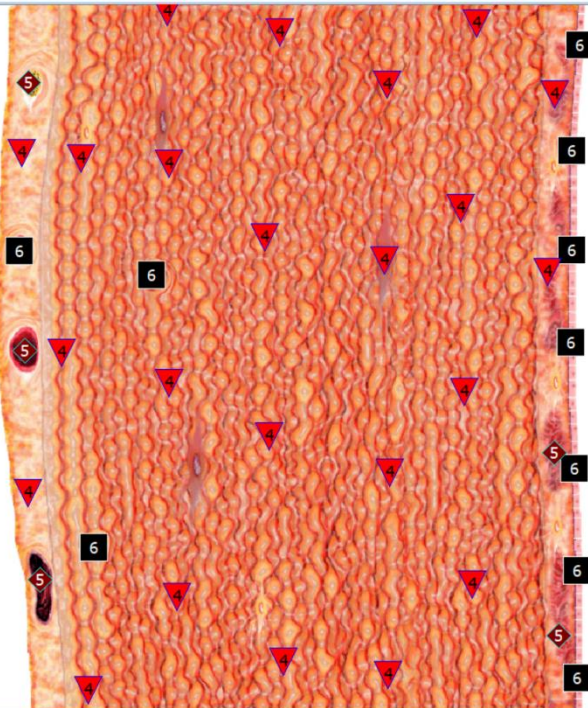

ZPĚT

TEST

SROVNÁVACÍ ANALÝZA


META-TERAPIE

VÝROBA PREPARÁTU

SMAZAT VYBRANOU OBLAST

VYBRAT OBLAST

VYHODNOTIT OBLAST

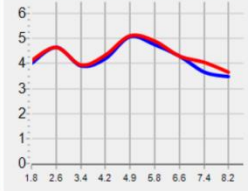

- i přímo z obrazovky DIAGNOSTIKY

Zde můžeme porovnávat všechny vytvořené záznamy (skeny, testy, terapie). Na obrázku níže uvidíte parazita „TRICHINELLA SPIRALIS“. Použijeme ho jako příklad.

Příklad vyhodnocuje reakci DESTRUKČNÍ META-TERAPIE (která se provádí pouze na MIKROORGANISMECH) se záznamem SKENU předešlého dne. Důležité informace se zobrazují ve střední části obrazovky – v textu nad druhým obrázkem parazita.

TRICHINELLA SPIRALIS MT 10

ZHORŠENÍ 79%

ZVĚTŠENÍ LOŽISKA 100%

U DESTRUKČNÍ META-TERAPIE by vždy měla být vyhodnocená oslabující reakce – tzv. „**ZHORŠENÍ**“ – a to znamená, že mikroorganismus je úspěšně ničen (aplikovaná terapie zhoršuje stav daného mikroorganismu). Nicméně při každém srovnávání se musíme ujistit, že porovnávané TY SPRÁVNÉ informace:

- Zatržením ticketového čtverečku vybíráme záznam, který slouží jako základ pro porovnání. Zatržením položky se změní také první obrázek, v levé spodní části obrazovky. Vždy zatrháváme pouze originální SKENY, označené „S“.




VYBRÁNO	DATUM	NÁHLED	ŘEZ	0	TYP	SOUSTA	STAV	ENERGIE	OPTIMÁLNÍ	DISPERZE
☒	17-čvn-26 14:55		TRICHINELLA SPIRALIS					65		0.679

- Kliknutím na jiný ŘEZ ze seznamu (podsvítí se modře) vybíráme záznam k porovnání. Tím se změní i druhý obrázek ve spodní části obrazovky a následně vyhodnocený text nad nimi.
- V prvním příkladu zhodnocujeme reakci META-TERAPIE na MIKROORGANISMUS. Pokud vyhodnocujeme účinnost celkové terapie v průběhu času, vždy porovnáваме 2 SKENY! – nejstarší (v ideálním případě úplně první pořízený SKEN klienta) a nejnovější (čerstvý SKEN z aktuálního dne)

Pro představu dlouhodobého vyhodnocení si ukážeme příklad na ŘEZU „NADLEDVIN“. Zatrhneme si ticketovým čtverečkem úplně první, nejstarší SKEN „S“ a poté klikneme a modře označíme SKEN z aktuálního dne.

Pokud je vše dobře nastavené, měla by Vaše obrazovka vypadat nějak takto:

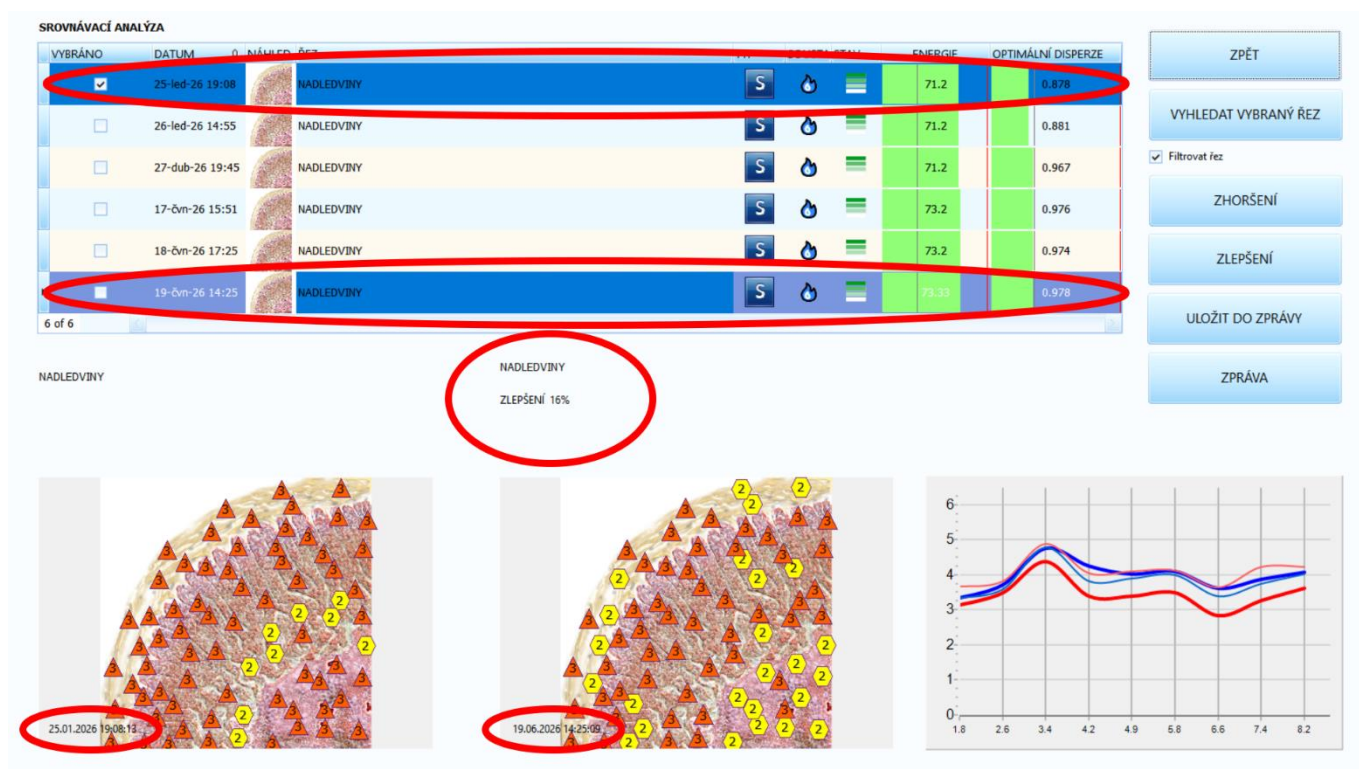

Zatržený záznam je na obrázku vlevo („NADLEDVINY“ ze dne 25. ledna) a porovnááme jej s modře označeným záznamem („NADLEDVINY“ ze dne 19. června) na obrázku vpravo. V dlouhodobém měřítku vidíme posilující reakci – tedy ZLEPŠENÍ (mírné zlepšení o 16% → index OPTIMÁLNÍ DISPERZE OD se zvýšil o hodnotu +0,100).

Pokud vyhodnocujeme správným postupem, uvidíme také správné výsledky.

Aby bylo možné porovnat výsledky změny celkového zdravotního stavu, je důležité srovnávat záznamy alespoň **po 4–6 týdnech** pravidelných terapií. Změny mezi jednotlivými dny mohou být zavádějící (ovlivnění měření vlivem např. stresu, frekvence v jídle, geopatogenní zóny, elektromagnetického záření apod.).

Ačkoli se výsledky mohou projevit i mnohem dříve, i tak je dobré vyhodnocovat relevantní stav až po této **4-6 týdenní** době.

OSTATNÍ FUNKCE SROVNÁVACÍ ANALÝZY:

Skryté vyhledávací pole – tato funkce je záměrně skrytá, aby ponechala co nejvíce volného místa pro tabulku záznamů. Funkci aktivujeme/zobrazíme klávesovou kombinací „CTRL“ + „F“ na klávesnici Vašeho počítače. Objeví se vyhledávací okénko. Tato skrytá funkce funguje na více obrazovkách Oberonu (jinými slovy – pokud Vám někde vyhledávání chybí, zkuste jej nejprve touto klávesovou kombinací aktivovat/odkrýt). Opětovným stisknutím kombinace těchto kláves „CTRL“ + „F“ okénko vyhledávacího pole zase schováme.


SROVNÁVACÍ ANALÝZA

Enter text to search... Find Clear

VYBRÁNO	DATUM	0	NAHLED	REZ	TYP	SOUSTA STAV	ENERGIE	OPTIMÁLNÍ	DISPERZE
☒	25-led-26 19:08			NADLEDVINY	S			71.2	0.878
☐	26-led-26 14:55			NADLEDVINY	S			71.2	0.881
☐	27-dub-26 19:45			NADLEDVINY	S			71.2	0.967
☐	17-čvn-26 15:51			NADLEDVINY	S			73.2	0.976
☐	18-čvn-26 17:25			NADLEDVINY	S			73.2	0.974

6 of 6

Tlačítka „ZLEPŠENÍ“ a „ZHORŠENÍ“ – aktivují vizuální problikávání ENERGETICKÝCH BODŮ, za účelem lepšího rozpoznání rozdílů – jinak řečeno, tlačítko rozblíká rozdílné ZLEPŠENÉ/ZHORŠENÉ body proti původnímu SKENU.

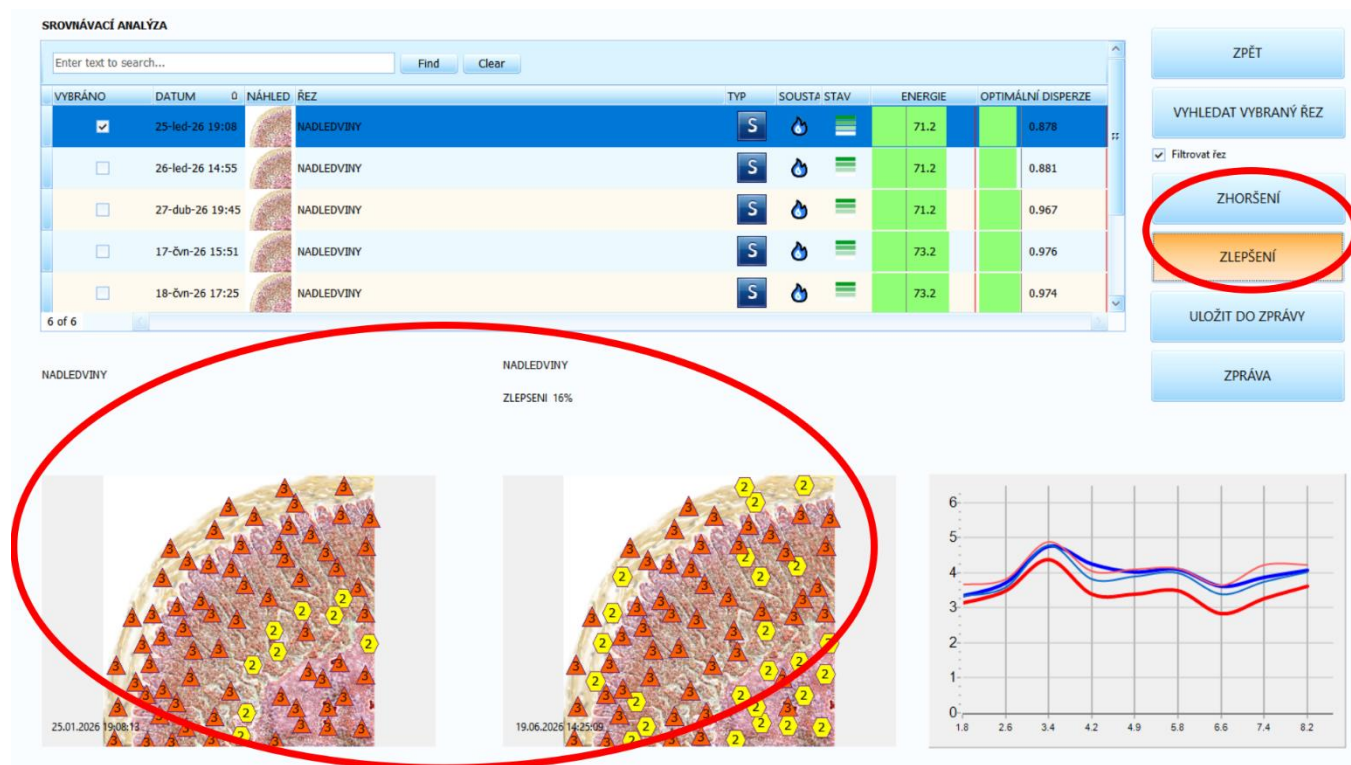

Tlačítko „ZPĚT“ – vrátí nás na předchozí obrazovku


Tlačítko „ULOŽIT DO ZPRÁVY“ – přidá označený záznam do souhrnné ZPRÁVY

Tlačítko „VYHLEDAT VYBRANÝ ŘEZ“ – Oberon automaticky vyhledá a zvolí ke srovnání další záznam vybraného ŘEZU, který je v pořadí. Není ale dobré spoléhat se na správný výběr tímto tlačítkem, proto doporučujeme vždy automatické vyhledávání ŘEZŮ kontrolovat!


Možnost „Filtrovat Řez“ – skryje záznamy ostatních nesouvisejících ŘEZŮ. Tuto možnost vždy vypínejte před odchodem z obrazovky SROVNÁVACÍ ANALÝZY! V opačném případě může zůstat aktuálně zvolený ŘEZ stále zobrazen u příštího porovnávání!

Závěrem kapitoly si uvedeme celý správný POSTUP SROVNÁVACÍ ANALÝZY krok za krokem:


1. V seznamu dostupných záznamů si zatržením ticketového čtverečku (sloupeček „VYBRÁNO“ v levé části obrazovky) zvolíme ŘEZ, který potřebujeme srovnávat (ten se ihned zobrazí jako první obrázek). Oberon se vždy snaží vybírat tyto ŘEZY sám – automatizovaně, proto automatické výběry pečlivě kontrolujte.

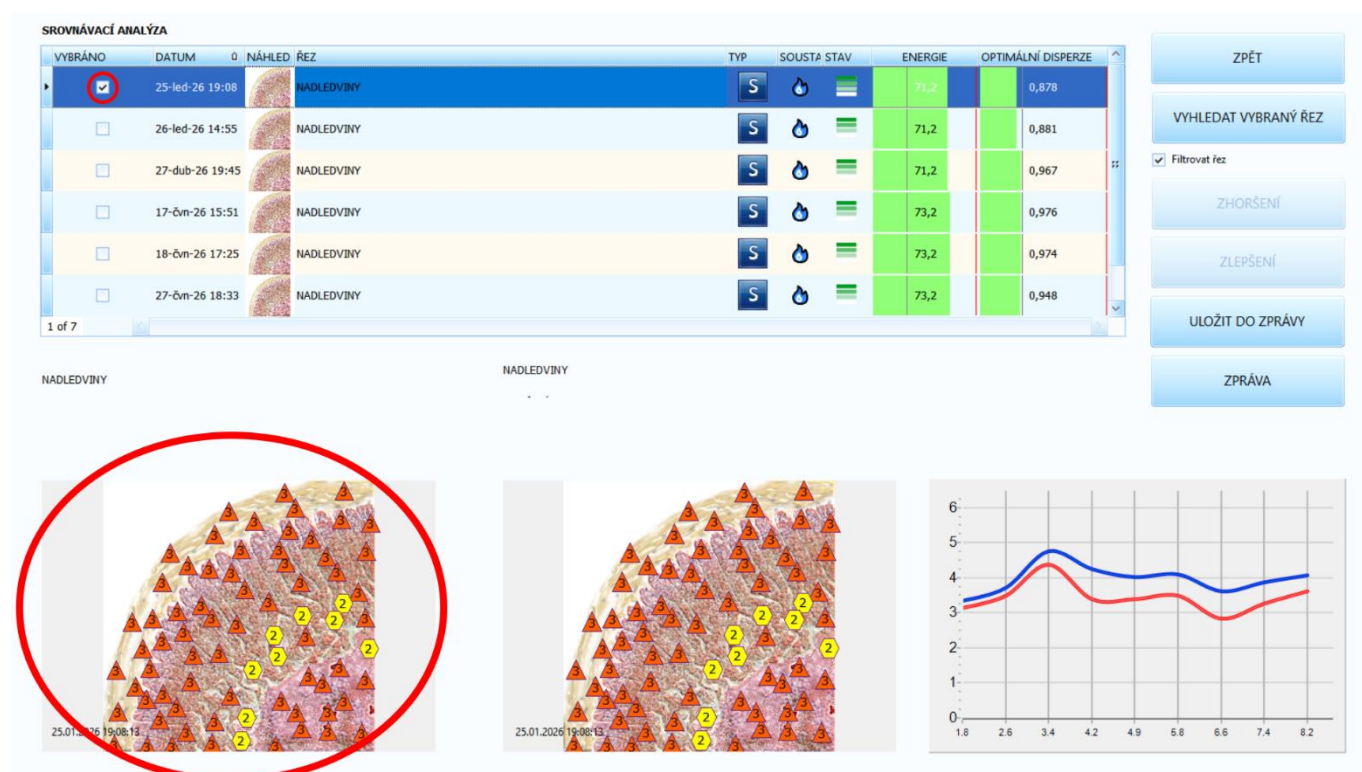

2. Následně si výsledky co nejvíce zúžíme – „vyfiltrujeme“, za účelem lepší přehlednosti. K tomu slouží možnost „Filtrovat řez“, která se spíná zatržením ticketového čtverečku v pravé horní části obrazovky. Zůstanou pouze ty záznamy, které souvisí se zvoleným ŘEZEM (v našem příkladu „NADLEDVINY“).

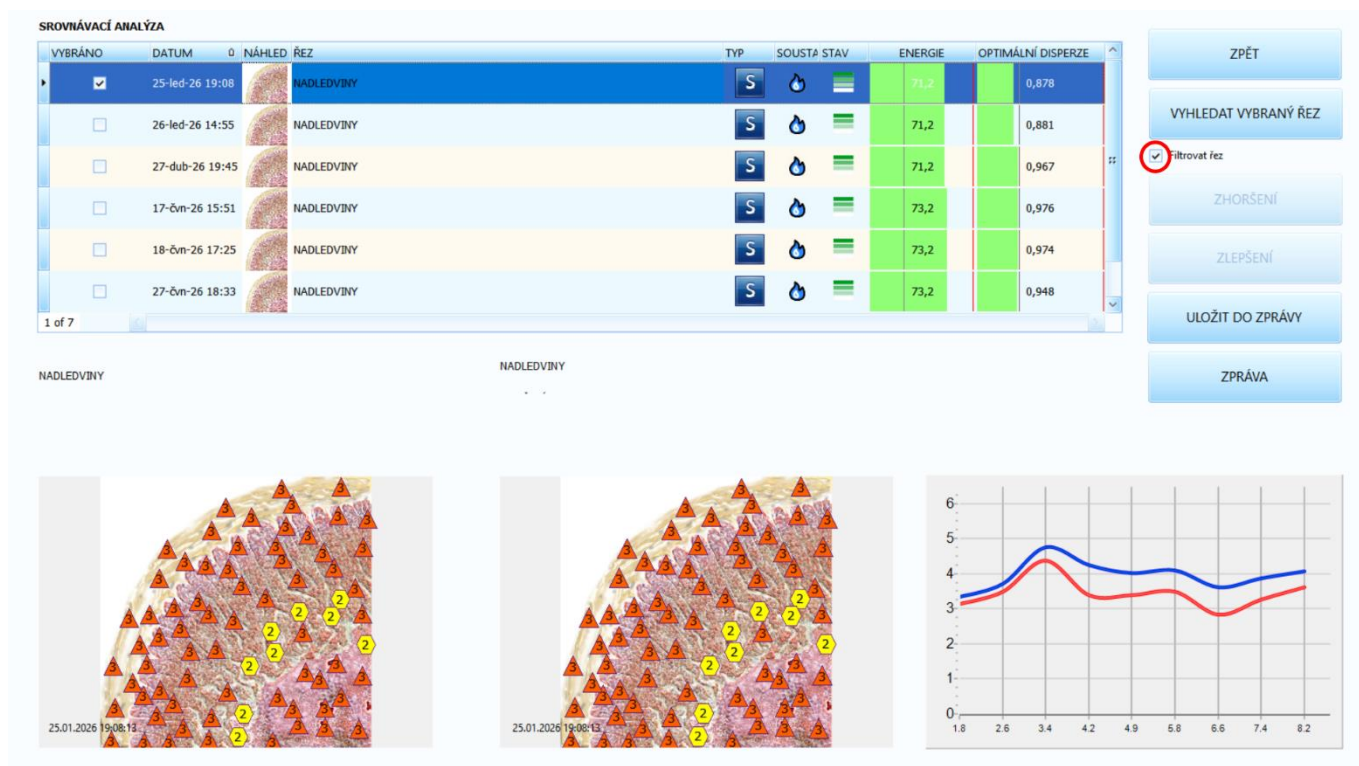

3. Nyní kliknutím vybíráme druhý záznam, se kterým potřebujeme porovnávat (v našem příkladu porovnáváme dva SKENY – nejstarší s nejnovější) – řádek se také podsvítí modrou barvou – a tím změníme i druhý obrázek ve spodní části obrazovky.

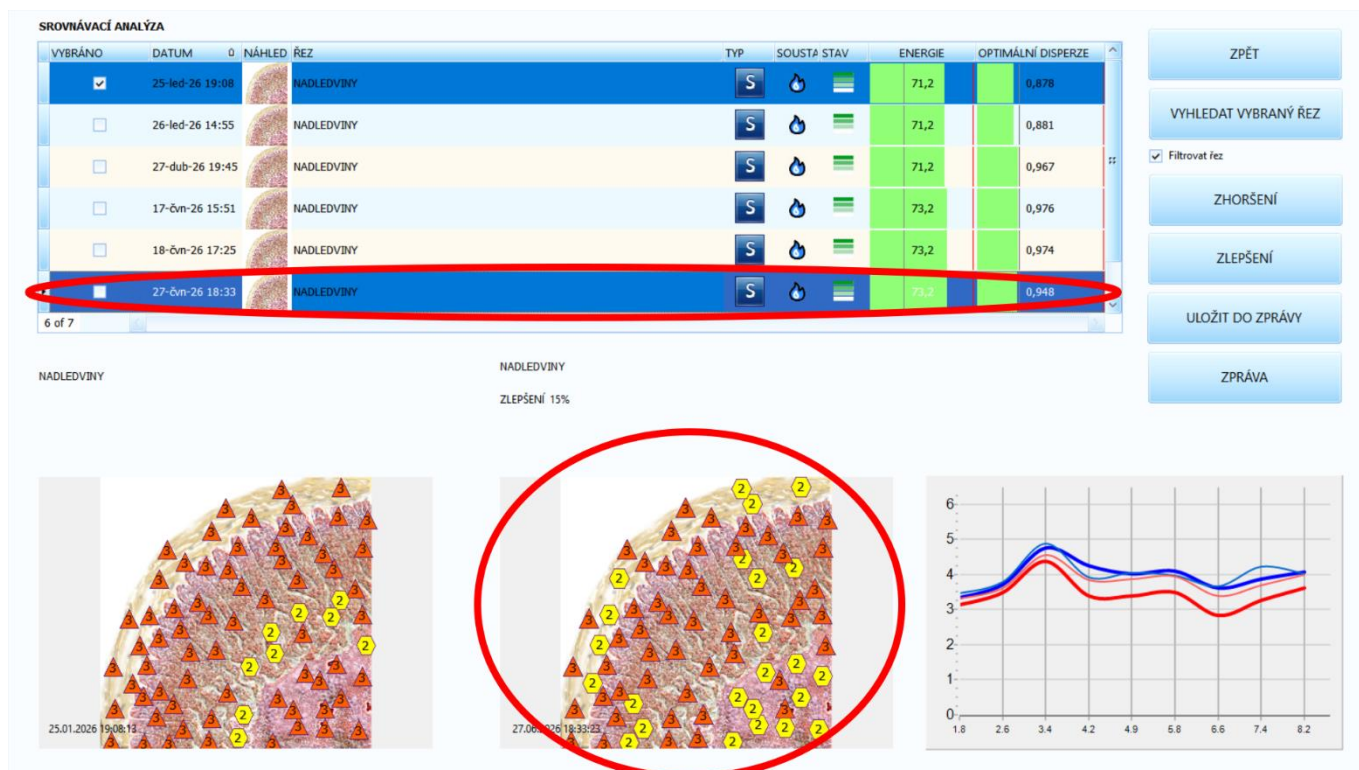

Výsledky SROVNÁVACÍ ANALÝZY mohou být ZLEPŠENÍ / ZHORŠENÍ, nebo ZVĚTŠNÍ / ZMENŠENÍ / ODSTRANĚNÍ LOŽISKA. Těmto pojmům porozumíme lépe v průběhu dalších kapitol. Funkce, jak již napovídá jejich název, si můžeme definovat takto:

ZLEPŠENÍ – tzv. POSILUJÍCÍ REAKCE, značí zlepšení funkčního stavu zvoleného ŘEZU

ZHORŠENÍ – tzv. OSLABUJÍCÍ REAKCE, značí zhoršení funkčního stavu zvoleného ŘEZU

LOŽISKO – vnímáme jako hnízdo/centrum/skupinu, tedy větší množství ENERGETICKÝCH BODŮ stejné úrovně (zpravidla s hodnotami 4-6) shluknutých na malé ploše.

Před odchodem z obrazovky „SROVNÁVACÍ ANALÝZY“ vždy vypínáme (odznačíme) možnost „Filtrovat řez“! V opačném případě se vypne funkce automatizovaného výběru záznamů pro SROVNÁVACÍ ANALÝZU.

SPRÁVNÉ NASTAVENÍ META-TERAPIÍ PRO VYHODNOCENÁ DATA

Závěrem první velké části návodu „ZÁKLADNÍ FUNKCE“ si nejdříve musíme shrnout důležité informace. Tím lépe pomyslně uchopíme nastavování celkového terapeutického postupu pro klienta. Při diagnostikování se soustředíme vždy na 2 základní parametry – ENERGII a OPTIMÁLNÍ DISPERZI.

Přednostní je index OPTIMÁLNÍ DISPERZE (OD), který vypovídá o celkovém funkčním stavu daného ŘEZU a v průběhu času se mění – tzn. v rámci dnů se rozdíl této hodnoty pohybuje v mírném rozmezí, přibližně 0,01 – 0,05.

Doporučujeme skenovat a aplikovat terapie alespoň 4–6 týdnů. Po této době lze vidět skrze index OD, jak se funkční stav orgánů mění. Index se vlivem zlepšení postupně vyrovnává konstantě 1,2. Není ale pravidlem, že se vždy všechny orgány zlepšují. Pokud např. vlivem detoxikace zatěžujeme více játru, může se index zpočátku i zhoršovat. Jakmile tělo odstraní důležitou část toxického odpadu, OD se opět začne zlepšovat.

Pokud se OD v průběhu doporučeného času nezlepšuje a ani nezhoršuje (případně se index změnil jen nepatrně, cca +/- 0,01), i přes pravidelné aplikace meta terapií, pak to znamená, že je daný orgán pod stálým špatným vlivem (strava, infekce, nemoc, nedostatek vitamínů, geopatogenní zóna, záření apod.). Aplikované terapie pak pouze energeticky udržují stav a brání v degradaci orgánu. Dokud se neodstraní příčina, může se index OD časem i zhoršovat. Pak je potřeba věnovat problematické oblasti/orgánu zvýšenou pozornost a péči – k tomu nám poslouží např. již zmíněna INTENZIVNÍ META-TERAPIE.

Sekundární parametr ENERGIE si můžeme představit metaforicky jako baterii – plně nabitá baterie znamená, že orgán pracuje na 70% a více. Vlivem času a případné námahy se baterie vybíjí a funkčnost orgánu slábne – včetně jeho obranyschopnosti. Lze si situaci představit i takto: často onemocníme ve stavu únavy (návrat z práce, školy, schůzky, únava po sportu, apod...). Pakliže nemáme dost energie, zhorší se funkčnost imunitního systému, a tím jsme k nemocem náchylnější.

ENERGIE tedy udává, na kolik je nabitá baterie orgánu/ŘEZU/oblasti v daném čase. Tato měření se často mírně odchylují, ale drží se v určitých hladinách. Energetický systém v našich tělech totiž pulzuje ve specifických frekvencích a je silně ovlivňován mnoha dalšími vlivy (např. emocemi, dobrý příklad je kontrast při radosti/smutku).

S parametrem ENERGIE úzce souvisí tzv. ENERGETICKÉ ÚROVNĚ (vypsání body s čísly 1–6 na obrázcích ŘEZŮ) a také kategorizující (energetické) STAVY „Akutní“, „Chronický“ a „Normální“.

ENERGETICKÉ ÚROVNĚ zobrazují přibližný stav ŘEZU v daném bodě.. Procentuální hodnota ENERGIE zobrazovaná v KARTOTÉCE je průměrem součtů těchto bodů. Při podrobné analýze můžeme použít metodu LOALIZACE, abychom odhalili tzv. LOŽISKO – to poukazuje na místo největšího poškození/nerovnováhy a pravděpodobně souvisí i s příčinou nemoci/oslabení. Ložisek může být v jednom ŘEZU/oblasti i více. Při práci s klientem se v začátcích soustředíme převážně na ŘEZY/oblasti ve STAVU „Akutním“ a „Chronickém“.

Rozdíly vyhodnocujeme metodou „SROVNÁVACÍ ANALÝZY“, kam můžeme přejít z více obrazovek softwaru. Oberon automatizuje výběr ŘEZŮ – ke srovnání vybírá aktuálně zvolený ŘEZ z KARTOTÉKY a porovná jej s posledním provedeným záznamem daného ŘEZU (např. záznam META-TERAPIE nebo poslední SKEN). Tento automatizovaný výběr vždy pečlivě kontrolujeme, abychom neporovnávali špatná data.

K vyhodnocení potřebujeme údaje vypsání nad druhým Obrázkem ve spodní části obrazovky SROVNÁVACÍ ANALÝZY – ten vypisuje 2 důležité údaje:

- rozdíl ENERGETICKÝCH ÚROVNÍ (bodů 1-6) – a jednoduše vypisuje „ZLEPŠENÍ“ nebo ZHORŠENÍ průměru v procentech %
- rozdíl oblastí LOŽISEK – jednoduše znamená zvětšení nebo zmenšení poškozených oblastí – tedy skupin ENERGETICKÝCH BODŮ (ÚROVNÍ) s hodnotami 4-6 na porovnávaném ŘEZU

Stává se, že po aplikaci terapií se výsledky i dočasně zhorší (index OPTIMÁLNÍ DISPERZE OD klesne). Na první pohled to evokuje zhoršení stavu, nicméně si musíme uvědomit, že našim zásahem do jádra problému se orgán/tkáň více zatíží. Tímto zásahem klesne jak jeho ENERGIE, tak i funkčnost (místo své rutinní práci se věnuje odstranění odpadu a opravám buněk).

Potřebný výsledek vidíme právě až v průběhu času s měnícím se indexem OD. Pak existují 2 možnosti:

- OD index se zlepší (tzn. přiblíží se konstantě 1,2) a to i přes možné zhoršení ENERGIE. To také stále považujeme za velice dobrý výsledek. Hladina ENERGIE sice může klesnout, (to alespoň částečně kompenzujeme/vyrovňujeme META-TERAPIEMI), ale z ENERGETICKÝCH BODŮ zmizí ÚROVNĚ s hodnotou 6, a za další čas také hodnota 5.
- Pokud se OD index nelepší a stagnuje, nebo dokonce se zhoršuje, nenašli jsme a neodstranili příčinu problému/nerovnováhy nebo také vznikla příčina nová. Dokud nedohledáme jádro těchto problémů, je dobré alespoň pravidelnými META-TERAPIEMI zhoršování stavu zpomalovat. Pravidelnost META-TERAPIÍ si definujeme tabulkami:

HARMONIZAČNÍ/POSILUJÍCÍ META-TERAPIE – VŠE BEZ PATOGENŮ

TYP	RÁNO	VEČER	DENNĚ celkem	CYKLY/TERAPIE	PRAVIDELNOST
<i>Udržující</i>	-	-	-	10x	min 1x týdně
<i>Vyrovňovací</i>	-	-	-	5x nebo 10x	min 3x týdně
<i>Akutní</i>	1x	1x	Až 20x	10x	Denně
<i>INTENZIVNÍ</i>	-	-	20x – 50x	10x	-

Čas spuštění META-TERAPIE nastavujte ideálně dle potřeb klienta, pokud je to možné (večerní META-TERAPIE mohou totiž u energeticky vnímavého klienta potlačovat únavu/spánek).

DESTRUKČNÍ / DETOXIKAČNÍ META-TERAPIE – pouze PATOGENY

TYP	RÁNO	VEČER	DENNĚ celkem	CYKLY/TERAPIE	PRAVIDELNOST
<i>Udržující</i>	-	-	-	5x nebo 10x	max 1x týdně
<i>Vyrovňovací</i>	-	-	-	10x	1x - 3x týdně
<i>Akutní</i>	-	-	-	10x	3x týdně

Udržující styl terapie používáme u klientů bez akutních a chronických problémů, často mají tito lidé dobrý energetický systém a citlivě vnímají změny. Dobrý např. i při fitness cvičení, posilování nebo běhu. Dokáže zmírnit dopady fyzické námahy.

Vyrovňovací styl terapie používáme při chronických obtížích a v ne-akutních případech. Např. pokud nás trápí chřipka a viróza, v pooperačních stavech lehkých zákroků za účelem podpory těla a případné detoxikace, chronické bolesti apod.

Akutní styl terapie používáme při všech těžkých stavech (vážná onemocnění, rakoviny, alergie apod).

INTENZIVNÍ styl terapie používáme pro potlačení bolesti a příznaků. Jestliže nevíme, odkud pochází současná příčina, používáme šablonu „VŠE BEZ PATOGENŮ“ a aplikujeme až 5 celých terapií za sebou (tedy 10 cyklů/1 META-TERAPIE a opakujeme až 5x, tedy celkem až 50 cyklů).

Tabulka platí pro dospělé jedince! Kojencům také neaplikujeme INTENZIVNÍ TERAPIE. Zbytek tabulek platí, ale vždy použijeme maximálně 1x cyklus (1x META-TERAPIE).

Požadujte po klientech zpětnou vazbu zpětně z doby, kdy jim terapie aplikujete. Energeticky vnímavým klientům mohou večerní terapie zhoršovat kvalitu spánku nebo jej i potlačit úplně. Vždy mějte přehled a ptejte se, jak terapie vnímá.

Časem se Vaše diagnostické schopnosti, vlivem zkušeností a individuálního studia, vyvíjí a zpřesňují. Čím větší počet klientů máte, tím rychleji se učíte se softwarem pracovat. V začátcích doporučujeme pracovat s rodinou a přáteli, které známe – tam si nejlépe všimáme změn a pokroků zdravotního stavu, návyků a celkového životního stylu klienta.


POKROČILÉ FUNKCE

OSTATNÍ TLAČÍTKA A FUNKCE NA OBRAZOVCE SKENOVÁNÍ

Z hlediska velkého množství informací jsme doposud přeskakovali některá tlačítka a funkce. Jakmile si osvojíte základní funkce - skenování, sestavování ZPRÁV a aplikace terapií, naučili jste se to nejdůležitější pro práci s Oberonem. Některé funkce, které si popíšeme, jsou vedlejší a není potřeba je aktivně využívat.

INTERAKTIVNÍ ANAMNÉZA

Vrátíme se na obrazovku SKENOVÁNÍ. První, jen letmo zmíněnou funkcí, se kterou se pokaždé po výběru/vytvoření klienta setkáváme, je INTERAKTIVNÍ ANAMNÉZA. K této funkci se také dostáváme z obrazovky SKENOVÁNÍ - tlačítkem „ANAMNÉZA“.

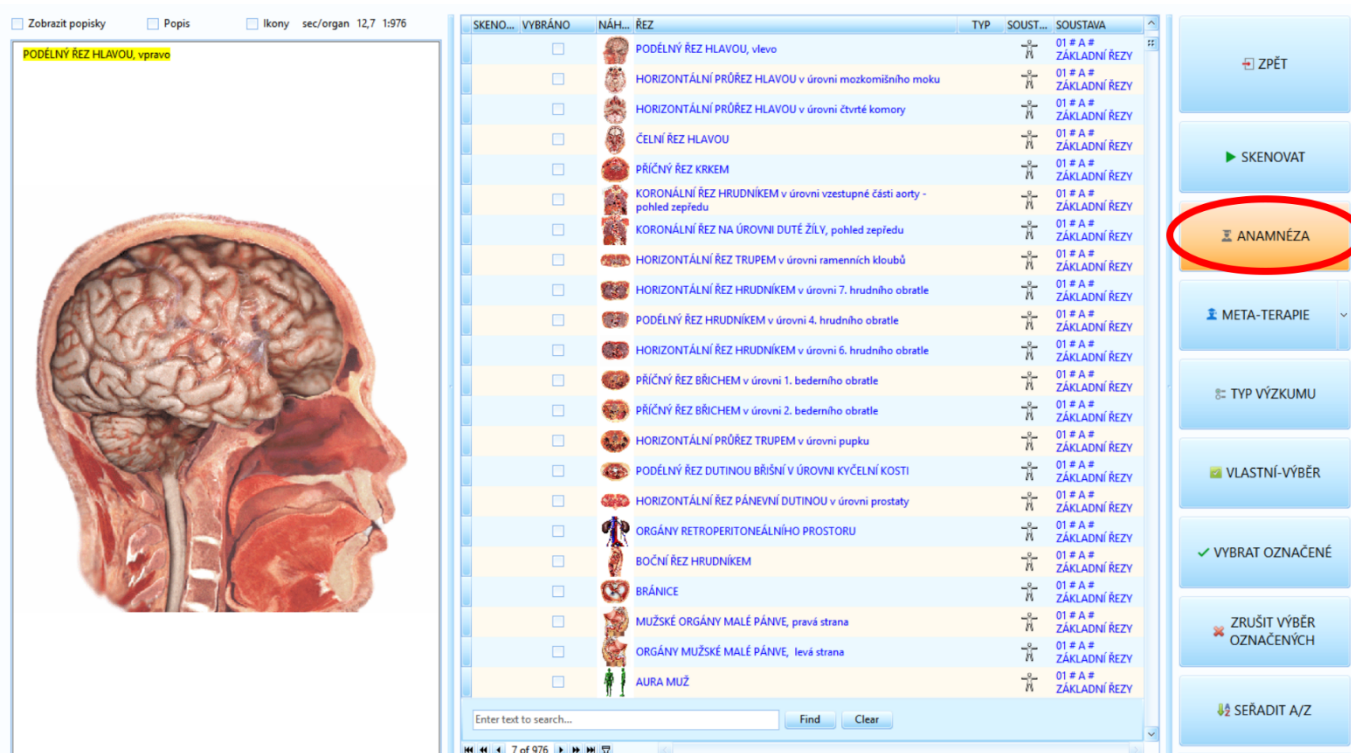

INTERAKTIVNÍ ANAMNÉZA umožňuje vizuálně zaznačit příznaky spojené s problémy klienta. Funkce je doplňková, nedají se zde vepisovat textové poznámky (k tomu používáme SOUHRNNOU ZPRÁVU, které věnujeme samostatnou kapitolu). Prakticky to využijeme např. k rychlému zaznačení poznámek při konzultaci s klientem a následnému porovnání při další návštěvě.

Abychom mohli vybírat z nabídek příznaků a potíží, musíme nejprve zvolit problematickou oblast na obrázku – červený/zelený bod. Jakmile popíše klient problémové místo na těle, vyberme nejbližší červený/zelený bod na interaktivním obrázku, a poté zatrhneme v nabídce odpovídající potíže a příznaky.

ANAMNÉZA

STÍŽNOSTI

- ☐ AKNE KŮŽE
- ☒ ASTENIE (ÚNAVA)
- ☒ BOLESTI BŘICHA
- ☐ BOLESTI V LEVÉM BOKU
- ☐ ČASTÉ MOCENÍ
- ☐ DIAFOREZA
- ☐ EDEM, OTOK
- ☐ IRITABILITA
- ☐ KOŽNÍ VÝRÁŽKA
- ☐ NECHUTENSTVÍ
- ☐ NESNÁŠELIVOST TUČNÝCH POKRMŮ
- ☐ PLYNATOST BŘICHA
- ☐ POCIT NEVOLNOSTI A ÚNAVY
- ☒ PRŮJEM
- ☐ SNÍŽENÁ CITLIVOST V KONČETINÁCH
- ☒ VYSOKÁ TEPLOTA
- ☐ XEROSTOMIE
- ☒ ZÁCPA
- ☐ ZVRACENÍ (NAUZEJA)
- CHOROBA**
- ☐ CUKROVKA (DIABETES MELLITUS)
- ☐ PODEZŘENÍ NA TUMOR SLINIVKY BŘISNÍ
- ☐ RESEKCE LEVÉ LEDVINY
- ☐ RESEKCE SLEZINOU
- ☐ ZÁNĚT SLINIVKY BŘISNÍ # 1700

DUHOVKA

TVÁŘ

KREV

BIBLE

POKRAČOVAT

INTERAKTIVNÍ ANAMNÉZA obsahuje navíc další zajímavé informace, spojené s fyzickým, energetickým i duševním zdravím člověka. Zde je popis zbylých tlačítek:

- **DUHOVKA** – popisuje propojení očí se zdravotními obtížemi
- **TVÁŘ** – informace o propojení prvků obličeje se zdravotními obtížemi
- **KREV** – definuje, jak jednotlivé krevní skupiny ovlivňují životní styl a celkový zdravotní stav
- **BIBLE** – obsahuje povzbudivé pasáže z bible s pozitivním dopadem na zdraví a vitalitu

Vrátíme se zpět na obrazovku **SKENOVÁNÍ**, kde nám zbývají tato tlačítka a možnosti:

Tlačítko „**TYP VÝZKUMU**“ – sada skenovacích šablon. Začátečníkům doporučujeme mít vždy nastavený **VĚDECKÝ** typ výzkumu. Funkce je vedlejší, protože **ŘEZY** nastavujeme skrze šablony – to je nejvhodnější řešení

Tlačítko „**SEŘADIT A/Z**“ – dočasně seřadí **ŘEZY** abecedně od A po Z. Občas se toto řazení hodí pro lepší přehlednost.

V levé horní části obrazovky SKENOVÁNÍ máme tyto možnosti:

☐ Zobrazit popisky ☐ Popis ☐ Ikony sec/organ 6.0 0:972


Možnost „Zobrazit popisky“ – zobrazí detailnější popisky jednotlivých oblastí v náhledech ŘEZU.

Možnost „Popis“ – zobrazí jednotlivé oblasti v náhledech ŘEZŮ bez detailnějších popisků

Možnost „Ikony“ – zobrazí další ŘEZY daného orgánu, které můžeme naskenovat a získat ucelenější data pro diagnózu

Proměnná hodnota „sec/organ“ - zobrazuje nutný čas ve vteřinách pro zpracování jednoho ŘEZU a následuje hodnota X:Y → číslo X udává počet ŘEZŮ k naskenování, číslo Y celkový počet možných ŘEZŮ ke skenování

Poslední nepopsané funkce se skrývají u šablon pod tlačítkem „VLASTNÍ-VÝBĚR“:

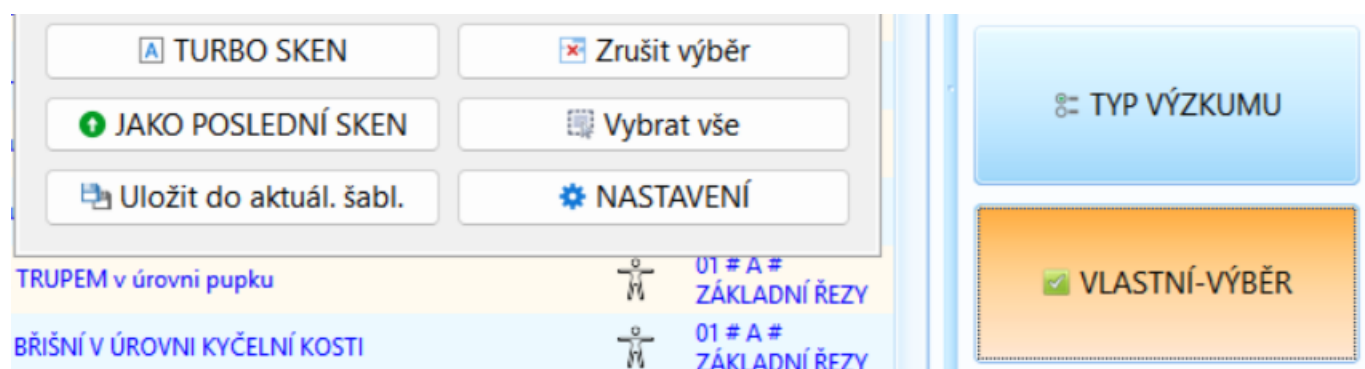

„TURBO SKEN“ – skenuje pouze 30 vybraných ŘEZŮ z celého těla, za účelem rychlé diagnostiky

„JAKO POSLEDNÍ SKEN“ – tlačítko vybere stejné ŘEZY, které byly vybrány u posledního SKENU daného klienta. Je ideální v situacích, kdy máme potřebu pro každého klienta maličko jinak dopravit skenovací šablonu, aniž bychom ji ukládali (u jednoho se zaměřujeme na žaludek, u jiného třeba na cukrovku). Jinými slovy si tlačítko u každého klienta zvlášť vzpomene, jaké byly naposledy skenované ŘEZY.

„ZRUŠIT VÝBĚR“ – Zruší výběr všech zvolených ŘEZŮ vypsaných v nabídce

„VYBRAT VŠE“ – Vybere všechny vypsané ŘEZY v nabídce

OBRAZOVKA TISKU

K této obrazovce přejdeme z KARTOTÉKY tlačítkem „TISK“:

KARTOTÉKA
 PRŮMENÍ: Malina
 KŘESTNÍ JMÉNO: Josef
 KATEGORIE KRVÉ: (0)
 ADRESA: Třída Miru S, Hradec Králové
 E-MAIL:
 RH faktor: +
 TELEFON:
 VĚK: 44
 ROD: MUŽ

NOVÝ KLIENT
 VYBRAT KLIENTA
 ODSTRANIT KLIENTA
 ANALÝZA

ZPĚT
 SKENOVAT
TISK
 SROVNÁVACÍ ANALÝZA

DATUM	NÁHL. ŘEZ	TYP	SOUST...	STAV	ENERGIE	OPTIMÁLNÍ DISPER...
18.06.2026 17:33:35	ATP	S			78 %	0.206
18.06.2026 17:33:08	KOLAGEN	S			61 %	0.207
18.06.2026 17:33:34	HEMOGLOBIN	S			74 %	0.221
18.06.2026 17:33:32	GEM	S			74 %	0.231
18.06.2026 17:32:38	ENDOPLAZMATICKÉ RETIKULUM	S			60 %	0.251
18.06.2026 17:33:24	GLYKOGEN	S			62 %	0.251
18.06.2026 17:33:21	KORTIZOL	S			66 %	0.252
18.06.2026 17:33:26	CHOLESTEROL	S			80 %	0.254
18.06.2026 17:32:35	MITOCHONDRIE	S			63 %	0.259
18.06.2026 17:33:23	INZULIN	S			78 %	0.265
18.06.2026 17:33:31	HISTAMIN	S			73 %	0.28
18.06.2026 17:33:18	ALDOSTERON	S			75 %	0.281
18.06.2026 17:33:20	TESTOSTERON	S			65 %	0.281

Zde máme možnost vytisknout energetický stav jednotlivých bodů/oblastí v daném ŘEZU. Grafické znázornění je dobré pro klienta, který nemusí rozumět parametrům (např. disperzi) a procesu diagnostikování. Je proto jednodušší ukázat jim grafický přehled, kde je ihned na první pohled vidět rozdíl.

TISK
 ZRUŠIT VÝBĚR
 ZPRÁVA
 ANALÝZA
 VYTISKNOUT
 ZPĚT

VYBRÁNÍ	DATUM	NÁHL. ŘEZ	SOUSTAVY	TYP	STAV	ENERGIE	OPTIMÁLNÍ DISPERZE
☐	27.04.2026 19:45:52	MEDIÁLNÍ POVRCH MOZKU, levá strana		S	Normal	69.18	2.444
☐	27.04.2026 19:45:54	MEDIÁLNÍ POVRCH MOZKU, pravá strana		S	Normal	79.11	2.464
☐	27.04.2026 19:45:56	MOZKOVÉ KOMORY, pohled shora		S	Normal	79.64	2.125
☐	27.04.2026 19:45:58	LÍČNÍ NERV, levá strana		S	Normal	76.35	2.047
☐	27.04.2026 19:46:00	MIŠNÍ NERVY, pohled zprava		S	Normal	63.28	2.187
☐	27.04.2026 19:46:02	MIŠNÍ NERVY, pohled zleva		S	Normal	79.27	2.038
☒	25.01.2026 19:00:39	PODÉLNÝ ŘEZ HLAVOU, vpravo		S	Acute	63.58	2.038

„ZRUŠIT VÝBĚR“ – tlačítko odznačí všechny zvolené výsledky k vytisknutí

„ZPRÁVA“ – tlačítkem přejdeme na tvorbu ZPRÁV a reportů

„ANALÝZA“ – tlačítkem přejdeme na obrazovku ANALÝZY/LOKALIZACE

„VYTISKNOUT“ – tlačítkem vytiskneme vybrané výsledky – v obrázkové formě se znázorněním energetických bodů s hodnotou 1-6

„ZPĚT“ – tlačítkem se vrátíme do kartotéky

TYP	STAV	ENERGIE	OPTIMÁLNÍ DISPERZE
S	 Normal	75.37	0.599
S	 Acute	43.58	3
S	 Chronic	65.44	3
S	 Normal	69.63	3
S	 Chronic	59.79	3
S	 Chronic	62.46	1.53
S	 Normal	69.62	1.384

STAV – udává úroveň/kategorii hodnoty ENERGIE

ENERGIE – Hodnota energie v daném ŘEZU vyjádřená procentuálně

OPTIMÁLNÍ DISPERZE – index OD

Veškeré vedlejší funkce, jak již napovídá název, není potřeba umět dokonale používat. Nicméně, čím více informací o používání softwaru Oberon máme, tím více zpřesňujeme naše diagnostické schopnosti, a navíc zrychlujeme pracovní postup – tím zkracujeme celkový potřebný čas k diagnostikování klienta.

MANUÁLNÍ ANALÝZA – POKROČILÁ DIAGNOSTIKA

Tato kapitola je jednou z nejdůležitějších v našem návodu. Nejdříve je ale potřeba si uvědomit - schopnost diagnostikovat – tedy vyhodnocovat zdravotní stav a životní styl klienta – je schopnost, kterou si neosvojíme za pár dnů. Co nejpřesněji vyhodnocovat stav klienta si žádá mnoho sebevzdělávání, porozumění a zkušeností. Dobrým základem bývá lékařská nebo medicínská praxe, práce v oblasti fitness životního stylu, praxe zahrnující práci s lidmi jako poradenství, psychologie apod. Jiní se k porozumění našemu zdraví a tělu dostanou skrze vlastní zdravotní obtíže – koneckonců, jedna z nejlepších forem pomoci je skrze vlastní zkušenost, když sami úspěšně překonáme problém - a tuto zkušenost předáváme dál.

MANUÁLNÍ ANALÝZA znamená, že nedovolíme softwaru provádět automatickou práci a vyhodnocování. Navíc, je to poměrně nedávno, kdy byla funkce POKROČILÝCH AUTOMATICKÝCH ZPRÁV do softwaru přidána. Předtím se musela každá analýza provádět ručně tímto způsobem – neautomatizovaným rozklikáváním většiny jednotlivých ŘEZŮ.

Pokročilí diagnostici si s přibývajícím zkušenostmi postupy různě upravují. Software Oberon podporuje tvořivost. Dovoluje terapeutovi mnoho volnosti a různé úhly pohledu na zdravotní stavu klienta (viz informace na obrazovce INTERAKTIVNÍ ANAMNÉZY, funkce AURY, vzhled skrze emoce a emoční stav apod.). Proto neexistuje naprosto jednotný a správný postup! Všichni si časem vytváříme svůj osobitý styl při práci s Oberonem!


MANUÁLNÍ ANALÝZA se hodí např. při hledání různých druhů rakovin, případně při řešení komplikovanějšího případu s větším zdravotním problémem (který není patrný z POKROČILÉ AUTOMATICKÉ ZPRÁVY) nebo jednoduše chceme znát, jak detailněji obsluhovat Oberon, a tím investovat čas do výzkumu za hranice současných viditelných problémů/příznaků.

ANALÝZU začínáme z KARTOTÉKY. Vyfiltrujeme nejčerstvější záznamy (nebo také provedeme nový SKEN) a seřadíme ŘEZY dle OD, od nejmenší po největší hodnotu (kliknutím do hlavičky sloupce OPTIMÁLNÍ DISPERZE, opětovným kliknutím záznamy seřadíme opačně od největší hodnoty po nejmenší)


Pokročilí uživatelé mohou záznamy samozřejmě ještě více zúžit dalším filtrováním - např. STAVU (akutního, chronického a normálního) nebo SOUSTAVY (zaměřujeme se jen na konkrétní skupinu orgánů).

Jakmile máme záznamy zredukované a seřazené od nejnižšího po nejvyšší index OD, pokračujeme otevřením ŘEZU s nejnižší hodnotou. Vybereme/označíme modře ŘEZ a přejdeme na obrazovku DIAGNOSTIKY (nejjednodušeji kliknutím do grafu na pravé straně obrazovky).




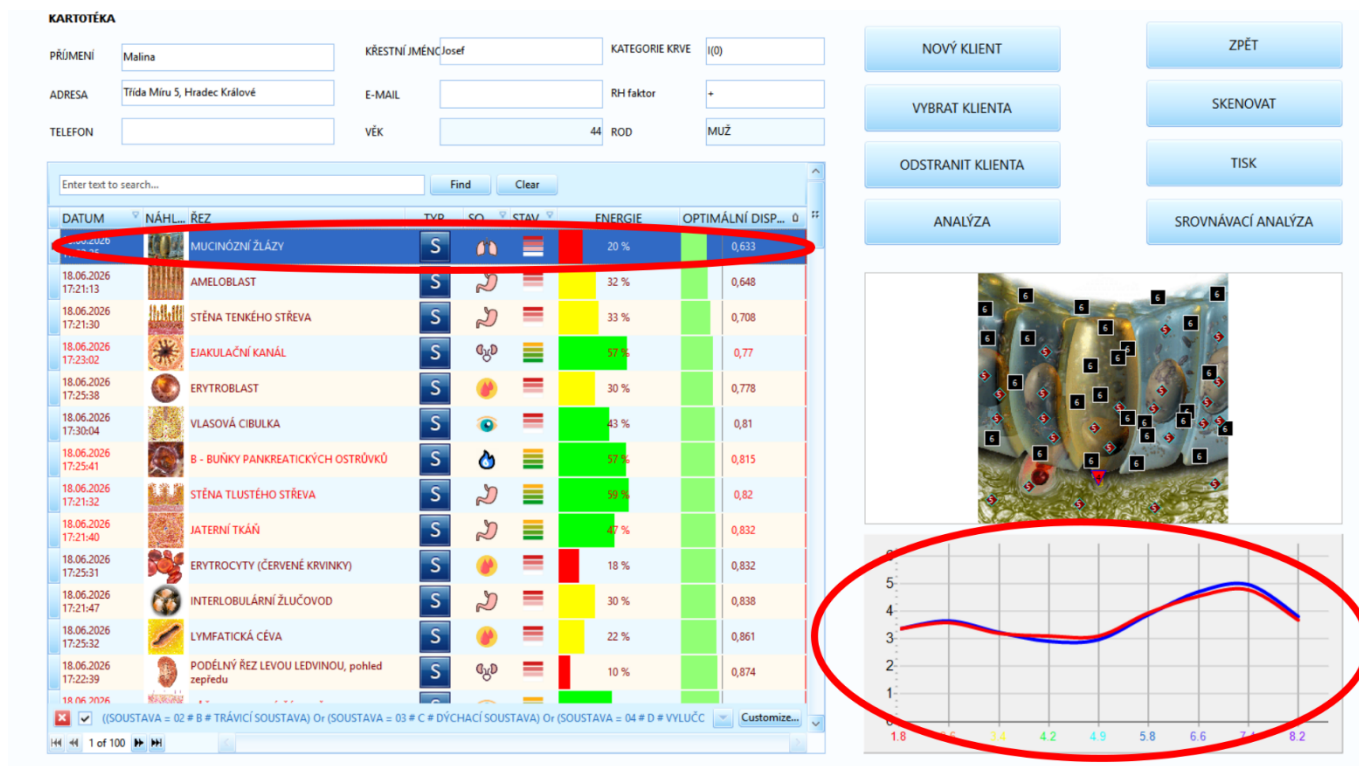


(nebo alternativně přes obrazovku ANALÝZY - V KARTOTÉCE klikneme do obrázku)

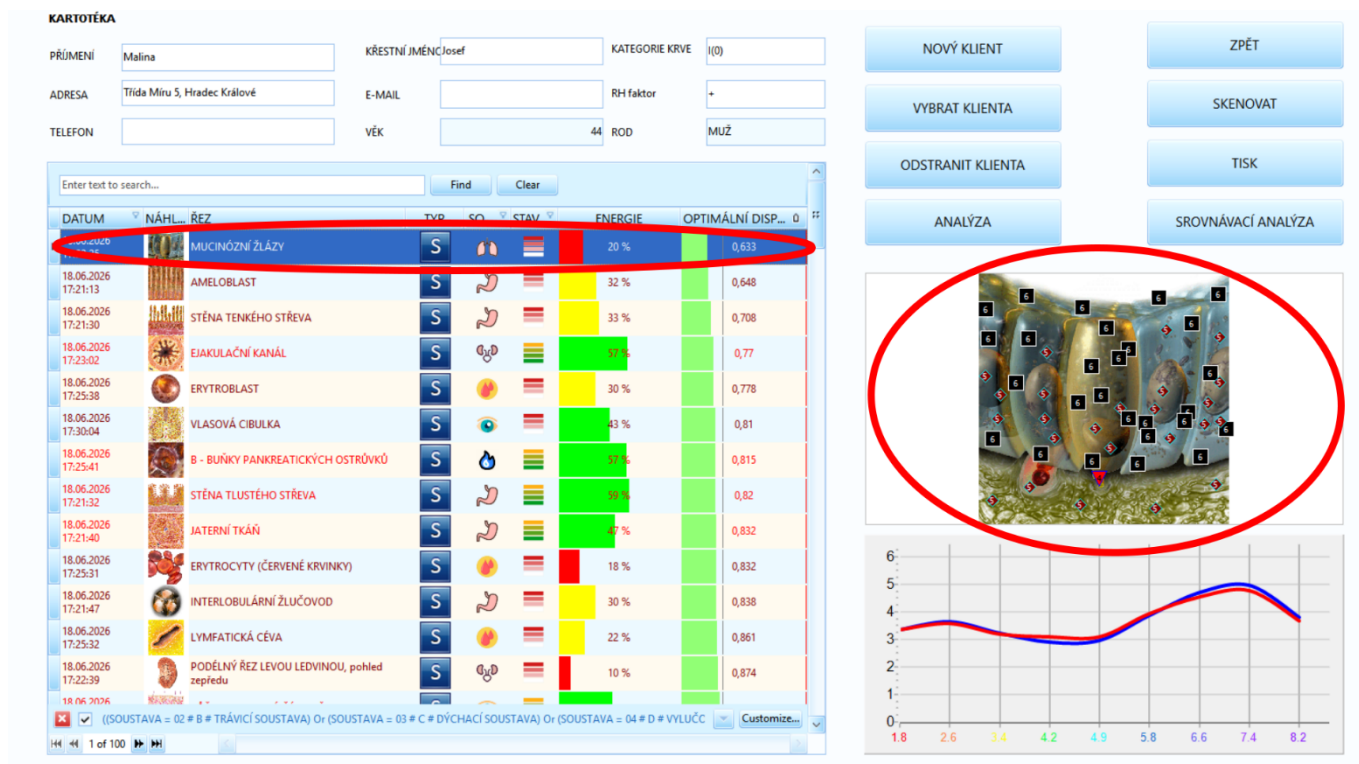

(V tomto mezi korku mohou pokročilí terapeuti navíc využít i metodu LOKALIZACE, pak klikneme na tlačítko „TEST“ nebo do grafu ve spodní pravé části obrazovky:)

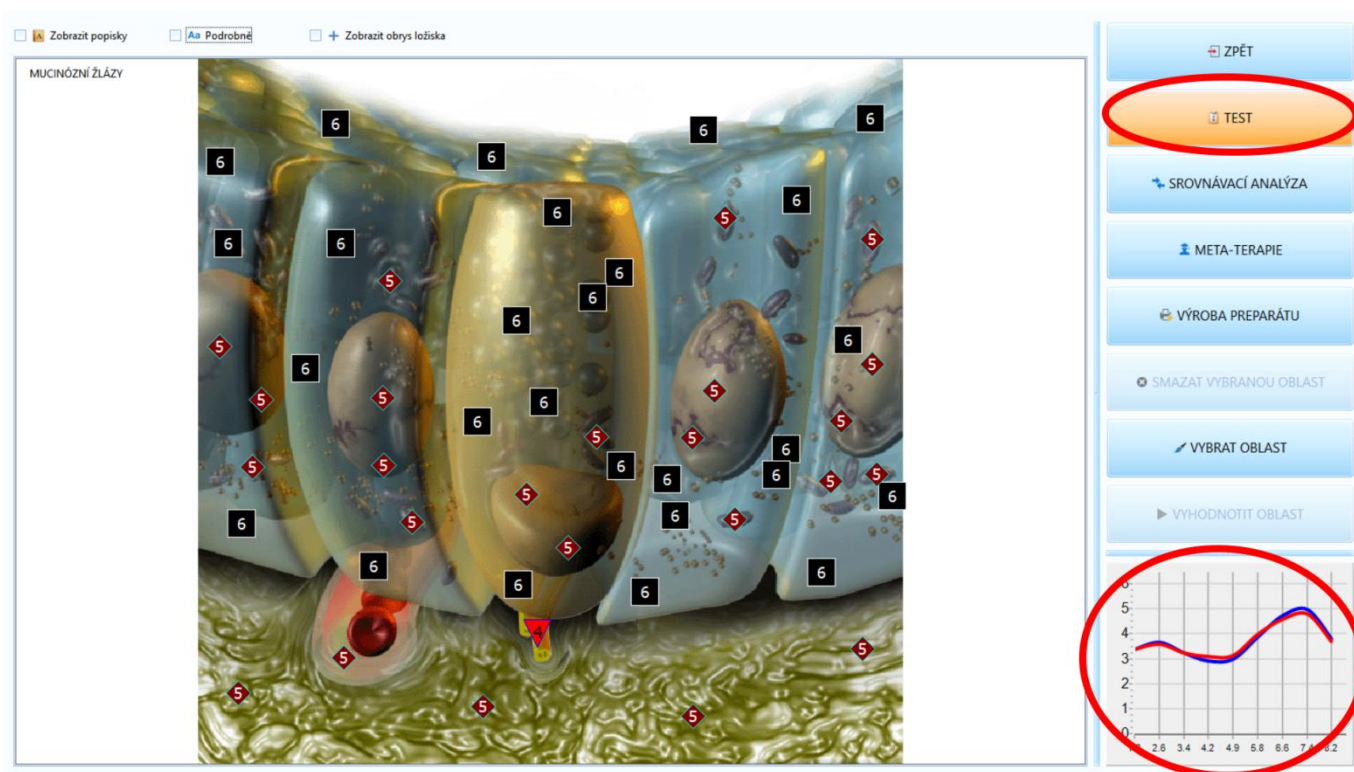

OBRAZOVKA DIAGNOSTIKY

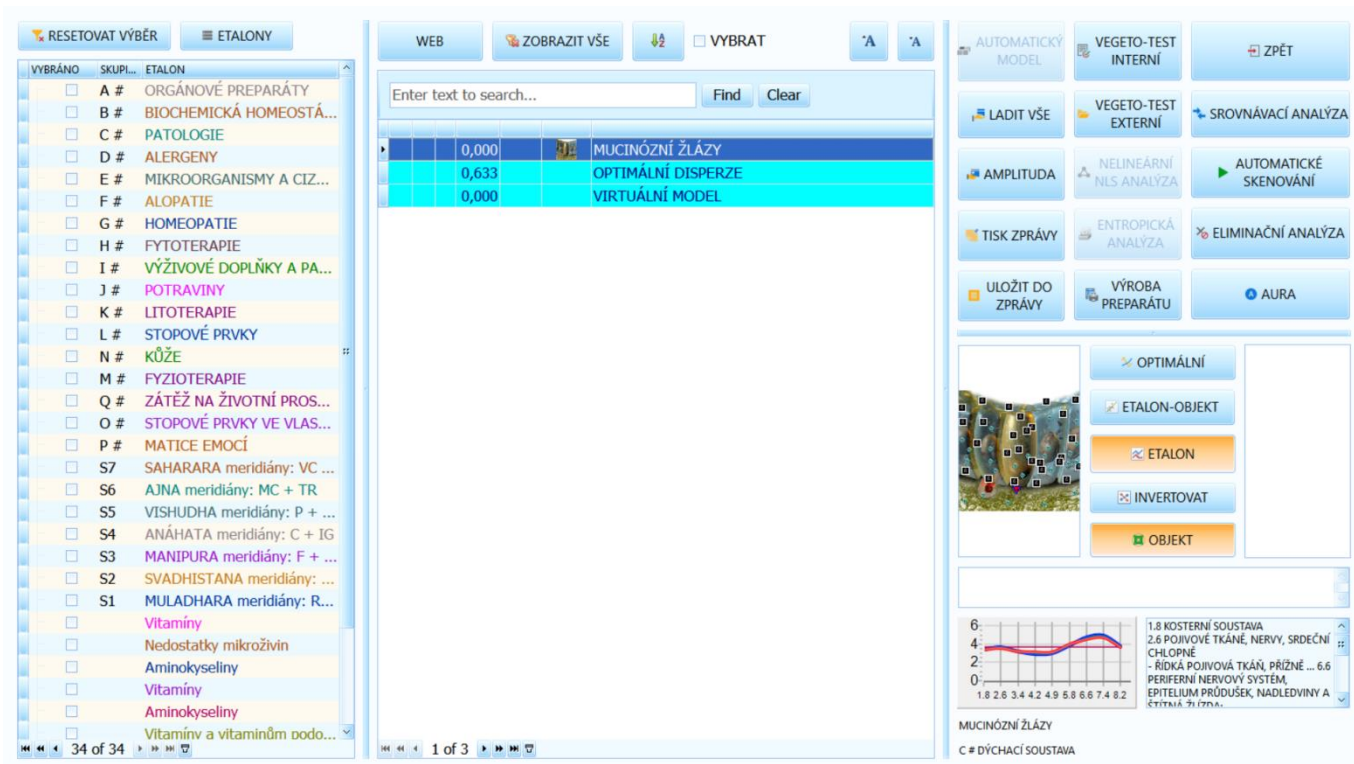


POSTUP POKROČILÉ DIAGNOSTIKY (MANUÁLNÍ ANALÝZY):

1. KROK

Začneme výběrem ETALONŮ „PATOLOGIE“ + „MIKROORGANISMY A CIZOPASNÉ ČERVY“ (zkráceně uvádíme jen „MIKROORGANISMY“). Zprvu budeme diagnostikovat manuálním způsobem pouze tyto dva ETALONY. Další ETALONY (a terapie) k individuálnímu použití si popíšeme později. Je dobré začínat s mikroorganismy, protože mnoho zdravotních obtíží a tělesné disharmonie je způsobeno právě jejich přítomností (parazitů, bakterií, virusů, kandidy, apod.). Když se nejdříve zaměříme na tyto patogeny, mnoho zdravotních obtíží zmizí samo.

Po výběru ETALONU „MIKROORGANISMŮ A CIZOPASNÝCH ČERVŮ“ se ve vedlejším formuláři zobrazí nový seznam informací.

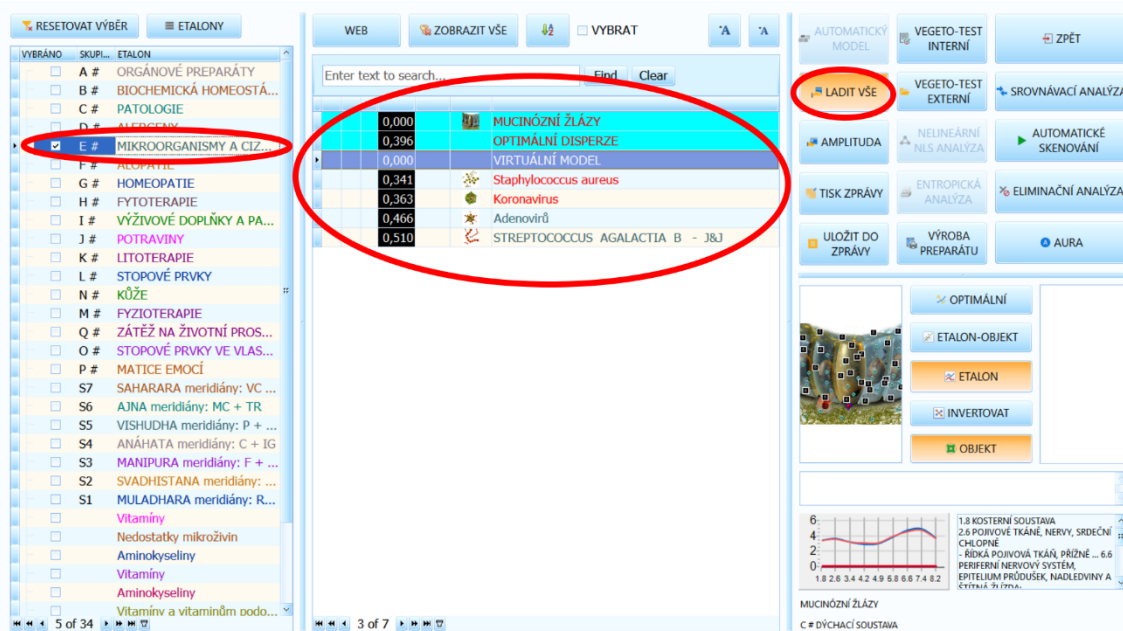

2. KROK

Klikneme na tlačítko „LADIT VŠE“ (viz obrázek výše).

Nabídka nových informací obsahuje seznam všech mikroorganismů s frekvenčním nálezem (s tzv. shodou – tedy shodnými vzorky dle Dr. Rife). To znamená, že frekvence „NOSNÍCH DUTIN“ (kterou nyní analyzujeme a zobrazujeme v příkladu na obrázku) obsahuje frekvenční shodu (nález) se vzorky, které seznam vypisuje. Tlačítko „LADIT VŠE“ ZVYŠUJE PŘESNOST při vyhodnocování shodných vzorků (rozšiřuje možné frekvenční spektrum patogenu).

Tím, že se koeficient D (disperze – tj. čísla vedle jmen mikroorganismů) podsvítí černou barvou, poznáte, že je seznam DOLADĚNÝ.

PŘED STISKNUTÍM TLAČÍTKA „LADIT VŠE“

		0,000		MUCINÓZNÍ ŽLÁZY
		0,551		OPTIMÁLNÍ DISPERZE
▶		0,000		VIRTUÁLNÍ MODEL
		0,150		Staphylococcus aureus
		0,156		STREPTOCOCCUS AGALACTIA B - J&J
		0,341		Koronavirus
		0,551		Adenovirů

PO STISKNUTÍ TLAČÍTKA „LADIT VŠE“

		0,000		MUCINÓZNÍ ŽLÁZY
		0,316		OPTIMÁLNÍ DISPERZE
▶		0,000		VIRTUÁLNÍ MODEL
		0,118		Staphylococcus aureus
		0,155		STREPTOCOCCUS AGALACTIA B - J&J
		0,338		Koronavirus
		0,491		Adenovirů

Funkci „LADIT VŠE“ vždy vypínejte a zapínejte při přechodu na jinou obrazovku programu! Výpočet je totiž dočasný a po odchodu z obrazovky DIAGNOSTIKY se vrátí na původní hodnotu, i přestože je hodnota disperze černě podsvícená!

Pokud klikneme na tlačítko „AMPLITUDA“, jen jeden vybraný nález (modře označený řádek) v seznamu se „DOLADÍ“. Pro každý nález se možnost AMPLITUDY zapíná zvlášť. To ale neumožňuje perspektivní pohled, a proto doporučujeme AMPLITUDU používat až zkušeným terapeutům.

		0,000		MUCINÓZNÍ ŽLÁZY
		0,551		OPTIMÁLNÍ DISPERZE
▶		0,000		VIRTUÁLNÍ MODEL
		0,118		Staphylococcus aureus
		0,156		STREPTOCOCCUS AGALACTIA B - J&J
		0,341		Koronavirus
		0,551		Adenovirů

3. KROK - VEGETO-TEST INTERNÍ

Jakmile máme zobrazený seznam nálezů (shod) z vybraného ETALONU - v našem případě MIKROORGANISMŮ - (a případně zapnuté tlačítko „LADIT VŠE“), vybereme (klikneme) na mikrob se shodou - ze seznamu ve střední části obrazovky - a nakonec spustíme „VEGETO-TEST

INTERNÍ“ - kliknutím na stejnojmenné tlačítko v pravé části obrazovky. Teprve pak si můžeme být 100% jistí, že je tento mikrob původcem zdravotní disharmonie (zhoršování stavu) v daném ŘEZU (orgánu). Použitím POKROČILÉ ZPRÁVY a její funkce AUTOMATICKÉHO REPORTU provádí Oberon veškerou tuto práci za nás – sám vyhodnocuje nálezy z vybraných ETALONŮ. Ve chvíli, kdy MANUÁLNĚ ANALYZUJEME (ručně na individuálních ŘEZECH), spouštíme VEGETO-TEST INTERNÍ.

Konkrétně si tedy vyberme první shodu ze seznamu, ujistíme se, že náhlavní souprava (sluchátka) je správně nasazená a spustíme VEGETO-TEST INTERNÍ. Ihned po kliknutí na tlačítko spouštíme test reakce.

The screenshot displays a software interface with three main sections:

- Left Panel (List):** A list of items under the heading "ETALONY". The first item, "E # MIKROORGANISMY A CIZ...", is highlighted with a red circle.
- Center Panel (Table):** A table showing search results. The first row is highlighted with a red circle. The table contains the following data:


Value	Item
0,000	MUCINÓZNÍ ŽLÁZY
0,396	OPTIMÁLNÍ DISPERZE
0,000	VIRTUÁLNÍ MODEL
0,341	Staphylococcus aureus
0,363	Koronavirus
0,466	Adenovirů
0,510	STREPTOCOCCUS AGALACTIA B - J8J
- Right Panel (Control Panel):** A panel with various buttons and controls. The "LADIT VŠE" button is highlighted with a red circle. Other buttons include "AUTOMATICKÝ MODEL", "VEGETO-TEST INTERNÍ", "VEGETO-TEST EXTERNÍ", "ZPĚT", "AMPLITUDA", "Nelineární NLS ANALÝZA", "AUTOMATICKÉ SKENOVÁNÍ", "TISK ZPRÁVY", "ENTROPICKÁ ANALÝZA", "ELIMINAČNÍ ANALÝZA", "ULOŽIT DO ZPRÁVY", "VÝROBA PREPARÁTŮ", "AURA", "OPTIMÁLNÍ", "ETALON-OBJEKT", "ETALON", "INVERTOVAT", and "OBJEKT".

Zabýváme se koeficienty disperze s hodnotou **pod 1,2** (výjimkou jsou různé typy rakoviny). Nálezy s hodnotou **pod 0,5** jsou úplně ty nejpodstatnější! Červeně označené shody (napsané červeným písmem) jednoduše značí, že se na ně máme zaměřit jako první, protože mají nejnížší koeficient z celého seznamu.

VEGETO-TEST INTERNÍ – testuje položky z interní databáze ETALONŮ

VEGETO-TEST EXTERNÍ – testuje položky skrze externí pohárek (přiložený v sadě příslušenství spolu s Oberon Boxem), podrobněji si tuto funkci rozvedeme později.

VEGETO-TEST INTERNÍ proběhne rychle a bude vypadat přibližně nějak takto (prosíme, ujistěte se, že náhlavní souprava je správně nasazena během testu):

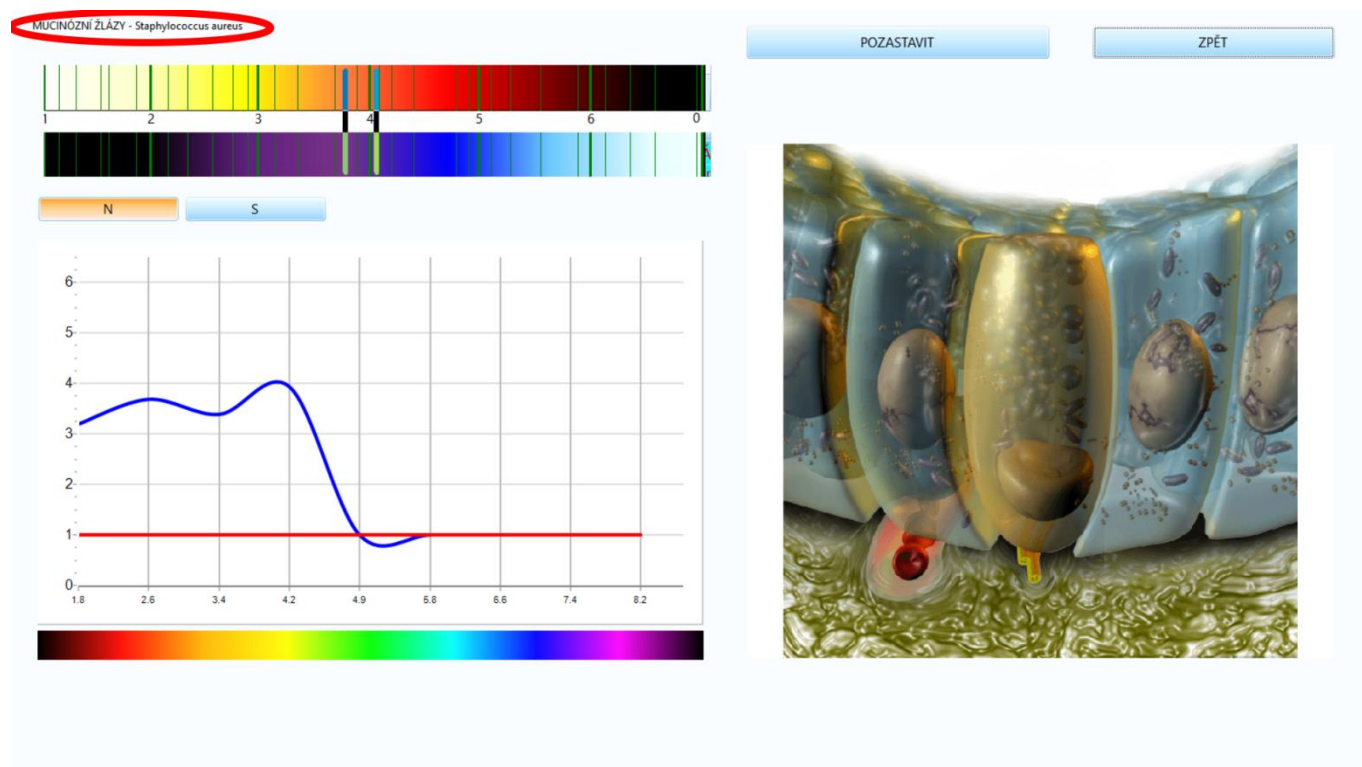

Název testovaného ŘEZU plus nálezu se zobrazuje v horní levé části obrazovky. VEGETO-TEST vezme frekvenci naskenovaných „NOSNÍCH DUTIN“ spolu s frekvencí vybraného mikrobi a vytestuje (vyzkouší) hypotetickou reakci.

Pokud je výsledkem ZLEPŠENÍ – tzv. ZESILUJÍCÍ REAKCE, pak nález (v tomto případě mikrob) nemá negativní vliv na tento orgán. Jinak řečeno se tam buď nevyskytuje, nebo nezhoršuje zdravotní stav – tímto testem je nález vyvrácen.

Pokud je výsledkem naopak ZHORŠENÍ – tzv. OSLABUJÍCÍ REAKCE, pak tento nález opravdu negativně ovlivňuje daný orgán – tímto testem je nález potvrzen.

Dokonce i LACTOBACILLIUS může být pro orgán škodlivý, pokud zde dojde např. k přemnožení těchto prospěšných bakterií.

Po VEGETO-TESTU nás to vrátí zpět na obrazovku DIAGNOSTIKY. Abychom zobrazili výsledky provedeného VEGETO-TESTU, přejdeme na obrazovku SROVNÁVACÍ ANALÝZY. Pokud si vzpomínáte z předchozí kapitoly o SROVNÁVACÍ ANALÝZE, je to obrazovka, kde porovnáváme skeny, nálezy, terapie apod.

RESETOVAT VÝBĚR

ETALONY

VEB

ZOBRAZIT VŠE

VYBRAT

Enter text to search...

Find

Clear

0,000	MUCINÓZNÍ ŽLÁZY
0,316	OPTIMÁLNÍ DISPERZE
0,000	VIRTUÁLNÍ MODEL
0,118	Staphylococcus aureus
0,155	STREPTOCOCCUS AGALACTIA B - J&J
0,338	Koronavirus
0,491	Adenovirů

AUTOMATICKÝ MODEL

VEGETO-TEST INTERNÍ

ZPĚT

LADIT VŠE

VEGETO-TEST EXTERNÍ

SROVNÁVACÍ ANALÝZA

AMPLITUDA

NELINEÁRNÍ NLS ANALÝZA

AUTOMATICKÉ SKENOVÁNÍ

TISK ZPRÁVY

ENTROPICKÁ ANALÝZA

ELIMINAČNÍ ANALÝZA

ULOŽIT DO ZPRÁVY

VÝROBA PREPARÁTU

AURA

OPTIMÁLNÍ

ETALON-OBJEKT

ETALON

INVERTOVAT

OBJEKT

Staphylococcus aureus. Stafylokoky i na sušení, při zachování virulence, země na přímé sluneční světlo, jsou docela odolné vůči teple. Méně odolná proti dezinfekčním prostředkům, ale jsou odolné vůči účinkům čistého etanolu.

6

4

2

0

1.8 2.6 3.4 4.2 4.9 5.8 6.6 7.4 8.2

1.8 KOSTERNÍ SOUSTAVA

2.6 POJOVÉ TKÁNĚ, NERVY, SRDEČNÍ CHLOPNE

4.2 RÍDKÁ POJOVÁ TKÁŇ, PRÍŽNÉ ... 6.6

PERIFERNÍ NERVOVÝ SYSTÉM, EPI TELIUM PRŮDUŠEK, NADLEDVINY A

STŘÍVA

4. KROK

SROVNÁVACÍ ANALÝZA

Jestliže přejdeme na SROVNÁVACÍ ANALÝZU ihned po provedeném VEGETO-TESTU, srovnávání by mělo být automaticky předpřipravené, nicméně žádáme o pečlivou kontrolu tohoto automatizovaného výběru. Pak už se jen stačí podívat na výsledek ZLEPŠENÍ nebo ZHORŠENÍ.

MUCINÓZNÍ ŽLÁZY - Staphylococcus aureus

ZHORŠENÍ 17%

80

"Staphylococcus aureus". Tento výsledek VEGETO-TESTU potvrzuje nález! "Staphylococcus aureus" se opravdu v daném orgánu nachází a negativně ovlivňuje jeho funkční stav.

Součástí MANUÁLNÍ ANALÝZY je také ruční, neautomatizované přidávání záznamů a tvorba závěrečné ZPRÁVY.

Klikneme na SKEN ŘEZU (TYP „S“, nikoli Vegeto-test „V“) a do zprávy uložíme kliknutím na tlačítko „PŘIDAT DO ZPRÁVY“ v pravé části obrazovky.

SROVNÁVACÍ ANALÝZA

VYBRÁNO	DATUM	NÁHLED	ŘEZ	0. TYP	SOUŠTA STAV	ENERGIE	OPTIMÁLNÍ DISPERZE
☒	23-čvn-26 14:43		MUCINÓZNÍ ŽLÁZY	S		62,31	0,551
☐	23-čvn-26 14:59		MUCINÓZNÍ ŽLÁZY - Staphylococcus aureus	V		57,69	0,549
☐	25-led-26 19:15		MUKOCYT	S		72,62	0,946
☐	26-led-26 14:59		MUKOCYT	S		72,62	0,946
☐	17-čvn-26 15:57		MUKOCYT	S		80	0,957
☐	18-čvn-26 17:31		MUKOCYT	S		80	0,945

1022 of 2197

MUCINÓZNÍ ŽLÁZY

MUCINÓZNÍ ŽLÁZY

ZPĚT

VYHLEDAT VYBRANÝ ŘEZ




☐ Filtrovat řez

ZHORŠENÍ

ZLEPŠENÍ

ULOŽIT DO ZPRÁVY

ZPRÁVA

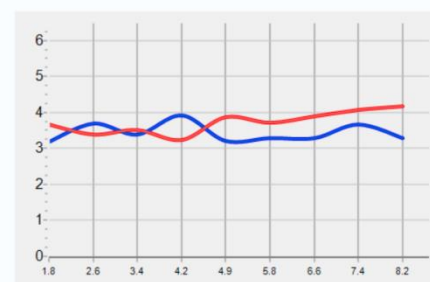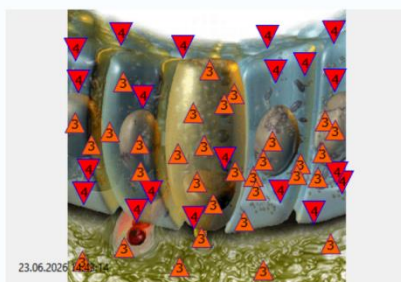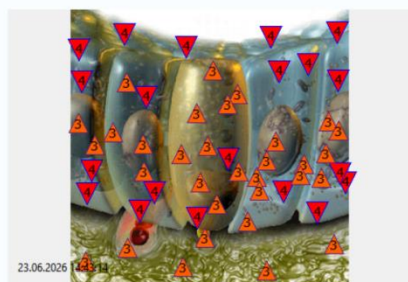

Samozejmě můžeme také přidat záznam VEGETO-TESTU - TYP „V“ - o ZHORŠENÍ (ZHORŠUJÍCÍ REAKCE), ale tento záznam neudává potřebná, relevantní data, kromě údaje o ZHORŠENÍ. To přidávat nepotřebujeme, protože do SOUHRNNÉ ZPRÁVY většinou nemáme důvod zahrnovat neškodlivé záznamy. Jinými slovy, do ZPRÁVY přidáváme pouze škodlivé (ZHORŠUJÍCÍ) nálezy. Informaci, kterou potřebujeme mít uvedenou ve ZPRÁVĚ, je koeficient D nálezu, abychom měli nějaká konkrétní data k pozdějšímu srovnávání (tím poznáme, jak naše celková terapie ovlivňuje zdravotní stav klienta).

Učiníme tak z obrazovky DIAGNOSTIKY – označíme řádek nálezu, který jsme VEGETO-TESTEM potvrdili jako ZHORŠUJÍCÍ a klikneme na tlačítko „ULOŽIT DO ZPRÁVY“. Ale POZOR! Před uložením do SOUHRNNÉ ZPRÁVY vypněte funkci „LADIT VŠE“ (případně „AMPLITUDU“) – zajímá nás původní vyhodnocení koeficient!

WEB ZOBRAZIT VŠE VYBRAT

Enter text to search... Find Clear

0,000	MUCINÓZNÍ ŽLÁZY		
0,551	OPTIMÁLNÍ DISPERZE		
0,000	VIRTUÁLNÍ MODEL		
0,150	Staphylococcus aureus		
0,156	STREPTOCOCCUS AGALACTIA B - J&J		
0,341	Koronavirus		
0,551	Adenovirů		

AUTOMATICKÝ MODEL VEGETO-TEST INTERNÍ ZPĚT
 LADIT VŠE VEGETO-TEST EXTERNÍ SROVNÁVACÍ ANALÝZA
 AMPLITUDA NELINEÁRNÍ NLS ANALÝZA AUTOMATICKÉ SKENOVÁNÍ
 TISK ZPRÁVY ENTROPICKÁ ANALÝZA ELIMINAČNÍ ANALÝZA
 ULOŽIT DO ZPRÁVY VÝROBA PREPARÁTU AURA

OPTIMÁLNÍ D. ŘEZU
 ETALON(NÁLEZ) - OBJEKT(ŘEZ)
 ETALON(NÁLEZ)
 INVERTOVAT
 OBJEKT(ŘEZ)

Staphylococcus aureus. Stafylokoky i na sušení, při zachování virulence, zemře na přímé sluneční světlo, jsou docela odolné vůči teple. Méně odolná proti dezinfekčním prostředkům, ale jsou odolné vůči účinkům čistého etanolu.

6: 4 2 0
 1.8 2.6 3.4 4.2 4.9 5.6 6.6 7.4 8.2

1.8 KOSTERNÍ SOUSTAVA
 2.6 POJIVOVÉ TKÁNĚ, NERVY, SRDEČNÍ CHLOPNE
 - ŘÍDKÁ POJIVOVÁ TKÁŇ, PŘÍZNĚ ... 6.6
 PERIFERNÍ NERVOVÝ SYSTÉM
 EPITELIUM PRŮDUŠEK, NADLEDVINY A

MUCINÓZNÍ ŽLÁZY
C = DÝCHAČÍ SOUSTAVA

Nakonec SOUHRNNOU ZPRÁVU otevřeme a ověříme si přidání záznamy - kliknutím na tlačítko „TISK ZPRÁVY“.

WEB ZOBRAZIT VŠE VYBRAT

Enter text to search... Find Clear

0,000	MUCINÓZNÍ ŽLÁZY		
0,551	OPTIMÁLNÍ DISPERZE		
0,000	VIRTUÁLNÍ MODEL		
0,150	Staphylococcus aureus		
0,156	STREPTOCOCCUS AGALACTIA B - J&J		
0,341	Koronavirus		
0,551	Adenovirů		

AUTOMATICKÝ MODEL VEGETO-TEST INTERNÍ ZPĚT
 LADIT VŠE VEGETO-TEST EXTERNÍ SROVNÁVACÍ ANALÝZA
 AMPLITUDA NELINEÁRNÍ NLS ANALÝZA AUTOMATICKÉ SKENOVÁNÍ
 TISK ZPRÁVY ENTROPICKÁ ANALÝZA ELIMINAČNÍ ANALÝZA
 ULOŽIT DO ZPRÁVY VÝROBA PREPARÁTU AURA

OPTIMÁLNÍ D. ŘEZU
 ETALON(NÁLEZ) - OBJEKT(ŘEZ)
 ETALON(NÁLEZ)
 INVERTOVAT
 OBJEKT(ŘEZ)

Staphylococcus aureus. Stafylokoky i na sušení, při zachování virulence, zemře na přímé sluneční světlo, jsou docela odolné vůči teple. Méně odolná proti dezinfekčním prostředkům, ale jsou odolné vůči účinkům čistého etanolu.

6: 4 2 0
 1.8 2.6 3.4 4.2 4.9 5.6 6.6 7.4 8.2

1.8 KOSTERNÍ SOUSTAVA
 2.6 POJIVOVÉ TKÁNĚ, NERVY, SRDEČNÍ CHLOPNE
 - ŘÍDKÁ POJIVOVÁ TKÁŇ, PŘÍZNĚ ... 6.6
 PERIFERNÍ NERVOVÝ SYSTÉM
 EPITELIUM PRŮDUŠEK, NADLEDVINY A

MUCINÓZNÍ ŽLÁZY
C = DÝCHAČÍ SOUSTAVA

Malina Josef 44 YEAR, neděle 1. listopad 1981 A) SPEKTRÁLNÍ SIMULÁRNÍ PROCESS E # MIKROORGANISMY A CIZOPASNÉ ČERVY 03 C # DÝCHACÍ SOUSTAVA MUCINÓZNÍ ŽLÁZY Staphylococcus aureus D=0,150 MUCINÓZNÍ ŽLÁZY - Staphylococcus aureus MUCINÓZNÍ ŽLÁZY - Staphylococcus aureus D=0,549 ZHORŠENÍ 17%	ZPĚT ZPRÁVA TYP 1 ZPRÁVA TYP 2 ZPRÁVA TYP 3 RESETOVAT VÝBĚR POKROČILÁ ZPRÁVA
--	---

Na obrázku našeho příkladu vidíme také zkušebně přidáný záznam VEGETO-TESTU o ZHORŠENÍ, ale přesnější informace pochází ze záznamu nálezu mikroba s koeficientem D přidáného z obrazovky DIAGNOSTIKY, ne ze SROVNÁVACÍ ANALÝZY.

Malina Josef 44 YEAR, neděle 1. listopad 1981 A) SPEKTRÁLNÍ SIMULÁRNÍ PROCESS E # MIKROORGANISMY A CIZOPASNÉ ČERVY 03 C # DÝCHACÍ SOUSTAVA MUCINÓZNÍ ŽLÁZY Staphylococcus aureus D=0,150 MUCINÓZNÍ ŽLÁZY - Staphylococcus aureus MUCINÓZNÍ ŽLÁZY - Staphylococcus aureus D=0,549 ZHORŠENÍ 17%
--

23.06.2026 14:59:28		MUCINÓZNÍ ŽLÁZY - Staphylococcus aureus	V			58 %		0,549
------------------------	--	---	---	--	--	------	--	-------

Proto buďte opatrní při přidávání záznamů ze SROVNÁVACÍ ANALÝZY, hodnoty čísel mohou být zavádějící. ZHORŠENÍ (OSLABUJÍCÍ REAKCE) je správná informace, ale koeficient D se nevztahuje na mikroorganismus, nýbrž na hypotetický stav disperze D daného ŘEZU po působení patogenu (nálezu).

Správný koeficient disperze D mikroorganismu, který potřebujeme pro budoucí porovnávání a sledování zlepšení nebo zhoršení stavu, je ten, který přidáváme z formuláře nálezů (shod) na obrazovce DIAGNOSTIKY (a zobrazí se nám po zatržení potřebných ETALONŮ).

Jinak řečeno – pokud z nějakého důvodu přidáváte do ZPRÁVY záznam VEGETO-TESTU „V“ ze SROVNÁVACÍ ANALÝZY, ujistěte se, že přidáváte také záznam nálezu s podstatným koeficientem D na obrazovce DIAGNOSTIKY.

Až máme hotové interní VEGETO-TESTY MIKROORGANISMŮ, opakujeme kroky 1–4 i s ETALONEM PATOLOGIE.


Provedeme VEGETO-TEST INTERNÍ na 5ti nálezech s nejnižším koeficientem D a do ZPRÁVY přidáváme pouze ty se ZHORŠUJÍCÍ (OSLABUJÍCÍ REAKCÍ). ZLEPŠENÍ (POSILUJÍCÍ REAKCE) znamená, že problém tam není, a proto není potřeba přidávat nález do ZPRÁVY.

Když skončíme s daným ŘEZEM/orgánem, vrátíme se zpět do KARTOTÉKY a vybereme další ŘEZ s nejnižším indexem OD v pořadí. Následně opakujeme stejné kroky 1–4 (hlavně s ETALONY PATOLOGIE a MIKROORGANISMŮ).

VYHLEDÁVÁNÍ RAKOVINY

Bez metody MANUÁLNÍ ANALÝZY se neobejdeme právě v situaci, kdy se zaměřujeme na frekvenční nálezy (shody v ETALONECH) spojené s rakovinou.

U rakovin provádíme analýzu na specifických orgánech, např. ženská rakovina prsu (viz obrázek níže) na ŘEZECH spojených s žlázou:

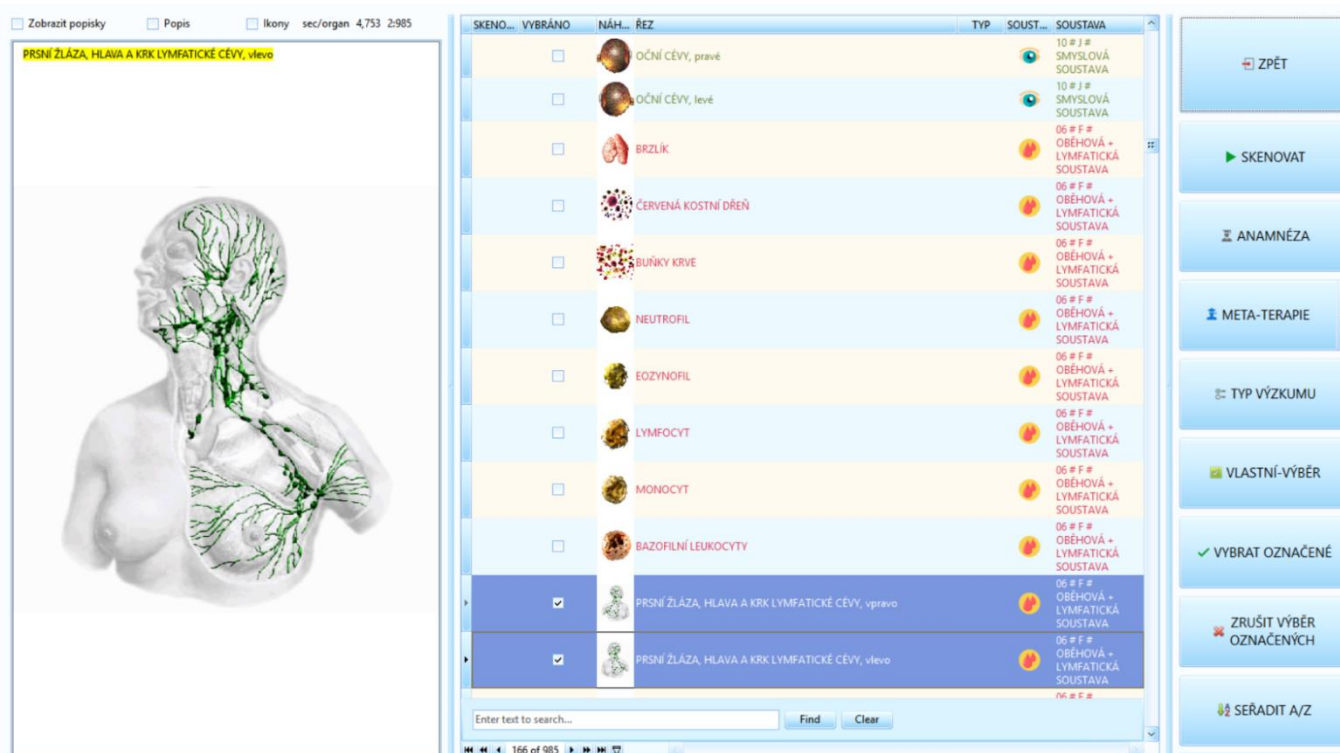

Naskenujeme ŘEZY Ze všech stran (v našem příkladu je přesný název „PRSNÍ ŽLÁZA“) a opakujeme kroky 1 – 4 z MANUÁLNÍ ANALÝZY.

Pro dohledání jakékoli rakoviny skenujeme tedy vždy potřebný orgán. Další příklady:

- **Prostata**
- **Játra**
- **Tlusté/tenké střevo**
- **Mozek**
- **Žaludek**

Nálezy rakovin se zobrazují pod **ETALONEM „PATOLOGIE“**: někdy přímo slovem rakovina, jindy v lékařských termínech jako karcinom, lipom apod. Provádíme interní VEGETO-TESTY nálezů

spojených s rakovinou, a to až do koeficientu **D 1.8**. Jakmile se objeví ZHORŠENÍ (OSLABUJÍCÍ REAKCE), tak nerovnováhu, spojenou s rakovinou, máme potvrzenou na buněčné úrovni. Čím nižší je koeficient D, tím je nález rozvinutější (rozšířenější).

VYBRÁNO	SKUPL...	ETALON
☐	A #	ORGÁNOVÉ PREPARÁTY
☐	B #	BIOCHEMICKÁ HOMEOSTÁ...
☒	C #	PATOLOGIE
☐	D #	ALERGENY
☐	E #	MIKROORGANISMY A CIZ...
☐	F #	ALOPATIE
☐	G #	HOMEOPATIE
☐	H #	FYTOTERAPIE
☐	I #	VÝŽIVOVÉ DOPLŇKY A PA...
☐	J #	POTRAVINY
☐	K #	LITOTERAPIE
☐	L #	STOPOVÉ PRVKY
☐	N #	KŮŽE
☐	M #	FYZIOTERAPIE
☐	Q #	ZÁTĚŽ NA ŽIVOTNÍ PROS...
☐	O #	STOPOVÉ PRVKY VE VLAS...
☐	P #	MATICE EMOCÍ
☐	S7	SAHARARA meridiány: VC ...
☐	S6	AJNA meridiány: MC + TR
☐	S5	VISHUDHA meridiány: P + ...
☐	S4	ANÁHATA meridiány: C + IG
☐	S3	MANIPURA meridiány: F + ...
☐	S2	SVADHISTANA meridiány: ...
☐	S1	MULADHARA meridiány: R...
☐		Vitamíny
☐		Nedostatky mikroživin

Enter text to search...		Find	Clear
	0,000		PRSNÍ ŽLÁZA, HLAVA A KRK LYMFATICKÉ CÉVY,...
	0,983		OPTIMÁLNÍ DISPERZE
	0,000		VIRTUÁLNÍ MODEL
	0,631		MASTOPATIE
	0,742		SKLERODERMIE
	0,863		OSLABENÍ LEDVIN - PREDISPOZICE K CYSTĚ, A...
	0,936		LYMFADENITIDA
	0,965		MASTALGIE (BOLEST PRSOU)
	1,031		ADENOKARCINOM MLÉČNÉ ŽLÁZY
	1,094		HIDRADENITIDA
	1,257		ZHOUBNÉ NOVOTVARY # T
	1,412		LIPOGRANULOM MLÉČNÉ ŽLÁZY
	1,458		LYMFANGITIDA (ZÁNĚT LYMFATICKÝCH CÉV)
	1,535		LIPOM MLÉČNÉ ŽLÁZY
	1,599		FIBROADENOM MLÉČNÉ ŽLÁZY
	1,625		MONONUKLEOZA
	1,832		PAPILOM PRŮTOKU MLÉČNÉ ŽLÁZY
	1,941		JASNOBUNĚČNÝ KARCINOM MLÉČNÉ ŽLÁZY
	2,011		LUPUS ERYTHEMATODES (ZÁVAŽNÉ AUTOIMU...
	2,044		MASTITIDA 82 (ZÁNĚT MLÉČNÉ ŽLÁZY)
	2,217		SOLIDNÍ KARCINOM MLÉČNÉ ŽLÁZY
	2,956		SARKOIDÓZA

DALŠÍ DŮLEŽITÉ FUNKCE NA OBRAZOVCE DIAGNOSTIKY

OPTIMÁLNÍ DISPERZE – koeficient (index) OD daného orgánu je zobrazený i ve formuláři nálezů. Koeficient koreluje s hodnotou zobrazovanou v KARTOTÉCE:

SKUPINA	ETALON	OD	DISPERZE
A #	ORGÁNOVÉ PREPARÁTY	0,000	MUCINÓZNÍ ŽLÁZY
B #	BIOCHEMICKÁ HOMEOSTÁZA	0,551	OPTIMÁLNÍ DISPERZE
C #	PATOLOGIE	0,000	VIRTUÁLNÍ MODEL
D #	ALERGENY	0,150	Staphylococcus aureus
E #	MIKROORGANISMY A CIZÍ	0,156	STREPTOCOCCUS AGALACTIA B - J&J
F #	ALOPATIE	0,217	ZÁNĚT MANDLÍ # I
G #	HOMEOPATIE	0,341	Koronavirus
H #	FYTOTERAPIE	0,551	Adenovírů
I #	VÝŽIVOVÉ DOPLŇKY A PŘÍPRAVKY		
J #	POTRAVINY		
K #	LITOTERAPIE		

TLAČÍTKA V HORNÍ ČÁSTI OBRAZOVKY:

„RESETOVAT VÝBĚR“ – odznačí všechny ETALONY

„ETALONY“ – databáze 10 000+ ETALONŮ k účelům analýzy, které si můžeme přidat k diagnostice

„WEB“ – jednoduchý webový vyhledávač, abychom nemuseli přepínat program za účelem vyhledání informací o nálezích na internetu



- Zvětší/zmenší velikost textu v seznamu nálezů

POPISKY NÁLEZŮ:

Často si nejsme jistí, co položky/nálezy z ETALONŮ znamenají, pokud nemáme medicínské vzdělání. Můžeme tedy využít jejich dodatečný popis (definici). Po označení potřebného nálezů se jeho charakteristika zobrazí v pravé dolní části obrazovky.

RESETOVAT VÝBĚR ETALONY

VYB... SKU... ETALON

- ☐ A # ORGÁNOVÉ PREPARÁTY
- ☐ B # BIOCHEMICKÁ HOMEOSTÁZA
- ☒ C # PATOLOGIE
- ☐ D # ALERGENY
- ☐ E # MIKROORGANISMY A CIZOPASNÉ ČERVY
- ☐ F # ALOPATIE
- ☐ G # HOMEOPATIE
- ☐ H # FYTOTERAPIE
- ☐ I # VÝŽIVOVÉ DOPLŇKY A PARAFARMACEUTIKA
- ☐ J # POTRAVINY
- ☐ K # LITOTERAPIE
- ☐ L # STOPOVÉ PRVKY
- ☐ N # KŮŽE
- ☐ M # FYZIOTERAPIE
- ☐ Q # ZÁTĚŽ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
- ☐ O # STOPOVÉ PRVKY VE VLASECH
- ☐ P # MATICE EMOCÍ
- ☐ S7 SAHARARA meridiány: VC + VG
- ☐ S6 AJNA meridiány: MC + TR
- ☐ S5 VISHUDHA meridiány: P + GI + Sk + Sd
- ☐ S4 ANÁHATA meridiány: C + IG
- ☐ S3 MANIPURA meridiány: F + VB + Fd + Ad
- ☐ S2 SVADHISTANA meridiány: R + V + VŠECHNY + Ly
- ☐ S1 MULADHARA meridiány: RP + E
- ☐ Vitamíny
- ☐ Nedostatky mikroživin
- ☐ Amino kyseliny
- ☐ Vitamíny a vitaminům podobné látky
- ☐ Hormony, ženské
- ☐ Hormony, mužské

3 of 32

WEB ZOBRAZIT VŠE VYB... 'A' 'A'

Enter text to search... Find Clear

0.000	KOSTNÍ TKÁŇ
0.802	OPTIMÁLNÍ DISPERZE
0.000	VIRTUÁLNÍ MODEL
0.371	TOXICKO-ALERGICKÁ ARTRITIDA
0.405	SEROZNÍ FIBROIDNÍ SYNOVITIDA
0.405	PYROFOSFÁTOVÁ ARTROPATIE
0.457	DEFORMUJÍCÍ OSTEOARTRÓZA
0.465	OSTEOPORÓZA
0.478	PSORIATICKÁ SPONDYLARTRITIDA
0.487	CALVÉHO NEMOC
0.498	DEFORMUJÍCÍ SPONDYLÓZA
0.541	DNA
0.642	DISTORZE (POŠKOZENÍ VAZŮ, SVALŮ...
0.652	ZÁNĚT OKOSTNICE
0.689	BECHTĚREVOVA NEMOC
0.771	OSTEOCHONDROM
0.797	BURSITIDA (ZÁNĚT TÍHOVÉHO VÁČKU)
0.886	OSTEOIDNÍ OSTEOM 33
1.071	REVMATICKÁ ARTRITIDA
1.157	REITERŮV SYNDROM
1.181	OSTEOGENNÍ SARKOM
1.196	BEHCETŮV SYNDROM
1.203	PANOZNÍ ARTRITIDA
1.429	NIEMANN-PICKOVA NEMOC (GENETIC...
1.476	HNISAVÁ SYNOVITIDA
1.492	SARKOIDÓZA

4 of 34

AUTOMATICKÝ MODEL VEGETO-TEST INTERNÍ ZPĚT

LADIT VŠE VEGETO-TEST EXTERNÍ SROVNÁVACÍ ANALÝZA

AMPLITUDA NELINEÁRNÍ NLS ANALÝZA AUTOMATICKÉ SKENOVÁNÍ

TISK ZPRÁVY ENTROPICKÁ ANALÝZA ELIMINAČNÍ ANALÝZA

ULOŽIT DO ZPRÁVY VÝROBA PREPARÁTU AURA

OPTIMÁLNÍ ETALON-OBJEKT ETALON INVERTOVAT OBJEKT

Dlouhodobé užívání léků může vést k lékovému onemocnění a doprovodné alergické artritidě (mnohočetná těkavá synovitida). Taková synovitida je pozorována v kloubech a při sérové nemoci.

1.8 2.5 3.0 3.4 4.2 4.9 6.8 6.6 7.4 8.2

KOSTNÍ TKÁŇ

K # MIKROSKENOVÁNÍ

Ačkoliv popisek neobsahují úplně všechny nálezy, i tak nám to často pomůže, abychom si definice nemuseli zvlášť dohledávat. Pokud je text popisku dlouhý, dá se posouvat malými šipkami na pravé straně.

ETALONY

ETALONY (tzn. kategorizovaná databáze frekvencí) dosahují v našem softwaru až do tisíců. Vždy pracujeme převážně s „PATOLOGIÍ“ a „MIKROORGANISMY“, abychom dali věci do pohybu a dopátrali se příčin obtíží. Jestliže se na začátku zaměřujeme na ostatní ETALONY, věnujeme tím pozornost převážně příznakům místo řešení příčiny, a proto nemusíme docílit výrazného zlepšení zdravotního stavu.

RESETOVAT VÝBĚR ETALONY

VYB... SKU... ETALON

- ☐ A # ORGÁNOVÉ PREPARÁTY
- ☐ B # BIOCHEMICKÁ HOMEOSTÁZA
- ☒ C # PATOLOGIE
- ☐ D # ALERGENY
- ☐ E # MIKROORGANISMY A CIZOPASNÉ ČERVY
- ☐ F # ALOPATIE
- ☐ G # HOMEOPATIE
- ☐ H # FYTOTERAPIE
- ☐ I # VÝŽIVOVÉ DOPLŇKY A PARAFARMACEUTIKA
- ☐ J # POTRAVINY
- ☐ K # LITOTERAPIE
- ☐ L # STOPOVÉ PRVKY
- ☐ N # KŮŽE
- ☐ M # FYZIOTERAPIE
- ☐ Q # ZÁTĚŽ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
- ☐ O # STOPOVÉ PRVKY VE VLASECH
- ☐ P # MATICE EMOCÍ
- ☐ S7 SAHARARA meridiány: VC + VG
- ☐ S6 AJNA meridiány: MC + TR
- ☐ S5 VISHUDHA meridiány: P + GI + Sk + Sd
- ☐ S4 ANÁHATA meridiány: C + IG
- ☐ S3 MANIPURA meridiány: F + VB + Fd + Ad
- ☐ S2 SVADHISTANA meridiány: R + V + VŠECHNY + Ly
- ☐ S1 MULADHARA meridiány: RP + E
- ☐ Vitamíny
- ☐ Nedostatky mikroživin
- ☐ Amino kyseliny

Například: Když se příliš staráme o nalezení alergenů a potravinových intolerancí (nesnášenlivosti), pak se nedozvíme, PROČ má klient alergie a potravinové intolerance?

Tímto způsobem se soustředíme pouze na příznaky, a nikoliv na samotnou příčinu, ta souvisí s výše uvedenými, dvěma základními ETALONY.

Jakmile si ale osvojíme ETALONY „MIKROORGANISMŮ“ a „PATOLOGIE“, je určitě žádoucí začít se zaměřovat na další aspekty i pomoci ostatních dostupných ETALONŮ.

Nejdůležitější věcí pro porozumění ETALONŮM je poznat rozdíl mezi NEGATIVNÍMI a POZITIVNÍMI druhy.

SEZNAM POČÁTEČNÍCH, PŘEDNASTAVENÝCH ETALONŮ:

- ORGÁNOVÉ PREPARÁTY – databáze potřebných frekvencí, které mohou být použity pro výrobu medicíny (výrobu preparátu)
- BIOCHEMICKÁ HOMEOSTÁZA – databáze hormonů, vitamínů a jiných látek, které jsou v těle v nerovnováze
- PATOLOGIE – databáze chorob
- ALERGENY – databáze alergenů
- MIKROORGANISMY A CIZOPASNÉ ČERVY – databáze virů, bakterií, parazitů, kandid apod.
- ALOPATIE – databáze alopatických léků
- HOMEOPATIE – databáze homeopatických léků
- FYTOTERAPIE – databáze léčebných bylinek pro terapii
- VÝŽIVOVÉ DOPLŇKY A PARAFARMACEUTIKA – databáze farmaceutických léků
- POTRAVINY – databáze doporučených potravin
- LITOTERAPIE – databáze terapeutických hornin k terapiím
- STOPOVÉ PRVKY – databáze těžkých kovů
- KŮŽE – databáze terapeutických kosmetických přípravků
- FYZIOTERAPIE – fyzioterapie

ZÁKLADNÍ DŮLEŽITÉ UVĚDOMĚNÍ – jestliže se ETALON skládá z pozitivních/prospěšných položek jako je jídlo, léky, různé terapie apod., pak jej považujeme za tzv. POZITIVNÍ ETALON. V pozdější kapitole se budeme učit programovat MEDIKAMENTY (tzv. „VÝROBA PREPARÁTU“), a to bychom už měli umět ETALONY správně rozlišovat. Proto se prosím dobře nad ETALONY zamýšlejte a věnujte jim pozornost.

Když ETALON nevypisuje v seznamu žádnou položku (nález), klikneme na tlačítko „ZOBRAZIT VŠE“. Toto tlačítko ale NIKDY nepoužíváme s ETALONY „PATOLOGIE“ a „MIKROORGANISMY“.

The screenshot shows the ETALON software interface. On the left, a list of ETALON categories is displayed, with 'Vitamíny' circled in red. On the right, the 'ZOBRAZIT VŠE' button is circled in red. Below the button, a table of results is shown, including various vitamins and minerals.

Value	Item
0,000	MUCINÓZNÍ ŽLÁZY
0,551	OPTIMÁLNÍ DISPERZE
0,000	VIRTUÁLNÍ MODEL
0,446	L- Methionin D6 (esenciální aminokyselina)
0,449	L-asparagin D6 (neesenciální aminokyselina)
0,454	Kalium potash karbonikum D30
0,455	L-Valin D1000 (esenciální aminokyselina)
0,458	L- Arginin D2000 (neesenciální aminokyselina)
0,468	L-asparagin D2000 (neesenciální aminokyselina)
0,471	L-kyselina asparagová D3 (neesenciální aminoky...
0,475	Retinol
0,478	Kobaltový kov D30
0,478	L- Leucin D1000 (esenciální aminokyselina)
0,481	L- Leucin D3 (esenciální aminokyselina)
0,489	CoA
0,490	Chrom Kov D30
0,493	L- Cystin D6 (neesenciální aminokyselina)
0,500	L- Citrulin D1000 (neesenciální aminokyselina)
0,500	L- Leucin D6 (esenciální aminokyselina)
0,501	Magnesia D30
0,501	1a 25-DIHYDROXY cholekalciferol
0,502	L-Cystein D6 (esenciální aminokyselina)
0,502	L- Lysin D2000 (esenciální aminokyselina)
0,502	Pyridoxin (vitamin B6) D30
0,505	L-Hydroxyprolin D2000 (neesenciální aminokyse...
0,505	Kovový molybden
0,506	Měďný kov D30
0,507	Retinol D30 (vitamin A)

Jiné ETALONY, například VITAMÍNOVÉ INDIKÁTORY, MINERÁLOVÉ INDIKÁTORY, INDIKÁTORY EFA, INDIKÁTORY TOXINŮ, MIKROBIOLOGICKÉ INDIKÁTORY aj. ukazují, v čem je nerovnováha, co je potřeba doplnit, případně co tělu chybí. Pro všechny tyto ETALONY uplatňujeme stále stejný, obecný princip a zaměřujeme se na položky/nálezy s koeficientem D do hodnoty 0,5.

Etalony vitamínů, aminokyselin, prvků, mikroživin, hormonů, neurotransmiterů a některých dalších se testují přímo na skupině DNA 1-6 na energeticky nejslabších z nich.

PŘIDÁNÍ / ODEBRÁNÍ ETALONŮ

K rozšíření nabídky databází přejdeme tlačítkem ETALONY v levé horní části obrazovky DIAGNOSTIKY.

The screenshot shows the 'DIAGNOSTIKY' software interface. In the top left corner, the 'ETALONY' button is highlighted with a red circle. The interface is divided into several sections:

- Left Panel:** A list of categories under 'VYBRÁNO' and 'ETALON'. Categories include 'ORGÁNOVÉ PREPARÁTY', 'BIOCHEMICKÁ HOMEOSTÁZA', 'PATOLOGIE', 'ALERGENY', 'MIKROORGANISMY A CIZÍ', 'ALOPATIE', 'HOMEOPATIE', 'FYTOTERAPIE', 'VÝŽIVOVÉ DOPLŇKY A PŘÍPRAVKY', 'POTRAVINY', 'LITOTERAPIE', 'STOPOVÉ PRVKY', 'KŮŽE', 'FYZIOTERAPIE', 'ZÁTĚŽ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ', 'STOPOVÉ PRVKY VE VLASÍCH', 'MATICE EMOCÍ', 'SAHARARA meridiány: VC + TR', 'AJNA meridiány: MC + TR', 'VISHUDHA meridiány: P + ...', 'ANĀHATA meridiány: C + IG', 'MANIPURA meridiány: F + ...', 'SVADHISTANA meridiány: ...', 'MULADHARA meridiány: R...', 'Hormony, ženské', 'Hormony, mužské', 'DETEKTOR VITAMÍNŮ', 'DETEKTOR MINERÁLŮ', 'EFAs DETEKTOR', and 'DETEKTOR AMINOKYSELIN'.
- Top Center:** A search bar with the text 'Enter text to search...' and buttons 'Find' and 'Clear'.
- Center Table:** A table with columns for 'POČET' and 'NÁZEV'. The rows are:

POČET	NÁZEV
0,000	MUCINÓZNÍ ŽLÁZY
0,551	OPTIMÁLNÍ DISPERZE
0,000	VIRTUÁLNÍ MODEL
- Right Panel:** A collection of buttons for various analyses, including 'AUTOMATICKÝ MODEL', 'VEGETO-TEST INTERNÍ', 'VEGETO-TEST EXTERNÍ', 'SROVNÁVACÍ ANALÝZA', 'AMPLITUDA', 'NELINEÁRNÍ NLS ANALÝZA', 'AUTOMATICKÉ SKENOVÁNÍ', 'TISK ZPRÁVY', 'ENTROPICKÁ ANALÝZA', 'ELIMINAČNÍ ANALÝZA', 'ULOŽIT DO ZPRÁVY', 'VÝROBA PREPARÁTU', 'AURA', 'OPTIMÁLNÍ D. ŘEZU', 'ETALON(NÁLEZ) - OBJEKT(ŘEZ)', 'ETALON(NÁLEZ)', 'INVERTOVAT', and 'OBJEKT(ŘEZ)'. Below these buttons is a graph showing a blue line with error bars, and a text box with the following text:

1.8 KOSTERNÍ SOUSTAVA
2.6 POJIVOVÉ TKÁNĚ, NERVY, SRDEČNÍ CHLOUPKY
- ŘÍDKÁ POJIVOVÁ TKÁŇ, PRÍŽNÉ ... 6.6
PERIFERNÍ NERVOVÝ SYSTÉM, EPITELIUM PRŮDUŠEK, NADLEDVINY A ŠTÝTLNÁ ŽLÁZA.

Měli bychom vidět takovouto obrazovku:

The screenshot shows the 'DIAGNOSTIKY' software interface. The left panel displays a list of categories under 'SKUPINA 0' and 'VYBRÁ...'. The categories are:

- Mezinárodní klasifikace nemocí (GUIDE) - 1603
- AURA - 45
- Alopatie STARÁ - 507
- JÓGA - DROGY - 10196
- Gemmoterapie - 119
- Diagnostické přípravky 2012.sel - 0
- Preparáty medicínské 2012.sel - 0
- SIMPLE - 58
- Tasemnice - 48
- Hlístice - 30
- Kočky a ostatní - 0
- Všechny toxiny - 30
- Alergeny - 313
- Časová osa věku - 114
- Akupunktura - 360
- Tabulka věkových kategorií - 3
- Alergie přidat zpětnou vazbu - 8
- Tabulka aminokyselin - 26
- Anti -Age tabulka - 12
- Proces chování - 6
- Bio - M - E tabulka - 13
- Bio-organ tabulka - 34

The right panel shows a table of results with columns for 'NÁZEV' and 'POČET'. The rows are:

NÁZEV	POČET
Adenin	Isoleucin
Adenosin	Leucin
Alanin	Lysin
Arginin	Methionin
asparagová kyselina	Prolin
Citrulin	Serin
Cystein	Taurin
Cytosin	Threonin
Fenylalanin	Tryptofan
Gaba	Tymin
Glutamin	Tyrozín
Guanin	Uracil
Histidin	Valin

Skupiny a podskupiny ETALONŮ zobrazujeme kliknutím na ikonku plus „+“ na levé straně řádku.

SKUPINA	0	VYBRÁ...	NÁZEV	POČET
	☐		BA # ANTIBAKTERIÁLNÍ PŘÍPRAVKY	121
	☐		BC # ANTIVIRÁLNÍ PŘÍPRAVKY	49
	☐		BD # ANTIMYKOTICKÉ PŘÍPRAVKY	29
	☐		BB # ANTHELMINTICKÉ PŘÍPRAVKY	6
	☐		(INV) VIRY	46
	☐		(INV) FUNGI (HOUBY)	69
	☐		AG # VITAMINOVÉ BLENDS	17
	☐		MÉNĚ BIOCHEMIE *	436
	☐		KME	0
	☐		LIFE 2021	0
	☒		Diagnostika pomocí meridiánů	0
	☐		Si (Tenké střevo)	0
	☐		Si redundance	2
	☐		Si nedostatečnost	2
	☐		Hi (srdce)	0
	☐		Gb (mezihrudní nřtapa)	0
	☐		LR (lřtra)	0
	☐		Bi (mezihrudní nřtapa)	0
	☐		Kd (nřvřev)	0
	☐		Li (tlusté střevo)	0
	☐		Lu (nřrce)	0
	☐		St (křenypan)	0

Při čtení ETALONŮ přemýšlíme, co popisuje a obsahuje.

Například:



Onemocnění plic

79

Onemocnění plic (nemoci a choroby plic) nenaznačují nic dobrého, pozitivního nebo nápomocného. Proto považujeme tento ETALON za NEGATIVNÍ.

Kdežto naopak „BACHOVY KVĚTINY“ (květové esence) představují známou účinnou terapii, proto považujeme ETALON za POZITIVNÍ.



BACHOVY KVĚTINY

44

ETALONY, KTERÉ NEJSOU URČENY PRO VEGETO-TEST

Máme obecné pravidlo, že u žádného terapeutického ETALONU VEGETO-TEST nepoužíváme. Dále u „ORGÁNOVÝCH PREPARÁTŮ“, protože jsou také na úrovni terapie.

VYB...	SKU...	ETALON
☒	A #	ORGÁNOVÉ PREPARÁTY
☐	B #	BIOCHEMICKÁ HOMEOSTÁZA
☐	C #	PATOLOGIE
☐	D #	ALERGENY
☐	E #	MIKROORGANISMY A CIZOPASNÉ ČERVY
☐	F #	ALOPATIE
☐	G #	HOMEOPATIE
☒	H #	FYTOTERAPIE
☐	I #	VÝŽIVOVÉ DOPLNKY A PARAFARMACEUTIKA
☒	J #	POTRAVINY
☒	K #	LITOTERAPIE
☐	L #	STOPOVÉ PRVKY
☐	N #	KŮŽE
☒	M #	FYZIOTERAPIE
☐	Q #	ZÁTEŽ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
☐	O #	STOPOVÉ PRVKY VE VLASECH
☐	P #	MATICE EMOCÍ
☐	S7	SAHARARA meridiány: VC + VG
☐	S6	AJNA meridiány: MC + TR
☐	S5	VISHUDHA meridiány: P + GI + Sk + Sd
☐	S4	ANÁHATA meridiány: C + IG
☐	S3	MANIPURA meridiány: F + VB + Fd + Ad
☐	S2	SVADHISTANA meridiány: R + V + VŠECHNY + Ly
☐	S1	MULADHARA meridiány: RP + E

A poslední výjimkou jsou „POTRAVINY“ – seznam totiž obsahuje pouze doporučené položky. VEGETO-TEST nemá smysl, protože všechno vyhodnocené jídlo je tělu prospěšné. Nicméně jen shody (nálezy) s disperzí D pod 0,5 potřebujeme nejvíce.

SKENOVÁNÍ VHODNÝCH ŘEZŮ PRO KAŽDÝ ETALON

Každý ETALON kombinujeme s vhodnými ŘEZY. Zde je několik příkladů:

- **STOPOVÉ PRVKY** – Stopové prvky jsou těžké kovy. Když si zatrhneme tento ETALON, lze v seznamu vidět, že každá položka má ve svém názvu na konci uvedeno „ve vlasech“ – to je nápoděda k tomu hledat těžké kovy ve vlasech. Tedy vhodným ŘEZEM k naskenování je „VLASOVÁ CIBULKA“ (vlasová kutikula).
- **BIOCHEMICKÁ HOMEOSTÁZA** – Pod pojmem Biochemie si můžeme představit například hormony, vitamíny, chemické látky apod. Nejlepší místo pro sběr takovýchto výsledků je krev. Pokud pracujeme s ETALONEM „BIOCHEMICKÁ HOMEOSTÁZA“, naskenujeme a následně diagnostikujeme ŘEZ „KREVNÍ BUŇKY“.

OSTATNÍ ETALONY - V rozšířené nabídce dostupných ETALONŮ si můžeme zvolit z širokého výběru. Čím více jich známe a používáme, tím lépe dokážeme volit vhodný postup a odhalovat původ nerovnováhy. Nicméně není potřeba znát a používat každý jeden z nich.

VEGETO-TEST EXTERNÍ

EXTERNÍ test umožňuje vyzkoušet reakci látek, umístěných do černého pohárku (součást základního příslušenství Oberonu).

Funkci VEGETO-TEST EXTERNÍ najdeme na obrazovce DIAGNOSTIKY. EXTERNÍ TEST doporučujeme používat při prázdném lačném žaludku klienta, aby se nemíchali frekvence. Pak jednoduše umístíme doporučenou dávku medikamentu (léku, bylinky, tinktury apod.) do připojeného černého pohárku a spustíme VEGETO-TEST EXTERNÍ. Tím vytestujeme, jestli je medikament pro klienta vhodný.

Výsledky jsou nejpřesnější před jídlem a užitím jakýchkoli léků ze strany klienta.




Pro vytestování platí stejné pravidlo – opět je potřeba zvolit a naskenovat správný orgán/ŘEZ pro testovanou látku. Například nás zajímá reakce léku na štítnou žlázu, v tom případě musíme naskenovat ŘEZY spojené se štítnou žlázou. V příkladu, který si níže uvedeme, testujeme doplněk Vápníku na KOSTNÍ TKÁŇ. Vždy se tedy prosím ujistěte, že procesu dobře rozumíte a vybírejte co nejvhodnější ŘEZY/orgány k otestování.

Mějte také na paměti, že jednotliví výrobci doplňků stravy se v obsahu složek a konzervačních látek odlišují. Doplněk Vápníku od jedné firmy může mít naprosto odlišné ingredience od ostatních značek. Dále je třeba si uvědomit, že na stejný doplněk stravy reagují klienti individuálně.

POSTUP EXTERNÍHO VEGETO-TESTU

1. Vybereme vhodný ŘEZ/orgán pro vytestování doplňku.
2. Pořídíme čerstvý SKEN zvoleného ŘEZU a přejdeme na obrazovku DIAGNOSTIKY.
3. Na obrazovce DIAGNOSTIKY resetujeme výběr (tlačítkem „RESETOVAT VÝBĚR“) a klikneme na „VEGETO-TEST EXTERNÍ“

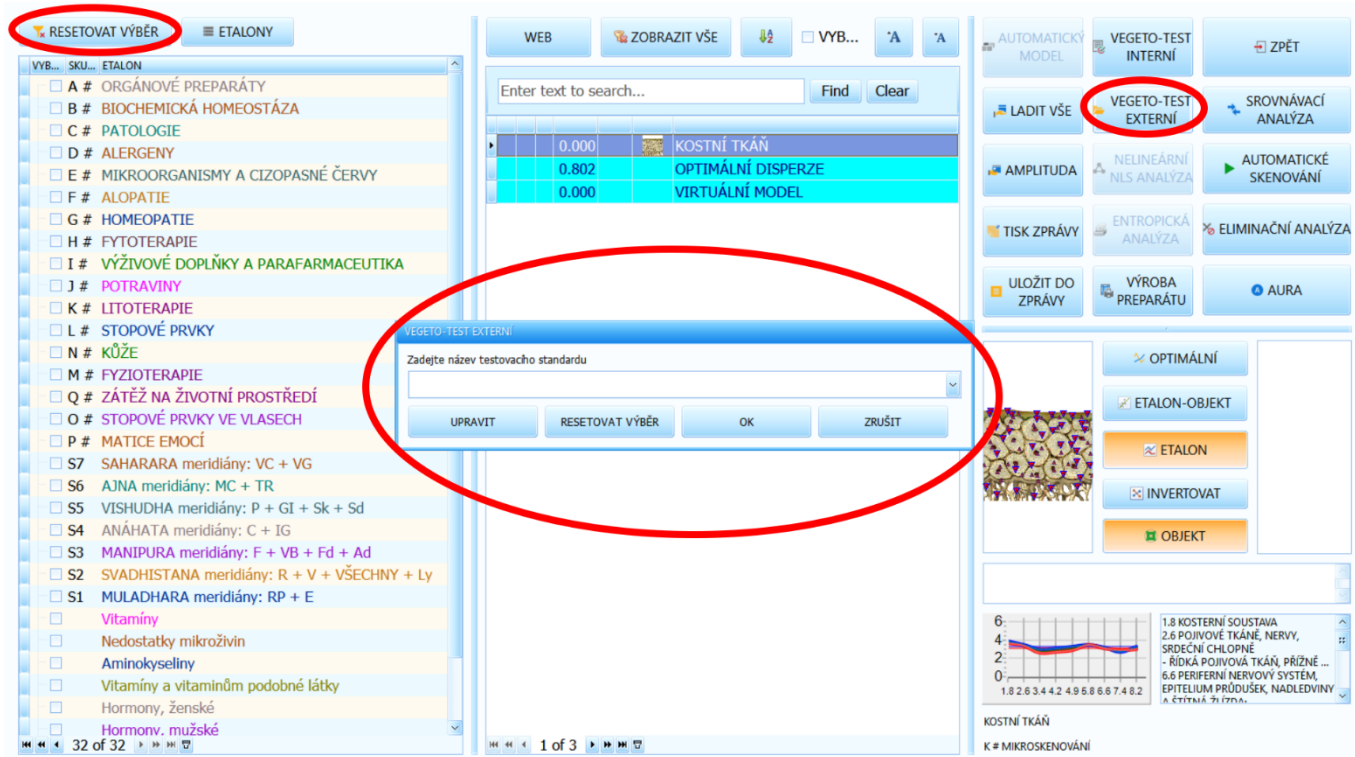

4. Po kliknutí na „VEGETO-TEST EXTERNÍ“ se objeví nové okénko s prázdným textovým polem. Vepíšeme název a dávkování testované látky/léku. Jestli např. medikament doporučuje 2 tablety každý den, vložíme tuto požadovanou dávku do pohárku.

VEGETO-TEST EXTERNÍ

Zadejte název testovacího standardu

Vápník 600mg

▼


UPRAVIT

RESETOVAT VÝBĚR

OK

ZRUŠIT

- Pečlivě zkontrolujeme vepsané údaje a potvrdíme tlačítkem „OK“. Test reakce ihned začne. Také se ujistěte, že má klient správně nasazenou náhlavní soupravu (skener) a látka (medikament) je umístěn v pohárku. Během krátkého trvání testu půjde vidět název testovaného medikamentu v horní levé části obrazovky.

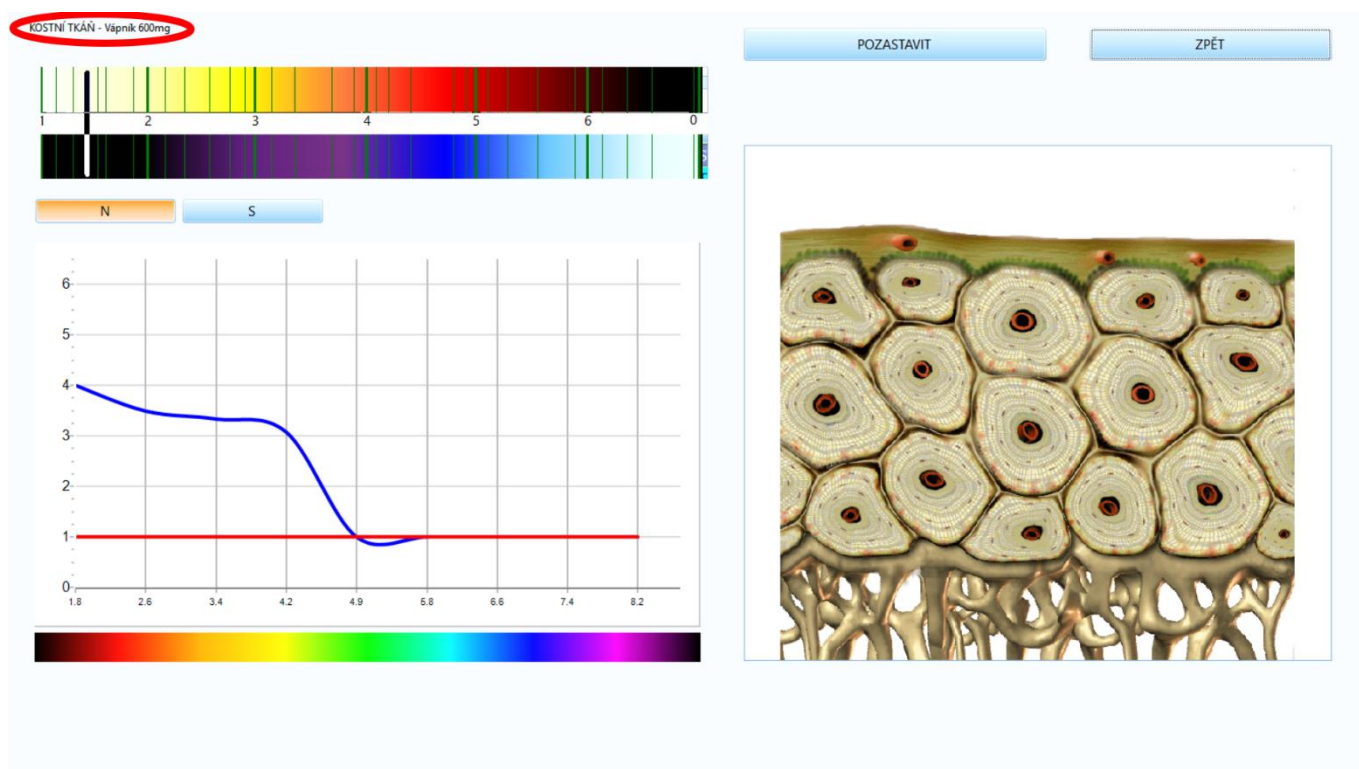

6. Ve chvíli, kdy je test dokončen, se objevíme zpátky na obrazovce DIAGNOSTIKY a přejdeme rovnou ke SROVNÁVACÍ ANALÝZE.

7. Pokud na obrazovku SROVNÁVACÍ ANALÝZY přejdeme přímo po testu, měla by také sama, automatizovaně vybrat potřebné záznamy ke srovnání a zobrazit požadovaný výsledek – i tak ale výběr pečlivě kontrolujeme, případně upravíme!

Jestliže testujeme různé přírodní doplňky stravy, tak dokonce i 1% ZLEPŠENÍ (POSILUJÍCÍ REAKCE) je výborný výsledek.

Když testujeme různé ne-přírodní doplňky stravy, mají pro tělo přínos až se ZLEPŠENÍM (POSILUJÍCÍ REAKCÍ) nad 15%+ !!!

Jakmile přírodní doplněk stravy způsobuje ZHORŠENÍ (OSLABUJÍCÍ REAKCI), bude to pravděpodobně způsobeno použitými ingrediencemi. Nebuďte tedy překvapeni, pokud uvidíte ZHORŠENÍ (OSLABUJÍCÍ REAKCI) i u přírodních doplňků stravy.

PREPARÁTY (medikamenty, vytvořené skrze funkci VÝROBU PREPARÁTU) touto metodou netestujeme – PREPARÁTY nejsou koncentrované, a proto ani nemohou být korektně rozpoznány!

ENTROPICKÁ ANALÝZA

ENTROPICKOU ANALÝZOU zjišťujeme závažnost vybraného nálezu.

K funkci se dostaneme skrze obrazovku DIAGNOSTIKY. ENTROPICKÁ ANALÝZA funguje správně pouze s ETALONEM „PATOLOGIE“. Může se stát, že bude toto tlačítko zšedivělé (nefunkční), dokud není zvolený (zatržený) ETALON „PATOLOGIE“.

The screenshot shows the 'ENTROPICKÁ ANALÝZA' software interface. On the left, there is a list of categories and sub-items, with 'B # BIOCHEMICKÁ HOMEOSTÁZA' selected. The middle section displays a table of test results. The right section contains various control buttons and a graph.

Value	Description
0.000	KOSTNÍ TKÁŇ
0.802	OPTIMÁLNÍ DISPERZE
0.000	VIRTUÁLNÍ MODEL
0.306	OBECNÉ železo - vazebné kapacity sér...
0.324	Myoglobin *
0.340	Prostata - specifického antigenu (PSA)
0.340	Močoviny v krvi *
0.353	Antidiuretický hormon *
0.360	Alfa2 Globuliny *
0.361	Imunoglobuliny G *
0.365	Imunoglobuliny *
0.374	Globulin alfa 1 *
0.376	Vitamin A (retinol) *
0.378	Beta Globuliny *
0.382	Tyroxin vázaný globulin *
0.386	Krevní sérum albumin *
0.387	Kalcitonin *
0.394	Thyreoglobulin *
0.394	Prolaktin *
0.403	Parathormon *
0.404	GAMMA GLUTAMYLTRANSPEPTIDÁZA*
0.407	Vitamin D3 *
0.425	Properdin *
0.427	LUTEINIZAČNÍ HORMON*
0.430	PROTEIN C *
0.431	Imunoglobulin M *

The right section of the interface includes buttons for 'AUTOMATICKÝ MODEL', 'VEGETO-TEST INTERNÍ', 'ZPĚT', 'LADIT VŠE', 'VEGETO-TEST EXTERNÍ', 'SROVNÁVACÍ ANALÝZA', 'AMPLITUDA', 'NELINEÁRNÍ NLS ANALÝZA', 'AUTOMATICKÉ SKENOVÁNÍ', 'TISK ZPRÁVY', 'ENTROPICKÁ ANALÝZA' (highlighted with a red circle), 'ELIMINAČNÍ ANALÝZA', 'ULOŽIT DO ZPRÁVY', 'VÝROBA PREPARÁTU', and 'AURA'. Below these buttons is a graph showing a fluctuating line, and a text box with the following text: '1.8 KOSTERNÍ SOUSTAVA', '2.6 POJIVOVÉ TKÁŇE, NERVY, SRDEČNÍ CHLOPNE', '6.6 PERIFERNÍ NERVOVÝ SYSTÉM, EPITELIUM PRŮDUŠEK, NADLEDVINY', 'A. ETTNÁLÁ 31.12.2014'.

Jakmile máme zvolený ETALON „PATOLOGIE“, označíme si některý nález ze seznamu a klikneme na tlačítko „ENTROPICKÁ ANALÝZA“.

The screenshot shows the ETALON software interface. On the left, a list of categories is shown, with 'PATOLOGIE' selected and highlighted by a red circle. In the center, a table of findings is displayed, with 'SEROZNÍ FIBROIDNÍ SYNOVITIDA' selected and highlighted by a red circle. On the right, a panel of buttons includes 'ENTROPICKÁ ANALÝZA', which is also highlighted by a red circle. Other buttons include 'AUTOMATICKÝ MODEL', 'VEGETO-TEST INTERNÍ', 'VEGETO-TEST EXTERNÍ', 'AMPLITUDA', 'Nelineární NLS ANALÝZA', 'TISK ZPRÁVY', 'ULOŽIT DO ZPRÁVY', 'VÝROBA PREPARÁTU', 'ZPĚT', 'SROVNÁVACÍ ANALÝZA', 'AUTOMATICKÉ SKENOVÁNÍ', and 'ELIMINAČNÍ ANALÝZA'.

OBRAZOVKA ENTROPICKÉ ANALÝZY

Cílem této funkce je vizuálně (graficky) zobrazit, jak se závažnost choroby projevuje. Graf zachycuje vývoj choroby v průběhu času a systémy orgánů, které už mohou být touto chorobou ovlivněny.


The screenshot shows the results of the ENTROPICKÁ ANALÝZA for 'SEROZNÍ FIBROIDNÍ SYNOVITIDA'. On the left, a table lists findings with their corresponding 'DISPERZE' values. In the center, a 3D plot shows the spatial distribution of the findings. On the right, a bar chart displays the entropy values for different levels of the system: Organism (0,405), System (0,399), Organ (0,4), Tissue (0,433), Cell (0,525), Subcell (0,651), and Molecular (0,761). Below the bar chart, a line graph shows the progression of the disease over time, with a red line representing the current state and a blue line representing the baseline. The graph is labeled 'PROSTATA -- WALA'.

ID	ETALON	DISPERZE
1	PROSTATA -- WALA	0,000
4	NODI LYMFY - TIBIALES ANTERIORES Přední tibální lymfatické uzliny	0,763
3	NODI LYMFY - SACRALES Sakrální lymfatické uzliny	0,775
8	NERVUS ILIOINGUINALIS* Ilioinguinální nerv L1	0,855
7	PLEXUS SACRALIS Plexus sacralis je největší nervová pletěň v lidském těle. Je vytvořena po stranách kosti křížové. Vznika spojením předních větví sak	0,877
2	NODI LYMPH. INGUINALES SUPERFICIALES Povrchové tříselné lymfatické uzliny	0,898
6	NERVUS GENIOFEMORALIS* Geniofemorální nerv L1-L3	0,900
5	ARTERIA PUDENDA INTERNA Vnitřní pudendální tepna	1,033

Systémy orgánů jsou zastoupeny písmenky a popíšeme si je takto:

- „O“ – Ostatní
- „S“ – Svaly
- „L“ – Lymfy
- „A“ – Artérie neboli tepny
- „Ž“ – Žíly
- „N“ - Nervy

Přechodem na obrazovku ENTROPIE automaticky vygenerujeme novou hodnotu **1-7 – tj. číslo**, zobrazené (oranžově podsvícené) také v pravé horní části obrazovky - v seznamu systémových úrovní organismu (v našem příkladu číslo 6). Toto číslo si nazveme „ÚROVEŇ ENTROPIE“ (nebo také „ÚROVEŇ ZÁVAŽNOSTI“ či jen ENTROPIE).

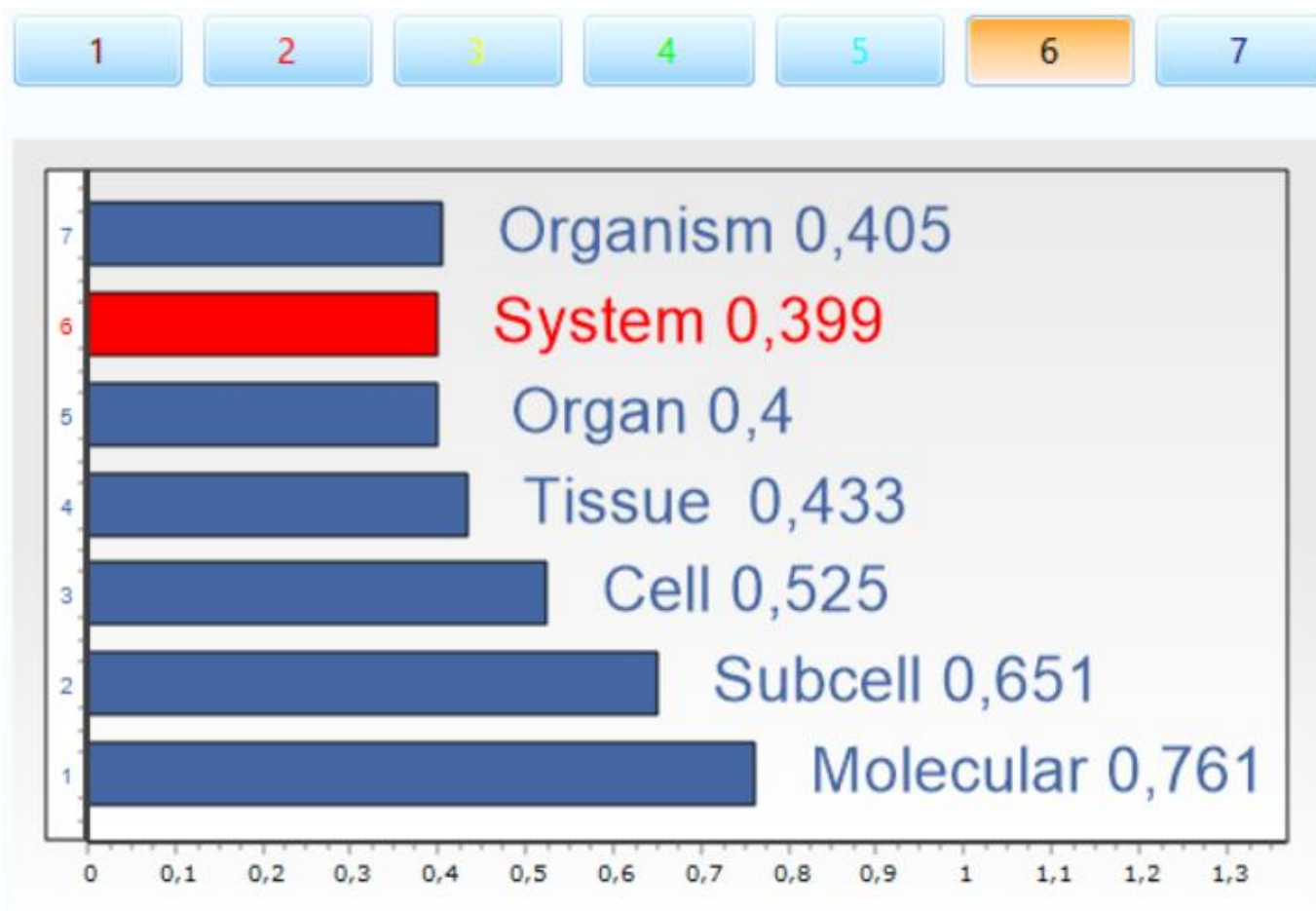

MODRÁ a ČERVENÁ křivka v grafu představuje Hypotenzi a Hypertenzi frekvence daného orgánu/ŘEZU. Obecně si můžeme definovat, že když se modrá křivka nachází nad červenou, indikuje to ne-chronické zdravotní obtíže. Pokud je ale červená křivka nad modrou, je to příznak možného chronického onemocnění.

RESETOVAT VÝBĚR ETALONY

WEB ZOBRAZIT VŠE VYBRAT

Enter text to search... Find Clear

	0.000			STĚNA TENKÉHO STŘEVA
	0.378			OPTIMÁLNÍ DISPERZE
	0.281			VIRTUÁLNÍ MODEL
• 10	0.242			ENZYMOPATIE – NEDOSTATEČNÁ STŘEVNÍ ENTER...
• 10	0.341			GLUTENOVÁ ENTEROPATIE
• 1	0.353			POLYP TENKÉHO STŘEVA
	0.377			POLYARTERITIS NODOSA (AUTOIMUNITNÍ ONEMO...
• 10	0.428			ENTERITIDA (ZÁNĚT TENKÉHO STŘEVA)
	0.618			INFARKT TENKÉHO STŘEVA
	0.730			HEMANGIOM TENKÉHO STŘEVA
• 10	0.859			DYSBAKTERIÓZA STŘEV
	0.868			NEURINOM TENKÉHO STŘEVA
	1.089			CROHNOVA NEMOC
	1.145			LEIOMYOM TENKÉHO STŘEVA
	1.318			LYMFAGIOM TENKÉHO STŘEVA
	1.474			NESPECIFICKÁ VŘEDOVÁ KOLITIDA
	1.533			ABSCEZ MEZISTŘEVNÍ
	1.750			FIBROM TENKÉHO STŘEVA
	1.843			RETIKULOSARKOM TENKÉHO STŘEVA
• 1	2.344			LYMFOSARKOM TENKÉHO STŘEVA

3 of 32

1 of 20

AUTOMATICKÝ MODEL VEGETO-TEST INTERNÍ ZPĚT

LADIT VŠE VEGETO-TEST EXTERNÍ SROVNÁVACÍ ANALÝZA

AMPLITUDA NELINEÁRNÍ NLS ANALÝZA AUTOMATICKÉ SKENOVÁNÍ

TISK ZPRÁVY ENTROPICKÁ ANALÝZA ELIMINAČNÍ ANALÝZA

ULOŽIT DO ZPRÁVY VÝROBA PREPARÁTU AURA

OPTIMÁLNÍ ETALON-OBJEKT ETALON INVERTOVAT OBJEKT

STĚNA TENKÉHO STŘEVA

B = TRÁVICÍ SOUSTAVA

ÚROVEŇ (STUPEŇ) ENTROPIE ovšem nebereme vážněji a důležitěji než samotný koeficient D zkoumaného nálezu. Analýza koeficientu D je tím nejspolehlivějším způsobem, jak zjistit, jestli je choroba přítomna (a už se i projevuje). Koeficienty D vždy vyhodnocujeme jako první.

NELINEÁRNÍ NLS ANALÝZA

NLS ANALÝZA trochu připomíná proces ENTROPICKÉ ANALÝZY, ale vyhodnocená čísla znamenají něco úplně jiného. Používáme ji výhradně s ETALONEM „BIOCHEMICKÁ HOMEOSTÁZA“.

Pokud je vybrán jiný ETALON než „BIOCHEMICKÁ HOMEOSTÁZA“, tlačítko „NLS ANALÝZA“ bude opět zšedivělé a nefunkční.


NLS ANALÝZA nám zobrazí hodnotu, určující rovnováhu biochemické látky v těle - deficit (nedostatek látky) či naopak nadbytek (látky je příliš mnoho).

Pro získání TĚTO individuální hodnoty vyresetujeme výběr, zvolíme položku nálezů z ETALONU „BIOCHEMICKÁ HOMEOSTÁZA“, a poté klikneme na tlačítko „NELINEÁRNÍ NLS ANALÝZA“.

The screenshot shows the software interface with the 'BIOCHEMICKÁ HOMEOSTÁZA' category selected in the left sidebar. The 'NELINEÁRNÍ NLS ANALÝZA' button is highlighted in the top right. The main window displays a list of parameters and their values, with 'KOSTNÍ TKÁŇ' and 'OPTIMÁLNÍ DISPERZE' highlighted. The 'OBJEKT (ŘEZ)' button is also visible in the bottom right.

PARAMETR	HLADINA	POZNÁMKA
0,000	KOSTNÍ TKÁŇ	
0,802	OPTIMÁLNÍ DISPERZE	
0,000	OPTIMÁLNÍ DISPERZE	
0,306	OBECNÉ železo - vazebné kapacity séra (TIBC) *	
0,324	Prostagromin	
0,340	Prostata - specifického antigenu (PSA)	
0,340	Močoviny v krvi *	
0,353	Antidiuretický hormon *	
0,360	Alfa2 Globuliny *	
0,361	Imunoglobuliny G *	
0,365	Imunoglobulin *	
0,374	Globulin alfa 1 *	
0,376	Vitamin A (retinol) *	
0,378	Beta Globuliny *	
0,382	Tyroxin vázaný globulin *	
0,386	Krevní sérum albumin *	
0,387	Kalcitonin *	
0,394	Thyreoglobulin *	
0,394	Prolaktin *	
0,403	Parathormon *	
0,404	GAMMA GLUTAMYLTRANSEPTIDÁZA*	
0,407	Vitamin D3 *	
0,425	Properdin *	
0,427	LUTEINIZAČNÍ HORMON*	
0,430	PROTEIN C *	
0,431	Imunoglobulin M *	

Výpočet se opět automaticky vyhodnotí ihned po přechodu na obrazovku NLS ANALÝZY. Ta vypadá velice podobně, jako ENTROPICKÁ ANALÝZA:

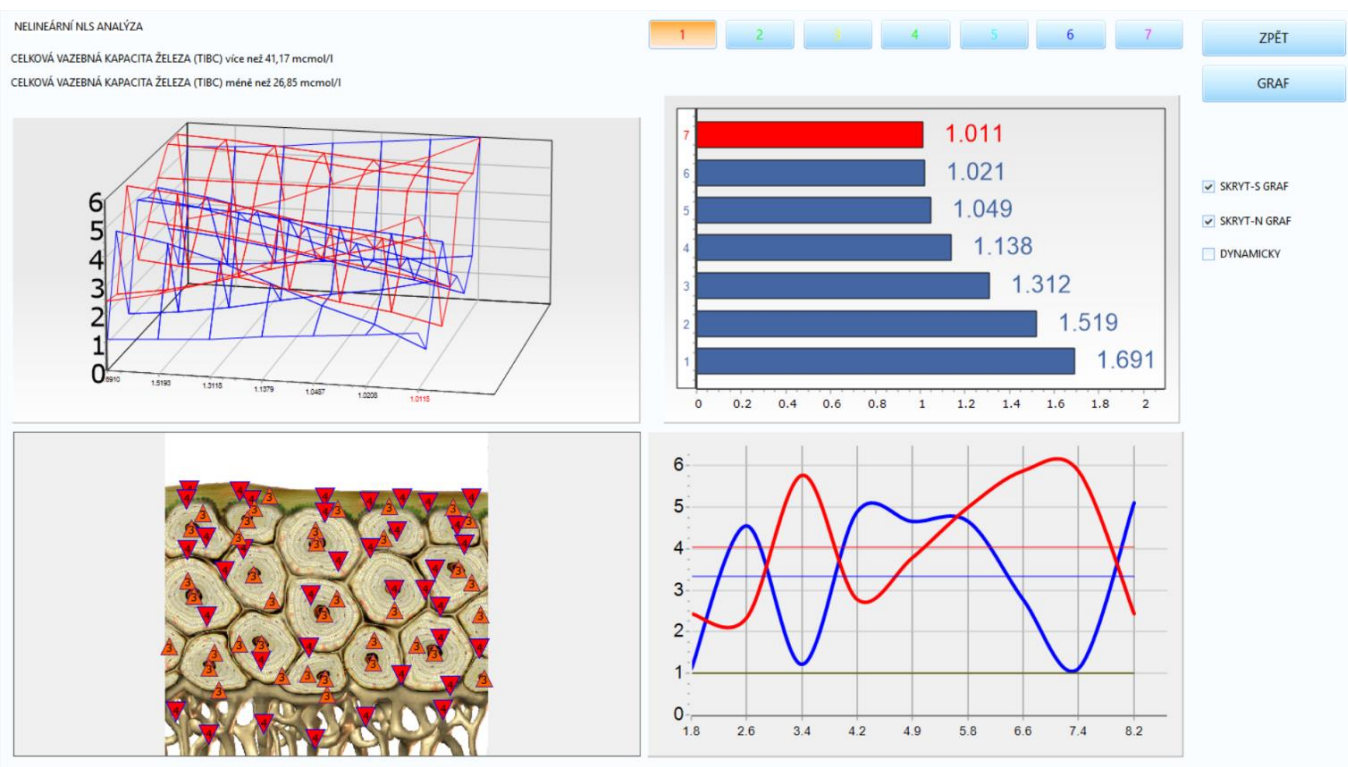

Po návratu na obrazovku DIAGNOSTIKY uvidíme nově vyhodnocené číslo vedle koeficientu D daného nálezu, stejně jako u ENTROPICKÉ ANALÝZY.

Stupnici NELINEÁRNÍ NLS ANALÝZY definujeme takto:

- Číslo (stupeň) **4** – ideální hodnota, značí rovnováhu biochemické látky
- **1-3** - značí deficit (nedostatek) biochemické látky
- **5-7** - značí nadbytek biochemické látky

Poznámka: Samozřejmě platí pravidlo, že se zabýváme pouze nálezy s koeficientem D pod **0,425 (cca pod 0,5)**, pokud nás k tomu nevede něco jiného.

	0.000	KOSTNÍ TKÁŇ
	0.802	OPTIMÁLNÍ DISPERZE
	0.000	VIRTUÁLNÍ MODEL
7	0.306	OBECNÉ železo - vazebné kapacity séra (TIBC) *
	0.324	Myoglobin *
	0.340	Prostata - specifického antigenu (PSA)
	0.340	Močoviny v krvi *
	0.353	Antidiuretický hormon *
	0.360	Alfa2 Globuliny *
	0.361	Imunoglobuliny G *
	0.365	Imunoglobulin *
	0.374	Globulin alfa 1 *
	0.376	Vitamin A (retinol) *
	0.378	Beta Globuliny *
	0.382	Tyroxin vázaný globulin *
	0.386	Krevní sérum albumin *
	0.387	Kalcitonin *

Taktéž můžeme pro vyhodnocení všech nálezů najednou použít tlačítko „AUTOMATICKÉ SKENOVÁNÍ“.

The screenshot displays the 'BIOCHEMICKÁ HOMEOSTÁZA' section of the diagnostic software. On the left, a list of biochemical parameters is shown with their corresponding coefficients. A red oval highlights the 'AUTOMATICKÉ SKENOVÁNÍ' button in the top right corner. The main window shows a list of biochemical parameters with their coefficients, and a red oval highlights the 'AUTOMATICKÉ SKENOVÁNÍ' button in the top right corner.

Parameter	Coefficient
KOSTNÍ TKÁŇ	0.000
OPTIMÁLNÍ DISPERZE	0.802
VIRTUÁLNÍ MODEL	0.000
OBECNÉ železo - vazebné kapacity séra (TIBC) *	0.306
Myoglobin *	0.324
Prostata - specifického antigenu (PSA)	0.340
Močoviny v krvi *	0.340
Antidiuretický hormon *	0.353
Alfa2 Globuliny *	0.360
Imunoglobuliny G *	0.361
Imunoglobulin *	0.365
Globulin alfa 1 *	0.374
Vitamin A (retinol) *	0.376
Beta Globuliny *	0.378
Tyroxin vázaný globulin *	0.382
Krevní sérum albumin *	0.386
Kalcitonin *	0.387

AUTO MODEL

Funkce AUTO MODEL spojuje prioritní nálezy. Podobným způsobem, jakým ENTROPICKÁ ANALÝZA vyhodnotí stupně závažnosti nálezů (přiřadí k nálezům hodnotu), nám také i AUTO MODEL vyhodnocuje, které nálezy ze seznamu jsou důležitější než jiné. Funkce AUTO MODELU se používá výhradně s ETALONY „PATOLOGIE“ a „MIKROORGANISMY“.

Příkladně si zkusíme na obrazovce DIAGNOSTIKY vybrat ETALON „PATOLOGIE“. V ten moment by ještě tlačítko „AUTO MODEL“ mělo být zšedivělé a nefunkční (viz obrázek níže), dokud neoznačíme některý nález z dostupného seznamu.

The screenshot shows the 'DIAGNOSTIKY' screen. On the left, under 'ETALON', 'PATOLOGIE' is selected and highlighted with a red circle. The main area shows a table of conditions and their values:

Value	Condition
0.000	STĚNA TENKÉHO STŘEVA
0.708	OPTIMÁLNÍ DISPERZE
0.000	VIRTUÁLNÍ MODEL
0.447	ENTERITIDA (ZÁNĚT TENKÉHO STŘEVA)
0.457	ENZYMOPATIE – NEDOSTATEČNÁ STŘEVNÍ ENTER...
0.520	GLUTENOVÁ ENTEROPATIE
0.675	POLYARTERITIS NODOSA (AUTOIMUNITNÍ ONEMO...
0.691	INFARKT TENKÉHO STŘEVA
0.764	POLYP TENKÉHO STŘEVA
1.087	DYSBAKTERIÓZA STŘEV
1.181	CROHNOVA NEMOC
1.539	NESPECIFICKÁ VŘEDOVÁ KOLITIDA
1.976	RETIKULOSARKOM TENKÉHO STŘEVA
1.984	NEURINOM TENKÉHO STŘEVA
2.151	ABSCES MEZISTŘEVNÍ
2.189	LYMFAGIOM TENKÉHO STŘEVA
2.220	LEIOMYOM TENKÉHO STŘEVA
2.380	HEMANGIOM TENKÉHO STŘEVA
2.515	LYMFOSARKOM TENKÉHO STŘEVA
2.845	FIBROM TENKÉHO STŘEVA

At the bottom of the main area, it says '1 of 20'. On the right, the 'AUTOMATICKÝ MODEL' button is circled in red. Below it, there are buttons for 'VEGETO-TEST INTERNÍ', 'VEGETO-TEST EXTERNÍ', 'AMPLITUDA', 'TISK ZPRÁVY', 'ULOŽIT DO ZPRÁVY', 'VÝROBA PREPARÁTU', 'ZPĚT', 'SROVNÁVACÍ ANALÝZA', 'AUTOMATICKÉ SKENOVÁNÍ', 'ELIMINAČNÍ ANALÝZA', 'AURA', 'OPTIMÁLNÍ', 'ETALON-OBJEKT', 'ETALON', 'INVERTOVAT', and 'OBJEKT'. At the bottom right, there is a graph and a list of conditions: 'STĚNA TENKÉHO STŘEVA', 'B # TRÁVICÍ SOUSTAVA', '1.8 KOSTERNÍ SOUSTAVA', '2.6 POJIVOVÉ TKÁŇE, NERVY, SRDEČNÍ CHLOUPNÉ', '3. RŮDKA POJIVOVÁ TKÁŇ, PRŮŽNÉ ...', '6.6 PERIFERNÍ NERVOVÝ SYSTÉM, EPITELIUM PRŮDUŠEK, NADLEDVINY A ŠTÍTLAŽNÍ ŽLÁZA'.

Funkci AUTO MODELU používáme v rámci MANUÁLNÍ ANALÝZY. Použitím POKROČILÉ (AUTOMATICKÉ) ZPRÁVY vyhodnotí software tyto informace sám a jednotlivé položky do ZPRÁVY zahrne.

A v rámci postupu MANUÁLNÍ ANALÝZY musíme také řádně splnit její jednotlivé kroky. Ty zahrnují ještě zapnutí funkce „LADIT VŠE“ a spouštění VEGETO-TESTŮ INTERNÍCH – stejně, jako v následujícím příkladu:

Left sidebar (PATOLOGIE selected):

- ORGÁNOVÉ PREPARÁTY
- BIOCHEMICKÁ HOMEOSTÁZA
- PATOLOGIE**
- ALERGENY
- MIKROORGANISMY A CIZOPASNÉ ČERVY
- ALOPATIE
- HOMEOPATIE
- FYTOTERAPIE
- VÝŽIVOVÉ DOPLŇKY A PARAFARMACEUTIKA
- POTRAVINY
- LITOTERAPIE
- STOPOVÉ PRVKY
- KŮŽE
- FYZIOTERAPIE
- ZÁTĚŽ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
- STOPOVÉ PRVKY VE VLASECH
- MATICE EMOCÍ
- SAHARARA meridiány: VC + VG
- AJNA meridiány: MC + TR
- VISHUDHA meridiány: P + GI + Sk + Sd
- ANÁHATA meridiány: C + IG
- MANIPURA meridiány: F + VB + Fd + Ad
- SVADHISTANA meridiány: R + V + VŠECHN...
- MULADHARA meridiány: RP + E
- Vitamíny
- Nedostatky mikroživin
- Aminokyseliny
- Vitamíny a vitaminům podobné látky
- Hormony, ženské
- Hormony, mužské

Main table (4 of 20):

0.000		STĚNA TENKÉHO STŘEVA	
0.378		OPTIMÁLNÍ DISPERZE	
0.000		VIRTUÁLNÍ MODEL	
0.242		ENZYMPATIE – NEDOSTATEČNÁ STŘEVNÍ ENTER...	
0.341		GLUTENOVÁ ENTEROPATIE	
0.353		POLYP TENKÉHO STŘEVA	
0.377		POLYARTERITIS NODOSA (AUTOIMUNITNÍ ONEMO...	
0.428		ENTERITIDA (ZÁNĚT TENKÉHO STŘEVA)	
0.618		INFARKT TENKÉHO STŘEVA	
0.730		HEMANGIOM TENKÉHO STŘEVA	
0.859		DYSBAKTERIOZA STŘEV	
0.868		NEURINOM TENKÉHO STŘEVA	
1.089		CROHNOVA NEMOC	
1.145		LEIOMYOM TENKÉHO STŘEVA	
1.318		LYMFAGIOM TENKÉHO STŘEVA	
1.474		NESPECIFICKÁ VŘEDOVÁ KOLITIDA	
1.533		ABSCES MEZISTŘEVNÍ	
1.750		FIBROM TENKÉHO STŘEVA	
1.843		RETIKULOSARKOM TENKÉHO STŘEVA	
2.344		LYMFOSARKOM TENKÉHO STŘEVA	

Right sidebar (LADIT VŠE circled in red):

- AUTOMATICKÝ MODEL
- LADIT VŠE**
- VEGETO-TEST INTERNÍ
- VEGETO-TEST EXTERNÍ
- AMPLITUDA
- NELINEÁRNÍ NLS ANALÝZA
- TISK ZPRÁVY
- ENTROPICKÁ ANALÝZA
- ULOŽIT DO ZPRÁVY
- VÝROBA PREPARÁTU
- VEGETO-TEST EXTERNÍ
- VEGETO-TEST INTERNÍ
- AMPLITUDA
- NELINEÁRNÍ NLS ANALÝZA
- TISK ZPRÁVY
- ENTROPICKÁ ANALÝZA
- ULOŽIT DO ZPRÁVY
- VÝROBA PREPARÁTU
- VEGETO-TEST EXTERNÍ
- VEGETO-TEST INTERNÍ
- AMPLITUDA
- NELINEÁRNÍ NLS ANALÝZA
- TISK ZPRÁVY
- ENTROPICKÁ ANALÝZA
- ULOŽIT DO ZPRÁVY
- VÝROBA PREPARÁTU

Po stisknutí tlačítka „AUTO MODEL“ se vedle nálezů objeví další sada čísel v rozmezí 1–10. Toto nově vyhodnocené číslo si nazveme „STUPEŇ PRIORITY“. Číslo 10 zastupuje nález s nejvyšší prioritou a naopak číslo 1 nález s nejnižší prioritou.

Left sidebar (PATOLOGIE selected):

- ORGÁNOVÉ PREPARÁTY
- BIOCHEMICKÁ HOMEOSTÁZA
- PATOLOGIE**
- ALERGENY
- MIKROORGANISMY A CIZOPASNÉ ČERVY
- ALOPATIE
- HOMEOPATIE
- FYTOTERAPIE
- VÝŽIVOVÉ DOPLŇKY A PARAFARMACEUTIKA
- POTRAVINY
- LITOTERAPIE
- STOPOVÉ PRVKY
- KŮŽE
- FYZIOTERAPIE
- ZÁTĚŽ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
- STOPOVÉ PRVKY VE VLASECH
- MATICE EMOCÍ
- SAHARARA meridiány: VC + VG
- AJNA meridiány: MC + TR
- VISHUDHA meridiány: P + GI + Sk + Sd
- ANÁHATA meridiány: C + IG
- MANIPURA meridiány: F + VB + Fd + Ad
- SVADHISTANA meridiány: R + V + VŠECHN...
- MULADHARA meridiány: RP + E
- Vitamíny
- Nedostatky mikroživin
- Aminokyseliny
- Vitamíny a vitaminům podobné látky
- Hormony, ženské
- Hormony, mužské

Main table (1 of 20):

	0.000	STĚNA TENKÉHO STŘEVA	
	0.378	OPTIMÁLNÍ DISPERZE	
	0.281	VIRTUÁLNÍ MODEL	
10	0.242	ENZYMPATIE – NEDOSTATEČNÁ STŘEVNÍ ENTER...	
10	0.341	GLUTENOVÁ ENTEROPATIE	
1	0.353	POLYP TENKÉHO STŘEVA	
10	0.377	POLYARTERITIS NODOSA (AUTOIMUNITNÍ ONEMO...	
10	0.428	ENTERITIDA (ZÁNĚT TENKÉHO STŘEVA)	
10	0.618	INFARKT TENKÉHO STŘEVA	
10	0.730	HEMANGIOM TENKÉHO STŘEVA	
10	0.859	DYSBAKTERIOZA STŘEV	
10	0.868	NEURINOM TENKÉHO STŘEVA	
10	1.089	CROHNOVA NEMOC	
10	1.145	LEIOMYOM TENKÉHO STŘEVA	
10	1.318	LYMFAGIOM TENKÉHO STŘEVA	
10	1.474	NESPECIFICKÁ VŘEDOVÁ KOLITIDA	
10	1.533	ABSCES MEZISTŘEVNÍ	
10	1.750	FIBROM TENKÉHO STŘEVA	
10	1.843	RETIKULOSARKOM TENKÉHO STŘEVA	
1	2.344	LYMFOSARKOM TENKÉHO STŘEVA	

Right sidebar (LADIT VŠE circled in red):

- AUTOMATICKÝ MODEL
- LADIT VŠE**
- VEGETO-TEST INTERNÍ
- VEGETO-TEST EXTERNÍ
- AMPLITUDA
- NELINEÁRNÍ NLS ANALÝZA
- TISK ZPRÁVY
- ENTROPICKÁ ANALÝZA
- ULOŽIT DO ZPRÁVY
- VÝROBA PREPARÁTU
- VEGETO-TEST EXTERNÍ
- VEGETO-TEST INTERNÍ
- AMPLITUDA
- NELINEÁRNÍ NLS ANALÝZA
- TISK ZPRÁVY
- ENTROPICKÁ ANALÝZA
- ULOŽIT DO ZPRÁVY
- VÝROBA PREPARÁTU

Jinak řečeno - čím vyšší hodnota, tím důležitější je prioritizace daného nálezu!!!

V našem příkladu (na obrázku výše) víme i bez použití funkce AUTO MODELU, že ENZYMOPATIE je naší nejvyšší prioritou, protože je na vrcholu seznamu nálezů s nejnižším koeficientem D a vyhodnocen VEGETO-TESTEM jako ZHORŠUJÍCÍ.

Přestože uvidíme vysoký STUPĚŇ PRIORITY nálezu (u každého „STUPĚŇ PRIORITY“ se objeví červený puntík  - abychom v seznamu nálezů rychleji rozpoznali ty prioritní), nesmíme ignorovat nálezy se stupni malými!

Indexy OD jednotlivých ŘEZŮ, koeficienty D daných nálezů z ETALONŮ a VEGETO-TESTY INTERNÍ by vždy měli mít přednost při diagnostikování. Funkce AUTO MODEL, ENTROPICKÁ ANALÝZA a NLS ANALÝZA (případně i jiné) jsou druhotné, vedlejší.

SESTAVENÍ AUTOMATICKÉ ZPRÁVY



1. NASKENUJEME čerstvé záznamy, ideálně si v tomto případě vybereme všechny ŘEZY, případně vše bez DNA. Nyní se musíme dostat na obrazovku „ZPRÁV“, například z KARTOTÉKY přes „TISK“ (nebo také „SROVNÁVACÍ ANALÝZU“ či obrazovku DIAGNOSTIKY.

KARTOTÉKA

PRŮMENÍ: Malina
ADRESA: Třída Miru 5, Hradec Králové
TELEFON:
KŘESTNÍ Jméno: Josef
E-MAIL:
VĚK: 44
KATEGORIE KRVE: (0)
RH faktor: +
ROD: MUŽ

NOVÝ KLIENT
VYBRAT KLIENTA
ODSTRANIT KLIENTA
ANALÝZA
ZPĚT
SKENOVAT
TISK
SROVNÁVACÍ ANALÝZA

DATUM	NÁHL.	ŘEZ	TYP	SOUST...	STAV	ENERGIE	OPTIMÁLNÍ DISPER...
18.06.2026 17:22:25		MUCINÓZNÍ ŽLÁZY	S			20 %	0,633
18.06.2026 17:33:45		AKUPUNKURNÍ BODY PODLE VOLLA NA PRAVÉM CHODIDLE	S			40 %	0,64
18.06.2026 17:21:13		AMELOBLAST	S			32 %	0,648
18.06.2026 21:35:51		TRICHINELLA SPIRALIS	S			65 %	0,655
18.06.2026 17:21:36		STĚNA KONEČNÍKU	S			74 %	0,659
18.06.2026 17:31:01		SVALOVÉ BUŇKY	S			68 %	0,666
18.06.2026 17:21:34		PRŮŘEZ APENDIXU	S			67 %	0,668
18.06.2026 17:22:36		SPERMIE	S			79 %	0,692
18.06.2026 21:40:06		ACTINOMYCES ISRAELII	S			71 %	0,706
18.06.2026 17:21:30		STĚNA TENKÉHO STŘEVA	S			33 %	0,708
18.06.2026 17:21:19		PŘECHOD JÍCNU DO ŽALUDKU	S			74 %	0,709
18.06.2026 17:22:59		SEMENNÉ VÁČKY	S			60 %	0,719
18.06.2026 17:21:28		LALŮČEK SLINIVKY BŘÍŠNÍ	S			80 %	0,738

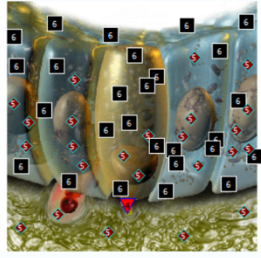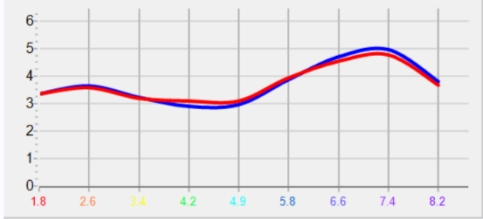TISK

ZRUŠIT VÝBĚR

ZPRÁVA

ANALÝZA

VYTISKNOU

Enter text to search...

Find

Clear

VYBRÁNÍ	DATUM	NÁHLED	ŘEZ	Soustava	Typ	Stav	Energie	Optimální	Disperze
☐	18.06.2026 17:22:14		PLICNÍ TKÁŇ		S	Normal	54,7		0,89
☐	18.06.2026 17:22:16		PRŮŘEZ HRTANU		S	Normal	75,88		0,915
☐	18.06.2026 17:22:17		PLICNÍ ACINUS		S	Normal	71,09		0,879
☐	18.06.2026 17:22:19		BRONCHIOLY		S	Normal	64,67		0,753
☐	18.06.2026 17:22:21		RESPIRAČNÍ EPITEL		S	Normal	65,49		0,515
☐	18.06.2026 17:22:23		PRŮŘEZ PRŮDUŠEK		S	Normal	70,17		0,907
☐	18.06.2026 17:22:25		MUCINÓZNÍ ŽLÁZY		S	Acute	20		0,633

558 of 2198

Na obrazovce ZPRÁV klikneme na „**POKROČILOU ZPRÁVU**“

ZPĚT

ZPRÁVA TYP 1

ZPRÁVA TYP 2

ZPRÁVA TYP 3

RESETOVAT VÝBĚR

POKROČILÁ ZPRÁVA

A konečně v POKROČILÉ ZPRÁVĚ zvolíme „**AUTOMATICKÁ ZPRÁVA**“

☒ Zahrnout vše
 ☒ Zrušit zaškrtnutí všeho
 ☒ Rozbalit vše
 ☒ Sbalit vše
 ☒ Aktualizovat
 ☒ Smazat
 ☒ Vybrat minimální disperzi
 ☒ Netisknout popis
 ☒ Popis

☒ Závazí zprávy

ETALON SKUP. ETALON SOUSTAVA ŘEZ

SOUSTAVA NÁHL... VYBR... NÁHL... PREPARAT E... TISK POPISU POPIS OPTIM...

<No data to display>

Malina Josef 44 YEAR, neděle 1. listopad 1981

A) SPEKTRÁLNÍ SIMULÁRNÍ PROCESS

E # MIKROORGANISMY A CIZOPASNÉ ČERVY

03 C # DÝCHAČÍ SOUSTAVA

MUCINÓZNÍ ŽLÁZY


Staphylococcus aureus D=0,150

MUCINÓZNÍ ŽLÁZY - Staphylococcus aureus


MUCINÓZNÍ ŽLÁZY - Staphylococcus aureus D=0,549 ZHORŠENÍ 17%

☐ ZPRÁVA TYP 1
 ☐ ZPRÁVA TYP 2
 ☐ ZPRÁVA TYP 3
 ☐ AUTOMATICKÁ ZPRÁVA
 ☐ UPRAVIT ŠABLONY
 ☐ ZPĚT

2. Nejprve zapneme na pravé straně obrazovky možnost „Zkoumané pouze dnes“ (pokud je možnost zapnutá, vždy ji vypínáme a teprve znovu zapínáme, aby se změny projevíly). Naskenované ŘEZY se ukáží ve druhém formuláři (pokud se ve formuláři nenacházejí žádné záznamy, znamená to, že SKENY nebyly v současný den pořízeny – vrátíme se ke SKENOVÁNÍ a pořídíme čerstvé záznamy).

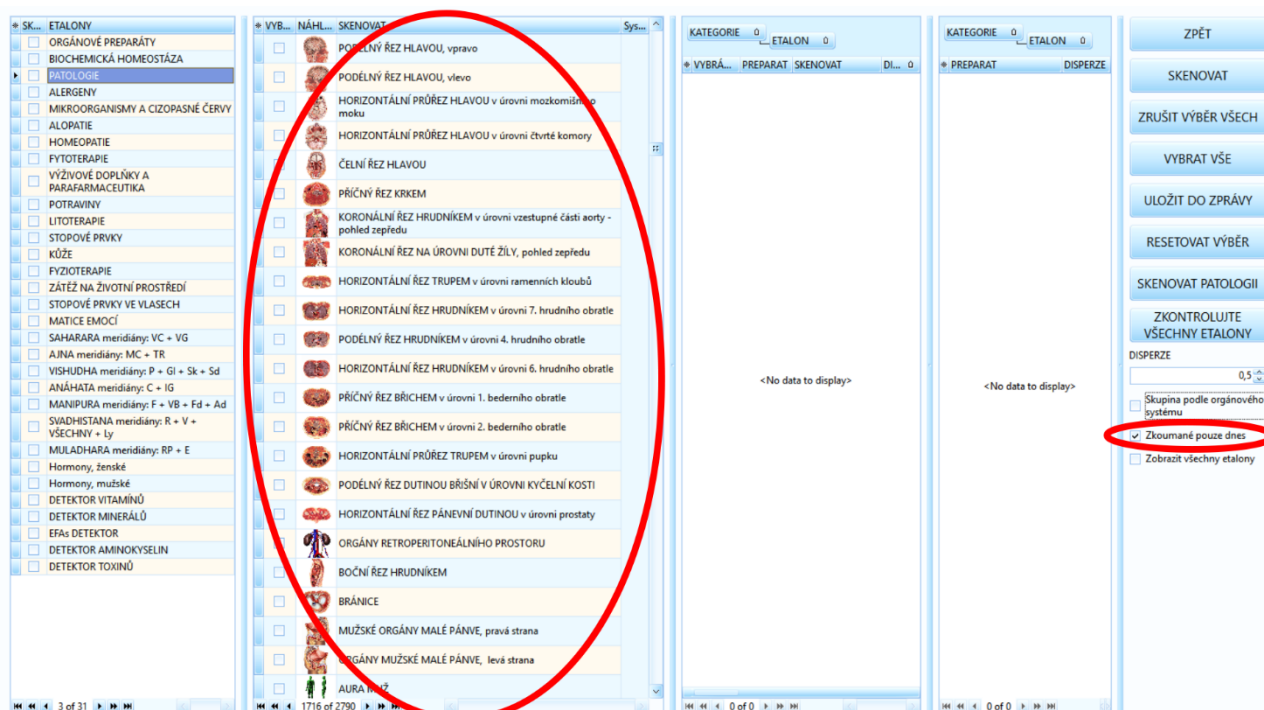

3. Než uděláme cokoli jiného, ujistíme se, že jsou odznačené všechny ETALONY, kromě „PATOLOGIE“ a „MIKROORGANISMŮ“! Jakmile máme opravdu zvoleny jen tyto dva základní ETALONY, klikneme na tlačítko „VYBRAT VŠE“ pro označení všech ŘEZŮ ze současného dne.

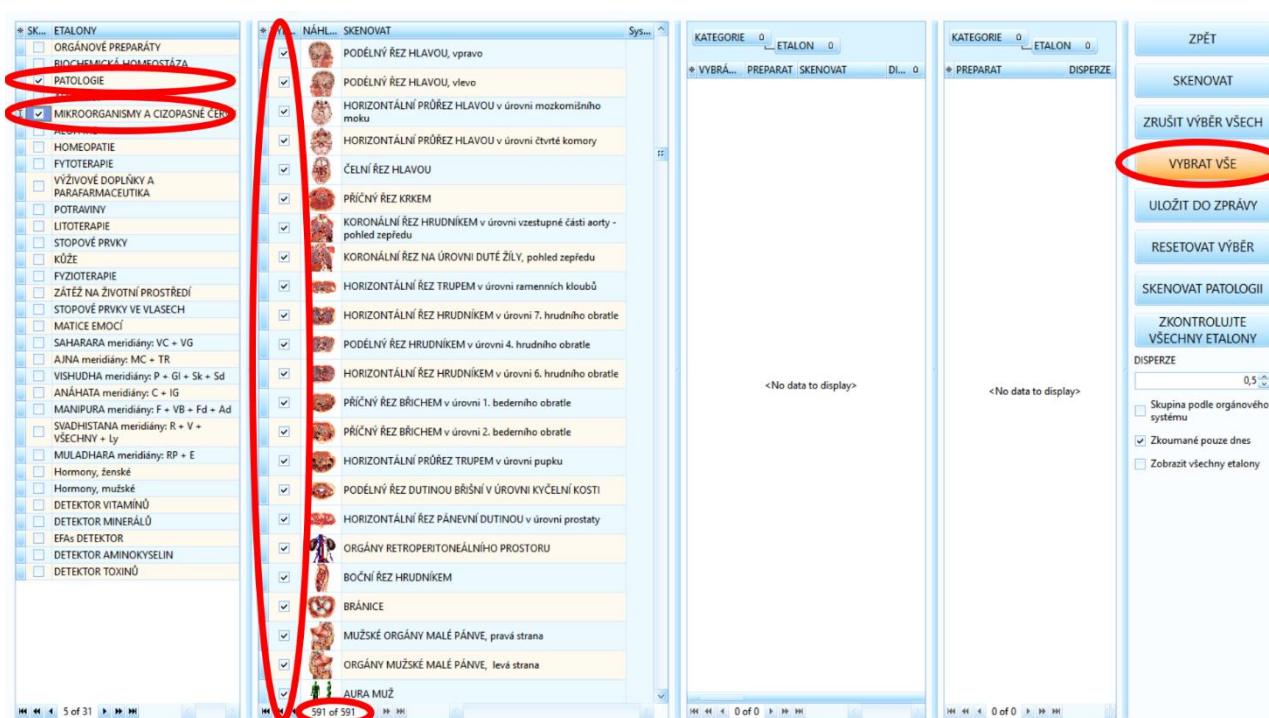

- Po kliknutí na tlačítko „VYBRAT VŠE“ se všechny naskenované ŘEZY označí. Tím si můžeme být jistí, že máme vybrané opravdu všechny záznamy.

Další důležité nastavení na této obrazovce je hraniční hodnota „DISPERZE“ a možnost „Zobrazit všechny etalony“:

DISPERZE

0.5

☐ Skupina podle orgánového systému

☒ Zkoumané pouze dnes

☐ Zobrazit všechny etalony

Při vytváření závěrečných ZPRÁV, za účelem sestavení léčebného (terapeutického) plánu se ujistěte, že možnost „Zobrazit všechny etalony“ (viz obrázek), je vypnutá a hraniční hodnota koeficientu D „DISPERZE“ je 0,5 (cca 0,425) – pokud nemáme jiné konkrétní důvody (např při vyhledávání rakovin).

DISPERZE na této obrazovce představuje horní hranici koeficientu D Disperze pro nálezy, testované AUTOMATICKOU ANALÝZOU. Jinými slovy, že nálezy z ETALONŮ, kteří mají koeficient D nad 0,5, nebudou v závěrečné AUTOMATICKÉ ZPRÁVĚ zahrnuti, protože nezpůsobují akutní problémy.

„Zobrazit všechny etalony“ – možnost dělá to samé, jako když použijete tlačítko „ZOBRAZIT VŠE“ na obrazovce DIAGNOSTIKY (viz obrázek níže). Tato funkce se nesmí používat s ETALONY „PATOLOGIE“ a „MIKROORGANISMY“. Pokud vytváříte ZPRÁVU z ostatních ETALONŮ, pak je naopak často nutné tuto možnost zapnout.

RESETOVAT VÝBĚR ETALONY

WEB ZOBRAZIT VŠE

Enter text to search... Find Clear

	0,000		MUCINÓZNÍ ŽLÁZY
	0,551		OPTIMÁLNÍ DISPERZE
	0,000		VIRTUÁLNÍ MODEL
	0,446		L- Methionin D6 (esenciální aminokyselina)
	0,449		L-asparagin D6 (neesenciální aminokyselina)
	0,454		Kalium potash karbonikum D30
	0,455		L-Valin D1000 (esenciální aminokyselina)
	0,458		L- Arginin D2000 (neesenciální aminokyselina)
	0,468		L-asparagin D2000 (neesenciální aminokyselina)
	0,471		L-kyselina asparagová D3 (neesenciální aminoky...
	0,475		Retinol

5. Po správném nastavení všech možností spustíme vyhodnocování dat tlačítkem „SKENOVAT“.

The screenshot shows the SKENOVAT software interface. On the left, there is a list of categories under 'SK...' and 'ETALONY'. The 'VYB...' section on the right lists various anatomical and physiological parameters, each with a checkbox and a small icon. The 'SKENOVAT' button is highlighted with a red circle. Below the button, there are several other buttons: 'ZRUŠIT VÝBĚR VŠECH', 'VYBRAT VŠE', 'ULOŽIT DO ZPRÁVY', 'RESETOVAT VÝBĚR', 'SKENOVAT PATOLOGII', and 'ZKONTROLUJTE VŠECHNY ETALONY'. At the bottom right, there are checkboxes for 'Skupina podle orgánového systému', 'Zkoumané pouze dnes', and 'Zobrazit všechny etalony'.

Objeví se informační okénko s průběhem procesu:

The screenshot shows the SKENOVAT software interface with the 'Abort' dialog box open. The dialog box has a title bar 'SKENOVAT' and a close button. Inside the dialog, there is a progress bar showing 34. Below the progress bar, there is an 'Abort' button. At the bottom of the dialog, there is a text box containing the following information:

3.2/ 1.4 sec

last RowsAffected 2787 in delete from issled

5.1/ 1.8 sec

last RowsAffected 2787 in insert into issled select * from issled\19085

0.4/ 0.4 sec

SKENOVAT

At the bottom of the window, there is a status bar showing:

0.0 min 0.04 sec Est 0.6 min rec 34/591 rec/sec 27.0

6. Po dokončení procesu uvidíme zbylé formuláře zaplněné novými informacemi. Třetí formulář obsahuje záznamy o testovaných nálezech. Zatrženy jsou ty, které ZHORŠUJÍ funkční stav. Čtvrtý formulář představuje ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU, kam jsou tyto vytríděné položky automaticky přidány. Stačí tedy už jen přejít „ZPĚT“.

The screenshot displays a complex medical software interface. The central panel, circled in red, lists various tests and their results. The right panel shows a summary of results, and the 'ZPĚT' button is visible at the top right.

7. Zpátky na obrazovce „POKROČILÉ ZPRÁVY“ bychom již měli vidět vyhodnocené záznamy. Pokud zde nejsou žádné položky, klikneme na tlačítko „Aktualizovat“.

The screenshot shows the 'POKROČILÉ ZPRÁVY' (Advanced Reports) screen. The 'Aktualizovat' button is circled in red. The screen displays a detailed report for a patient named Malina Josef, including a list of tests and their results, and a summary of findings.

Jakmile se záznamy objeví ve ZPRÁVĚ, je naše práce dokončená.

VYBRÁNO	NÁHLED PREP.	PREPARAT	TISK POPISU	POPIS	OPTIMÁLNÍ D...
ETALON SKUP. : A) SPEKTRÁLNÍ SIMULÁRNÍ PROCESS (-182, 182)					
ETALON : C # PATOLOGIE (-155, 155)					
SOUSTAVA : 01 A # ZAKLADNÍ ŘEZY (-1, 1)					
ŘEZ : PRÍČNÝ ŘEZ KRKEM (-1, 1)	☒	POLLINÓZA	☐		0,456
SOUSTAVA : 02 B # TRÁVICÍ SOUSTAVA (-13, 13)					
ŘEZ : INTERLOBULÁRNÍ ŽLUČOVOD (-1, 1)	☒	CHOLEST.HEPATOZA	☐		0,328
ŘEZ : JÍCEN (-1, 1)	☒	TRACHEITIDA (ZÁNĚTLIVÝ PROCES NA SLIZNICI...)	☐		0,461
ŘEZ : PAPILA JAZYKA (-1, 1)	☒	FARYNGITIDA (ZÁNĚT HLTLANU)	☐		0,395
ŘEZ : PŘECHOD JÍCNU DO ŽALUDKU (-5, 5)	☒	ATROFICKÁ GASTRITIDA	☐		0,276
	☒	ATROFICKÁ HYPERPLASTICKÁ GASTRITIDA	☐		0,362
	☒	EROZIVNÍ GASTRITIS	☐		0,37
	☒	HYPERTROFICKÁ GASTRITIDA	☐		0,5
	☒	KATARÁLNÍ GASTRITIDA	☐		0,253
ŘEZ : STĚNA DVANÁCTNÍKU (-2, 2)	☒	POLYP DVANÁCTNÍKU	☐		0,465
ŘEZ : STĚNA KONEČNÍKU (-1, 1)	☒	ZÁNĚT DVANÁCTNÍKU	☐		0,264

MALINA JOSEF 44 YEAR - 1. listopad 1981
 A) SPEKTRÁLNÍ SIMULÁRNÍ PROCESS
 C # PATOLOGIE
 01 A # ZAKLADNÍ ŘEZY
 PRÍČNÝ ŘEZ KRKEM
 POLLINÓZA D=0,456
 02 B # TRÁVICÍ SOUSTAVA
 INTERLOBULÁRNÍ ŽLUČOVOD
 CHOLEST.HEPATOZA D=0,328
 JÍCEN
 TRACHEITIDA (ZÁNĚTLIVÝ PROCES NA SLIZNICI PRŮDUŠNICE) # I D=0,461
 PAPILA JAZYKA
 FARYNGITIDA (ZÁNĚT HLTLANU) D=0,395
 PŘECHOD JÍCNU DO ŽALUDKU
 ATROFICKÁ GASTRITIDA D=0,276
 ATROFICKÁ HYPERPLASTICKÁ GASTRITIDA D=0,362
 EROZIVNÍ GASTRITIS D=0,370
 HYPERTROFICKÁ GASTRITIDA D=0,500
 KATARÁLNÍ GASTRITIDA D=0,253
 STĚNA DVANÁCTNÍKU
 POLYP DVANÁCTNÍKU D=0,465
 ZÁNĚT DVANÁCTNÍKU D=0,264
 STĚNA KONEČNÍKU
 HEMOROIDY D=0,481
 VATEROVA AMPULA (VÝVOD)
 KALKULÓZNÍ CHOLECYSTITIDA D=0,300
 ZUB
 ZUBNÍ KAZ D=0,453
 03 C # DYCHACÍ SOUSTAVA
 BRONCHIOLY
 KUTNÍ BRONCHITIDA D=0,481
 BRONCHIÁLNÍ ASTMA # J D=0,450
 BRONCHOECTATICKÁ NEMOC # I D=0,401
 PLUVNÍ TUBERKULÓZA # I D=0,467
 PRŮPRASTAVY
 ANGINA HLTLANU D=0,479
 INFKČNÍ ALERGICKÁ LARYNGITIDA D=0,441
 LEUKOKERÓZA HLTLANU D=0,417
 LEUKOPLAK HLTLANU D=0,397
 RESPIRAČNÍ EPITEL
 ZÁNĚT MANDUL # I D=0,187
 SLIZNICE NOSNÍ DUTINY
 VAZOMOTORICKÁ RÝMA D=0,441
 VYBOČENÍ NOSNÍ PŘEPÁŽKY D=0,441


ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA – FINALIZACE, TISK, ULOŽENÍ

Na nově vytvořenou závěrečnou (nebo také souhrnnou) ZPRÁVU můžeme nahlížet hned několika způsoby.

„ZPRÁVA TYP 1“ jednoduše a přehledně ukáže, který systém těla je v největší zátěži a frekvenční nerovnováhu na buněčné úrovni.

ZPRÁVA TYP 1 **ZPRÁVA TYP 2** **ZPRÁVA TYP 3**

jeho vyhodnocené nálezy:

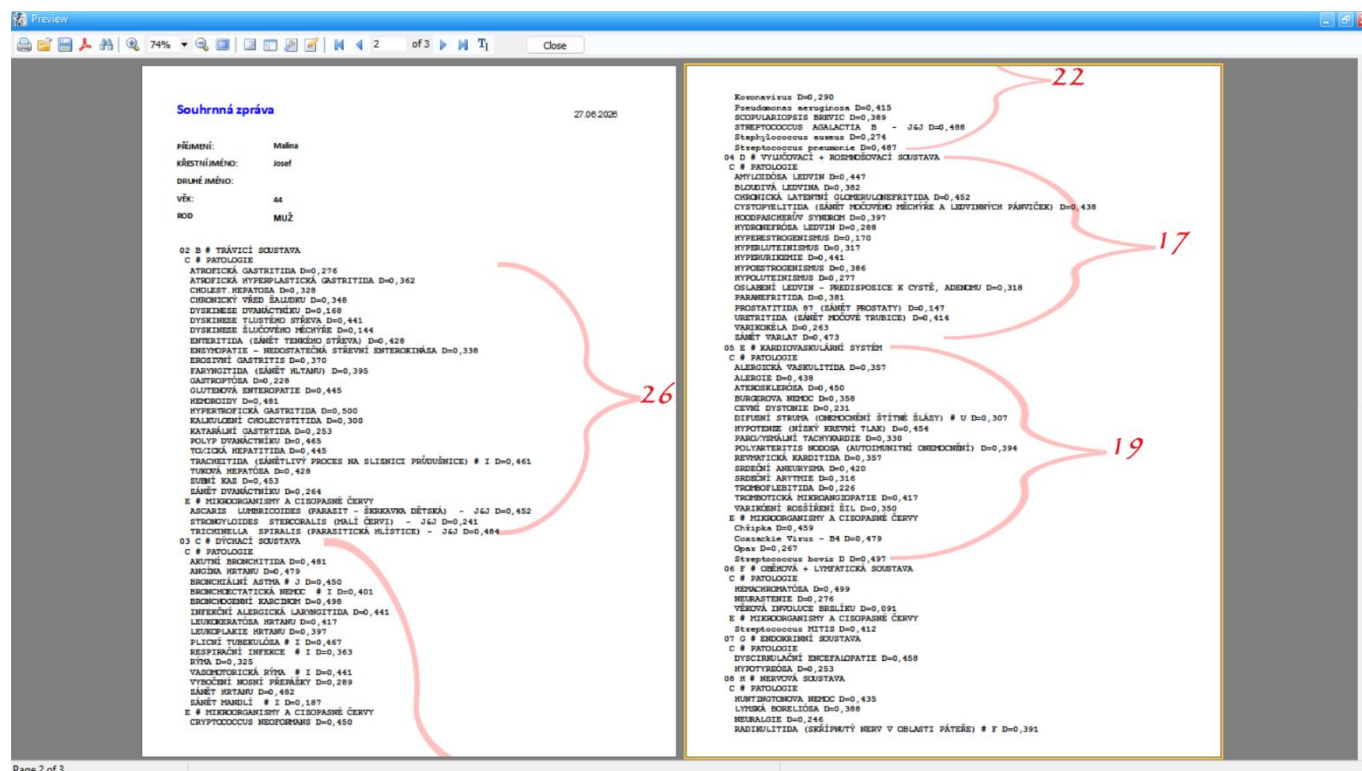

Na příkladném obrázku výše lze vidět, jak správně počítat jednotlivé nálezy. TRÁVICÍ SOUSTAVA má nálezu nejvíce - 26 (použity ETELOGY „PATOLOGIE“ a „MIKROORGANISMY“). Proto musíme léčbu (celkovou terapii) zaměřit primárně na TRÁVICÍ SOUSTAVU.

Ve většině případů pozorujeme, že nejzatíženějším systémem bývá právě **TRÁVICÍ SOUSTAVA**. Zdraví střev a trávicího ústrojí se všeobecně považuje za klíčové pro celkový, pozitivní zdravotní stav. Máme přes 20 let zkušeností s tím, jakým způsobem člověka ovlivňuje zdravé trávení. Např. u někoho vyvolá nerovnováha trávicího systému dermatologické (kožní) potíže, u jiných zase onemocnění štítné žlázy, srdeční problémy, biochemickou nerovnováhu, aj.

Když upřednostníme zbavení se parazitů, virů, bakterií, kandid, atd. z celého trávicího systému, začnou se zlepšovat také ostatní tělesné systémy. Obzvláště paraziti nám v těle požívají mnoho živin, takže i lidé se zdravým stravováním mohou trpět např. na anemii a jiná onemocnění způsobována parazity.

Zhruba po 6ti a více týdnech se disperze D u většiny nálezů zlepší. Mikroorganismy způsobují opravdu mnoho disharmonie v našem těle. Pokud tedy ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA některé z nich obsahuje, začneme na TRÁVICÍ SOUSTAVU aplikovat harmonizační a jiné terapie.

V našem předchozím příkladu by koeficient D od „STRONGYLOIDES STERCORALIS“ měl postupem času růst z 0.241 na 0.5, až nakonec ze ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY zmizí úplně (podobně jako „TRICHINELLA SPIRALIS“). Nález s koeficientem D nad 0.500 (0.5) už nejsou tak invazivní.

E # MIKROORGANISMY A CIZOPASNÉ ČERVY
 ASCARIS LUMBRICOIDES (PARAZIT - ŠKRKAVKA DĚTSKÁ) - J&J D=0,452
 STRONGYLOIDES STERCORALIS (MALÍ ČERVI) - J&J D=0,241
 TRICHINELLA, SPIRALIS (PARAZITICKÁ HLÍSTICE) - J&J D=0,484

Nicméně nesmíme zapomenout, že tím nejdůležitějším parametrem pro naše srovnávání je index OD daného orgánu.

Časem zjistíte, že index OD - OPTIMÁLNÍ DISPERZE - vlastně představuje **funkčnost (stav) orgánu/tkáně na buněčné úrovni**, zatímco koeficienty disperze D představují každý jednotlivý nález. Pokud je index OD nižší než 1.200, značí to **problém na buněčné úrovni orgánu**, oproti tomu jednotlivé ENERGETICKÉ BODY (znázorněné na ŘEZÍCH, s hodnotami 1-6) nám poskytují informace pouze o úrovni vycházející energie (o **vnějším ENERGETICKÉM STAVU** v daném bodě). Tuto energii ovlivňuje především stres, jídlo, nápoje, aj. Po 6ti týdnech harmonizačních terapií a celkovém terapeutickém přístupu byste měli vidět růst indexy OD jednotlivých ŘEZŮ až nad 1,200 – to nám indikuje dobrý (zlepšující se) zdravotní stav.

Index OD každého orgánu se zobrazuje v KARTOTÉCE. V našem příkladu výše šlo vidět, že kvůli nízkému indexu OD byly orgány TRÁVICÍ SOUSTAVY v souhrnné ZPRÁVĚ zahrnuty. Po 6ti týdnech terapií se začnou orgány vyrovnávat a růst se svým OD indexem, čímž jsme schopni vypořádat zlepšení zdravotního stavu. Indexy ŘEZŮ porostou stejně, jako porostou koeficienty jednotlivých nálezů.

Nyní, když máme hotovou souhrnnou závěrečnou ZPRÁVU, a známe také systém k zaměření (prioritní systém k léčbě – právě ten, který má dle AUTOMATICKÉ ZPRÁVY nejvíce nálezů, jak jsme viděli na předchozích stránkách), se můžeme už prakticky posunout dále k vypracování terapeutického postupu a aplikování META-TERAPIÍ.

DATUM	NÁHL. ŘEZ	TYP	SOU...	STAV	ENERGIE	OPTIM. LNÍ DISPER...	D
27.06.2026 18:28:57	AMELOBLAST	S			79 %		0,638
27.06.2026 18:29:19	STĚNA KONEČNÍKU	S			74 %		0,686
27.06.2026 18:29:17	PRŮŘEZ APENDIKU	S			71 %		0,701
27.06.2026 18:29:03	PŘECHOD JÍCNU DO ŽALUDKU	S			74 %		0,712
27.06.2026 18:29:13	STĚNA TENKÉHO STŘEVA	S			33 %		0,74
27.06.2026 18:29:13	STĚNA TLUSTÉHO STŘEVA	S			99 %		0,75
27.06.2026 18:29:12	LALŮČEK SLINIVKY BŘÍŠNÍ	S			65 %		0,757
27.06.2026 18:29:05	ŽALUDEČNÍ ŽLÁZY	S			61 %		0,783
27.06.2026 18:28:59	PAPILA JAZYKA	S			70 %		0,795
27.06.2026 18:29:02	TKÁŇ JÍCNU	S			59 %		0,799
27.06.2026 18:29:22	JATERNÍ TKÁŇ	S			74 %		0,801
27.06.2026 18:28:53	ZUB	S			76 %		0,804
27.06.2026 18:29:29	INTERLOBULÁRNÍ ŽLUČOVOD	S			30 %		0,817

Nicméně ještě před započnutím terapií je dobré si vyhodnocenou ZPRÁVU uložit do počítače, abychom měli podklady nejen k pozdějšímu srovnání, ale také jako souhrn počátečního zdravotního stavu, než jsme se začali klientovi věnovat. Jakmile si vysvětlíme tlačítka a jednotlivé typy souhrnné ZPRÁVY, ukážeme si také postup pro uložení do počítače.

Zde si popíšeme tlačítka a funkce souhrnné ZPRÁVY:

„**ZPRÁVA TYP 1**“ – jednoduše a přehledně zobrazuje problémy tělesných soustav/systémů


„**ZPRÁVA TYP 2**“ – lépe zobrazuje nálezy ve specifických orgánech, kde problém existuje

„**ZPRÁVA TYP 3**“ – téměř identický jako TYP 2, ale koeficienty D se navíc graficky zvýrazní, za účelem jasnějšího rozlišení

Tlačítko „RESETOVAT VÝBĚR“ - smaže všechny záznamy ze souhrnné ZPRÁVY.



A zde je zbytek funkcí a tlačítek POKROČILÉ ZPRÁVY:

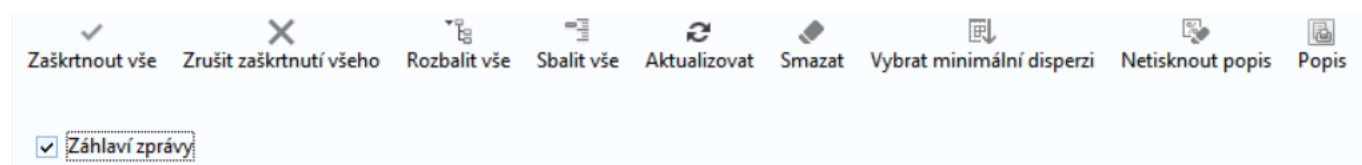

„Zaškrtnout vše“ – Vybere všechny vyhodnocené záznamy ve ZPRÁVĚ k tisku/uložení

„Zrušit zaškrtnutí všeho“ – Zruší výběr všech vyhodnocených záznamů ve ZPRÁVĚ

„Rozbalit Vše“ – Otevře a zobrazí veškeré záznamy ve ZPRÁVĚ

„Sbalit vše“ – Zavře a skryje veškeré záznamy ve ZPRÁVĚ

„Aktualizovat“ – Znovu načte a aktualizuje všechny přidané záznamy ve ZPRÁVĚ (Při mnohonásobném přidávání záznamů se některé občas nemusí správně zobrazit, i když byly korektně přidány). Tlačítko aktualizuje ZPRÁVU, aby se všechny položky v pořádku načetly a zobrazily.

„Smazat“ – Smaže všechny záznamy ve ZPRÁVĚ – stejně jako tlačítko „RESETOVAT VÝBĚR“ na předchozí obrazovce

„Vybrat minimální disperzi“ – Vybere k tisku pouze ty záznamy s disperzí pod 0.5 (hodí se např., pokud máme u klienta i skeny rakovin - které zahrnujeme až po disperzi 1.8 - ale momentálně nepotřebujeme tyto záznamy přidávat do souhrnné ZPRÁVY)

„Netisknout popis“ – Vypne tisk popisků jednotlivých nálezů

„Popis“ – Zapne tisk popisků jednotlivých nálezů

„Záhlaví zprávy“ – Přidá do komentáře ZPRÁVY také základní údaje o klientovi

VLASTNÍ POZNÁMKY V SOUHRNNÉ ZPRÁVĚ

Jak připisovat vlastní poznámky přímo do naší souhrnné ZPRÁVY? Jednoduše, na obrazovce ZPRÁV klikneme v okně formuláře přesně na místo, kam potřebujeme text vepisovat (viz obrázek níže). Dle konvenční práce s počítačem, i zde stiskem klávesy „ENTER“ vytvoříme nový řádek. Poznámky umí ale zahrnovat pouze ZPRÁVA TYP 1!!! :

The screenshot shows a medical report form. On the left, there is a list of conditions and symptoms, some of which are circled in red. The conditions include: 44 YEAR, neděle 1. listopad 1981; Klienť si neustále stěžuje na nízký tlak a bolesti hlavy; - povoláním revizor, celoživotně; - matka trpěla na anémii, také nedostatek Mg Magnesia; 02 C # PATOLOGIE SOUSTAVY; C # PATOLOGIE; DYSKINEZE ŽLUČOVÉHO MECHYRE D=0,144; DYSKINEZE DVANÁCTNÍKU D=0,168; GASTROPTÓZA D=0,228; KATARÁLNÍ GASTRITIDA D=0,253; ZÁNĚT DVANÁCTNÍKU D=0,264; ATROFICKÁ GASTRITIDA D=0,276; KALKULÓZNÍ CHOLECYSTITIDA D=0,300; CHOLEST. HEPATOZA D=0,328; ENZYMOPIATIE - NEDOSTATEČNÁ STŘEVNÍ ENTEROKINÁZA D=0,338; CHRONICKÝ VŘED ŽALUDKU D=0,348; ATROFICKÁ HYPERPLASTICKÁ GASTRITIDA D=0,362; EROZIVNÍ GASTRITIS D=0,370; FARYNGITIDA (ZÁNĚT HLTLANU) D=0,395; ENTERITIDA (ZÁNĚT TENKÉHO STŘEVA) D=0,428; TUKOVÁ HEPATOZA D=0,428; DYSKINEZE TLUSTÉHO STŘEVA D=0,441; GLUTENOVÁ ENTEROPATIE D=0,445; TOXICKÁ HEPATITIDA D=0,445; ZUBNÍ KAZ D=0,453; TRACHEITIDA (ZÁNĚTLIVÝ PROCES NA SLIZNICI PRŮDUŠNICE) # I D=0,461; POLYP DVANÁCTNÍKU D=0,465; HEMOROIDY D=0,481; HYPERTROFICKÁ GASTRITIDA D=0,500; E # MIKROORGANISMY A CIZOPASNÉ ČERVY; STRONGYLOIDES STERCORALIS (MALÍ ČERVY) - J&J D=0,241; ASCARIS LUMBRICOIDES (PARAZIT - ŠKRKAVKA DĚTSKÁ) - J&J D=0,452; TRICHINELLA, SPIRALIS (PARAZITICKÁ HLÍSTICE) - J&J D=0,484; OBERON SYSTEM QUANTUM I; 03 C # DYCHACÍ SOUSTAVA; C # PATOLOGIE; ZÁNĚT MANDLÍ # I D=0,187; VYBOČENÍ NOSNÍ PŘEPÁŽKY D=0,289; RÝMA D=0,325; RESPIRAČNÍ INFEKCE # I D=0,363; LEUKOPLAKIE HRTANU D=0,397; BRONCHOECTATICKÁ NEMOC # I D=0,401; LEUKOKERATÓZA HRTANU D=0,417; INFEKČNÍ ALERGICKÁ LARYNGITIDA D=0,441; VAZOMOTORICKÁ RÝMA # I D=0,441; BRONCHIALNÍ ASTMA # J D=0,450; PULČNÍ TUBERKULÓZA # I D=0,467; ANGINA HRTANU D=0,479; AKUTNÍ BRONCHITIDA D=0,481; ZÁNĚT HRTANU D=0,482; BRONCHOGENNÍ KARCINOM D=0,498; E # MIKROORGANISMY A CIZOPASNÉ ČERVY.

On the right, there is a sidebar with buttons: ZPĚT, ZPRÁVA TYP 1, ZPRÁVA TYP 2, ZPRÁVA TYP 3, RESETOVAT VÝBĚR, and POKROČILÁ ZPRÁVA.

OBRÁZOVKA ZPRÁV
Kdekoli do formuláře
klikněte levým
tlačítkem myši a
vepište potřebný text

Obrazovka zpráv – Kdekoli do formuláře klikněte levým tlačítkem myši a vepište potřebný text.

Stejně tak na obrazovce POKROČILÝCH ZPRÁV - klikneme kdekoli do formuláře poznámek a začneme psát. Poznámky vepisujeme až před finálním vytištěním/uložením do počítače. Pak už nesmíme klikat na tlačítko „AKTUALIZOVAT“, tím poznámky smažeme!

✓ Zaškrtnout vše ✗ Zrušit zaškrtnutí všeho 🗑️ Rozbalit vše 📄 Sbalit vše 🔄 Aktualizovat 🗑️ Smažat 📄 Vybrat minimální disperzi 🗑️ Netisknout popis 🗑️ Popis

☑ Záhloví zprávy

SOUSTAVA: ETALON

VYBR... NÁHL... PREPARAT

SOUSTAVA: 02 B # TRÁVICÍ SOUSTAVA (-26, 26)
ETALON: C # PATOLOGIE (-23, 23)

	REZ	T. POPIS	OPTIMÁ...
✓ DYSKINEZE ŽLUČOVÉHO MĚCHÝŘE	STĚNA ŽLUČNÍKU		0,144
✓ DYSKINEZE DVANÁCTNÍKU	STĚNA DVANÁCTNÍKU		0,168
✓ GASTROPTÓZA	PŘECHOD JÍCNU DO ŽALUDKU		0,228
✓ KATARÁLNÍ GASTRITIDA	PŘECHOD JÍCNU DO ŽALUDKU		0,253
✓ ZÁNĚT DVANÁCTNÍKU	STĚNA DVANÁCTNÍKU		0,264
✓ ATROFICKÁ GASTRITIDA	PŘECHOD JÍCNU DO ŽALUDKU		0,276
✓ KALKULÓZNÍ CHOLECYSTITIDA	VATEROVA AMPULA (VÝVOD)		0,3
✓ CHOLEST. HEPATOZA	INTERLOBULÁRNÍ ŽLUČOVOD		0,328
✓ ENZYMO PATIE - NEDOSTATEČNÁ STŘEV...	STĚNA TENKÉHO STŘEVA		0,338
✓ CHRONICKÝ VŘED ŽALUDKU	PŘECHOD JÍCNU DO ŽALUDKU		0,348
✓ ATROFICKÁ HYPERPLASTICKÁ GASTRITIDA	PŘECHOD JÍCNU DO ŽALUDKU		0,362
✓ EROZIVNÍ GASTRITIS	PŘECHOD JÍCNU DO ŽALUDKU		0,37
✓ FARINGITIDA (ZÁNĚT HLITANU)	PAPILA JAZYKA		0,395
✓ ENTERITIDA (ZÁNĚT TENKÉHO STŘEVA)	STĚNA TENKÉHO STŘEVA		0,428
✓ TUKOVÁ HEPATÓZA	JATERNÍ TKÁŇ		0,428
✓ DYSKINEZE TLUSTÉHO STŘEVA	STĚNA TLUSTÉHO STŘEVA		0,441
✓ GLUTENOVÁ ENTEROPATIE	STĚNA TENKÉHO STŘEVA		0,445

Malina Josef 44 YEAR, neděle 1. listopad 1981
- Klient si neustále stěžuje na nízký tlak a bolesti hlavy
- povoláním revizor, celoživotně
- matka trpěla na anémii, také nedostatek Mg Magnesia

02 B # TRÁVICÍ SOUSTAVA
C # PATOLOGIE
DYSKINEZE ŽLUČOVÉHO MĚCHÝŘE D=0,144
DYSKINEZE DVANÁCTNÍKU D=0,168
GASTROPTÓZA D=0,228
KATARÁLNÍ GASTRITIDA D=0,253
ZÁNĚT DVANÁCTNÍKU D=0,264
ATROFICKÁ GASTRITIDA D=0,276
KALKULÓZNÍ CHOLECYSTITIDA D=0,300
CHOLEST. HEPATOZA D=0,328
ENZYMO PATIE - NEDOSTATEČNÁ STŘEVNÍ ENTEROKINÁZA D=0,338
CHRONICKÝ VŘED ŽALUDKU D=0,348
ATROFICKÁ HYPERPLASTICKÁ GASTRITIDA D=0,362
EROSIVNÍ GASTRITIS D=0,370
FARINGITIDA (ZÁNĚT HLITANU) D=0,395
ENTERITIDA (ZÁNĚT TENKÉHO STŘEVA) D=0,428
TUKOVÁ HEPATÓZA D=0,428
DYSKINEZE TLUSTÉHO STŘEVA D=0,441
GLUTENOVÁ ENTEROPATIE D=0,445
ZUBNÍ KAZ D=0,453
TRACHEITIDA (ZÁNĚTLIVÝ PROCES NA SLIZNICI PRŮDUŠNICE) # I D=0,461
POLYP DVANÁCTNÍKU D=0,465
HEMOROIDY D=0,481
HYPERTRÓFICKÁ GASTRITIDA D=0,500
E # MIKROORGANISMY A CIZOPASNÉ ČERVY
STROMYLOIDES STERCORALIS (MALÝ ČERV) - J8U D=0,241
ASCARIS LUMBRICOIDES (PARAZIT - ŠKRKAVKA DĚTSKÁ) - J8U D=0,452
TRICHINELLA SPIRALIS (PARAZITICKÁ HLISTICE) - J8U D=0,484

03 C # DYCHACÍ SOUSTAVA
C # PATOLOGIE
ZÁNĚT MANDLÍ # I D=0,187
VYBOČENÍ NOSNÍ PŘEPÁVKY D=0,289
RYNNA D=0,325
RESPIRAČNÍ INFEXCE # I D=0,363
LEUKOPLAKIE HLITANU D=0,397

112 of 112

ZPRÁVA TYP 1 ZPRÁVA TYP 2 ZPRÁVA TYP 3 AUTOMATICKÁ ZPRÁVA UPRAVIT ŠABLONY ZPĚT

NÁHLED 3 ZÁKLADNÍCH TYPŮ ZPRÁV:

- **ZPRÁVA TYP 1** – jednoduše a přehledně zobrazuje problémy tělesných systémů spolu s jejich disperzí D a pouze tento TYP umí zobrazovat naše vepsané poznámky!

Preview

75% of 3

Close

Souhrnná zpráva 27.08.2020


PŘÍMENÍ: Malina
KŘESTNÍ Jméno: Josef
DRUHE Jméno:
VĚK: 44
ROD: MUŽ

Malina Josef 44 YEAR, neděle 1. listopad 1981
02 B # TRÁVICÍ SOUSTAVA
C # PATOLOGIE
DYSKINEZE ŽLUČOVÉHO MĚCHÝŘE D=0,144
DYSKINEZE DVANÁCTNÍKU D=0,168
GASTROPTÓZA D=0,228
KATARÁLNÍ GASTRITIDA D=0,253
ZÁNĚT DVANÁCTNÍKU D=0,264
ATROFICKÁ GASTRITIDA D=0,276
KALKULÓZNÍ CHOLECYSTITIDA D=0,300
CHOLEST. HEPATOZA D=0,328
ENZYMO PATIE - NEDOSTATEČNÁ STŘEVNÍ ENTEROKINÁZA D=0,338
CHRONICKÝ VŘED ŽALUDKU D=0,348
ATROFICKÁ HYPERPLASTICKÁ GASTRITIDA D=0,362
EROSIVNÍ GASTRITIS D=0,370
FARINGITIDA (ZÁNĚT HLITANU) D=0,395
ENTERITIDA (ZÁNĚT TENKÉHO STŘEVA) D=0,428
TUKOVÁ HEPATÓZA D=0,428
DYSKINEZE TLUSTÉHO STŘEVA D=0,441
GLUTENOVÁ ENTEROPATIE D=0,445
ZUBNÍ KAZ D=0,453
TRACHEITIDA (ZÁNĚTLIVÝ PROCES NA SLIZNICI PRŮDUŠNICE) # I D=0,461
POLYP DVANÁCTNÍKU D=0,465
HEMOROIDY D=0,481
HYPERTRÓFICKÁ GASTRITIDA D=0,500
E # MIKROORGANISMY A CIZOPASNÉ ČERVY
STROMYLOIDES STERCORALIS (MALÝ ČERV) - J8U D=0,241
ASCARIS LUMBRICOIDES (PARAZIT - ŠKRKAVKA DĚTSKÁ) - J8U D=0,452
TRICHINELLA SPIRALIS (PARAZITICKÁ HLISTICE) - J8U D=0,484
03 C # DYCHACÍ SOUSTAVA
C # PATOLOGIE
ZÁNĚT MANDLÍ # I D=0,187
VYBOČENÍ NOSNÍ PŘEPÁVKY D=0,289
RYNNA D=0,325
RESPIRAČNÍ INFEXCE # I D=0,363
LEUKOPLAKIE HLITANU D=0,397
BRONCHOEKTATICKÁ NEMOC # I D=0,401
LEUKODENTALGIA HLITANU D=0,417
INTERIKNÍ ALERGIČKA LARYNGITIDA D=0,441
VASKULOPATICKÁ RÝMA # I D=0,441
BROCHIALE ASTMA # J D=0,480
PLICNÍ TUBERKulóZA # I D=0,467
ANGINA HLITANU D=0,479
AKUTNÍ BRONCHITIDA D=0,481
ZÁNĚT HLITANU D=0,482
BRONCHODILNÍ KAPILINCH D=0,498
E # MIKROORGANISMY A CIZOPASNÉ ČERVY


Staphylococcus aureus D=0,274
Koronavirus D=0,280
SCOPULARIOPSIS BREVIC D=0,389
Pseudomonas aeruginosa D=0,415
CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS D=0,430
Streptococcus pneumoniae D=0,487
STREPTOCOCCUS AGALACTIA D - J63 D=0,488
04 D # VÝLUČOVACÍ + ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA
C # PATOLOGIE
PROSTATITIDA 87 (ZÁNĚT PROSTATY) D=0,147
HYPERESTROGENISMUS D=0,170
VARICEKÉLA D=0,263
HYPOLUTEINISMUS D=0,277
HYPERREFLEXIA LEDVIN D=0,288
HYPERLUTEINISMUS D=0,317
OLASERNÍ LEDVIN - PREDISPOZICE K CYSTĚ, ADENOMU D=0,318
PARANFRITIDA D=0,381
BLUDNIVÁ LEDVINA D=0,382
HYPOESTROGENISMUS D=0,386
NEKROSKARIEVÝ SYNDROM D=0,397
URETRITIDA (ZÁNĚT MČOVÉ TRUBICE) D=0,414
CYSTOPROLIFITIDA (ZÁNĚT MČOVÉHO MĚCHÝŘE A LEDVINNÍCH PÁRKYČEK) D=0,438
HYPERKINEZE D=0,441
AMYLÓDÓZA LEDVIN D=0,447
CHRONICKÁ LATENTNÍ GLENNULONEFRITIDA D=0,452
ZÁNĚT VARIAT D=0,473
05 E # KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM
C # PATOLOGIE
THROMBOFILITIDA D=0,226
CEVNÍ DYSTONIE D=0,231
DIFUSEJNÍ STRUNA (CHROCHNĚNÍ ŠTÍTNÉ ŽLÁZY) # U D=0,307
SRDEČNÍ ARYTIE D=0,316
PARO/TRANLÍ TACHYKARDIE D=0,330
VARICEKÉLA ROŠÍŘENÍ EIL D=0,350
ALERGOICKÁ VASKULITIDA D=0,357
REMYATICKÁ KARDITIDA D=0,357
BURGEROVA NEMOC D=0,368
POLYARTERITIS NODOSA (AUTOIMUNITNÍ CHROCHNĚNÍ) D=0,394
THROMBOTICKÁ MIKROANGIOPATIE D=0,417
SRDEČNÍ ANEURYZMA D=0,450
ALERGIE D=0,438
ATROSKEROLÉZA D=0,450
HYPOKEMIE (NÍZKÝ KREVNÍ TLAK) D=0,454
E # MIKROORGANISMY A CIZOPASNÉ ČERVY
Opas D=0,247
Chřipka D=0,459
Coxsackie Virus - B4 D=0,479
Streptococcus bovis D=0,497
06 F # OBĚHOVÁ + LYMFATICKÁ SOUSTAVA
C # PATOLOGIE
VEXYLA EPIDERMIS BRILIKU D=0,091
NEURASTENIE D=0,276
HEPATOCHOLITIDA D=0,499
E # MIKROORGANISMY A CIZOPASNÉ ČERVY
Streptococcus MITIS D=0,412
07 G # ENDOKRINNÍ SOUSTAVA
C # PATOLOGIE
HYPOTYREÓZA D=0,253
DYSTROFIKALNÍ ENKEFALOPATIE D=0,458
08 H # NEURVOTÁ SOUSTAVA
C # PATOLOGIE
NEURALGIE D=0,246
LYNKA ROŠÍŘENÍ D=0,398
RADIKULITIDA (SKRIPUTY NERV V OBLASTI PÁTEŘE) # F D=0,391

Page 1 of 3

- **ZPRÁVA TYP 2** - tento TYP poskytuje navíc informace o tom, ve kterých ŘEZECH byli jednotlivé nálezy vyhodnoceny - v porovnání se TYPEM 1, který nabídne pouze orgánový systém/soustavu s koeficienty D jejich nálezů. Nevypisuje připsané osobní poznámky!

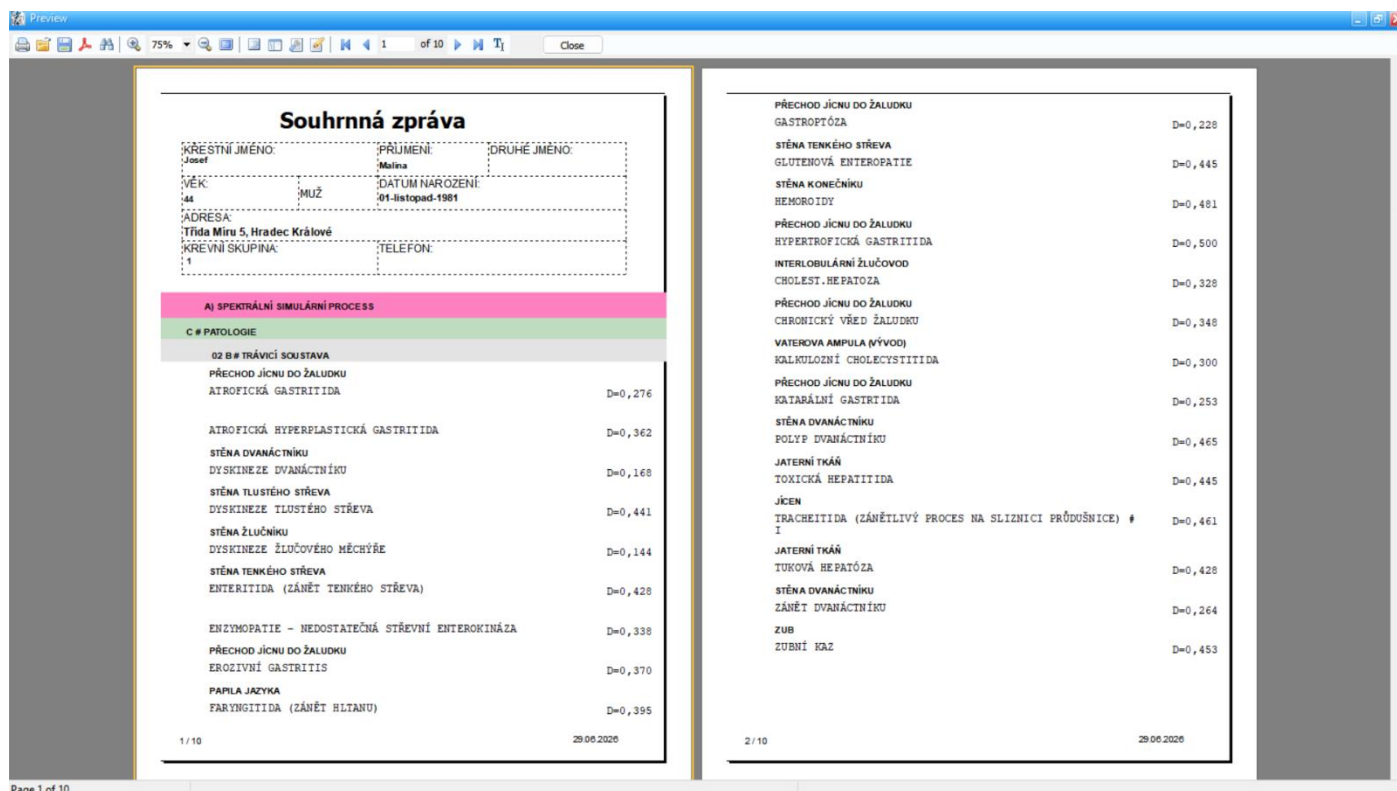

- **ZPRÁVA TYP 3** – prakticky kombinace obou předchozích TYPŮ. Jsou zde navíc vyobrazené informace vizuálně – koeficienty D mají podobu stupnicového ukazatele. Také ale nevypisuje připsané osobní poznámky!

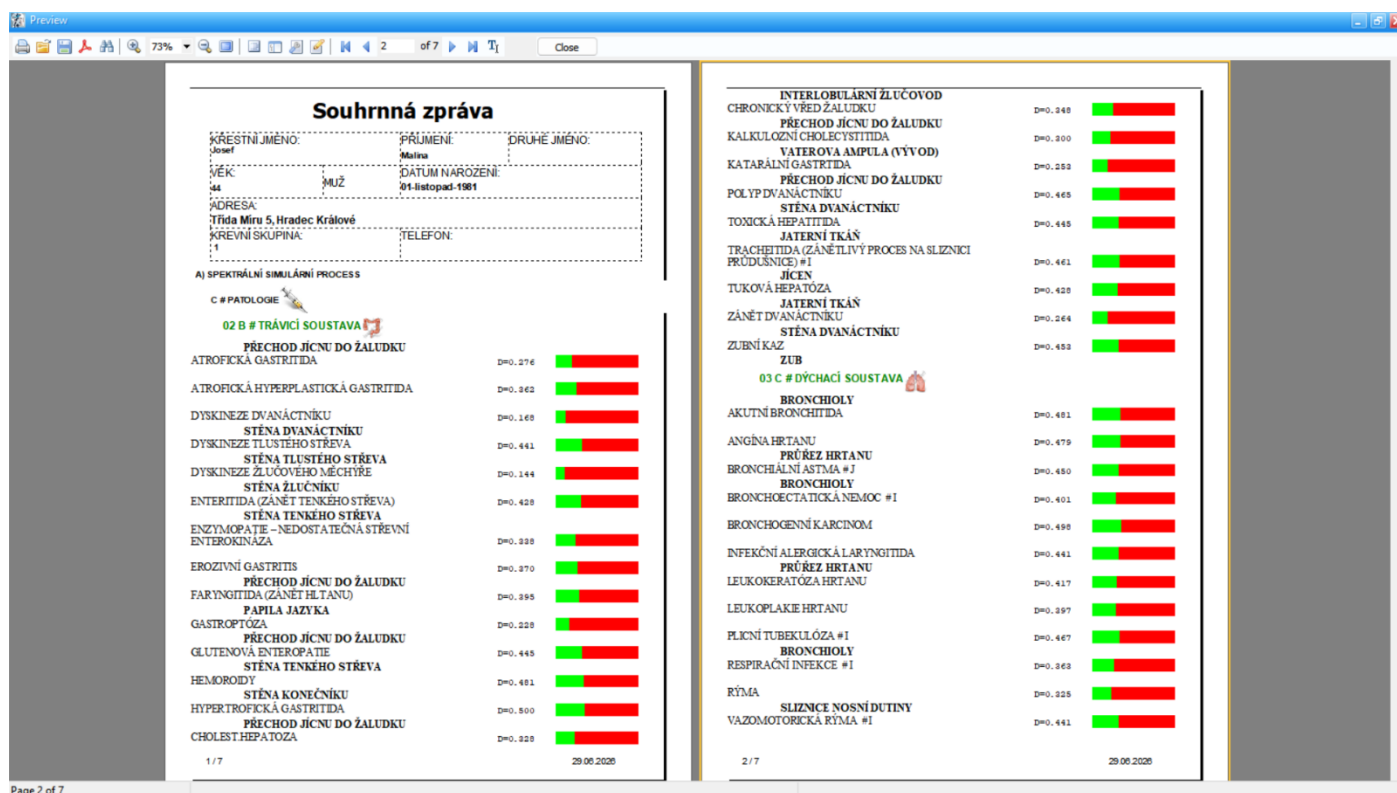


ULOŽENÍ ZPRÁVY DO POČÍTAČE A PŘÍPADNÝ TISK



Všechny typy ZPRÁV ukládáme do počítače stejným způsobem. V našem příkladu použijeme TYP 1 s poznámkami:

POSTUP

1. Zvolíme vhodný TYP 1, 2 nebo 3 – dle aktuální potřeby

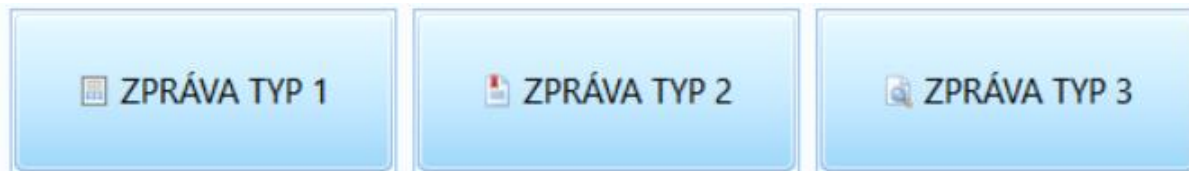


2. V levém horním rohu uvidíte různé možnosti. Klikněte na ikonku diskety.

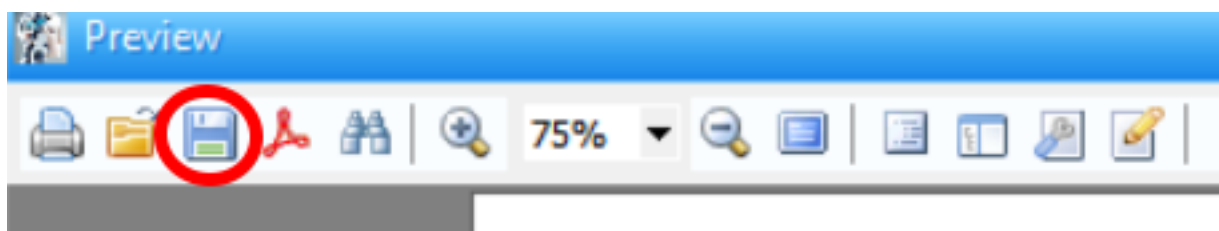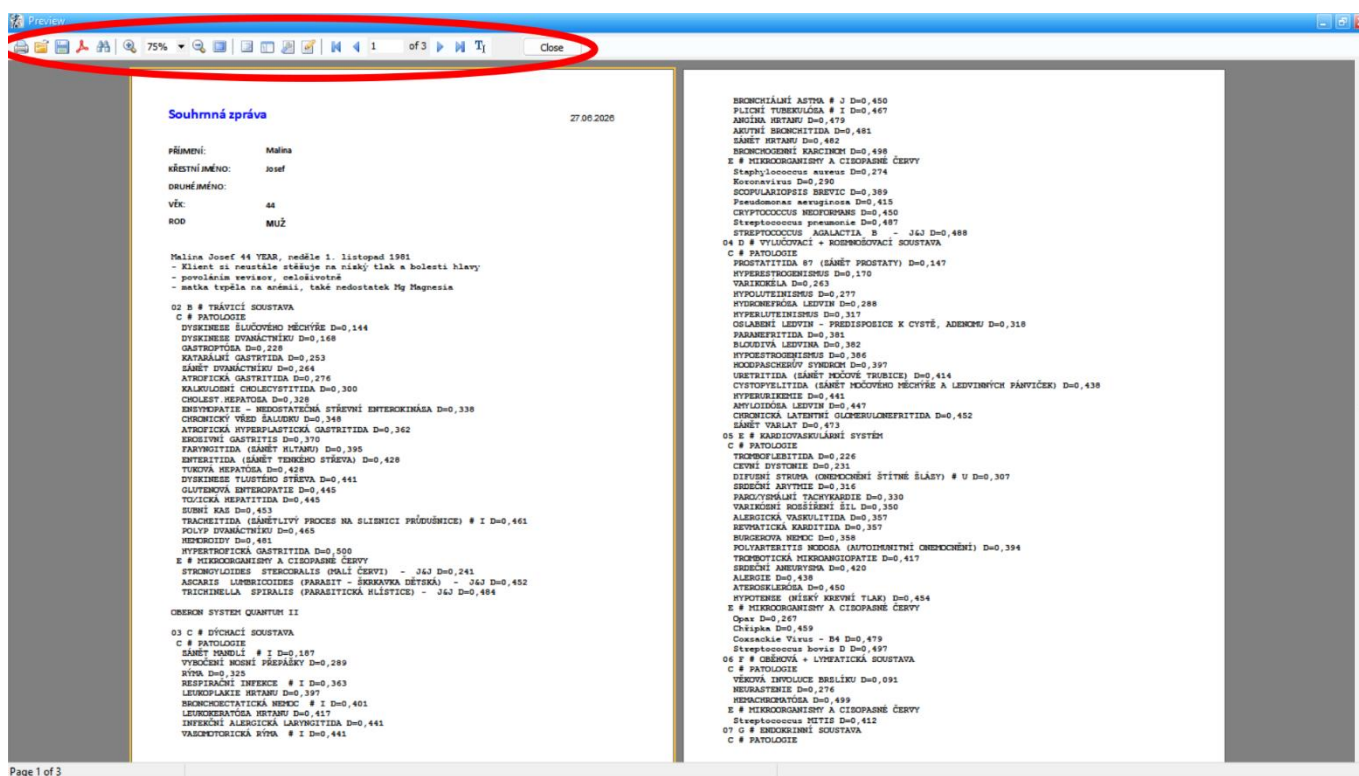

3. Po kliknutí na ikonku diskety, vybereme z nabídky volbu „PDF file...“ a vyskočí nové okénko (viz obrázek vpravo):


Nic dalšího není třeba nastavovat - jen potvrdíme tlačítkem „OK“ ve spodní části okénka.

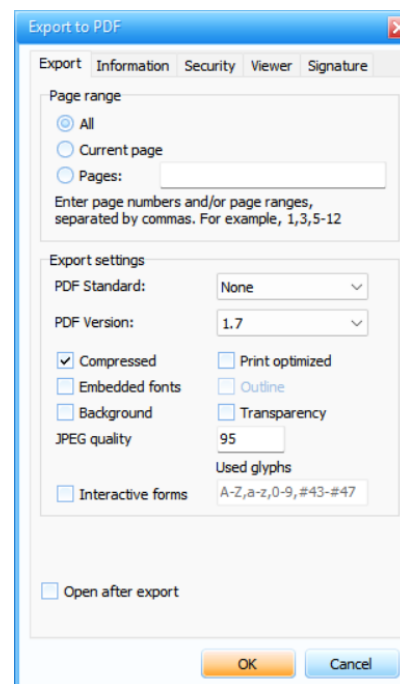

4. Poslední krok nám dá možnost dokument pojmenovat a uložit do počítače.

HOTOVO!

Souhrnná ZPRÁVA je v pořádku uložena. Náhled můžeme zavřít tlačítkem „Close“ na liště možností, případně křížkem v pravém horním rohu obrazovky.

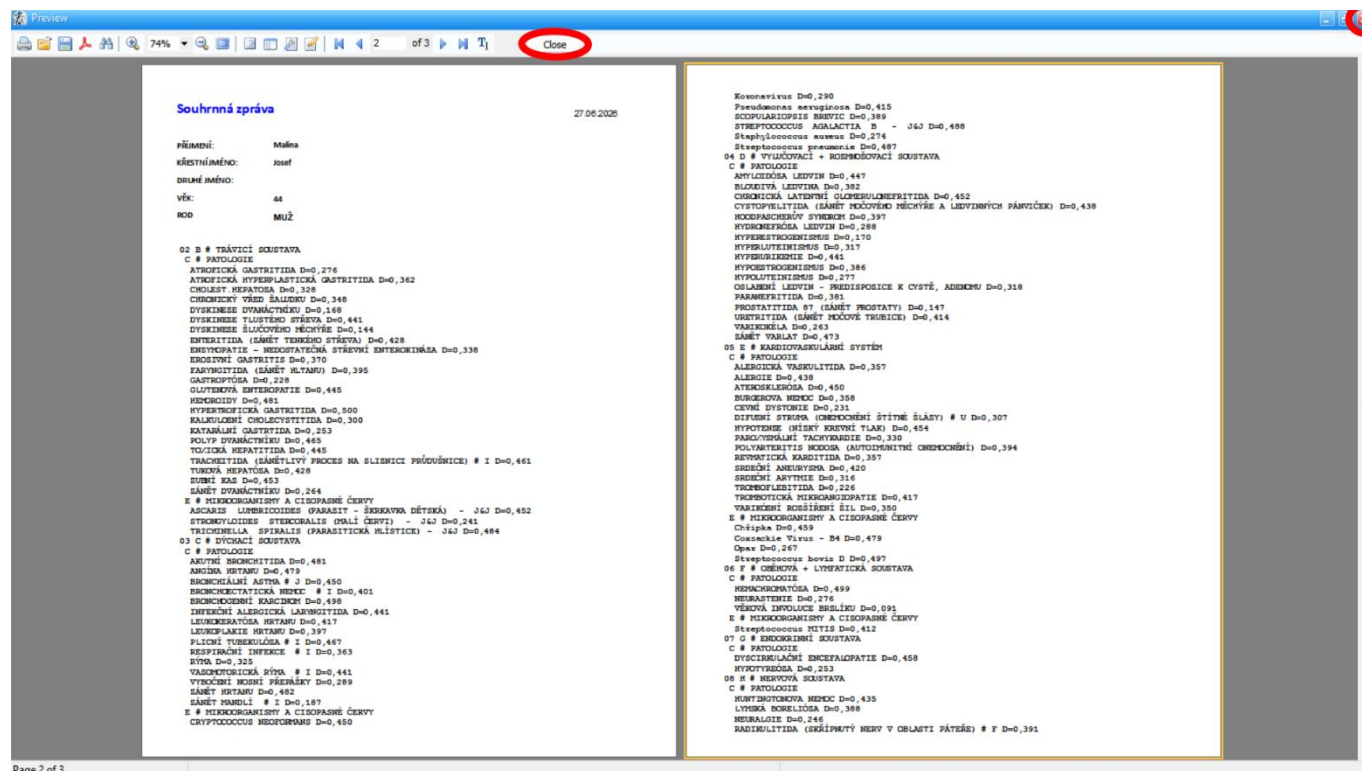

POKROČILÁ ZPRÁVA

POKROČILÉ ZPRÁVĚ věnujeme samotnou kapitolu. Tato funkce nabízí další úroveň při práci se záznamy. Z předchozích postupů už víme, že zde přejdeme z obrazovky ZPRÁV - tlačítkem „POKROČILÁ ZPRÁVA“.

Zde je jednou z užitečných možností zobrazení popisků k nálezům (popisky používáme i na obrazovce DIAGNOSTIKY, pokud je definice k dispozici. Ale ne každý nález popisek obsahuje). Volba je přínosná např. i pro klienta, kterému předáváme souhrnnou ZPRÁVU a neorientuje se v některých termínech a názvech.

Na obrázku níže uvidíme, jak tyto popisky zapnout/zobrazit:

The screenshot shows the 'POKROČILÁ ZPRÁVA' (Advanced Report) screen in a medical software interface. A red circle highlights the 'Popis' (Description) button in the top toolbar. The main window displays a table of findings with columns for 'VYBR...', 'NÁHL...', 'PREPARAT', 'ŘEZ', 'TL...', 'POPS', and 'OPTIMÁLNÍ DIS...'. The 'POPS' column contains checkboxes for each finding, and the 'OPTIMÁLNÍ DIS...' column contains numerical values. A red circle also highlights the 'Popis' button in the top toolbar. The right side of the screen shows a detailed description for the selected finding, 'Dyskineze žlučového měchýře D=0,144'.


Co dalšího je skvělé na tomto typu ZPRÁVY? Metody POKROČILÉ ZPRÁVY umí dokonce i vlastním způsobem nahlížet na vyhodnocená data. Může být jednoduchá nebo klidně i obsáhlá – záleží na nastavení.

Zobrazovaná data lze dále filtrovat a upravovat. V základu je ZPRÁVA nastavena na zobrazování SOUSTAV a ŘEZŮ, po vzoru základních TYPŮ ZPRÁV 2 a 3.


Opět si nejprve ukážeme postup pro uložení do počítače. Následně rozvedeme pokročilé metody filtrace a zobrazování dat ve formuláři.

ULOŽENÍ POKROČILÉ ZPRÁVY DO POČÍTAČE


Klikneme kdekoli do formuláře se záznamy pravým tlačítkem myši a dále na volbu „NÁHLED“:

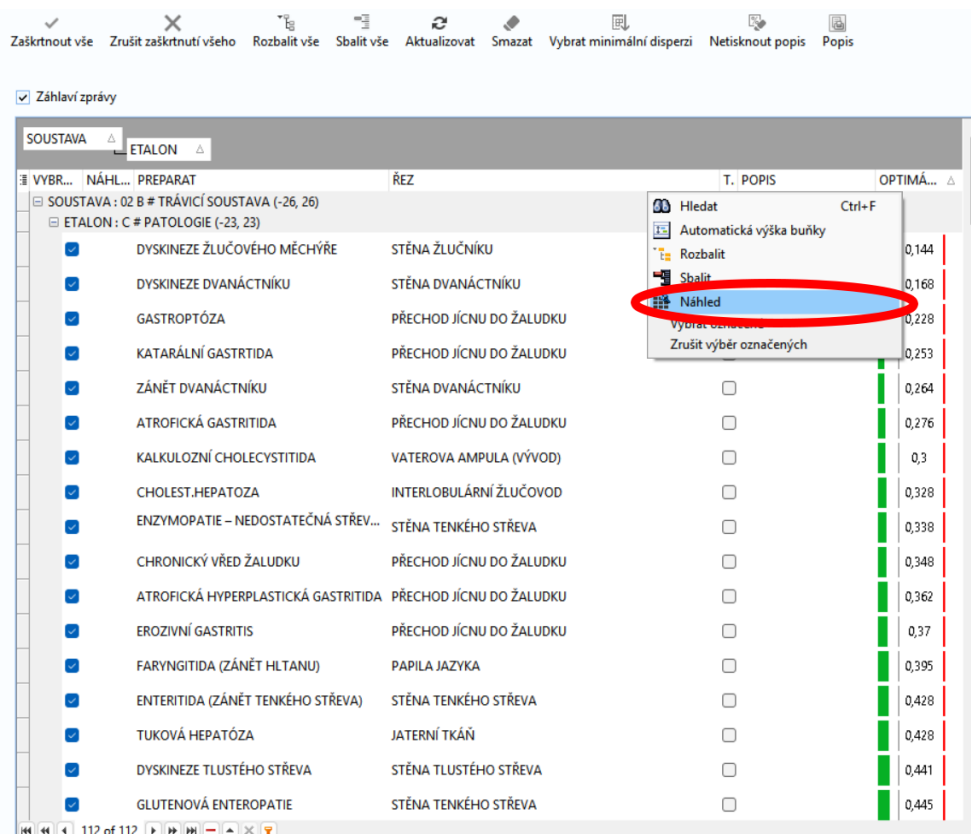

Objevíme se takovéto obrazovce:

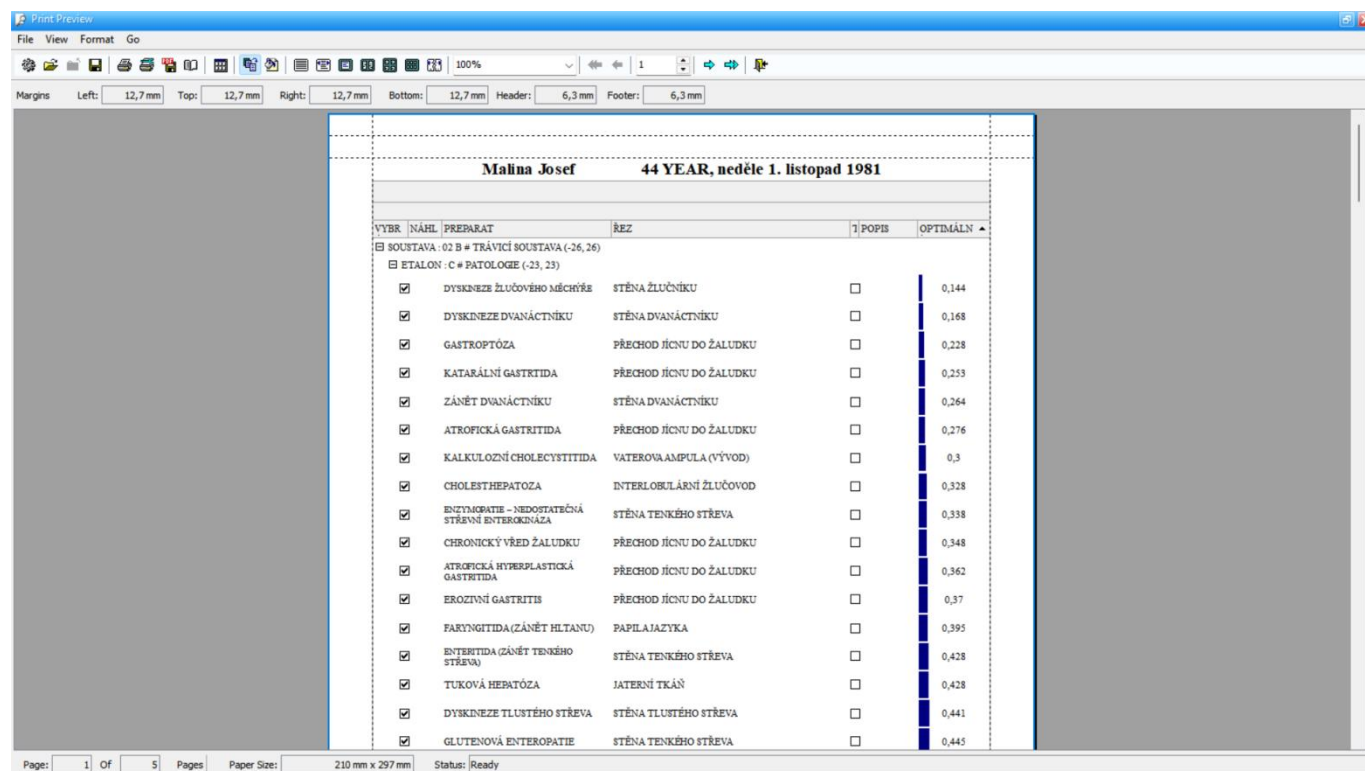


K uložení POKROČILÉ ZPRÁVY postupujeme podobně, jako u předchozích, základních TYPŮ. V levé horní části zvolíme nabídku „File“ a poté „Export To PDF“. Nic dalšího nastavovat nemusíme, jen potvrdíme tlačítkem „OK“. Opět budeme závěrem vyzváni k výběru složky v počítači, kam dokument uložit.

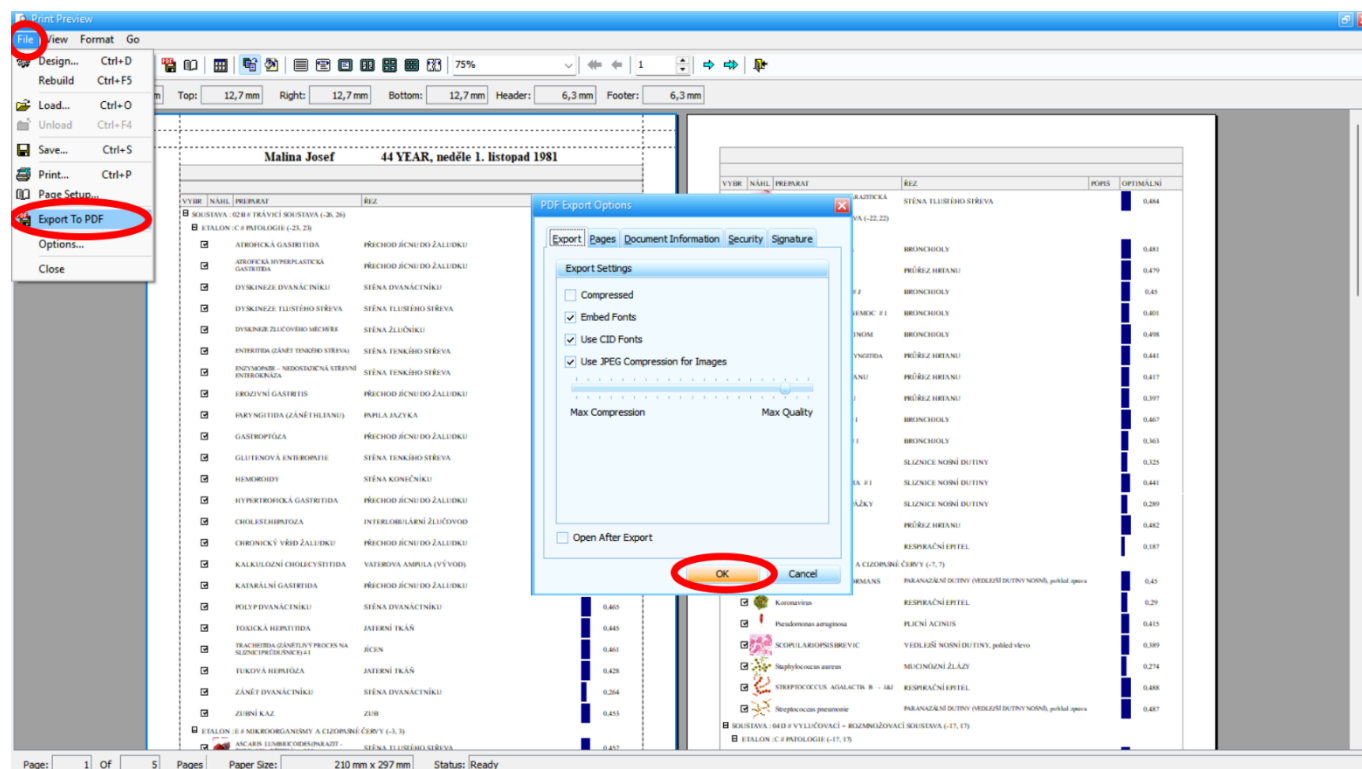

ÚPRAVA ZOBRAZENÍ, DAT A FILTRACE

Sloupce obsahující data si můžeme dále upravovat – přidávat/odebírat - pomocí jednoduché metody. Příkladně si odstraníme sloupec se zatržítkem u popisku nálezu – tato informace není k ničemu potřeba a jen zabírá místo ve formuláři.

Přejdeme zpět na obrazovku POKROČILÉ ZPRÁVY a soustředíme se na malou ikonku v hlavičce formuláře na levé straně – symbol odstavce – viz obrázek níže.

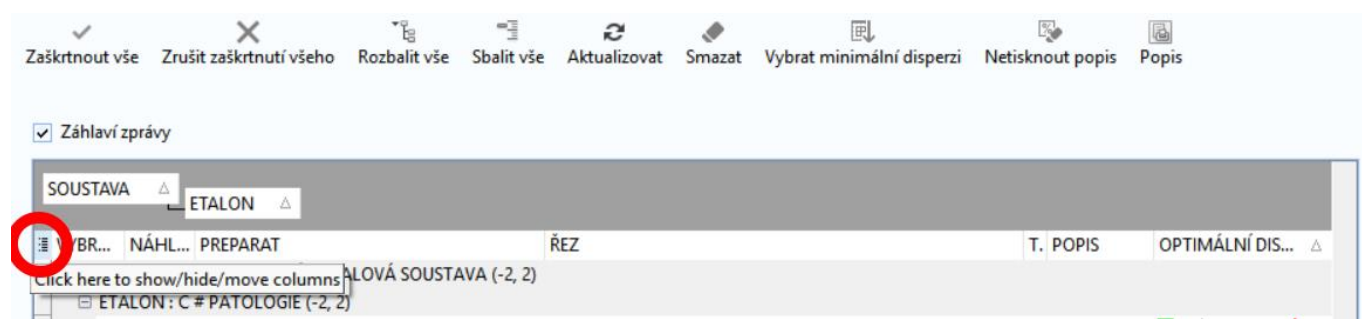

Poté odznačíme možnost „TISK POPISU“. Sloupce nám zmizí a tím se uvolní místo pro zbylé informace ve formuláři.


Takto můžeme z nabídky sloupce do formuláře i přidávat.

Tyto metody platí samozřejmě i zde ve formuláři POKROČILÝCH ZPRÁV – kterýkoli sloupeček můžete zúžit/rozšířit, případně filtrovat dle jeho hodnoty (nebo názvu A/Z).


☒ Záhloví zprávy				
SOUSTAVA ŘEZ				
NÁHLED PREP.	PREPARAT	ETALON	POPIS	OPTIMÁLNÍ DISPERZE
SOUSTAVA : 02 B # TRÁVICÍ SOUSTAVA (-11, 11)				
[-] ŘEZ : ZUB (-1, 1)				
	ZÁNĚT ZUBU (ZUBNÍ DŘENĚ)	C # PATOLOGIE	Akutní nebo c...	0,413
[-] ŘEZ : VATEROVA AMPULA (VÝVOD) (-1, 1)				
	KALKULOZNÍ CHOLECYSTITIDA	C # PATOLOGIE	V naproste vět...	0,428
[-] ŘEZ : STĚNA ŽLUČNÍKU (-1, 1)				
	COMMISSURAL DISEASE (KOMISURÁLNÍ NEMOC) # G	C # PATOLOGIE	Je způsobena ...	0,368
[-] ŘEZ : STĚNA DVANÁCTNÍKU (-1, 1)				
	ZÁNĚT DVANÁCTNÍKU	C # PATOLOGIE	Duodenitida j...	0,33
[-] ŘEZ : PŘECHOD JÍCNU DO ŽALUDKU (-3, 3)				
	KATARÁLNÍ GASTRITIDA	C # PATOLOGIE	Gastritis catarr...	0,264
	ATROFICKÁ GASTRITIDA	C # PATOLOGIE	Atrofická gast...	0,366
	EROZIVNÍ GASTRITIS	C # PATOLOGIE	Zánětlivý proc...	0,486
[-] ŘEZ : PAPILA JAZYKA (-1, 1)				
	FARYNGITIDA (ZÁNĚT HLTANU)	C # PATOLOGIE	Faryngitida je ...	0,427
[-] ŘEZ : JÍCEN (-1, 1)				
	TRACHEITIDA (ZÁNĚTLIVÝ PROCES NA SLIZNICI PRŮDUŠNICE) ...	C # PATOLOGIE	Chorobný sta...	0,426
[-] ŘEZ : INTERLOBULÁRNÍ ŽLUČOVOD (-2, 2)				
	STRONGYLOIDES STERCORALIS (MALÍ ČERVI) - J&J	E # MIKROORGANISMY ...	Strongyloides ...	0,42
	CHOLEST.HEPATOZA	C # PATOLOGIE	Cholest.hepatoz...	0,474
SOUSTAVA : 03 C # DÝCHACÍ SOUSTAVA (-12, 12)				

1. Přetáhli jsme buňku ETALON ze záhlaví do hlavičky formuláře.

- Buňku ŘEZ jsme naopak přetáhli z hlavičky do záhlaví formuláře. Cvičně jsme si také změnili směr řazení záznamů obráceně směrem Z/A, jak nám ukazuje řadící trojúhelníček ve směru shora dolů:

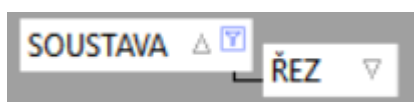


- U SOUSTAVY si zase povšimněme ikonky rozevřacího trojúhelníčku – tím nám program říká, že zde byla provedena dílčí filtrace – povolili jsme pouze záznamy DÝCHACÍ a TRÁVICÍ SOUSTAVY.
- Další změnou je řazení záznamů ve svých kategoriích dle disperze. To nám ukazuje řadící trojúhelníček v buňce OPTIMÁLNÍ DISPERZE:

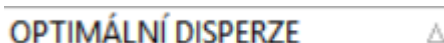


- Poslední úprava je velikost a posunutí sloupečků. OD, stejně jako NÁHLED PREPARÁTU nevyžadují moc místa. Sloupečky tedy zúžíme, abychom mohli naopak zvětšit sloupečky s názvy nálezu (PREPARAT) a POPISKŮ. Formulář bude tedy po všech úpravách vypadat nějak takto:

☒ Záškrtnout vše ☒ Zrušit zaškrtnutí všeho ☒ Rozbalit vše ☒ Sbalit vše ☒ Aktualizovat ☒ Smazat ☒ Vybrat minimální disperzi ☒ Netisknout popis ☒ Popis					
☒ Záhloví zprávy					
SOUSTAVA ŘEZ					
NÁHLE...	PREPARAT	ETALON	POPIS	OPTIMÁ...	
SOUSTAVA : 03 C # DÝCHACÍ SOUSTAVA (-12, 12) ŘEZ : SLIZNICE NOSNÍ DUTINY (-2, 2) VYBOČENÍ NOSNÍ PŘEPÁŽKY VAZOMOTORICKÁ RÝMA # I					
		C # PATOLOGIE	Onemocnění je obvykle způsobeno abnormálním vývo...	0,346	
		C # PATOLOGIE	Vazomotorická rinopatie je vazomotorická, alergická rý...	0,418	
ŘEZ : RESPIRAČNÍ EPITEL (-3, 3) ZÁNĚT MANDLÍ # I Koronavirus STREPTOCOCCUS AGALACTIA B - J&J					
		C # PATOLOGIE	Akutní tonzilitida je celkové akutní infekční onemocně...	0,249	
		E # MIKROORGA...	Obalených virů s kulatým nebo oválný tvar o průměru ...	0,251	
		E # MIKROORGA...	Streptokoky skupiny B kolonizují nosohltan, trávicí trak...	0,498	
ŘEZ : PRŮŘEZ HRTANU (-2, 2) ANGÍNA HRTANU INFEKČNÍ ALERGICKÁ LARYNGITIDA					
		C # PATOLOGIE	Angina (akutní tonzilitida) je akutní celkové infekční on...	0,399	
		C # PATOLOGIE	Udržuje homeostázu a plní ochranné funkce ve vztahu ...	0,434	
ŘEZ : PLICNÍ ACINUS (-1, 1) Pseudomonas aeruginosa					
		E # MIKROORGA...	Pseudomonas aeruginosa - hlavní původce lidských inf...	0,393	
ŘEZ : PARANAZÁLNÍ DUTINY (VEDLEJŠÍ DUTINY NOSNÍ), pohled zprava (-1, 1) CHLAMIDIA TRACHOMATIS					
		E # MIKROORGA...	Chlamydia - obligátní intracelulární paraziti, jsou schop...	0,437	
ŘEZ : MUCINÓZNÍ ŽLÁZY (-1, 1) Adenovirů					
		E # MIKROORGA...	Adenovirů - základní skupina virů, které mohou být izol...	0,358	
ŘEZ : BRONCHIOLY (-2, 2) AKUTNÍ BRONCHITIDA PLICNÍ TUBEKULÓZA # I					
		C # PATOLOGIE	Difusní akutní zánět tracheobronchiálního stromu. Tot...	0,458	
		C # PATOLOGIE	Infekční onemocnění charakterizované tvorbou ložisek ...	0,489	
☒ ☒ ((SOUSTAVA = 02 B # TRÁVICÍ SOUSTAVA) Or (SOUSTAVA = 03 C # DÝCHACÍ SOUSTAVA)) Customize...					
2 of 23 Previous Next First Last Refresh Close					

6. Přejdeme ULOŽENÍ dokumentu, doporučujeme nastavit formát stránky na šířku – tím poskytneme větší prostor pro informace v popiskách. Nastavení se skrývá pod „File“ a „Page Setup...“

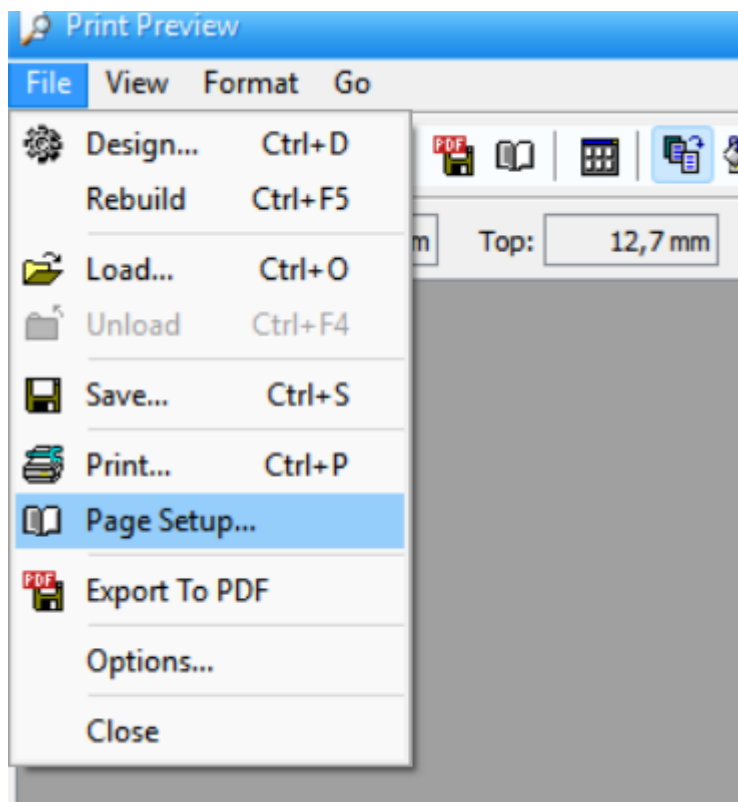

7. V novém okénku přepneme z „Portrait“ na „Landscape“ a potvrdíme tlačítkem „OK“.

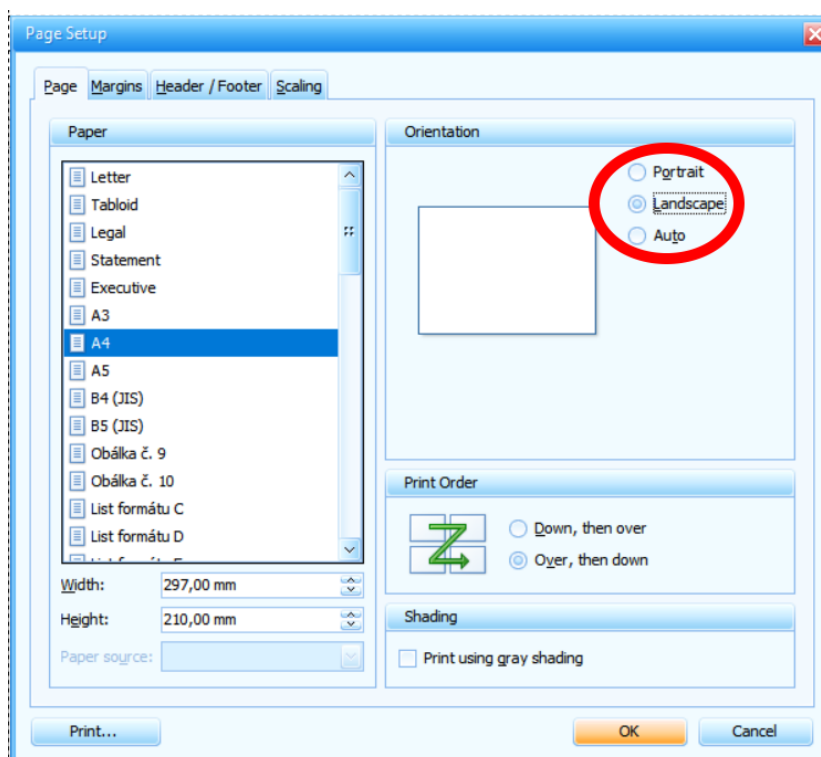

Finální náhled ZPRÁVY by tedy měl vypadat nějak takto:

Print Preview

File View Format Go

100%

Margins

Left: 12,7 mm

Top: 12,7 mm

Right: 12,7 mm

Bottom: 12,7 mm

Header: 6,3 mm

Footer: 6,3 mm

Malina Josef 44 YEAR, neděle 1. listopad 1981				
NÁHLED	PREPARAT	ETALON	POPS	OPTIMÁLNÍ
SOUTAVA : 02 B # TRÁVICÍ SOUTAVA (-11, 11)				
REZ : ZUB (-1, 1)				
ZÁNĚT ZUBU (ZUBNÍ DŘENĚ)		C # PATOLOGIE	Alumini nebo chemický zánět tkáně vyplněný dutiny zubu (vřezání), obvykle kvůli prodloužení mléčků z dutiny. Alumini palpitace je doprovázeno silnou bolestí.	0,413
REZ : VATEROVA AMPULA (VÝVOD) (-1, 1)				
KALKULÓZNÍ CHOLECYSTITIDA		C # PATOLOGIE	V naprosté většině případů se zánět žlučníku vyvíjí jako komplikace přetrvávajících žlučových kamenů (cholecystolithiasis) – tzv. kalkulární chol...	0,428
REZ : STĚNA ŽLUČNÍKU (-1, 1)				
COMMISURAL DISEASE (KOMISURÁLNÍ NEMOC) # G		C # PATOLOGIE	Je způsobena tvrdou vřetou (komisur) v blízkosti dutiny po chirurgickém zákroku, smasach nebo zánětlivých onemocněních. Je jednou z mnohých příčin ileu.	0,368
REZ : STĚNA DVANÁCTNÍKU (-1, 1)				
ZÁNĚT DVANÁCTNÍKU		C # PATOLOGIE	Dvanáctník je povrchová, atrofická, intersticiální, hyperplastická nebo erozivní-ulcerózní. Nepravdělná strava s častou konzumací kořeněných, ...	0,33
REZ : PŘECHOD JICNU DO ŽALUDKU (-3, 3)				
KATARÁLNÍ GASTRITIDA		C # PATOLOGIE	Gastritis catarrhalis (vřetý katar žaludku, slizniční katar). Katarální gastritida s normální a zvýšenou vylučovací funkcí žaludku – obvykle povrchová neb...	0,264
ATROFICKÁ GASTRITIDA		C # PATOLOGIE	Atrofická gastritida se charakterizuje atrofickými změnami sliznice žaludku a jeho vylučovací nedostatečností. Rozvíjí se převážně ve starším věku. Poz...	0,366
EROZIVNÍ GASTRITIS		C # PATOLOGIE	Zánětlivý proces s hyperemií, erozemi až vředy. Formy: hemoragicko-erozivní gastritida, akutní stresový vřed. Etiologie: infekce, ...	0,486
REZ : PAPILA JAZYKA (-1, 1)				
FARYNGITIDA (ZÁNĚT HLITANU)		C # PATOLOGIE	Faryngitida je akutní nebo chronický zánět sliznice nosohltanu. Akutní faryngitida je zánět sliznice. Bývá kombinována s akutními záněty hor...	0,427
REZ : JÍCEN (-1, 1)				
TRACHEITIDA (ZÁNĚTLIVÝ PROCES NA SLIZNICI PRŮDUŠNICE) # I		C # PATOLOGIE	Chcete-li se vyhnout zánětu sliznice průdušnice. Někdy nacházejí nebo se objevují infekční onemocnění (chřipka, spalničky, zářez kůže).	0,426
REZ : INTERLOBULÁRNÍ ŽLUČOVOD (-2, 2)				
 STRONGYLOIDES STERCORALIS (MALÍ ČERV) - 1&J		E # MIKROORGANISMY A CIZOMARNÉ ČERVY	Strongyloides stercoralis je lidská parazitická škrkavka způsobující nemoc strongyloidózu. Jeho obecný název je nitkový červ. Ve Spojeném královst...	0,42
CHOLESTHEPATOZA		C # PATOLOGIE	Cholesthepatosa charakterizuje se cholelázou – metastázou žluči. Porucha, při níž se do dvanáctníku nedostává normální množství žluči. Tím stoupá mn...	0,474
SOUTAVA : 03 C # DÝCHAČÍ SOUTAVA (-12, 12)				

Page: 1 Of 3 Pages

Paper Size: 210 mm x 297 mm

Status: Ready

HOTOVO! Vytvořili jsme první, vlastní, upravenou POKROČILOU SOUHRNNOU ZPRÁVU přímo na míru. Dokument nezapomeňte uložit do počítače postupem definovaným úvodem kapitoly. Po uložení do počítače můžeme ZPRÁVU vytisknout.

Není nutné tento způsob tvorby ZÁVĚREČNÉ SOUHRNNÉ ZPRÁVY používat. Běžně nám pro naše potřeby stačí základní TYPY 1–3, nicméně stávají se i výjimky, proto je tyto metody dobré znát. Doporučujeme ji ale používat až zkušenějším terapeutům.

INDEXOVÁ ZPRÁVA

Posledním možným TYPEM ZPRÁVY je tzv. INDEXOVÁ ZPRÁVA. Výhodou je rychlost a jednoduchost – nemusíme nic podrobněji nastavovat. Tento TYP je vhodný i pro klienta, protože nevypisuje složité informace, nezmiňuje nic o diagnóze a nálezech – klienta tedy dostupná data nerozruší a zároveň zde neneseme ani žádnou lékařskou odpovědnost (v některých zemích světa se kvantové přístroje nedají zahrnovat pod medicínskou praxi hrazenou pojišťovnami – včetně ČR a Slovenska).

ZPRÁVU vytváříme velice podobným způsobem, jako předchozí POKROČILOU ZPRÁVU, a to přímo z KARTOTÉKY. Dle potřeby vyfiltrujeme záznamy a případně upravíme velikosti sloupečků. Poté stejným způsobem klikneme pravým tlačítkem kdekoli do formuláře a zvolíme možnost „Náhled“.

Enter text to search... Find Clear


DATUM	NÁHL...	ŘEZ	TYP	SOU...	STAV	ENERGIE	OPTIMÁLNÍ DISPER...	0
27.06.2026 18:28:57		AMELOBLAST	S			79 %		0,638
27.06.2026 18:29:19		STĚNA KONEČNÍKU	S			74 %		0,686
27.06.2026 18:29:17		PRŮŘEZ APENDIXU	S			71 %		0,701
27.06.2026 18:29:03		PŘECHOD JÍČNU DO ŽALUDKU	S			74 %		0,712
27.06.2026 18:29:13		STĚNA TENKÉHO STŘEVA	S			33 %		0,74
27.06.2026 18:29:15		STĚNA TLUSTÉHO STŘEVA	S			38 %		0,75
27.06.2026 18:29:12		LALŮČEK SLINIVKY BRŠNÍ	S			65 %		0,757
27.06.2026 18:29:05		ŽALUDEČNÍ ŽLÁZY	S					0,783
27.06.2026 18:28:59		PAPILA JAZYKA	S					0,795
27.06.2026 18:29:02		TKÁŇ JÍČNU	S					0,799
27.06.2026 18:29:22		JATERNÍ TKÁŇ	S					0,801
27.06.2026 18:28:53		ZUB	S			76 %		0,804
27.06.2026 18:29:29		INTERLOBULÁRNÍ ŽLUČOVOD	S			30 %		0,817
27.06.2026								

☒ (SOUSTAVA = 02 ≠ B ≠ TRÁVICÍ SOUSTAVA) And (DATUM = 27.06.2026)

Hledat Ctrl+F
 Automatická výška buňky
 Rozbalit
 Sbalit
 Náhled
 Vybrat označené
 Zrušit výběr označených

7 of 37

A následně i stejným způsobem uložíme - klikneme v levé horní části obrazovky na nápis „File“ a dále „Export to PDF“.

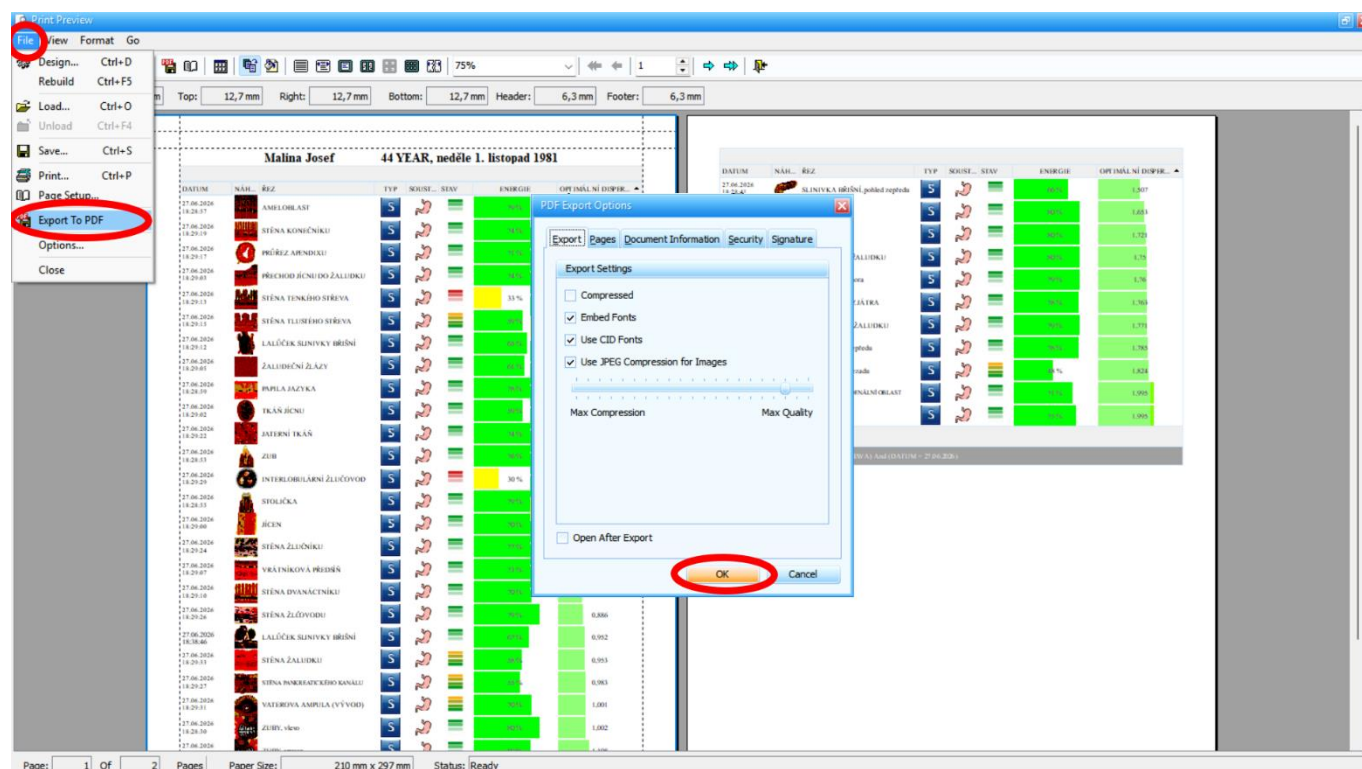

VÝROBA PREPARÁTU / MEDIKAMENTU

Jednou z užitečných a důležitých funkcí je tvorba vlastních medikamentů – tzv. PREPARÁTŮ. Jedná se o proces, kdy určitou frekvenci vtiskneme/naprogramujeme do specifického látkového nosiče (substance) - vody, alkoholu, cukru/cukrové pilulky nebo parafinu (včetně všech ostatních voskovitých, nasycených uhlovodíků - tzv. alkanay – nejčastěji ve formě oleje nebo vosku). Ale POZOR! Cukr a cukrové placebo pilulky nepoužíváme při léčbě parazitů! Frekvence pak čerpáme nejen z konkrétních orgánů/ŘEZŮ, ale i ze všech dostupných ETALONŮ.

K naprogramování/výrobě medikamentu používáme černý pohárek ze sady příslušenství, podobně jako u VEGETO-TESTU EXTERNÍHO. Proto prosíme o připojení pohárku k Oberon boxu před započetím procesu.



K funkci se dostaneme ze dvou různých obrazovek. Podle toho, jaký druh frekvence programujeme (obrácenou frekvenci orgánu/ŘEZU nebo nálezu z ETALONU). Opět si vysvětlíme nejdříve všeobecná pravidla a zásady, a následovně oba postupy.



Pro všechny tekuté látkové nosiče doporučujeme používat lahvičky s kapátkem (viz obrázek, ale samozřejmě i jiné druhy, důležitý je dávkovací systém formou kapání). Na barvě lahvičky nezáleží, jen musí být skleněná. Před programováním kapek doporučujeme sundat jakýkoli plastový kryt/uzávěr/víčko a ponechat pouze lahvičku s látkou.

V nabídce látkových nosičů není „alkoholem“ myšleno používat celou lahvičku naplněnou alkoholem, ale jen vodu s pár kapkami alkoholu. Jaký je mezi nimi rozdíl? Trvanlivost naprogramovaných kapek:

- čistá voda - 1 týden.
- voda s pár kapkami alkoholu - 1 měsíc.

Medikamenty vyrábíme maximálně na 1 měsíc! Frekvence orgánů se v průběhu terapie mírně proměňují, a proto je dobré programovat spolu s co nejčerstvějšími SKENY.

První metodu používáme nejčastěji při výrobě tzv. ORGÁNOVÉHO PREPARÁTU - MEDIKAMENTU. ORGÁNOVÝ PREPARÁT programujeme pomocí naskenovaného ŘEZU, jehož naměřenou frekvenci následně zinvertujeme (obrátime). Touto terapií působíme na orgán způsobem, který postupně tlačí jeho frekvenci k vyrovnaní do harmonického stavu.

Druhou metodu potřebujeme hlavně při výrobě medikamentu pomocí některého z ETALONŮ. Užitečnými ETALONY jsou v tomto případě např. HOMEOPATIE a ALOPATIE.

Připomeneme si ještě z kapitoly o ETALONECH jejich rozdělení na tzv. POZITIVNÍ a NEGATIVNÍ. POZITIVNÍ jsou ty, které obsahují prospěšné položky – jako jídlo, léky, potravinové a vitamínové doplňky atd... Naproti tomu NEGATIVNÍ nabízí cokoli, co nezlepšuje zdravotní stav (toxické a odpadní látky, nemoci, patogeny, alergeny apod.) Obecně tedy při VÝROBĚ PREPARÁTU platí:

Jestliže je ETALON POZITIVNÍ, nikdy frekvenci NEINVERTUJEME!

Jestliže je ETALON NEGATIVNÍ, vždy musíme frekvenci INVERTOVAT!

Jestliže vytváříme ORGÁNOVÝ PREPARÁT, také frekvenci vždy INVERTUJEME!

Stručným příkladem si uvedeme ETALON PATOLOGIE – ten obsahuje škodlivé položky/nálezy. Nechceme přece do těla vnášet více z nemocných, škodlivých frekvencí. Při výrobě tedy nutně musíme frekvenci **INVERTOVAT**!

Upozorňujeme, že software zatím sám NEUMÍ automaticky rozpoznat tyto NEGATIVNÍ a POZITIVNÍ ETALONY! Během celého procesu doporučujeme zvýšenou obezřetnost. Pečlivě o INVERZI rozhodujeme a před spuštěním výroby nastavení raději i 2x kontrolujeme.

POSTUP – VÝROBA ORGÁNOVÉHO PREPARÁTU

První metoda

1. V KARTOTÉCE vybereme a modře označíme ŘEZ, pro který budeme ORGÁNOVÝ PREPARÁT vyrábět. Následně přejdeme na obrazovku ANALÝZY/LOKALIZACE (tlačítkem „ANALÝZA“ nebo kliknutím do obrázku náhledu ŘEZU).

KARTOTÉKA
PRŮMENÍ: Malina KŘESTNÍ JMÉNO: Josef KATEGORIE KRVĚ: (0)
ADRESA: Třída Míru 5, Hradec Králové E-MAIL: RH faktor: +
TELEFON: VĚK: 44 ROD: MUŽ

DATUM	NÁHL	ŘEZ	DIV	POUŠT	STAV	ENERGIE	OPTIMÁLNÍ DISPER...
18.06.2026 17:32:11		KMENOVÁ BUŇKA	S			11 %	0,786
18.06.2026 17:32:28		GRANULÁRNÍ LUTEÁLNÍ BUŇKY	S			68 %	0,795
18.06.2026 17:23:59		ŽÍLA KAPILÁRNÍ	S			66 %	0,796
18.06.2026 17:32:01		ŽÍRNÉ BUŇKY - MASTOCYTY	S			54 %	0,795
18.06.2026 17:22:05		SLIZNICE NOSNÍ DUTINY	S			70 %	0,798
18.06.2026 17:25:29		RETIKULOCYT	S			58 %	0,799
18.06.2026 17:21:09		ZUB	S			69 %	0,8
18.06.2026 17:30:45		TUKOVÁ TKÁŇ	S			72 %	0,8
18.06.2026 17:30:47		KOSTNÍ TKÁŇ	S			60 %	0,802
18.06.2026 17:32:14		ACINÁRNÍ BUŇKY SLINIVKY BRÍŠNÍ	S			40 %	0,802
18.06.2026 17:21:17		TKÁŇ JÍCNU	S			59 %	0,805
18.06.2026 17:30:04		VLASOVÁ CIBULKA	S			43 %	0,81
18.06.2026 17:22:53		PRŮŘEZ PENISU, ČELNÍ POHLED	S			73 %	0,813

NOVÝ KLIENT

VYBRAT KLIENTA

ODSTRANIT KLIENTA

ANALÝZA

ZPĚT

SKENOVAT

TISK

SROVNÁVACÍ ANALÝZA

2. Poté klikneme na tlačítko „VÝROBA PREPARÁTU“.

☐ Zobrazit popisky ☐ Podrobně ☐ Zobrazit obrys ložiska

KMENOVÁ BUŇKA

ZPĚT

TEST

SROVNÁVACÍ ANALÝZA

META-TERAPIE


VÝROBA PREPARÁTU

SMAZAT VYBRANOU OBLAST


VYBRAT OBLAST

VYHODNOTIT OBLAST

3. Tím se objevíme na požadované obrazovce. Tou úplně první věcí, kterou nastavujeme, je INVERZE!!! ORGÁNOVÝ PREPARÁT vyrábíme vždy INVERTOVANĚ! Jako nápověda nám slouží ikonka upozornění – vykřičník ve žlutém trojúhelníku (viz. obrázek níže), který se zobrazuje jen tehdy, když je INVERZE vypnutá.

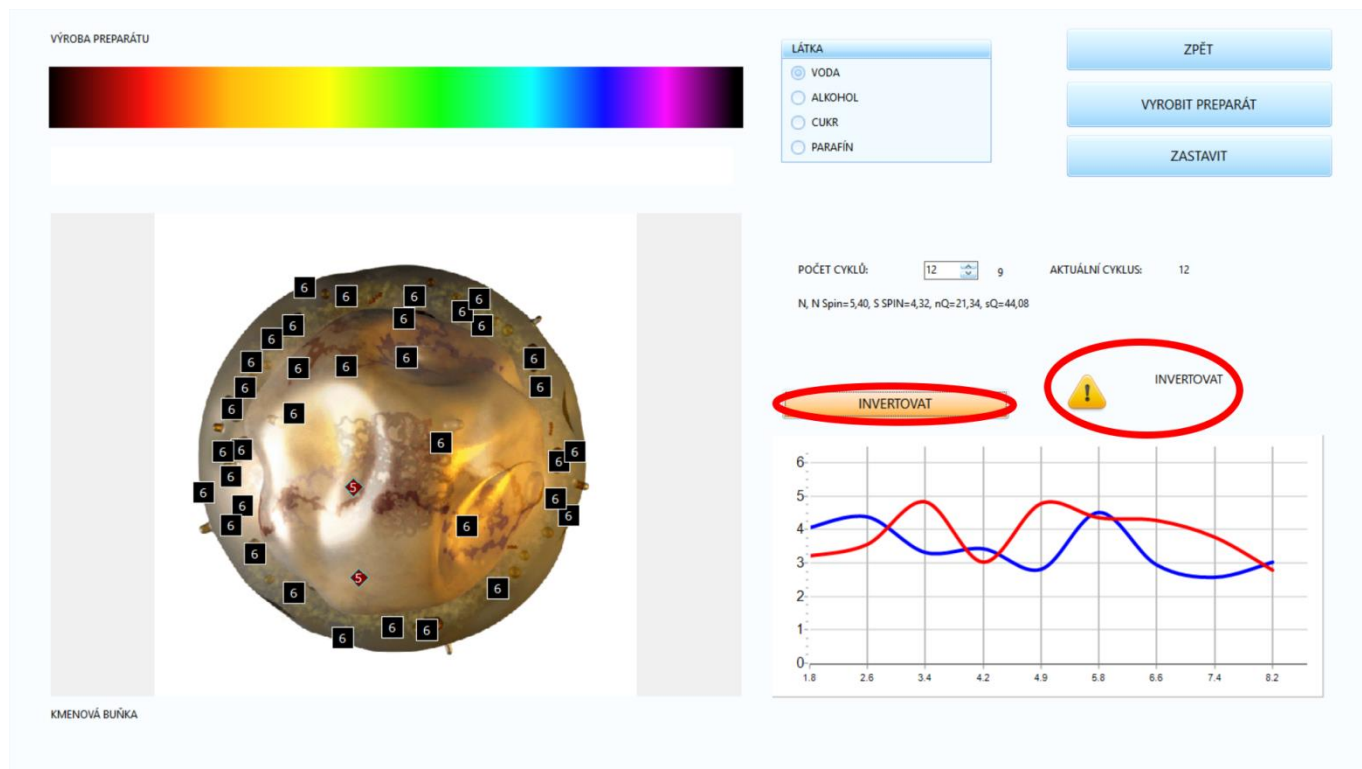

4. Po zapnutí INVERZE ikonka upozornění zmizí, modrá s červenou křivkou v grafu se prohodí a tlačítko zůstane žlutě podbarvené – tím máme potvrzeno, že se frekvence v pořádku INVERTOVALA:

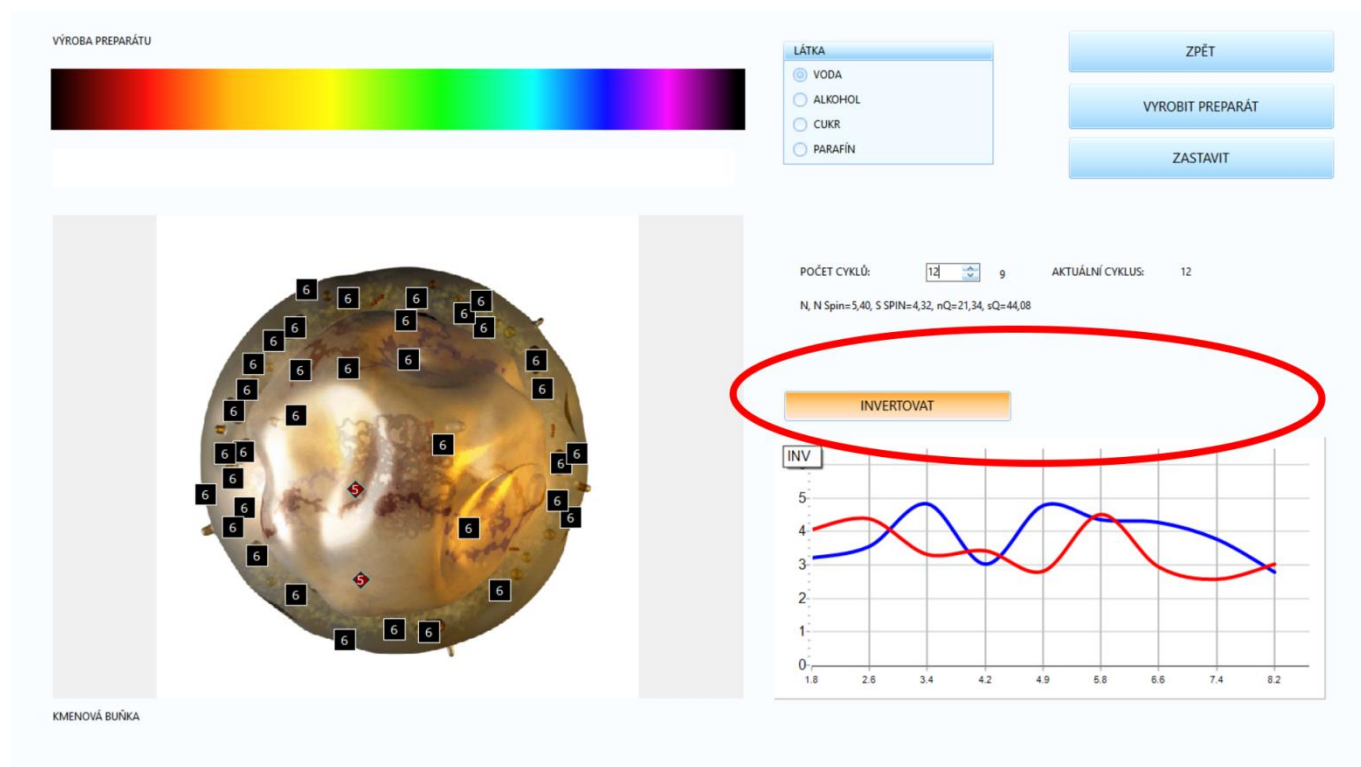

5. Dále zvolíme látkový nosič. Mimo kapky vody, případně přidaného alkoholu, se dají využít také cukrové placebo pilulky (ale ne při odstraňování parazitů). V účinnosti rozdíl není, záleží čistě na potřebách klienta (případně možnostech terapeuta).

VÝROBA PREPARÁTU



LÁTKA

☒ VODA

☐ ALKOHOL


☐ CUKR

☐ PARAFÍN

ZPĚT

VYROBIT PREPARÁT

ZASTAVIT

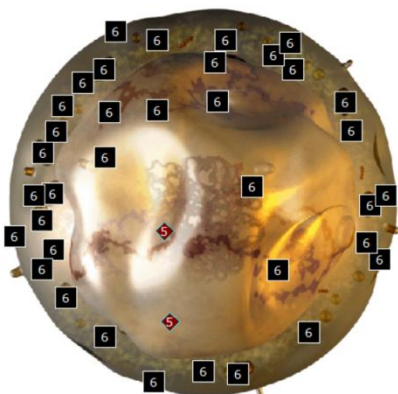


KMENOVÁ BUŇKA

POČET CYKLŮ: 12 9 AKTUÁLNÍ CYKLUS: 12

N, N Spin=5,40, S SPIN=4,32, nQ=21,34, sQ=44,08

INVERTOVAT

INV

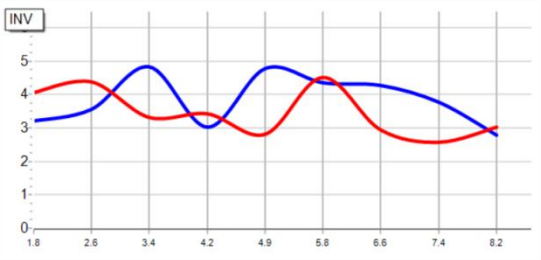

6. Posledním krokem nastavíme počet cyklů. Doporučujeme nejméně 5 cyklů. Počet je dobré kombinovat s Fibonacciho posloupností (3,5,8,13,21,34,55 a 89), často se účinnost medikamentu umocňuje. Pečlivě naše nastavení zkontrolujeme, vložíme látku do externího pohárku a spustíme proces tlačítkem „VYROBIT PREPARÁT“.

VÝROBA PREPARÁTU



LÁTKA

☒ VODA

☐ ALKOHOL


☐ CUKR

☐ PARAFÍN

ZPĚT

VYROBIT PREPARÁT

ZASTAVIT

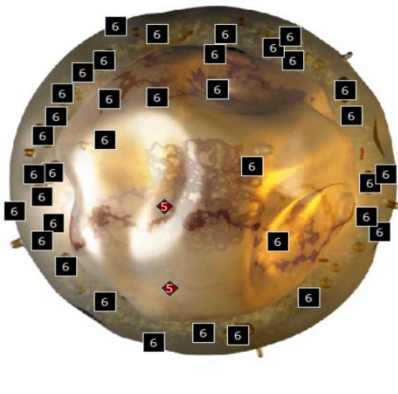


KMENOVÁ BUŇKA

POČET CYKLŮ: 12 9 AKTUÁLNÍ CYKLUS: 12

N, N Spin=5,40, S SPIN=4,32, nQ=21,34, sQ=44,08

INVERTOVAT

INV

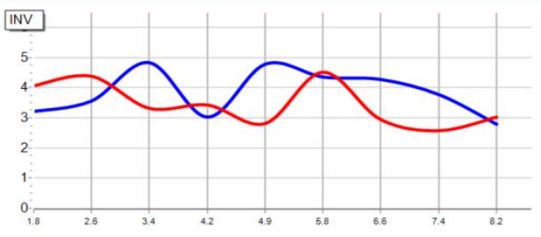

Ihned po spuštění začne cyklický proces programování frekvence. ORGÁNOVÝ PREPARÁT / MEDIKAMENT je tímto v pořádku vyroben.

Druhá metoda

Druhá metoda je podobná, ale obsahuje navíc pár zásad a mezikroků. Samozřejmě můžeme takto vyrábět i ORGÁNOVÉ PREPARÁTY, ale raději doporučujeme první popsanou metodu, kde je menší prostor pro chybovost. Dodržujeme navíc tato pravidla:

- z NEGATIVNÍCH ETALONŮ vyrábíme medikamenty pouze pro potvrzené problémy, vyhodnocené MANUÁLNÍ ANALÝZOU přes VEGETO-TEST INTERNÍ nebo POKROČILOU AUTOMATICKOU ZPRÁVU!!!
- POZITIVNÍ ETALONY nepotvrzujeme VEGETO-TESTEM – všechny s disperzí D pod 0,5 jsou pro klienta vyhodnocené jako vhodné
- můžeme programovat až 5 různých frekvencí (nálezů) do jednoho medikamentu, ale pouze ze stejného ETALONU – nikdy ETALONY nekombinujeme
- **nemusíme zapínat funkci „LADIT VŠE“, na frekvenci nálezu to nemá vliv**

POSTUP – VÝROBA PREPARÁTU Z ETALONU

1. V KARTOTÉCE vybereme a modře označíme ŘEZ, pro který budeme medikament vyrábět. Nyní přejdeme na obrazovku DIAGNOSTIKY (kliknutím do grafu nebo přes ANALÝZU).

KARTOTÉKA

PRŮMENÍ: Malina KŘESTNÍ JMÉNO: Josef KATEGORIE KRVE: (0)

ADRESA: Třída Míru 5, Hradec Králové E-MAIL: RH faktor: +

TELEFON: VĚK: 44 ROD: MUŽ

NOVÝ KLIENT ZPĚT

VYBRAT KLIENTA SKENOVAT

ODSTRANIT KLIENTA TISK

ANALÝZA SROVNÁVACÍ ANALÝZA

DATUM	NÁHLÍ	ŘEZ	ENERGIE	OPTIMÁLNÍ DISPERZE
18.06.2026 17:21:32	STĚNA TENKÉHO STŘEVA	S	33 %	0,708
18.06.2026 17:21:32	STĚNA TLUSTÉHO STŘEVA	S	34 %	0,82
18.06.2026 17:21:51	STĚNA ŽALUDKU	S	34 %	0,958
18.06.2026 17:21:42	STĚNA ŽLUČNÍKU	S	66 %	0,858
18.06.2026 17:21:43	STĚNA ŽLČOVODU	S	70 %	0,885
18.06.2026 17:27:34	STŘEDNÍ SAGITÁLNÍ ŘEZ DOLNÍM SEKTOREM PÁTEŘE, pohled vpravo	S	81 %	1,436
18.06.2026 17:27:26	STŘEDNÍ SAGITÁLNÍ ŘEZ HRUDNÍM OBRATLEM, pohled vlevo	S	72 %	1,524
18.06.2026 17:27:24	STŘEDNÍ SAGITÁLNÍ ŘEZ HRUDNÍM OBRATLEM, pohled zprava	S	70 %	1,479
18.06.2026 17:27:17	STŘEDNÍ SAGITÁLNÍ ŘEZ KRČNÍ PÁTEŘÍ, pohled vlevo	S	76 %	1,139
18.06.2026 17:27:15	STŘEDNÍ SAGITÁLNÍ ŘEZ KRČNÍ PÁTEŘÍ, pohled zprava	S	77 %	1,175
18.06.2026 17:32:11	STŘEVNÍ EPITELOVÁ BUNKA	S	38 %	0,865
18.06.2026 17:20:59	STŘEVO	S	75 %	1,983
18.06.2026 17:31:01	SVALOVÉ BUNKY	S	68 %	0,666

18.06.2026 (DATUM = 18.06.2026) Customize...

372 of 480

ANALÝZA

SROVNÁVACÍ ANALÝZA

ANALÝZA

SROVNÁVACÍ ANALÝZA


2. Na obrazovce DIAGNOSTIKY konvenčně RESETUJEME VÝBĚR a zvolíme ETALON (v našem příkladu „MIKROORGANISMY“), ze kterého použijeme frekvenci nálezu pro medikament. Klikneme a modře označíme nález (z předchozích kapitol máme potvrzenou např. „TRICHINELLU SPIRALIS“). Následně přejdeme tlačítkem „VÝROBA PREPARÁTU“ na potřebnou obrazovku.

The screenshot shows the 'DIAGNOSTIKY' software interface. On the left, under 'VÝBĚR', the category 'MIKROORGANISMY A CZ...' is selected. The central table displays a list of parasites, with 'TRICHINELLA SPIRALIS (PARAZITICKÁ HLÍSTICE)' highlighted. The right panel shows various analysis options, with 'VÝROBA PREPARÁTU' circled in red.


3. Letmo si ověříme, jestli máme vybraný správný nález. V levém horním rohu obrazovky uvidíme název vybraného nálezu (v našem příkladu „TRICHINELLA SPIRALIS“).

The screenshot shows the 'VÝROBA PREPARÁTU' software interface. The top left shows the selected parasite 'TRICHINELLA SPIRALIS (PARAZITICKÁ HLÍSTICE)'. The bottom left shows a microscopic image of the parasite. The bottom right shows a graph of the parasite's activity over time.

4. Opět úplně první věcí, kterou nastavujeme, je **INVERZE!!!** V našem příkladu se jedná o **NEGATIVNÍ ETALON**, a proto musíme **INVERZI** zapnout. Výstražná ikonka s vykřičníkem zmizí a křivky v grafu se prohodí.

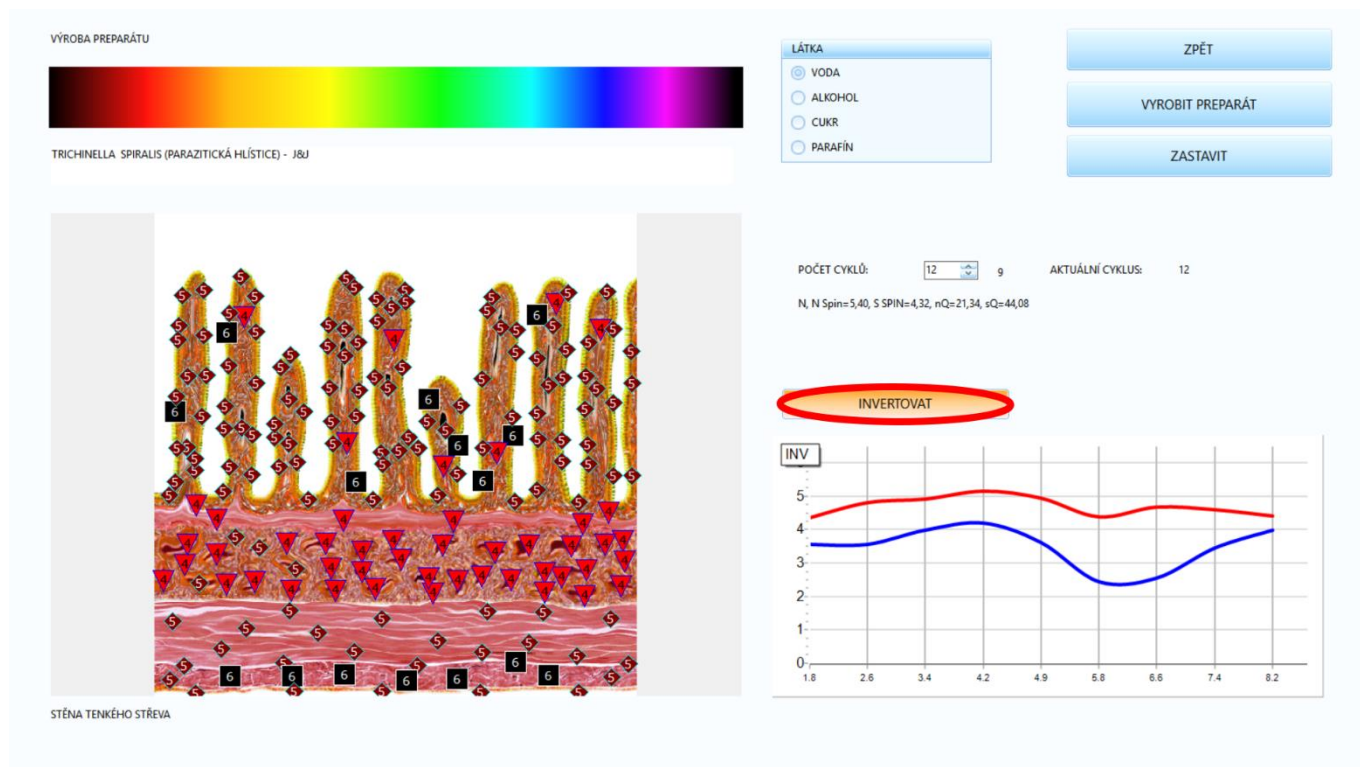

5. Zvolíme nosnou látku (substanci) a nastavíme počet cyklů (v našem příkladu 21 cyklů – to je zároveň Fibonacciho číslo, k umocnění účinku).

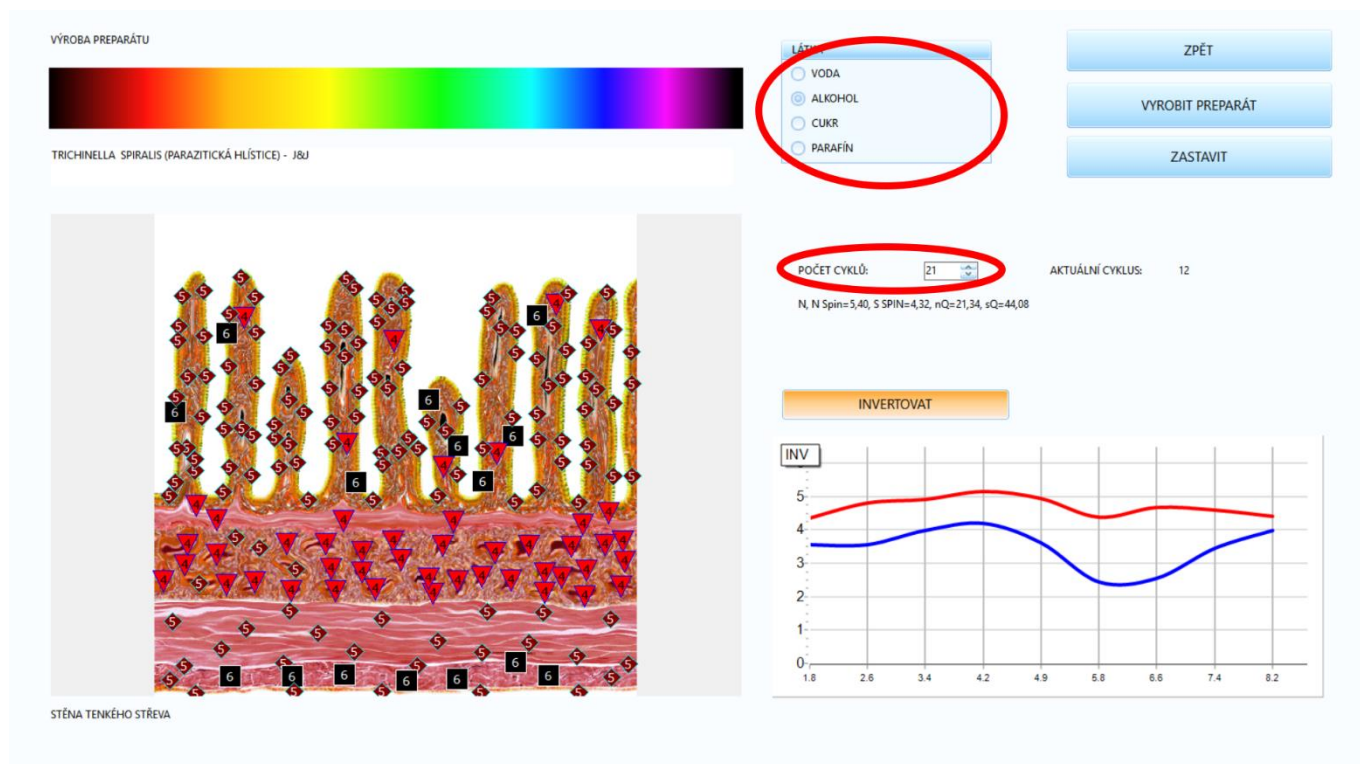


6. Před spuštěním procesu provedeme poslední kontrolu nastavení. Pak vložíme látku do externího pohárku. Pokud je vše v pořádku, spustíme proces tlačítkem „VYROBIT PREPARÁT“ v pravé části obrazovky.

HOTOVO! Tímto jsme vyrobili ETALONOVÝ PREPARÁT / MEDIKAMENT.

Jestliže potřebujeme touto pokročilejší metodou vyrobit ORGÁNOVÝ PREPARÁT, stačí u kroku č.2, po RESETOVÁNÍ VÝBĚRU, ihned kliknout na VÝROBU PREPARÁTU - bez dalšího klikání a označování ve formuláři (sám se označí první řádek s názvem ŘEZU).

Pokud při výrobě vidíme správný název ŘEZU v levé horní části obrazovky, můžeme přejít k dalšímu kroku nastavování (hlavně zapnutí INVERZE!!!), a následnému spuštění procesu.

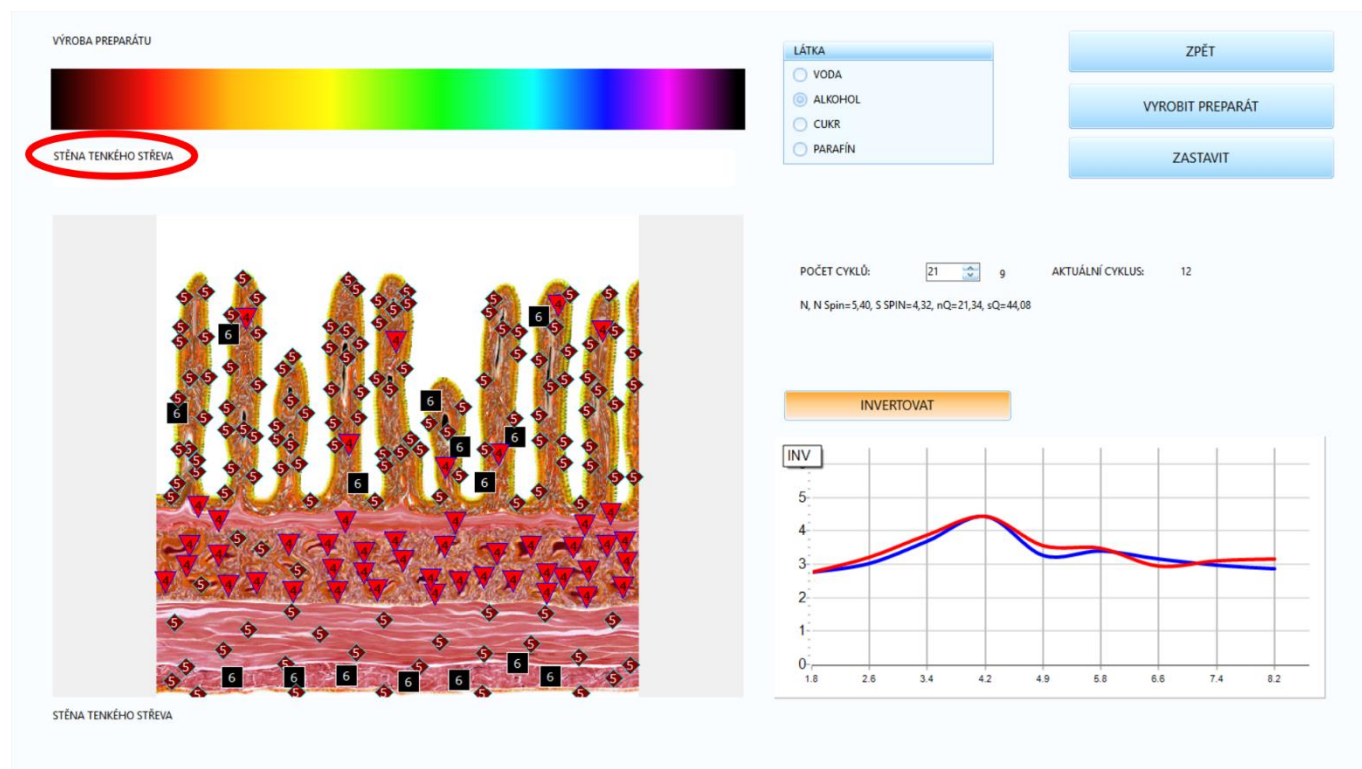

Poslední příkladný postup věnujeme násobné / hromadné výrobě – složené až z **5 ti** různých frekvencí nálezů. Násobná výroba znamená, že potvrzené nálezy programujeme do nosné látky po jednom. To využijeme nejčastěji při výrobě z frekvencí POZITIVNÍCH ETALONŮ.

Hromadná metoda výroby umí všechny potvrzené nálezy z jednoho ETALONU naprogramovat najednou – tím ušetříme mnoho času, a proto je metoda velice užitečná a potřebná.

POSTUP – NÁSOBNÁ / HROMADNÁ VÝROBA

1. První kroky jsou stále stejné – v KARTOTÉCE zvolíme potřebný ŘEZ a přejdeme na obrazovku DIAGNOSTIKY. Následně RESETUJEME VÝBĚR (aby nezůstalo žádné nastavení z minulé práce) a vybereme ETALON (v našem příkladu opět MIKROORGANISMY).
2. Pokud už známe potvrzené ZHORŠUJÍCÍ nálezy (z předchozích kapitol máme v našem příkladu „STĚNY TENKÉHO STŘEVA“ potvrzené ZHORŠENÍ u prvních čtyř nálezů s nejnižší disperzí), můžeme přejít k výrobě. A když nevíme, rychle provedeme VEGETO-TESTY INTERNÍ.

RESETOVAT VÝBĚR ETALONY

WEB ZOBRAZIT VŠE VYBRAT

Enter text to search... Find Clear

VYBRÁNO	SKUPI...	ETALON
☐	A #	ORGÁNOVÉ PREPARÁTY
☐	B #	BIOCHEMICKÁ HOMEOSTÁ...
☐	C #	PATOLOGIE
☐	D #	MERZENY
☒	E #	MIKROORGANISMY A CIZ...
☐	F #	ALOPATIE
☐	G #	HOMEOPATIE
☐	H #	FYTOTERAPIE
☐	I #	VÝŽIVOVÉ DOPLŇKY A PA...
☐	J #	POTRAVINY
☐	K #	LITOTERAPIE
☐	L #	STOPOVÉ PRVKY
☐	N #	KŮŽE
☐	M #	FYZIOTERAPIE

	0,000	STĚNA TENKÉHO STŘEVA
	0,740	OPTIMÁLNÍ DISPERZE
	0,000	VIRTUÁLNÍ MODEL
	0,389	STRONGYLOIDES STERCORALIS (MALÍ ČERVI) - J...
	0,513	TRICHINELLA SPIRALIS (PARAZITICKÁ HLÍSTICE)
	0,636	AMÉBÓZA (PARAZITÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ)
	0,746	ENTEROVIRUS 72 - HEEL
	0,770	ASCARIS LUMBRICOIDES (PARAZIT - ŠKRKAVKA D...
	0,921	DIPHILLOBOTRIUM LATUM (TASEMNICE) - J&J
	1,075	LAMBLIE STŘEVNÍ (GIARDIA LAMBLIA INTESTINAL...
	1,142	ENTEROBIUS VERMICULARIS (ROUP DĚTSKÝ - PA...

Bez použití funkce „AUTO MODELU“ musíme programovat každý nález samostatně – tedy vždy vybrat nález, přejít na obrazovku „VÝROBY PREPARÁTU“, vše nastavit, spustit výrobu, vrátit se zpět na obrazovku DIAGNOSTIKY a opakovat pro další potvrzený nález. Takto postup opakujeme až pro **5 různých frekvencí/nálezů**. (Násobné programování používáme s POZITIVNÍMI ETALONY, které nevyhodnocujeme funkcí „AUTO MODELU“.)

- Pokud použijeme funkci „AUTO MODEL“** - ta v okamžiku označí červeným puntíkem jen související, ZHORŠUJÍCÍ nálezy z vybraného ETALONU. Poté přejdeme na obrazovku „VÝROBY PREPARÁTU“.

RESETOVAT VÝBĚR ETALONY


WEB ZOBRAZIT VŠE VYBRAT

Enter text to search... Find Clear

VYBRÁNO	SKUPI...	ETALON
☐	A #	ORGÁNOVÉ PREPARÁTY
☐	B #	BIOCHEMICKÁ HOMEOSTÁ...
☐	C #	PATOLOGIE
☐	D #	MERZENY
☒	E #	MIKROORGANISMY A CIZ...
☐	F #	ALOPATIE
☐	G #	HOMEOPATIE
☐	H #	FYTOTERAPIE
☐	I #	VÝŽIVOVÉ DOPLŇKY A PA...
☐	J #	POTRAVINY
☐	K #	LITOTERAPIE
☐	L #	STOPOVÉ PRVKY
☐	N #	KŮŽE
☐	M #	FYZIOTERAPIE

	0,000	STĚNA TENKÉHO STŘEVA
	0,740	OPTIMÁLNÍ DISPERZE
	0,273	VIRTUÁLNÍ MODEL
10	0,389	STRONGYLOIDES STERCORALIS (MALÍ ČERVI) - J...
10	0,513	TRICHINELLA SPIRALIS (PARAZITICKÁ HLÍSTICE) ...
8	0,636	AMÉBÓZA (PARAZITÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ)
4	0,746	ENTEROVIRUS 72 - HEEL
	0,770	ASCARIS LUMBRICOIDES (PARAZIT - ŠKRKAVKA D...
	0,921	DIPHILLOBOTRIUM LATUM (TASEMNICE) - J&J
	1,075	LAMBLIE STŘEVNÍ (GIARDIA LAMBLIA INTESTINAL...
1	1,142	ENTEROBIUS VERMICULARIS (ROUP DĚTSKÝ - PA...

4. V levé horní části obrazovky už nevidíme vypsaný pouze jeden nález, ale první 3 z vyhodnoceného seznamu ETALONU (nálezy je tam všech 5, nicméně jsou schované – k prolistování je potřeba kliknout do této oblasti a posouvat se šipkou nahoru/dolů pomocí klávesnice)

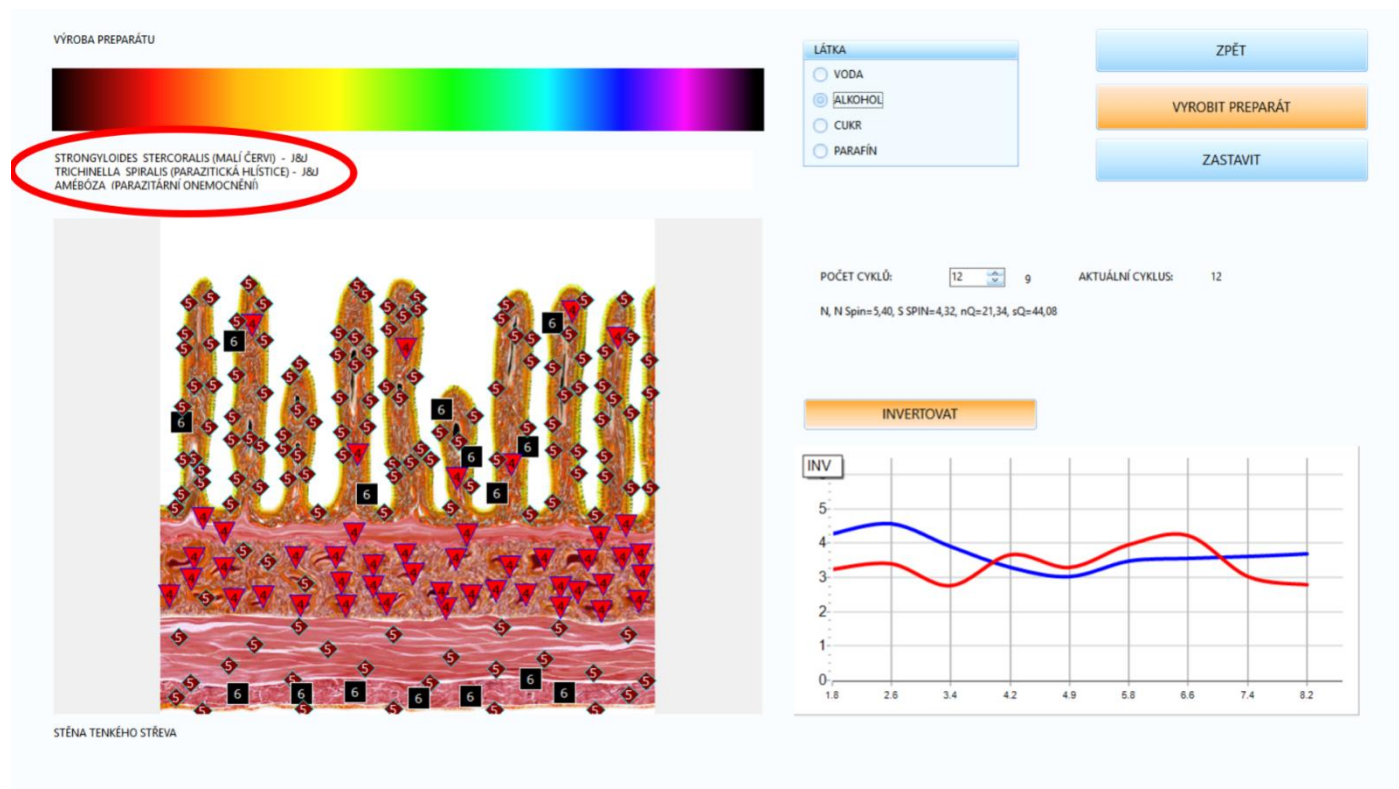

5. Zbytek postupu zůstává stejný z předchozích metod – první rozhodujeme o INVERZI, vyberme látkový nosič, nastavíme počet cyklů, a po vložení látky do externího pohárku spustíme proces výroby.

AURA

Funkce AURY je okrajová. V softwaru ji máme jen z informativních důvodů. Terapeutům, kteří se zabývají tělesným polem aury, bude tato funkce bližší a užitečnější.

Při používání funkce AURY, pracujeme pouze s ŘEZEM „AURA“ ze soustavy „ZÁKLADNÍ ŘEZY“.


Samozejmě používáme pro harmonizaci všechny dostupné druhy terapií, jako u ostatních orgánů.

Zvolíme tedy příslušný ŘEZ a přejdeme na obrazovku DIAGNOSTIKY. Kliknutím na tlačítko AURA se dostaneme na stránku s vypsáním informací o každé čakře zvlášť – spolu s vysvětlením významu, jak případná nerovnováha souvisí s problémy a dysfunkcemi orgánů.

The screenshot displays the AURA software interface. On the left, there is a list of categories under 'VYBRÁNO' and 'ETALON', including 'ORGÁNOVÉ PREPARÁTY', 'BIOCHEMICKÁ HOMEOSTÁ...', 'PATOLOGIE', 'ALERGENY', 'MIKROORGANISMY A CIZ...', 'ALOPATIE', 'HOMEOPATIE', 'FYTOTERAPIE', 'VÝŽIVOVÉ DOPLŇKY A PA...', 'POTRAVINY', 'LITOTERAPIE', 'STOPOVÉ PRVKY', 'KŮŽE', 'FYZIOTERAPIE', 'ZÁTĚŽ NA ŽIVOTNÍ PROS...', 'STOPOVÉ PRVKY VE VLAS...', 'MATICE EMOCÍ', 'SAHARARA meridiány: VC ...', 'AJNA meridiány: MC + TR', 'VISHUDHA meridiány: P + ...', 'ANÁHATA meridiány: C + IG', 'MANIPURA meridiány: F + ...', 'SVADHISTANA meridiány: ...', 'MULADHARA meridiány: R...', 'Hormony, ženské', 'Hormony, mužské', 'DETEKTOR VITAMÍNŮ', 'DETEKTOR MINERÁLŮ', 'EFAs DETEKTOR', and 'DETEKTOR AMINOKYSELIN'. The main panel shows a search bar and a table with columns for 'AURA MUŽ' and 'OPTIMÁLNÍ DISPERZE'. The table contains three rows: '0.000', '2.311', and '0.000'. On the right, there is a sidebar with buttons for 'AUTOMATICKÝ MODEL', 'VEGETO-TEST INTERNÍ', 'VEGETO-TEST EXTERNÍ', 'SROVNÁVACÍ ANALÝZA', 'AMPLITUDA', 'NELINEÁRNÍ NLS ANALÝZA', 'AUTOMATICKÉ SKENOVÁNÍ', 'TISK ZPRÁVY', 'ENTROPICKÁ ANALÝZA', 'ELIMINAČNÍ ANALÝZA', 'ULOŽIT DO ZPRÁVY', 'VÝROBA PREPARÁTU', and 'AURA' (highlighted with a red circle). Below the sidebar, there are two human figures, a graph, and a list of body systems: '1.8 KOSTERNÍ SOUSTAVA', '2.6 POJIVOVÉ TKÁNĚ, NERVY, SRDEČNÍ CHLOPĚ', '3. ŘÍDKÁ POJIVOVÁ TKÁŇ, PRŮŽNÉ ...', '6.6 PERIFERNÍ NERVOVÝ SYSTÉM, EPIHELUM PRŮDŮSEK, NADLEDVINY A ...'. The bottom status bar shows 'AURA MUŽ' and 'A = ZÁKLADNÍ ŘEZY'.

Oberon umožňuje skenovat každý orgán a přesně dohledat, co způsobuje nerovnováhu (problém). Proto diagnostika čaker a meridiánů nepřináší lepší nebo detailnější informace než diagnostika ostatních skenů.

Nicméně diagnostika čaker, meridiánů a oprava AURY mohou být velice nápomocné nástroje při zotavování a zlepšení celkového zdravotního stavu. Hodí se také jako vizuální znázornění energetického pole (levá část obrázku níže). Pro terapeutů, zaměřující se převážně na energetické pole, je toto znázornění poškozených oblastí velice užitečné.

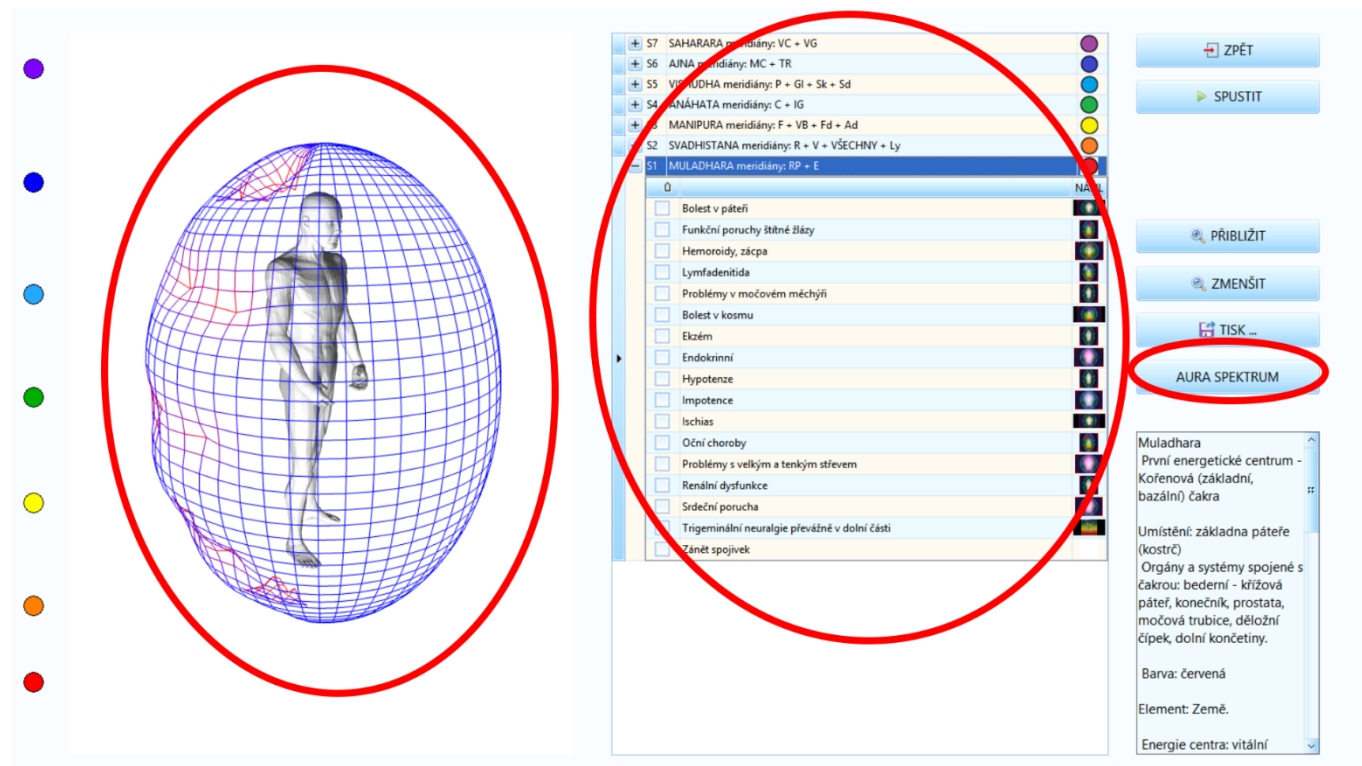

V pravém dolním rohu obrazovky je malé okénko s popisem každé čakry – zobrazí se po zvolení některé položky ze seznamu ve střední části obrazovky - zde najdeme také sepsané nálezy s jejich spektrálním náhledem.

OSTATNÍ TLAČÍKTA NA OBRAZOVCE AURY:

„SPUSTIT“ – Spustí se dynamická rotace pole aury. Opětovným stisknutím pohyb zastavíme

„PŘIBLÍŽIT“ – Přibližuje náhled na pole aury

„ZMENŠIT“ – Oddaluje náhled na pole aury

„TISK“ – Možnost vytisknout nebo také náhled na pole aury uložit do počítače


POLE AURY – Kliknutím a tažením levým tlačítkem umožní změnit úhel náhledu na pole aury.

AURA SPEKTRUM

Detailnější vizualizaci zobrazíme tlačítkem „AURA SPEKTRUM“ na pravé straně obrazovky (viz. předchozí obrázek).

V levé horní části této stránky je náčrtek center. Kliknutím na jednotlivá centra se nám mění nabídka nálezů v pravé horní části obrazovky.

Výběrem z nabídky nálezů se nám mění vizualizace souvisejících oblastí aury - v pravé dolní části obrazovky.

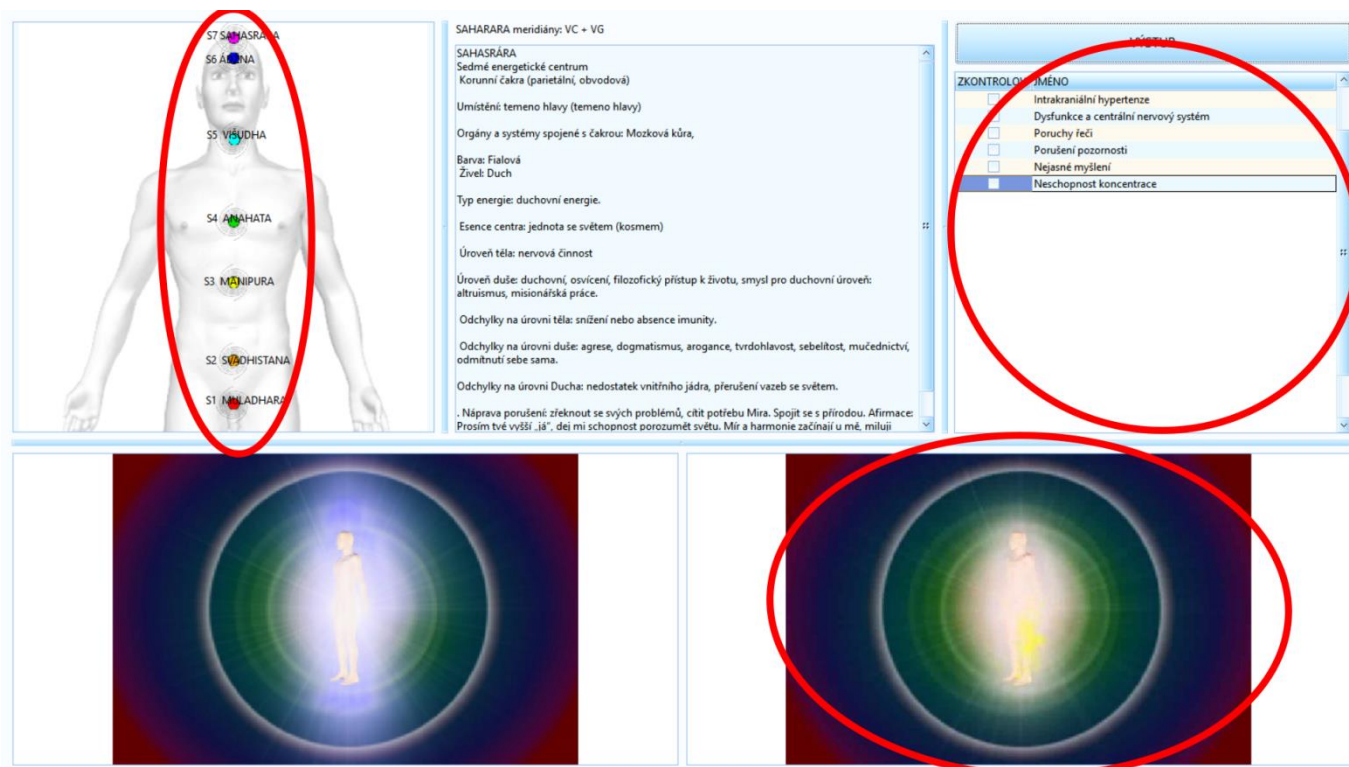

Při práci s AUROU pracujeme s těmito ETALONY S1-S7:

☐	U #	STOPOVE PRVNÍ VE VLAS...
☐	P #	MATICE EMOCÍ
☒	S7	SAHARARA meridiány: VC
☒	S6	AJNA meridiány: MC + TR
☒	S5	VISHUDHA meridiány: P + ...
☒	S4	ANÁHATA meridiány: C + IG
☒	S3	MANIPURA meridiány: F + ...
☒	S2	SVADHISTANA meridiány: ...
☒	S1	MULADHARA meridiány: R
☐		Harmony žensk...
☐		Harmony mužsk...

Dle zvyklosti zapínáme tlačítko „ZOBRAZIT VŠE“ (viz kapitola o ETALONECH - jinak se nám nezobrazí žádné nálezy), eventuálně tlačítko „LADIT VŠE“, a zvolíme některou položku ze seznamu. Každá položka nálezu obsahuje náhled své části v poli aury, který se zobrazuje v pravé části obrazovky.

The screenshot shows a software interface for energy analysis. On the left is a list of ailments (e.g., A # ORGÁNOVÉ PREPARÁTY, B # BIOCHEMICKÁ HOMEOSTÁZA...). In the center is a table with columns for numerical values and text descriptions of ailments. On the right is a control panel with buttons like 'AUTOMATICKÝ MODEL', 'VEGETO-TEST INTERNÍ', 'LADIT VŠE', 'AMPLITUDA', 'TISK ZPRÁVY', 'ULOŽIT DO ZPRÁVY', 'OPTIMÁLNÍ', 'ETALON-OBJEKT', 'ETALON', 'INVERTOVAT', 'OBJEKT', and 'AURA'. A red circle highlights the 'LADIT VŠE' button. Another red circle highlights a circular aura visualization in the bottom right corner. A third red circle highlights the 'ZOBRAZIT VŠE' button at the top.

Kliknutím na tento náhled se dostaneme na již známou obrazovku „AURA SPEKTRUM“, kde vidíme dynamické vizuální zobrazení poškození v poli aury. Poškození v poli se tak dá zobrazit pro každý nález. To je opět užitečné pro terapeutu pracující s energetickým polem.

OBRAZOVKA ANALÝZY A METODA LOKALIZACE

Obrazovka ANALÝZY (nebo také tzv. LOKALIZACE) je mezi-stránka před obrazovkou DIAGNOSTIKY. Dostaneme se sem z KARTOTÉKY - kliknutím na tlačítko „ANALÝZA“ nebo na náhled ŘEZU v pravé části obrazovky KARTOTÉKY.

Připomeňme si:

ŘEZY, které obsahují alespoň jeden ENERGETICKÝ BOD **ÚROVNĚ 5**, jsou kategorizovány jako „Chronické“ („Chronic“ ve sloupečku „STAV“ v KARTOTÉCE).

ŘEZY obsahující alespoň jednu ENERGETICKOU ÚROVEŇ 6, jsou kategorizovány jako „Akutní“ („Acute“ ve sloupečku „STAV“ v KARTOTÉCE).

Je dobré si tyto akutní a chronické ŘEZY vyfiltrovat, než přejdeme na obrazovku ANALÝZY – a to kliknutím do sloupečku STAV na symbol rozevřacího trojúhelníku.

KARTOTÉKA

PRŮMENÍ: Malina

ADRESA: Třída Míru 5, Hradec Králové

TELEFON:

KŘESTNÍ JMÉNO: Josef

E-MAIL:

VĚK: 44

KATEGORIE KRVĚ: I(0)

RH faktor: +

ROD: MUŽ

Find Clear

DATUM	NÁHL.	ŘEZ	TYP	SOU.	STAV (All)	ENERGIE	OPTIMÁLNI DISPER...
27.06.2026 18:29:13		STĚNA TENKÉHO STŘEVA	S		(Custom.) ☒ Acute ☒ Chronic ☐ Normal	33 %	0.74
27.06.2026 18:30:38		CHÁMOVODY	S			87 %	0.746
27.06.2026 18:29:15		STĚNA TLUSTÉHO STŘEVA	S			58 %	0.75
27.06.2026 18:33:06		ERYTHROBLAST	S			67 %	0.764
27.06.2026 18:29:29		INTERLOBULÁRNÍ ŽLUČOVOD	S			30 %	0.817
27.06.2026 18:29:33		STĚNA ŽALUDKU	S			58 %	0.953
27.06.2026 18:31:31		ARTERIÁLNÍ CÉVNÍ TKÁŇ	S			87 %	0.969
27.06.2026 18:29:27		STĚNA PANKREATICKÉHO KANÁLU	S			93 %	0.983
27.06.2026 18:29:31		VATEROVA AMPULA (VÝVOD)	S			78 %	1.001
27.06.2026 18:35:50		KYČELNÍ KLOUB, levý	S			65 %	1.038
27.06.2026 18:33:52		AUTONOMNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA (VEGETATIVNÍ SOUSTAVA)	S			10 %	1.053
27.06.2026 18:34:08		ŠEDÁ HMOTA MOZKOVÁ	S			88 %	1.075
27.06.2026 18:31:16		TKÁŇ AORTY	S			40 %	1.08
27.06.2026			S				

☒ (DATUM = 27.06.2026) And ((Soustava = 01 # A # ZAKLADNÍ ŘEZY) Or (Soustava = 02 # B # TRÁVICÍ SOUSTAVA) Or (Sousta

Customize...

NOVÝ KLIENT

ZPĚT

VYBRAT KLIENTA

SKENOvat

ODSTRANIT KLIENTA

TIŠK

ANALÝZA

SROVNÁVACÍ ANALÝZA

Metodu používáme tehdy, když má celý ŘEZ dobrou energetiku, tedy je zaplněn pozitivními ENERGETICKÝMI BODY S ÚROVNĚMI 1-4, a vyskytnou se pouze ojedinělé, malé oblasti se špatnými ENERGETICKÝMI BODY (hodnoty 5 a 6).

Ve většině případů nám sice LOKALIZACE nové informace nepřináší, ale používáme ji tehdy, kdy stále nemůžeme dohledat příčinu zhoršování stavu (orgánu, systému, ...). Metodou můžeme získat i trochu odlišnější, detailnější informace než ze SKENU celého ŘEZU, protože se zaměřujeme na menší oblast. Pak může být tato vedlejší metoda nedocenitelná.

POSTUP METODY LOKALIZACE


1. Na obrazovce ANALÝZY klikneme na tlačítko „VYBRAT OBLAST“.
2. Soustředíme se na obrázek ŘEZU - klikneme a držíme levé tlačítko myši nejčastěji v blízkosti špatných ENERGETICKÝCH bodů (5 nebo 6) - poté tažením (kreslením) vybereme/izolujeme oblast k naskenování.
3. Jakmile máme zvolenou oblast, spustíme detailní SKEN tlačítkem „VYHODNOTIT OBLAST“.




Před vyhodnocováním oblasti opětovně zkontrolujte náhlavní soupravu, jestli je správně nasazená.

Jestliže nejsme s vybranou oblastí spokojeni nebo ji nemáme vybranou přesně, stačí výběr odmazat tlačítkem „SMAZAT VYBRANOU OBLAST“ – lze tak učinit až do doby, než oblast vyhodnotíme.

Pokud potřebujeme vybrat navíc i jinou oblast, dokončíme nejprve vyhodnocení té první oblasti a kroky opakujeme, nelze totiž vybrat a vyhodnotit více oblastí najednou.

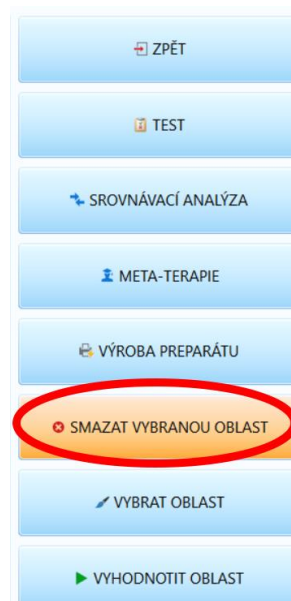


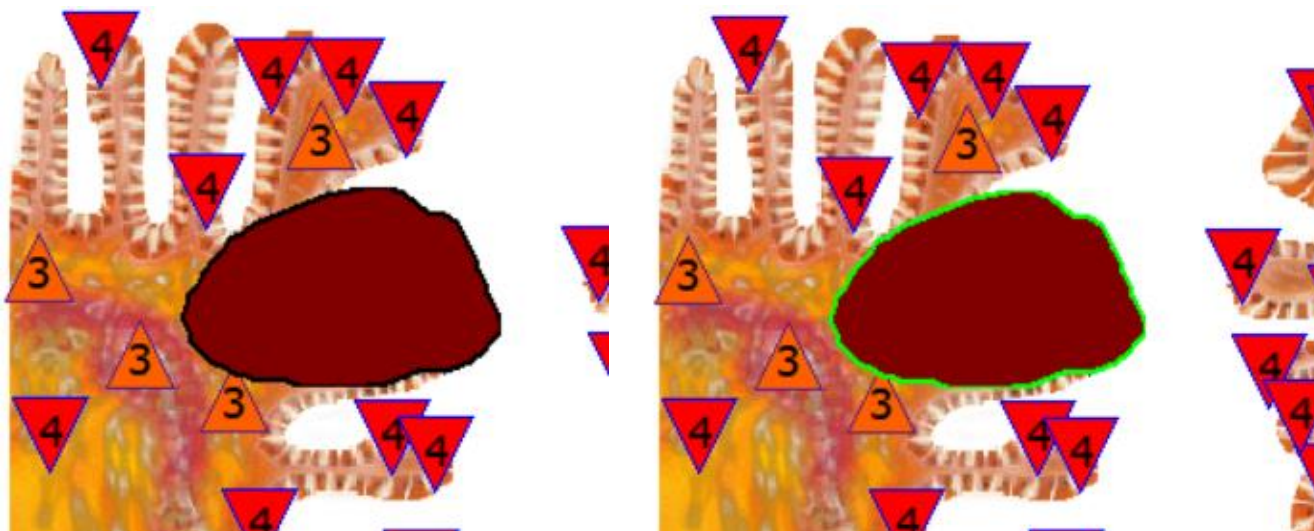


4. Po vyhodnocení se zvolená oblast z předchozího kroku zabarví do hněda. Teď si povšimněme barvy okraje vyhodnocené oblasti – nyní má černou barvu. Pokud do oblasti klikneme myší, barva okraje se změní na zelenou.

Proč je barva okraje důležitá? Barva obrysu nám totiž říká, se kterou oblastí budeme dále na obrazovce DIAGNOSTIKY pracovat. Pokud je obrys ČERNÝ, pracujeme s celým ŘEZEM – pokud je obrys ZELENÝ, pracujeme pouze s lokalizovanou oblastí!!! Klikáním do této oblasti levým tlačítkem myši mezi jednotlivými možnostmi přepínáme, proto vždy věnujte barvě okraje pozornost.

5. Po volbě mezi celým ŘEZEM nebo jen LOKALIZOVANÉ oblasti pokračujeme dále na obrazovku DIAGNOSTIKY tlačítkem „TEST“ (případně kliknutím do grafu). Pak již diagnostikujeme dle zvyklosti.

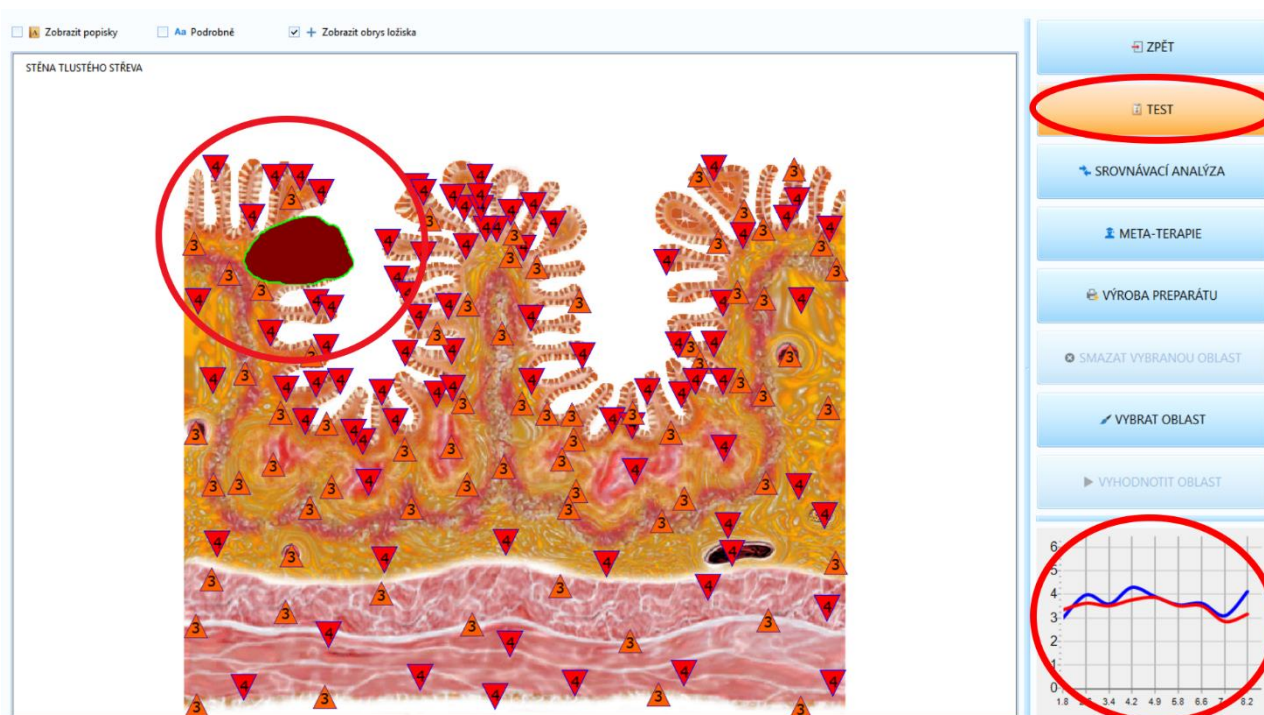


Zmíníme ještě takovou drobnost – po použití LOKALIZAČNÍ metody se TYP vybraného ŘEZU změní ze SKENU „S“ na LOKALIZACI „L“. Změny si lze všimnout pouze v KARTOTÉCE:

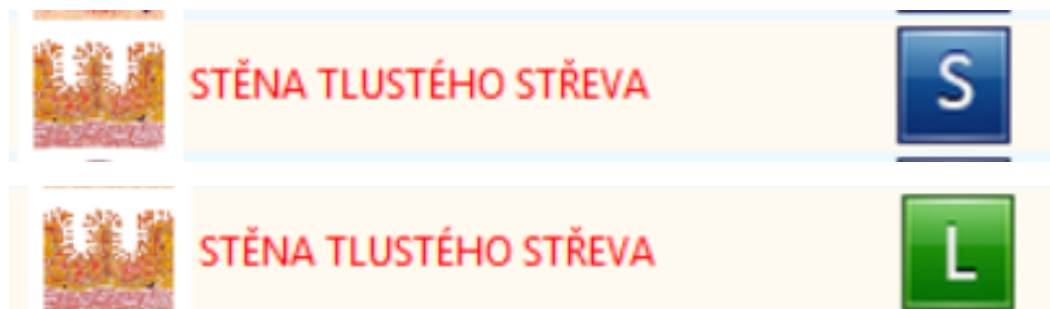

OSTATNÍ TLAČÍTKA A MOŽNOSTI NA OBRAZOVCE ANALÝZY

- „META-TERAPIE“ – tlačítkem se dostaneme na obrazovku manuální META-TERAPIE, Zde aplikujeme terapie pouze na aktuálně zvolený ŘEZ. Příliš často tuto funkci nevyužíváme, protože je snadnější spustit AUTOMATICKOU META-TERAPII na obrazovce SKENOVÁNÍ, pro více ŘEZŮ (nebo všechny) zároveň.
- „SROVNÁVACÍ ANALÝZA“ – přechod k funkci SROVNÁVACÍ ANALÝZY
- Možnost „Zobrazit popisky“ – Zobrazí nebo skryje text detailů/podrobností/popisků
- Možnost „Podrobně“ – Zapnutím možnosti se na obrázku ŘEZU zobrazí ikonky připomínající malá „pluska“ s dodatečnými popisky orgánu. Umístěte ukazatel myši nad zelená „pluska“ pro zobrazení textu
- Možnost „Zobrazit obrys ložiska“ – Zobrazí nebo skryje lokalizovanou oblast, např. pokud lokalizovaná oblast překáží v náhledu.

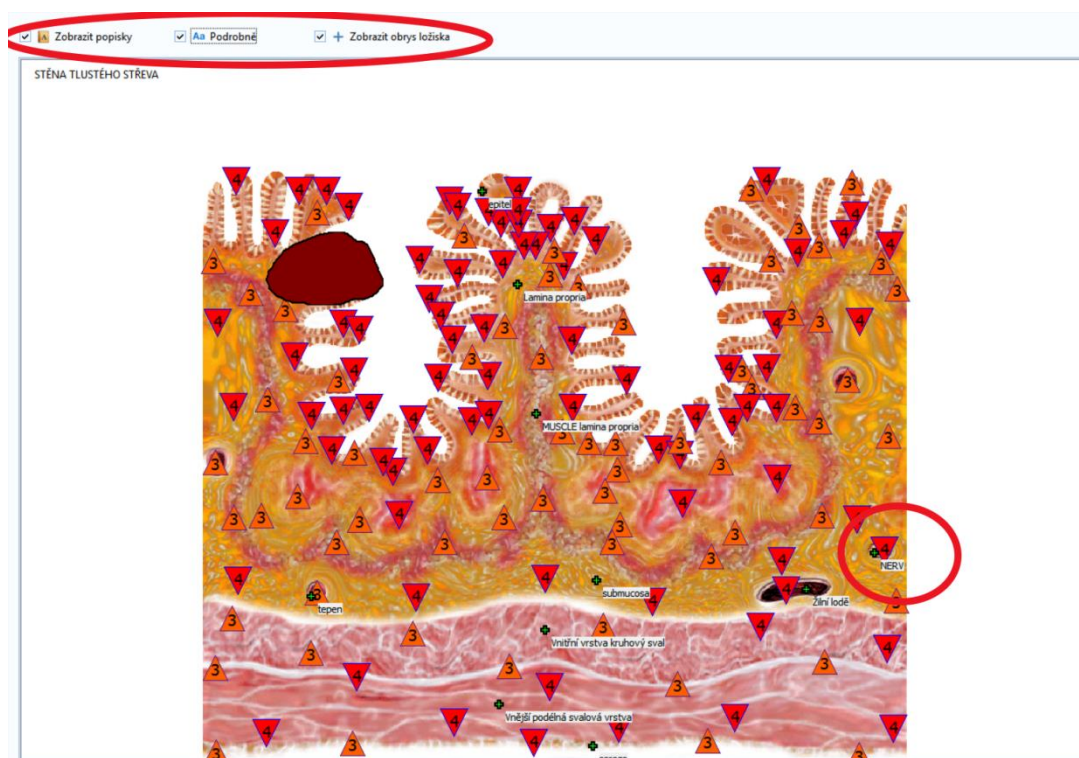

DODATEČNÉ TERAPIE

Ačkoliv používáme META-TERAPIE jako hlavní formu harmonizace, nejen kvůli jejich vysoké efektivitě, ale také pro jednoduché spouštění, nabízí Oberon celou řadu dalších užitečných funkcí. Je dobré tyto funkce rovněž zahrnout do celkového postupu. DODATEČNÉ TERAPIE najdeme na obrazovce DIAGNOSTIKY v ETALONECH. Malou nápovědou, jak terapie rozpoznat – každý ETALON končí slovíčkem „terapie“.

Z kapitoly o ETALONECH si připomeneme obecné pravidlo, že žádné terapeutické ETALONY netestujeme VEGETO-TESTY! Rovněž to platí pro „ORGÁNOVÉ PREPARÁTY“ a „POTRAVINY“ - vše nabízené v seznamu je již doporučené, obzvláště položky s disperzí D pod 0,5.

Terapie si popíšeme jednu po druhé:

POSTUP FYTOTERAPIE (BYLINNÁ TERAPIE)


- Založená na terapeutických rostlinách a jejich frekvencích
 - I byliny s disperzí D nad 0,5 mohou být nápomocné
1. V KARTOTÉCE zvolíme ŘEZ, a pokračujeme na obrazovku DIAGNOSTIKY.
 2. V ETALONECH zvolíme FYTOTERAPII a soustředíme se na prvních 5 doporučených položek ze seznamu
 3. Vybereme doporučenou bylinku a klikneme do zmenšeného náhledu, který se po výběru položky objeví v pravé části obrazovky.

The screenshot displays the software interface for the Fytoterapie (Herbal Therapy) section. The left sidebar lists various therapy types, with 'FYTOTERAPIE' highlighted. The main area displays a list of herbs with their dispersion values (D). 'HELIOSYRIUM ARENARIUM (SMIL PÍSEČNÝ)*' is highlighted. The right sidebar shows analysis options, with 'ETALON-OBJEKT' and 'OBJEKT' highlighted. A small image of the plant is shown in the bottom right.

HERB	D
STĚNA TLUSTÉHO STŘEVA META-TERAPIE LAGOCHILUS	0,000
OPTIMÁLNÍ DISPERZE	0,357
VIRTUÁLNÍ MODEL	0,000
HELIOSYRIUM ARENARIUM (SMIL PÍSEČNÝ)*	0,253
ANISUM VULGARE (BEDROVNÍK ANIZ)*	0,259
SORBUS AUCUPARIA (JEŘÁB ČERVENÝ)*	0,276
POLIGONUM BISTORTA (KOKOŘÍK)*	0,287
POLIGONUM PERSICARIA (HAŘÍ KOŘEN)*	0,291
LAGOCHILUS (LAGOCHILUS)*	0,294
TUSSILAGO FARFARA (PODBĚL LÉKAŘSKÝ)*	0,307
TROPAEOLUM (LICHORĚŘIŠNICE)*	0,316
LEVISTICUM OFFICIALE (LIBEČEK LÉKAŘSKÝ)*	0,316
AMELANCHIER (MUCHOVNÍK)*	0,322
PRUNUS PADUS (STŘEMCHA OBECNÁ)*	0,329
THERMOPSIS (VLČINEC)*	0,334
LYCHNIS FLOSCUCULI (KOHOUTEK LUČNÍ)*	0,339
RUTA GRAVEOLENS (ROUTA VONNÁ)*	0,340
AGRIMONIA EUPATORIA (ŘEPÍK LÉKAŘSKÝ)*	0,349
PRUNUS SPINOSA (SLIVKA TRNKOVÁ)*	0,357
MELISSA OFFICINALIS (MEDUŇKA LÉKAŘSKÁ)*	0,358
GROSSULARIA VULGARIS (SRSTKA ANGREŠT)*	0,358
ALTHAEA OFFICINALIS (IBIS LÉKAŘSKÝ)*	0,367
VIBURNUM OPULUS (KALINA OBECNÁ)*	0,368
PAEONIA ANOMALE (PIVOŇKA ODCHYLNÁ)*	0,372
VACCINIUM ULIGINOSUM (BORŮVKA)*	0,376
FUMARIA OFFICINALIS (ZEMĚDÝM LÉKAŘSKÝ)*	0,376

4. Ovládání připomíná META-TERAPIE a funguje i podobným způsobem. Rozdílem je, že posílá přímou frekvenci zvolené položky. Používáme ji úplně stejně, jako META-TERAPII. Aplikujeme až 10 cyklů najednou, a podle potřeby opakujeme.

META-TERAPIE
STĚNA TLUSTÉHO STŘEVA HELICHRYSUM ARENARIUM (SMIL PÍSEČNÝ)*

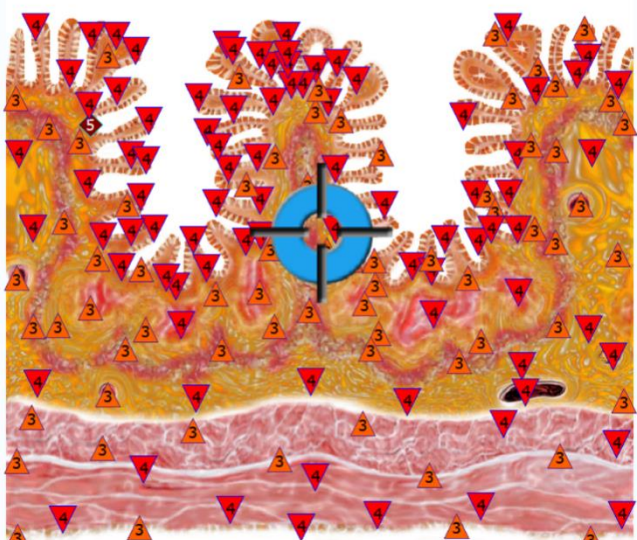

Nastavte počet cyklů (případně lokalizujte ložisko) a klikněte na tlačítko „START“



N Spins F = 5,40
 Q = 21,34
 Dominantní SPIN
 Remaining

S Spins F = 4,32
 Q = 44,08
 N

ZPĚT
 POZASTAVIT
 START
 X1 X5 X10

Harmonizace Destruckce

1 2 3 4 5 6

LITOTERAPIE (TERAPIE MINERÁLY A HORNINAMI)

- Založená na frekvencích minerálů
- Obsahuje navíc i SCHÜSSLEROVY SOLI
- Postup uplatňujeme naprosto stejný, jako pro FYTOTERAPII. Pouze zvolíme jiný ETALON na obrazovce DIAGNOSTIKY

RESETOVAT VÝBĚR ETALONY

WEB ZOBRAZIT VŠE VYBRAT


Enter text to search... Find Clear

VYBRÁNO	SKUPL.	ETALON
☐	A #	ORGÁNOVÉ PREPARÁTY
☐	B #	BIOCHEMICKÁ HOMEOSTÁ...
☐	C #	PATOLOGIE
☐	D #	ALERGENY
☐	E #	MIKROORGANISMY A CIZ...
☐	F #	ALOPATIE
☐	G #	HOMEOPATIE
☐	H #	FYTOTERAPIE
☐	I #	VÝŽIVOVÉ DOPLŇKY A PA...
☒	K #	LITOTERAPIE
☐	L #	STOPOVÉ PRVKY
☐	N #	KŮŽE
☐	M #	FYZIOTERAPIE
☐	Q #	ZÁTEŽ NA ŽIVOTNÍ PROS...
☐	O #	STOPOVÉ PRVKY VE VLAS...
☐	P #	MATICE EMOCÍ
☐	S7	SAHARARA meridiány: VC ...
☐	S6	AJNA meridiány: MC + TR
☐	S5	VISHUDHA meridiány: P + ...
☐	S4	ANÁHATA meridiány: C + IG
☐	S3	MANIPURA meridiány: F + ...

0,000	STĚNA TLUSTÉHO STŘEVA META-TERAPIE:2 HELIC...	
0,443	OPTIMÁLNÍ DISPERZE	
0,000	VIRTUÁLNÍ MODEL	
0,208	GRANATOVÉ JABLO	
0,285	DIVOKÁ RŮŽE	
0,460	Ferrum phosphoricum Nr.3	
0,530	JASPI	
0,567	TOPAZ	
0,573	CITRÍN	
0,574	SKALNÍ RŮŽE	
0,665	ZIRKON	
0,693	OBSDIÁN	
0,712	SPINEL	
0,749	CHMEREK	
0,773	RODONIT	
0,775	RODOLIT	
0,776	Natrium phosphoricum Nr.9	
0,777	AMBER	

AUTOMATICKÝ MODEL
 VEGETO-TEST INTERNÍ
 VEGETO-TEST EXTERNÍ
 SROVNÁVACÍ ANALÝZA
 AMPLITUDA
 NELINEÁRNÍ NLS ANALÝZA
 AUTOMATICKÉ SKENOVÁNÍ
 TISK ZPRÁVY
 ENTROPICKÁ ANALÝZA
 ELIMINAČNÍ ANALÝZA
 ULOŽIT DO ZPRÁVY
 VÝROBA PREPARÁTU
 AURA

OPTIMÁLNÍ
 ETALON-OBJEKT
 ETALON
 INVERTOVAT
 OBJEKT

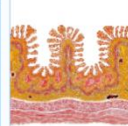


POSTUP PŘI FYZIOTERAPII

FYZIOTERAPIE se od těch ostatních odlišuje. Metoda žádá více pozornosti a vše se ručně nastavuje. Nicméně je to velice účinná forma terapie, proto za ten čas stojí. Je prospěšná např. jako pooperační rehabilitace.


V našem příkladu vybereme „UNIVERZÁLNÍ REHABILITACI“, která je nabízena Oberonem často, a zahrnuje mnoho oblastí po celém těle.

1. V KARTOTÉCE zvolíme ŘEZ, a pokračujeme na obrazovku DIAGNOSTIKY.
2. V ETALONECH zatrhneme FYZIOTERAPII a zapneme možnost „ZOBRAZIT VŠE“. Ze seznamu pracujeme nejen s nejnižšími disperzemi D pod 0,5, ale všemi nálezy spojenými s popsáním problému ze strany klienta (převážně ty působící bolest a nepohodlí). V názorném příkladu volíme „UNIVERZÁLNÍ REHABILITACI“.


The screenshot displays a software interface for patient management and treatment selection. On the left, a list of 'ETALON' (Standard) options is shown, with 'FYZIOTERAPIE' (Physical Therapy) selected and circled in red. The main window shows a list of treatments with their corresponding 'D' values (dispersion). The treatment '1 UNIVERZÁLNÍ REHABILITACE' is highlighted with a red circle. The right side of the interface contains various analysis and visualization tools, including 'AUTOMATICKÝ MODEL', 'VEGETO-TEST INTERNÍ', 'VEGETO-TEST EXTERNÍ', 'SROVNÁVACÍ ANALÝZA', 'AMPLITUDA', 'NELINEÁRNÍ NLS ANALÝZA', 'AUTOMATICKÉ SKENOVÁNÍ', 'TISK ZPRÁVY', 'ENTROPICKÁ ANALÝZA', 'ELIMINAČNÍ ANALÝZA', 'ULOŽIT DO ZPRÁVY', 'VÝROBA PREPARÁTŮ', and 'AURA'. A diagram of a human body is also visible, with a red circle around it.

DISPERZE (D)	NÁZEV NÁLEZU
0,000	STĚNA TLUSTÉHO STŘEVA META-TERAPIE: 2 HEL...
0,443	OPTIMÁLNÍ DISPERZE
0,000	VIRTUÁLNÍ MODEL
0,422	33 PARODONTÓZA
0,518	26 PROSTATA
0,562	2 NEINVAZIVNÍ ÚČINKY NA KREV
0,565	50 ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ SE ZNÁMKAMI HNIS...
0,572	10 BRONCHIÁLNÍ ASTMA
0,605	47 TRAUMATICKÉ RANY, POOPERAČNÍ
0,617	4 ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDEČNÍ
0,628	15 CHRONICKÁ NESPECIFICKÁ KOLITIDA. ZÁCPA.
0,645	1 UNIVERZÁLNÍ REHABILITACE
0,648	14 NEMOCI ŽALUDKU. CHRONICKÁ GASTRITIDA. ...
0,659	3 HYPERTENZE
0,670	38 CYSTITIDA
0,717	13 CHRONICKÁ PANKREATITIDA, AKUTNÍ STÁDIUM
0,748	32 TYMPANOPLASTIKA. OPERACE, PŘI NÍŽ SE NA...
0,749	48 JIZVY
0,760	19 OBLAST PÁTEŘE. OSTEOCHONDROZA, SPOND...
0,769	12 NEMOCI ŽLUČNÍKU A ŽLUČOVÝCH CEST.
0,797	9 RAYNAUDOVA CHOROBA
0,801	31 URETITIDA
0,808	24 HEMEROIDY
0,857	17 FARYNGITIDA. LARINGOTRACHUIT BEZ STEN...
0,928	25 ONEMOCNĚNÍ JATER. CHRONICKÁ HEPATITID...
0,939	27 KLOUBY PRSTŮ NA NOHÁCH

Nejvhodnějšími jsou ty, na kterých u klienta pracujeme už delší čas.

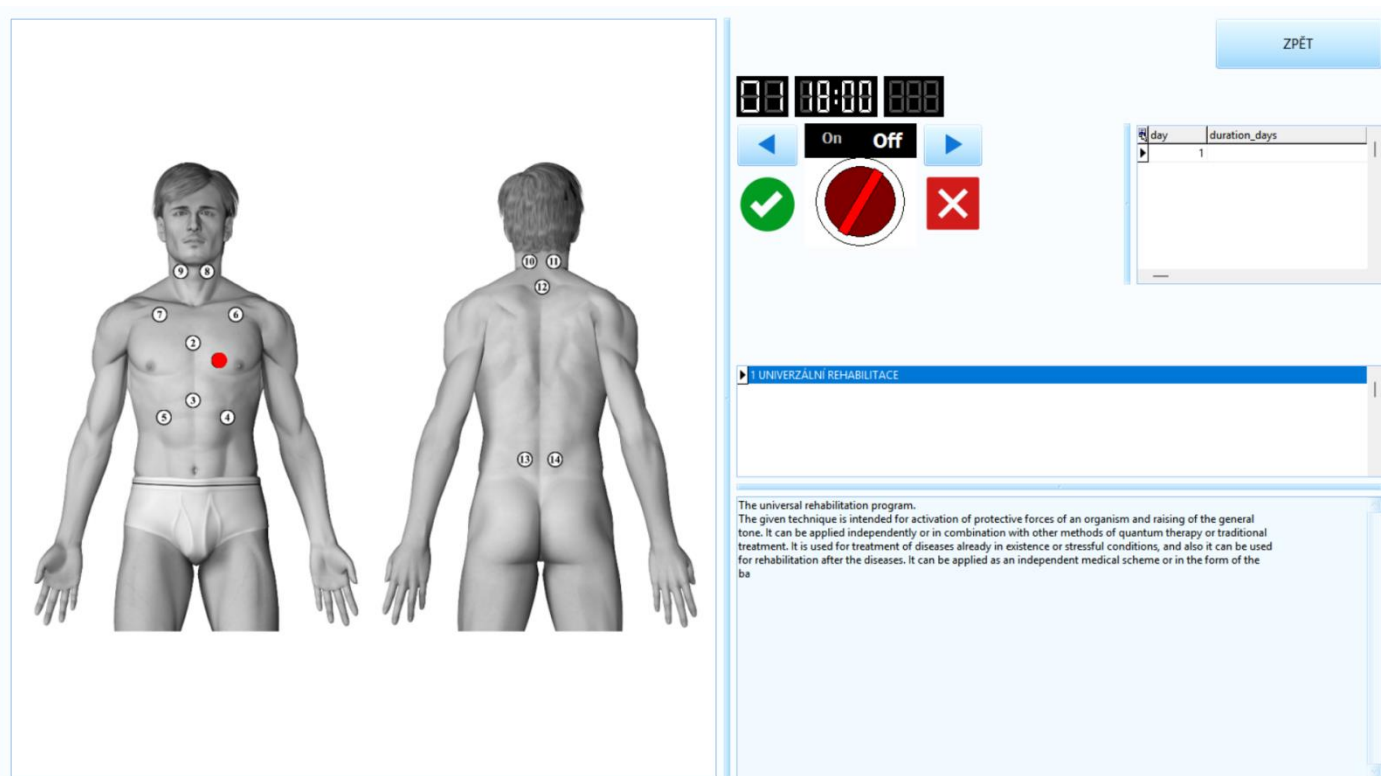

3. Jako první se soustředíme na ovládací panel ve střední části obrazovky. Terapii aplikujeme na určený bod na těle, symbolizovaný červeným puntíkem. Mezi těmito místy/body přepínáme šipkami vlevo a vpravo (pod číselníkem). Kliknutím na šipku posouváme červený puntík na obrázku v levé části obrazovky, a zároveň posouváním měníme první číslo na digitálním číselníku.

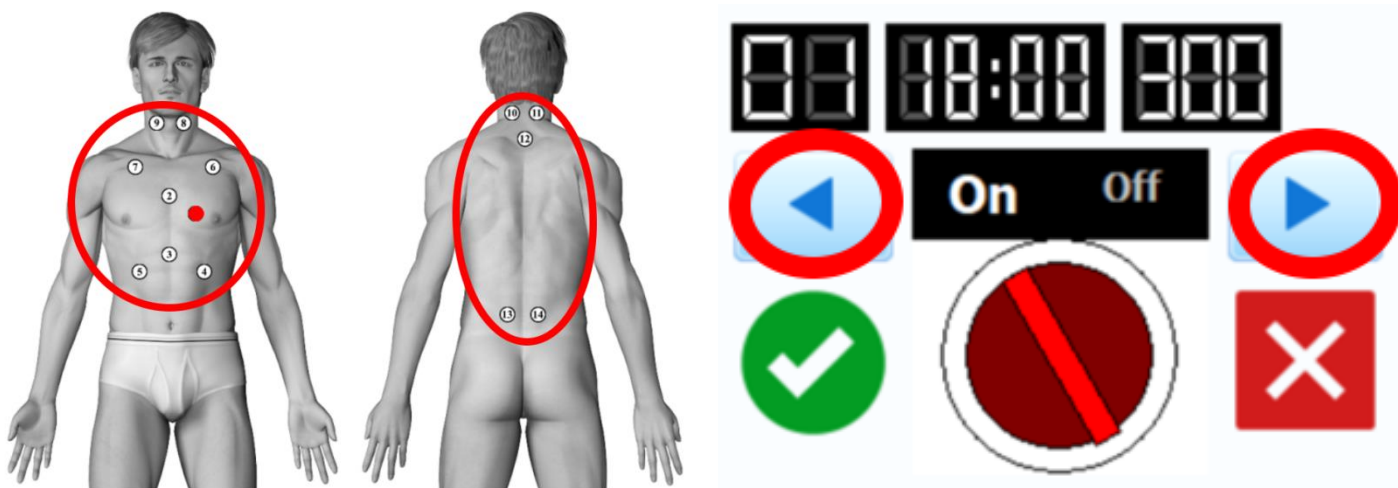

Číselník znázorňuje celkem 3 odlišné hodnoty: první udává pozici, tedy aktuálně vybraný bod na těle, znázorněný červeným puntíkem (obrázek postavy s číselnými body v pravé části obrazovky). V příkladu použijeme program „UNIVERZÁLNÍ REHABILITACE“, která zahrnuje 14 bodů určených k harmonizaci.

Druhé (prostřední) číslo představuje celkový čas terapie, pokud bychom aplikovali 1 cyklus na všech 14 bodů (každé místo si žádá jiný čas harmonizace, některé body harmonizujeme jen pár minut nebo dokonce vteřin, jiné body potřebují až 5 minut).

Poslední (třetí) číslo udává zbývající čas ve vteřinách, zbývající do konce harmonizace vybraného bodu na těle. Body na těle nemají stejné délky působení harmonizace a budou se často lišit. Toto číslo se objeví až po spuštění harmonizace.



4. Harmonizaci spouštíme velkým červeným spínačem pod ukazateli On/Off. Opětovným kliknutím na tlačítko terapii zastavíme.

Terapie prozatím musíme na každém bodě spouštět samostatně manuálním způsobem! Jinak řečeno, po každé dokončené harmonizaci vybrané oblasti se bod posune o jedno místo nahoru a proces se zastaví. Pak je nutné pokračovat buď stisknutím hlavního zapínacího tlačítka, nebo se vrátit šipkou na stejný bod na těle (pokud klienta jiná oblast netrápí nebo má velké bolesti jen v jednom místě) a opětovně spustit.

FYZIOTERAPIE je poslední nejnovější funkce v našem softwaru a je stále vyvíjena. Nyní pracujeme na automatizaci a zpuštění několika fyzioterapií najednou, včetně metaterapie, která bude brzy součástí aktualizace. Tímto dosáhneme velkou časovou úsporu a větší harmonizační účinek pro klienta.


POROZUMĚNÍ A ČTENÍ GRAFU

Grafy jsou výborným nástrojem k porozumění, odkud pochází hlavní příčina problému. Nejlépe se ke grafu dostaneme z obrazovky DIAGNOSTIKY. V pravém dolním rohu vidíme malý náhled grafu a vedle vpravo informační popisky. Ty můžeme posouvat malými šipkami nahoru a dolů.



The screenshot shows the DIAGNOSTIKA software interface. On the left, there is a list of categories with checkboxes, including 'ORGÁNOVÉ PREPARÁTY', 'BIOCHEMICKÁ HOMEOSTÁ...', 'PATOLOGIE', 'ALERGENY', 'MIKROORGANISMY A CIZ...', 'ALOPATIE', 'HOMEOPATIE', 'FYTOTERAPIE', 'VÝŽIVOVÉ DOPLŇKY A PA...', 'POTRAVINY', 'LITOTERAPIE', 'STOPOVÉ PRVKY', 'KŮŽE', 'FYZIOTERAPIE', 'ZÁTĚŽ NA ŽIVOTNÍ PROS...', 'STOPOVÉ PRVKY VE VLAS...', 'MATICE EMOCÍ', 'SAHARARA meridiány: VC ...', 'AJNA meridiány: MC + TR', 'VISHUDHA meridiány: P + ...', 'ANÁHATA meridiány: C + IG', 'MANIPURA meridiány: F + ...', 'SVADHISTANA meridiány: ...', 'MULADHARA meridiány: R...', 'Hormony, ženské', 'Hormony, mužské', 'DETEKTOR VITAMÍNŮ', 'DETEKTOR MINERÁLŮ', 'EFAs DETEKTOR', and 'DETEKTOR AMINOKYSELIN'. The middle panel has a search bar and a table with data. The right panel shows various analysis buttons like 'AUTOMATICKÝ MODEL', 'VEGETO-TEST INTERNÍ', 'VEGETO-TEST EXTERNÍ', 'SROVNÁVACÍ ANALÝZA', 'AMPLITUDA', 'Nelineární NLS ANALÝZA', 'AUTOMATICKÉ SKENOVÁNÍ', 'TISK ZPRÁVY', 'ENTROPICKÁ ANALÝZA', 'ELIMINAČNÍ ANALÝZA', 'ULOŽIT DO ZPRÁVY', 'VÝROBA PREPARÁTU', and 'AURA'. At the bottom right, there is a small graph with two curves (red and blue) and a legend. The legend includes 'STĚNA ŽÍLZDA;', 'CENTRÁLNÍ ČÁSTI SENZORICKÝCH ANALYZÁTORŮ S VÝMĚNOU TRÁČNÝCH A SUBKORTIKÁLNÍ STRUKTURY MOZKU, MOZČEK;', 'MOZČEK, LIMBICKÝ SYSTÉM A', and 'TRÁVICÍ SOUSTAVA'.

Abychom se vyznali v grafu, definujeme si tyto základní pojmy:

- ETALON – znamená nález z nabídky ETALONU a s tím spojené křivky N a S
- OBJEKT – znamená ŘEZ a s ním spojené křivky N a S
- ČERVENÁ KŘIVKA – představuje HYPERFUNKČNOST orgánu (funkčnost orgánu v zátěži)
- MODRÁ KŘIVKA – představuje HYPOFUNKČNOST orgánu (funkčnost orgánu v klidovém stavu)

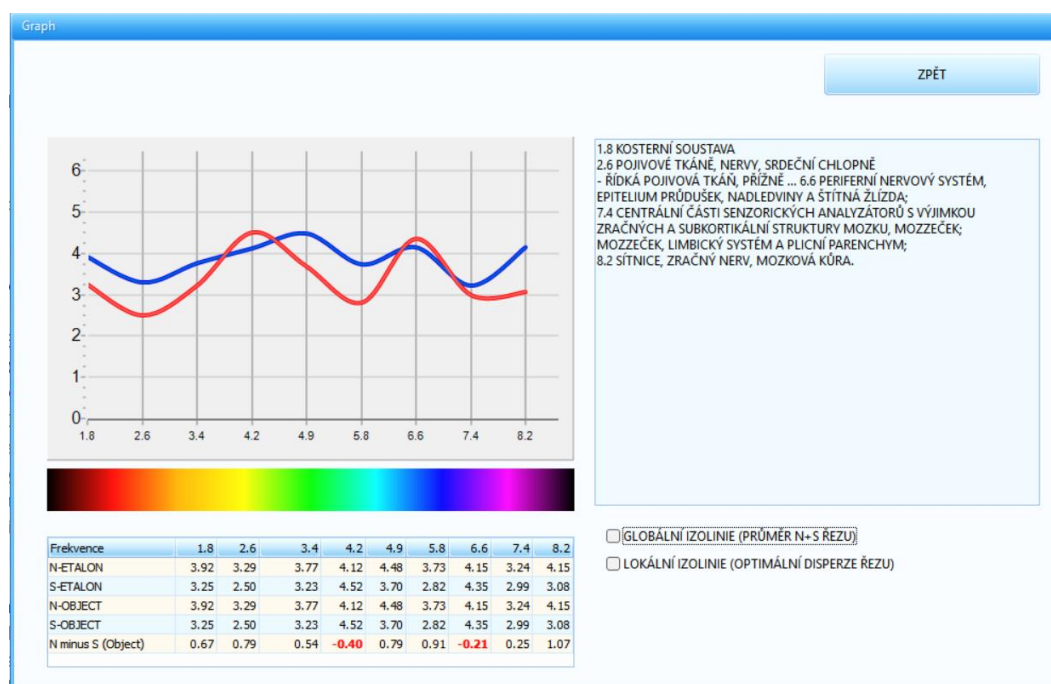

V grafu si pak všímáme hlavně těch míst, kde je **ČERVENÁ** křivka nad **MODROU**.

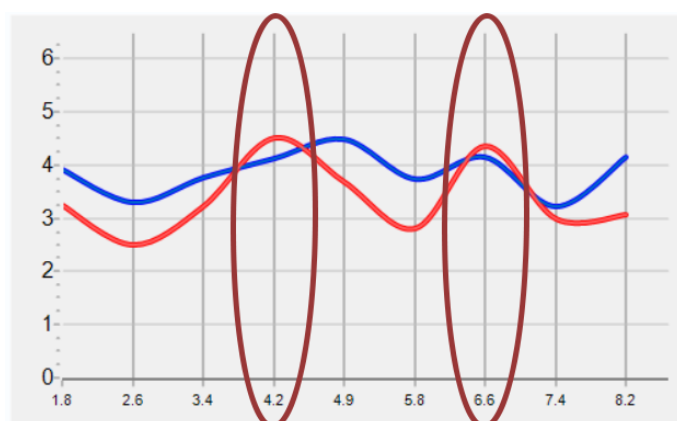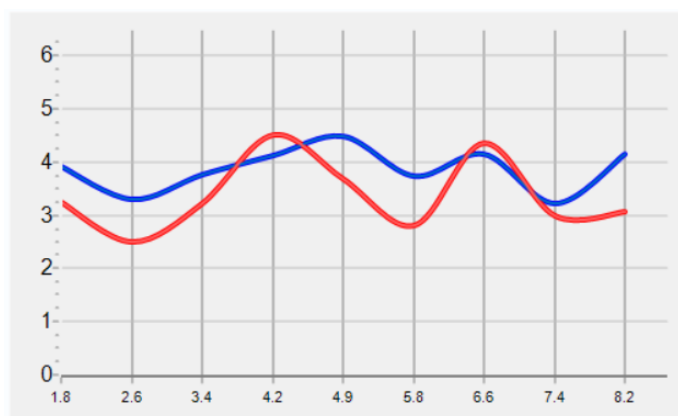

Čísla (1.8 - 8.2) na ose X jsou frekvence soustav – detailnější popis frekvencí uvádíme níže.

ŘEZY s problémem v HYPERFUNKČNOSTI se opravují obtížněji, často totiž znamenají chronické zdravotní obtíže. Zatímco HYPOFUNKČNÍ problémy harmonizujeme a opravujeme mnohem snáz.

V našem příkladu na obrázcích výše se díváme na grafy STĚNY TLUSTÉHO STŘEVA. Vidíme, že ČERVENÁ křivka se dostane nad MODROU křivku s nevyšším rozdílem v bodě 4.2 a 6.6 Hz.

Dle popisků na následující stránce to znamená, že problémy „STĚNY TLUSTÉHO STŘEVA“ pochází z TRÁVICÍ, NERVOVÉ a/nebo i ENDOKRINNÍ SOUSTAVY.

POPISKY FREKVENCÍ SOUSTAV ZASTOUPENÝCH V GRAFU

1.8 Hz – KOSTERNÍ SOUSTAVA (kostra, nebo její části, kosti, atd.)

2.6 Hz – POJIVOVÁ TKÁŇ. NERVY, SRDEČNÍ CHLOPNĚ, ŘÍDKÉ KOLAGENNÍ VAZIVO (VOLNÁ POJIVOVÁ TKÁŇ), PŘÍČNĚ PRUHOVANÉ SVALSTVO A SRDČENÍ SVAL; (NERVOVÁ SOUSTAVA, KARDIO-VASKULÁRNÍ SYSTÉM, POJIVOVÁ TKÁŇ)

3.4 Hz – HLADKÉ SVALSTVO (SVALY)

4.2 Hz – JEDNOVRSTVÝ DLAŽDICOVÝ EPITEL TRÁVICÍHO TRAKTU; (TRÁVICÍ SOUSTAVA)

4.9 Hz – VÍCEVRSTVÝ DLAŽDICOVÝ A CYLINDRICKÝ EPITEL, JATERNÍ PARENCHYM ŽLUČOVÉ CESTY, EPITEL LEDVINOVÉ TKÁNĚ A REPRODUKČNÍ ORGÁNY; (TRÁVICÍ SOUSTAVA, REPRODUKČNÍ SOUSTAVA)

5.8 Hz – LYMFATICKÝ PRSTENEC HLAVY, HORNÍ DÝCHACÍ CESTY, LYMFATICKÝ SYSTÉM, SLEZINA, VAJEČNÍKY A PROSTATA; (LYMFATICKÝ A UROGENITÁLNÍ SYSTÉM)

6.6 Hz – PERIFERNÍ NERVOVÝ SYSTÉM, BRONCHIÁLNÍ EPITEL, NADLEDVINKY A ŠTÍTNÁ ŽLÁZA; (NERVOVÁ A ENDOKRINNÍ SOUSTAVA)

7.4 Hz – CENTRA SENZORICKÝCH ANALYZÁTORŮ MIMO TY OPTICKÉ, SUBKORTIKÁLNÍ (pod mozkovou kůrou) STRUKTURY MOZKU, PONS CEREBELLI (VALORŮV MOST), ZADNÍ MOZEK, LIMBICKÝ SYSTÉM A PLICNÍ PARENCHYM; (SMYSLOVÁ A NERVOVÁ SOUSTAVA)

8.2 Hz – SÍTNICE, ZRAKOVÝ NERV, MOZKOVÁ KŮRA (SMYSLOVÁ SOUSTAVA)

Nejprve nám může připadat, že se potíže funkčnosti orgánů vyskytují zcela náhodně. Analýzou grafu dohledáme kořen těchto problémů – proto metodě věnujte pozornost u ŘEZŮ s nejhoršími výsledky (nejnižšími indexy OD) – často nám graf poukáže na konkrétní soustavy a systémy, na které je potřeba se zaměřit a upřednostnit u nich celkový terapeutický postup.

OSTATNÍ FUNKCE GRAFU:

- Možnost „GLOBÁLNÍ IZOLINIE“ – zobrazí střed/průměr křivek – tedy ideální stav funkčnosti orgánu (kdy se modrá a červená křivka navzájem překrývají)
- Možnost „LOKÁLNÍ IZOLINIE“ – zobrazí křivku toho, co nazýváme OPTIMÁLNÍ DISPERZÍ ŘEZU (se kterou pracujeme v kartotéce a pomocí které porovnáváme stav funkčnosti orgánu)

Obě dodatečné možnosti využijí pouze zkušení diagnostici. Obecně stačí vědět, že nejvíce problémové systémy rozpoznáme skrze červenou křivku, která v grafu vystupuje nad modrou.

ZÁVĚR

Pokud čtete tuto poslední stránku našeho rozsáhlého návodu pro obsluhu přístroje **Oberon System Quantum II**, absolvovali jste nelehkou cestu. Gratulujeme Vám k novým znalostem, poznání a chápání jednoho z alternativních přístupů k lidskému tělu a zdraví.

Děkujeme všem terapeutům / diagnostikům, kteří se snaží pomáhat lidem a zlepšovat kvalitu jejich života, kdy svou zvědavostí často naleznou řešení mimo současné nástroje medicíny.

DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU